

Printer Driver

Konfigurationsvejledning

I denne vejledning beskrives det, hvordan du konfigurerer printerdriveren til Windows 7, Windows Vista, Windows XP og Windows 2000.

Før softwaren tages i brug

Læs "Readme"-filen, før du tager printerdriveren i brug.

UP-DR80MD

I de skærbilleder, der beskriver konfigurationen i denne vejledning, forudsættes det, at UP-DR80MD-printeren er tilsluttet en computer med Windows Vista.

Konfiguration af printeren

Før du begynder at udskrive fra programmer, skal du åbne skærbilledet med printerindstillinger og konfigurere indstillingerne.

Du kan åbne skærbilledet med printerindstillinger på følgende måder.

- Vælg [Control Panel] i menuen [Start], og vælg derefter [Printer] (menuen [Start] og derefter [Devices and Printers] i Windows 7; menuen [Start] og derefter [Printers and Faxes] i Windows XP; menuen [Start], [Settings] og derefter [Printers] i Windows 2000). Marker printerikonet for Sony UP-DR80MD, og vælg derefter [Select printing preferences] på kommandolinjen ([Printing preferences] ved at højreklikke på printerikonet for Windows 7; [Printing Preferences] i menuen [File] i Windows XP og Windows 2000). De indstillinger, du vælger her, bruges som standardindstillinger ved udskrivning fra programmer.
- I menuen [File] i dit program skal du klikke på den kommando, der bruges til at angive printerindstillinger. Indstillinger, der angives på denne måde, er kun gyldige, indtil du lukker programmet.

Denne vejledning beskriver de faner, der vises på konfigurationsskærbilledet for UP-DR80MD.

Fanen [Paper]

Grundlæggende udskrivningsindstillinger.

Fanen [Graphics]


Anvendes til indstilling af gråtoner, lysstyrke og andre indstillinger af billedkvalitet.

Fanen [Message]

Bruges til at konfigurere indstillinger for meddelelsesdialogbokse.

Faneindstillinger for [Paper]

Konfigurere grundlæggende udskrivningsindstillinger.

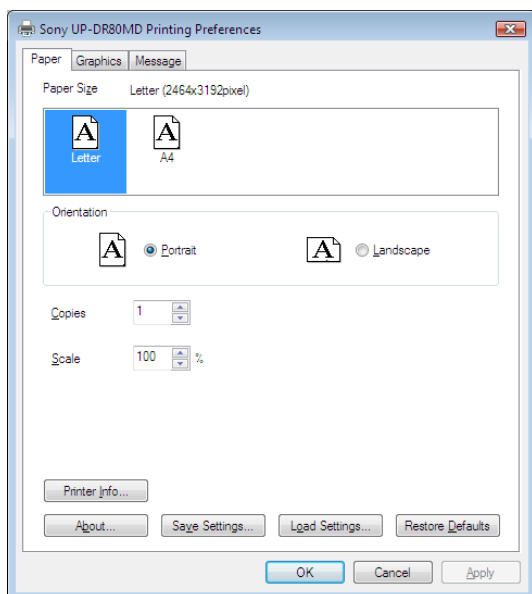

Paper Size

Papirstørrelsen, der kan bruges sammen denne printer, og den maksimale udskriftsstørrelse er følgende.

| Paper Size | Maksimale udskriftsstørrelse |
|------------|------------------------------|
| Letter | 2.464 × 3.192 pixel |
| A4 | 2.392 × 3.400 pixel |

Orientation

Vælg enten [Portrait] eller [Landscape] som udskrivningsretning.

Copies

Du kan indstille denne mellem 1 og 10.

Scale

Angiver størrelsen af udskrift. Du kan indstille størrelsen mellem 25 og 400%.

Printer Info

Viser oplysninger om den printer, der er tilsluttet.

Save Settings

Gemmer alle konfigurerede udskrivningsindstillinger i en fil.

Load Settings

Indlæser gemte konfigurationsindstillinger fra en fil.

About

Viser printerdriverversionen.

Restore Defaults


Gendanner alle indstillinger under fanen [Paper] til deres standardindstilling.

Faneindstillinger for [Graphics]

Vælg [Color Balance], [Lightness], [Color Correction] eller [Gray Balance] på listen [Color Adjust] for at ændre disse indstillinger.


Color Balance

Justerer farvebalancen. Juster indstillingen ved at rykke skyderen til højre eller venstre. Du kan også foretage justeringer ved at indtaste værdier i boksen til højre. Virkningen af justeringerne vises på eksempelbilledet øverst til højre.

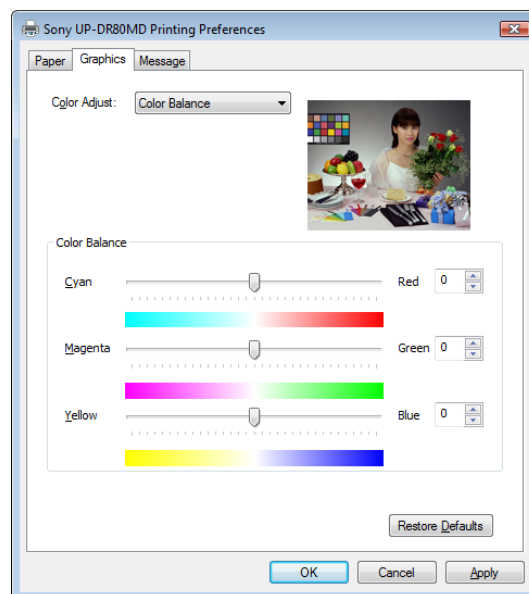

Lightness

Justerer lysstyrken. Juster indstillingen ved at rykke skyderen til højre eller venstre. Du kan også foretage justeringer ved at indtaste værdier i boksen til højre. Virkningen af justeringerne vises på eksempelbilledet øverst til højre. Virkningen af skarphedsjusteringer vises dog ikke.

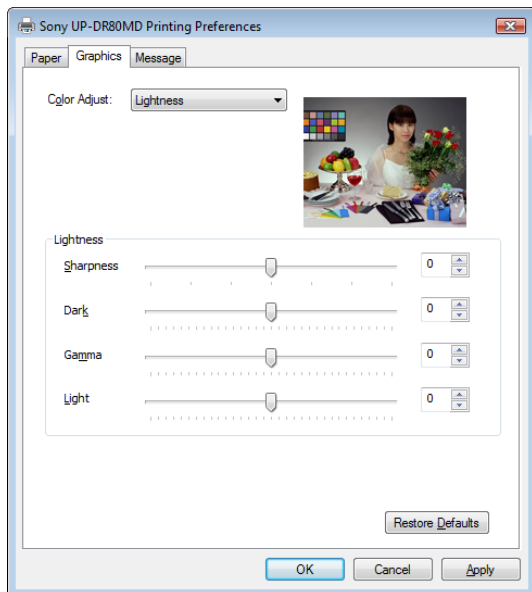

Sharpness

Justerer skarpheden for billedkonturerne. Billedets konturer bliver skarpere, jo mere indstillingen øges.

Dark

Justerer skalaen for de mørke toner.

Gamma

Justerer skalaen for middeltoner.


Light

Justerer skalaen for lyse toner.

Color Correction

Vælg farvekorrigeringsmetode.

Virkningen af disse indstillinger vises ikke på eksempelbilledet øverst til højre.

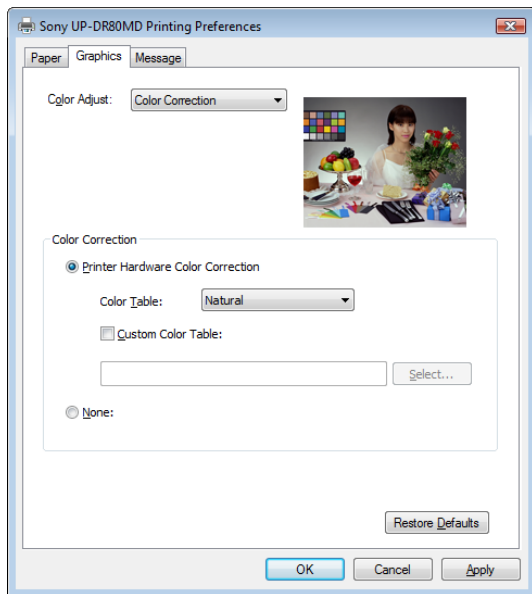

Printer Hardware Color Correction

Printeren korrigerer farve.

None

Der udføres ikke hardwarebaseret farvekorrigering.

Color Table

Angiver printerens interne farvetabel.

Natural: Udfører korrigering, der passer til sRGB-kompatible billeder.

CG: Udfører korrigering, der passer til CG-billeder.

Custom Color Table


Vælg denne indstilling ved brug af en anden farvetabel end printerens interne farvetabel.

Gray Balance

Brug denne fane til at justere et udskrevet billedes nuance, så det svarer til nuancen på skærmen.

Når du installerer et nyt farvebånd og ilægger papir, kan du desuden justere gråtonebalancen for at korrigere eventuelle ujævnheder mellem de to.

Virkningen af justeringerne vises på eksempelbilledet øverst til højre.

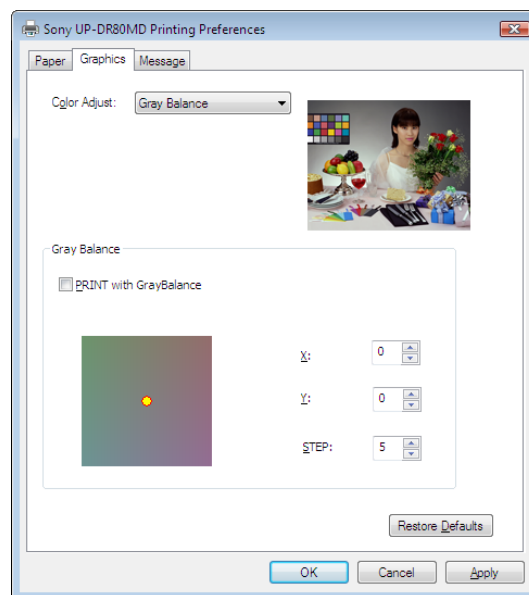

PRINT with GrayBalance

Når du markerer dette afkrydsningsfelt, oprettes en gråtonebalanceudskrift for udskriftsdataene.

X, Y

Juster gråtonebalancen ved at indstille X- og Y-koordinater for gråtonebalancediagrammet nederst til venstre. Standarden for begge indstillinger er 0, og gråtonebalancen justeres ikke med den indstilling. Virkningen af justeringerne vises på eksempelbilledet øverst til højre.


STEP

Angiv størrelsen på den trinvis ændring af gråtonebalance for gråtonebalanceudskrivninger. Standardindstillingen er 5.

Angiv en lavere værdi, hvis du skal foretage præcise gråtonebalancejusteringer, og angiv en større værdi, hvis du skal fortage grovere justeringer.

Hvis du vil udskrive gråtonebalancen som en reference for justeringen, skal du markere afkrydsningsfeltet [PRINT with GrayBalance] og skrive ud. Når du gør det, vises følgende dialogboks. Angiv det område, der skal anvendes til at bekræfte nuancen ved at trække rammen (markeringsvinduet) i eksempelbilledet. Du kan justere størrelsen af rammen ved at justere indstillingen [Frame Size]. Du kan også ændre farven på rammen ved at justere indstillingen [Frame Brightness].

Ramme (markeringsvindue)

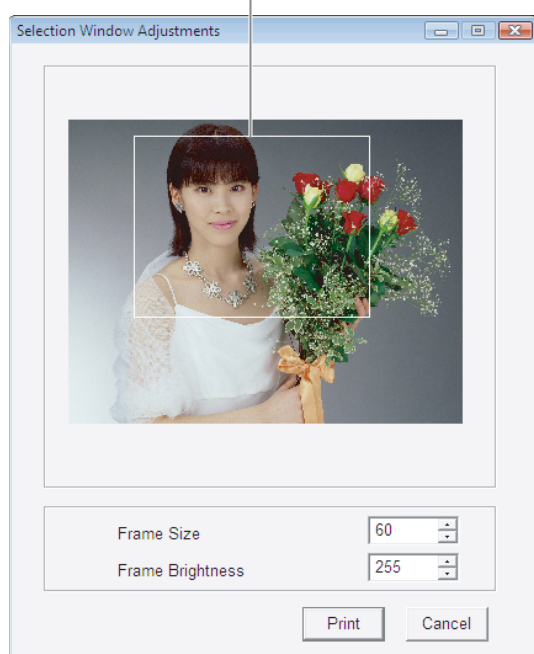

Når du klikker på knappen [Print], udskrives den del af billedet, der er angivet af det markerede vindue, vha. 5 x 5-cellelayoutet. Vælg billedet med den bedste gråtonebalance af de 25 billeder, der udskrives, og brug de X- og Y-koordinater (X,Y), der udskrives under dette billede, til [X]- og [Y]-indstillingerne.

Restore Defaults


Gendanner alle ændrede indstillinger i fanen [Graphics] til deres standardindstilling.

Bemærk

Der kan være nogen forskel i billedkvalitet og farver mellem eksempel billedet og det billede, der udskrives. Det skyldes mulige forskelle mellem farveproduktionsmetoder og visningsmiljøer. Eksempelbilleder skal bruges vejledende.

Faneindstillinger for [Message]

Angiv positionen for meddelelsesdialogboksene.

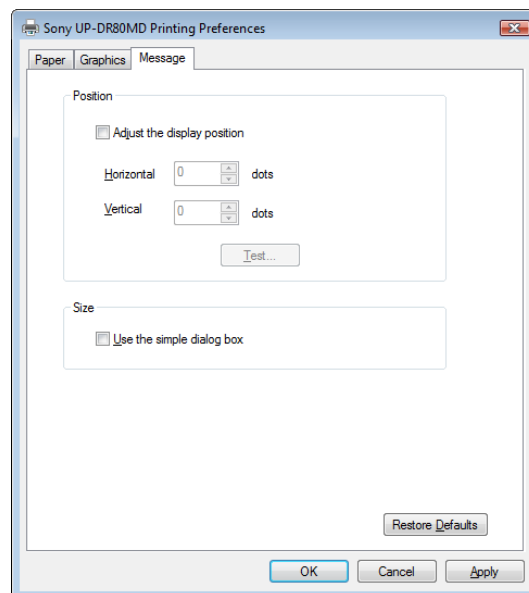

Adjust the display position

Marker dette afkrydsningsfelt for at justere meddelelsesdialogboksens position.

Meddelelsesdialogboksen vises i den position, der defineres af de angivne værdier i boksene [Horizontal] og [Vertical].

Standardindstilling: Der er ikke nogen markering i [Adjust the display position].

(Meddelelsesdialogboksene vises midt på skærmen.)

Horizontal og Vertical

Definerer meddelelsesdialogboksens position og anvender øverste venstre hjørne på skærmen som udgangspunkt.

Meddelelsesdialogboksen vises i den position, der defineres af de angivne værdier her.

Test

Klik på denne knap for at få vist en testmeddelelsesdialogboks i den position, der defineres af [Horizontal] og [Vertical], som også giver dig mulighed for at definere positionens nøjagtighed.

Use the simple dialog box

Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist mindre meddelelsesdialogbokse.

Restore Defaults

Gendanner alle ændrede indstillinger i fanen [Message] til deres standardindstilling.