

Printer Driver

Guide de réglage

Ce guide décrit la réglage du pilote d'imprimante pour Windows 7, Windows Vista, Windows XP et Windows 2000.

Avant d'utiliser ce logiciel

Avant d'utiliser le pilote d'imprimante, assurez-vous de lire le fichier « Readme ».

UP-DR80MD

Les écrans utilisés pour décrire le réglage dans ce guide supposent que l'imprimante UP-DR80MD est raccordé à un ordinateur avec Windows Vista.

Configuration de l'imprimante

Avant de commencer l'impression à partir des applications, ouvrez l'écran des paramètres d'imprimante et configurez-les.

Vou pouvez ouvrir l'écran des réglages de l'imprimante à l'aide de l'une des méthodes suivantes.

- Dans le menu [Start], sélectionnez [Control Panel], puis [Printer] (menu [Start], puis [Devices and Printers] pour Windows 7; menu [Start], puis [Printers and Faxes] pour Windows XP; menu [Start], [Settings], puis [Printers] pour Windows 2000). Sélectionnez l'icône d'imprimante pour Sony UP-DR80MD, puis [Select printing preferences] dans la barre de commande ([Printing preferences] en cliquant avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante dans Windows 7; [Printing Preferences] dans le menu [File] pour Windows XP et Windows 2000). Les réglages que vous effectuez ici sont utilisés comme réglages par défaut lors d'impression à partir d'applications.
- Sur le menu [File] de votre application, cliquez sur la commande utilisée pour effectuer les réglages de l'imprimante. Les réglages effectués ainsi restent valides uniquement jusqu'à la fermeture de l'application.

Ce guide décrit les onglets qui apparaissent dans l'écran des paramètres UP-DR80MD.

Onglet [Paper]

Réglages d'impression de base.

Onglet [Graphics]

Utilisé pour régler le gris, la luminosité et d'autres réglages relatifs à la qualité d'image.

Onglet [Message]

Utilisé pour configurer des réglages relatifs aux boîtes de dialogue du message.

Réglages de l'onglet [Paper]

Configuration des réglages d'impression de base.



Paper Size

Le format de papier que l'on peut utiliser dans l'imprimante et le format d'impression maximal sont indiqués ci-dessous.

| Paper Size | Format d'impression maximal |
|------------|-----------------------------|
| Letter | 2 464 × 3 192 pixels |
| A4 | 2 392 × 3 400 pixels |

Orientation

Sélectionnez l'orientation d'impression, [Portrait] ou [Landscape].

Copies

Vous pouvez définir un nombre entre 1 et 10.

Scale

Spécifie l'échelle des impressions. Vous pouvez définir l'échelle entre 25 et 400%.

Printer Info

Affiche les informations relatives à l'imprimante actuellement raccordée.

Save Settings

Enregistre toutes les configurations de réglage d'impression dans un fichier.

Load Settings

Charge toutes les configurations de réglage enregistrées à partir d'un fichier.

About

Affiche les informations relatives à la version de ce pilote d'imprimante.

Restore Defaults


Remet tous les paramètres de l'onglet [Paper] à leurs valeurs par défaut.

Réglages de l'onglet [Graphics]

Sélectionnez [Color Balance], [Lightness], [Color Correction] ou [Gray Balance] dans la liste [Color Adjust] pour modifier ces réglages.

Color Balance


Règle l'équilibre des couleurs. Réglez ce paramètre en déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également le définir en saisissant des valeurs dans la case à droite. Les effets des réglages sont reflétés dans l'image de prévisualisation en haut à droite.

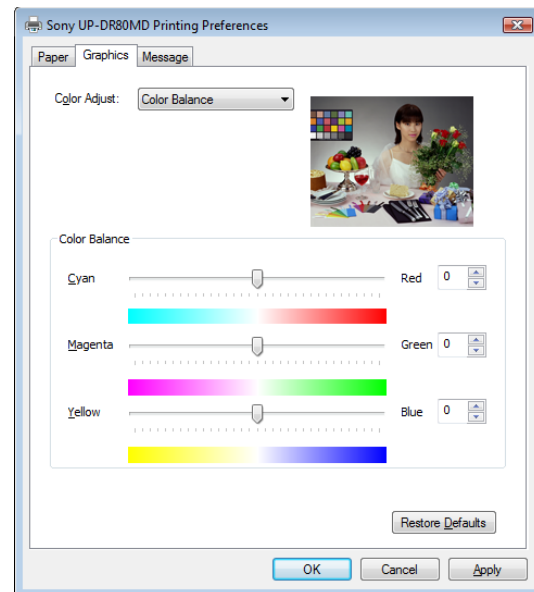

Lightness

Règle la luminosité. Réglez ce paramètre en déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également le définir en saisissant des valeurs dans la case à droite.

Les effets des réglages sont reflétés dans l'image de prévisualisation en haut à droite. Par contre, les effets des réglages de netteté ne sont pas reflétés.

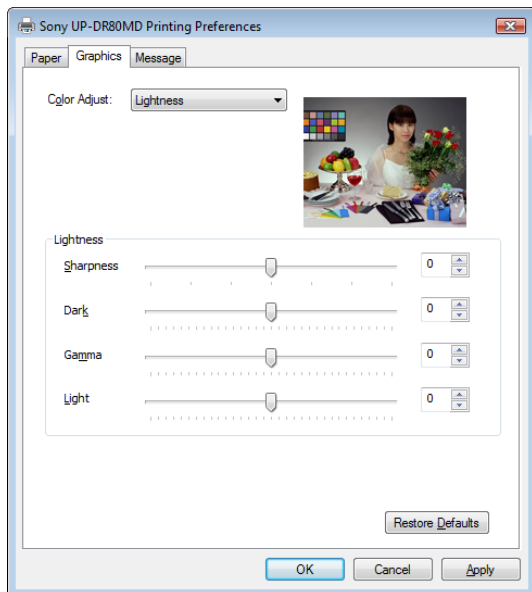

Sharpness

Règle la netteté des contours de l'image. Plus la valeur est grande, plus les contours des images deviennent nets.

Dark

Règle l'échelle des tonalités foncées.

Gamma


Règle l'échelle des tonalités moyennes.

Light

Règle l'échelle des tonalités claires.

Color Correction

Sélectionnez la méthode de correction de la couleur. Les effets de ces réglages ne sont pas reflétés dans l'image de prévisualisation en haut à droite.

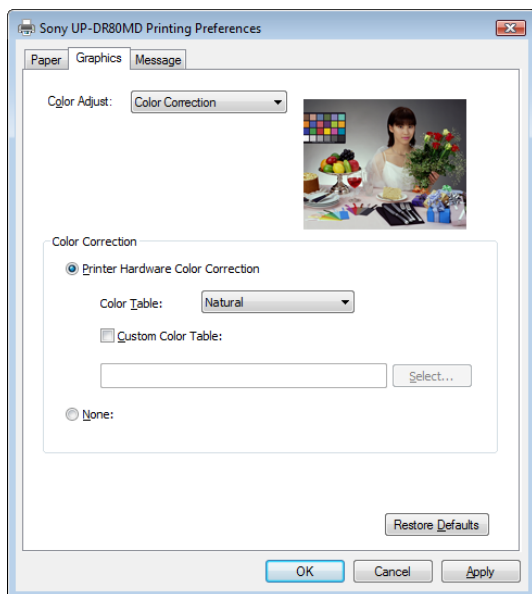

Printer Hardware Color Correction

L'imprimante corrige la couleur.

None

Aucune correction de couleur via l'imprimante n'est effectuée.

Color Table

Permet de sélectionner le tableau des couleurs interne à l'imprimante.

Natural: Effectue la correction adéquate pour des images compatibles sRGB.

CG: Effectue la correction adéquate pour des images CG.

Custom Color Table


Sélectionnez l'utilisation d'un tableau des couleurs autre que celui interne à l'imprimante.

Gray Balance

Utilisez cet onglet pour régler la teinte d'une image imprimée de façon à ce qu'elle corresponde à la teinte sur le moniteur.

Aussi, lorsque vous installez un nouveau ruban d'encre et que vous chargez du papier, vous pouvez régler la balance de gris pour rectifier tout défaut d'uniformité entre la paire.

Les effets des réglages sont reflétés dans l'image de prévisualisation en haut à droite.

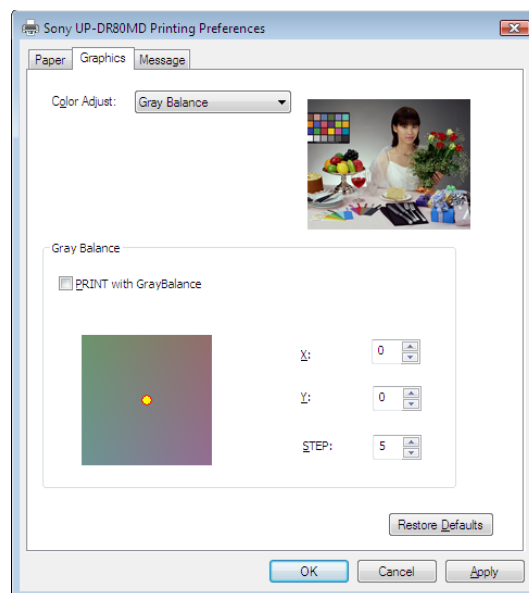

PRINT with GrayBalance

Lorsque vous cochez cette case d'option, une impression de balance de gris est créée pour les données d'impression.

X, Y

Régalez la balance de gris en réglant les coordonnées X et Y pour la carte de balance de gris en bas à gauche. La valeur par défaut des deux réglages est 0 et la balance de gris n'est pas réglée sous ce paramètre.


Les effets des réglages sont reflétés dans l'image de prévisualisation en haut à droite.

STEP

Spécifiez la quantité de changement par paliers de la balance de gris pour les impressions avec balance de gris. Le réglage par défaut est 5. Réglez une valeur inférieure lors de réglages précis de balance de gris et une valeur supérieure pour un réglage plus global.

Pour régler la balance de gris comme référence de réglage, cochez la case d'option [PRINT with GrayBalance] puis imprimer. Dans ce cas, la boîte de dialogue suivante apparaît. Spécifiez la zone utilisée pour confirmer la tonalité en glissant le cadre (fenêtre de sélection) dans l'image de prévisualisation. Vous pouvez régler le format du cadre avec le réglage [Frame Size]. Vous pouvez aussi modifier la couleur du cadre avec le réglage [Frame Brightness].

Cadre (fenêtre de sélection)

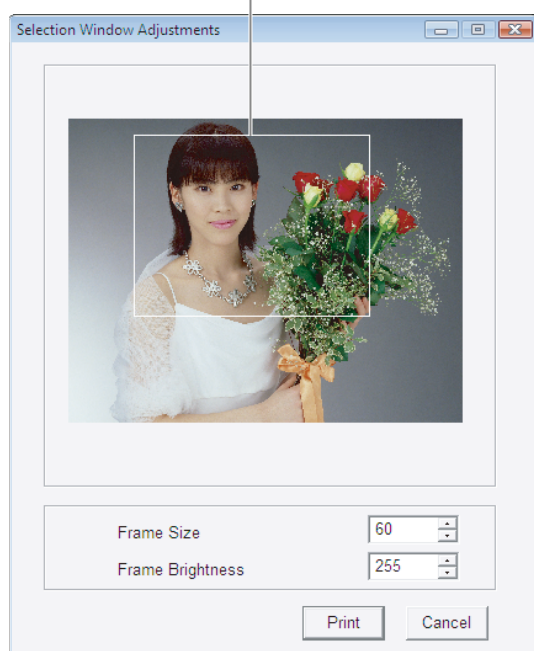

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Print], la portion de l'image spécifiée par la fenêtre de sélection est imprimée à l'aide du format de cellule 5 × 5. Parmi les 25 images imprimées, sélectionnez l'image avec la meilleure balance de gris puis entrez ses coordonnées X et Y (X, Y) dans les réglages [X] et [Y].

Restore Defaults


Remet tous les paramètres modifiés de l'onglet [Graphics] à leurs valeurs par défaut.

Remarque

Il se peut qu'il y ait une certaine différence dans la qualité et la couleur d'image entre l'image de prévisualisation et l'image imprimée. Ceci provient des différences pouvant exister dans les méthodes de production de couleur et l'environnement d'affichage. Les images de prévisualisation doivent servir de guide uniquement.

Réglages de l'onglet [Message]

Sélectionnez la position d'affichage des boîtes de dialogue de message.

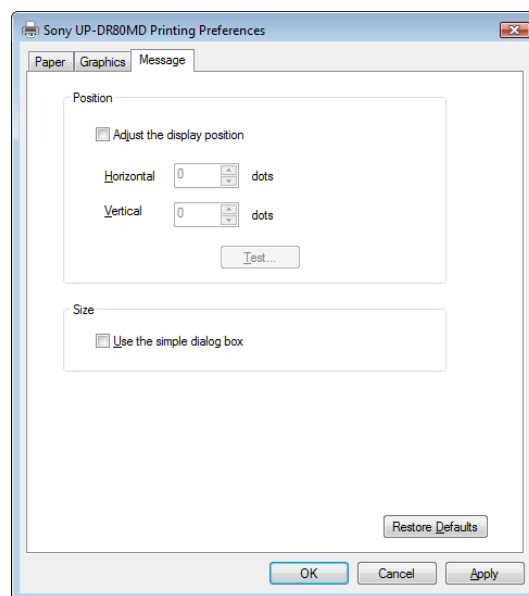

Adjust the display position

Cochez cette case pour régler la position d'affichage des boîtes de dialogue de message. La boîte de dialogue de message apparaît à la position définie par les valeurs spécifiées dans les champs [Horizontal] et [Vertical]. Paramètre par défaut : La case de l'option [Adjust the display position] n'est pas cochée. (Les boîtes de dialogue du message s'affichent au centre de l'écran.)

Horizontal et Vertical

Ces champs définissent la position des boîtes de dialogue de message, en utilisant l'angle supérieur gauche de l'écran comme origine.

La boîte de dialogue de message apparaît à la position définie par les valeurs spécifiées ici.

Test

Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue de message à la position définie par les champs [Horizontal] et [Vertical], ce qui vous permet de vérifier la précision de sa position.

Use the simple dialog box

Cochez cette case pour afficher des boîtes de dialogue de message de plus petite taille.

Restore Defaults

Remet tous les paramètres modifiés de l'onglet [Message] à leur condition par défaut.