

# *Printer Driver*

---

## Guía de configuración

Esta guía describe la configuración del controlador de la impresora en Windows Vista, Windows XP y Windows 2000.

### **Antes de utilizar este software**

Antes de utilizar el controlador de la impresora, asegúrese de leer el archivo “ReadMe”.

## UP-DR80MD

Las pantallas utilizadas para describir la configuración en esta guía son las que aparecen cuando se conecta la impresora UP-DR80MD a un ordenador con sistema operativo Windows Vista.

---

## Configuración de la impresora

Antes de comenzar a imprimir desde una aplicación, abra la pantalla de ajustes de la impresora y configúrelos.

Es posible abrir la pantalla de ajustes de la impresora utilizando uno de los métodos siguientes.

- En el menú [Start], seleccione [Control Panel] y, a continuación, [Printer] (menú [Start] y, a continuación, [Printers and Faxes] en Windows XP; menú [Start], [Settings] y, a continuación, [Printers] en Windows 2000). Seleccione el icono de la impresora Sony UP-DR80MD y, a continuación, seleccione [Select printing preferences] en la barra de comandos ([Printing Preferences] del menú [File] en Windows XP y Windows 2000). Los ajustes que realice a continuación se emplearán como ajustes predeterminados al imprimir desde una aplicación.
- En el menú [File] de la aplicación, haga clic en el comando que permite realizar los ajustes de la impresora. Los ajustes realizados de este modo únicamente serán válidos hasta que se cierre la aplicación.

Esta guía describe las pestañas que aparecen en la pantalla de ajustes de UP-DR80MD.

### **Pestaña [Paper]**

Ajustes básicos de la impresora.

### **Pestaña [Graphics]**

Se utiliza para ajustar los grises, la claridad y otros ajustes relacionados con la calidad de la imagen.

### **Pestaña [Message]**

Se utiliza para configurar los ajustes relacionados con los cuadros de diálogo de mensajes.

# Ajustes de la pestaña [Paper]

Permite configurar los ajustes básicos de la impresora.



## Paper Size

El tamaño de papel que es posible utilizar con la impresora y el tamaño máximo de impresión son los siguientes.

Paper Size	Tamaño máximo de impresión
Letter	2.464 × 3.192 píxeles
A4	2.392 × 3.400 píxeles

## Orientation

Selecione la dirección de impresión [Portrait] o [Landscape].

## Copies

Permite ajustar un valor entre 1 y 10.

## Scale

Permite especificar la escala de las impresiones. Permite establecer una escala entre 25 y 400%.

## Printer Info

Permite mostrar la información relacionada con la impresora actualmente conectada.

## Save Settings

Permite guardar todas las configuraciones de los ajustes de impresión en un archivo.

## Load Settings

Permite cargar las configuraciones de ajuste almacenadas desde un archivo.

## About

Permite mostrar la información de la versión de este controlador de impresora.

## Restore Defaults


Esta opción permite restablecer todos los ajustes de la pestaña [Paper] a sus valores predeterminados.

# Ajustes de la pestaña [Graphics]

Selecione [Color Balance], [Lightness], [Color Correction] o [Gray Balance] en la lista [Color Adjust] para cambiar estos ajustes.


## Color Balance

Permite ajustar el balance del color. Mueva la barra deslizante hacia la izquierda o la derecha para realizar el ajuste. Para realizar ajustes, también es posible especificar los valores en el cuadro de la derecha. Los efectos de los ajustes quedan reflejados en la vista preliminar de la imagen, en la parte superior derecha.

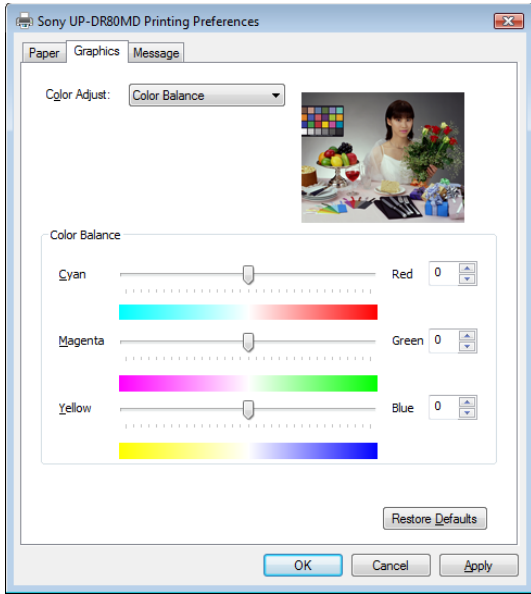

## Lightness

Permite ajustar la claridad. Mueva la barra deslizante hacia la izquierda o la derecha para realizar el ajuste. Para realizar ajustes, también es posible especificar los valores en el cuadro de la derecha. Los efectos de los ajustes quedan reflejados en la vista preliminar de la imagen, en la parte superior derecha. No obstante, los efectos de los ajustes de nitidez no quedarán reflejados.

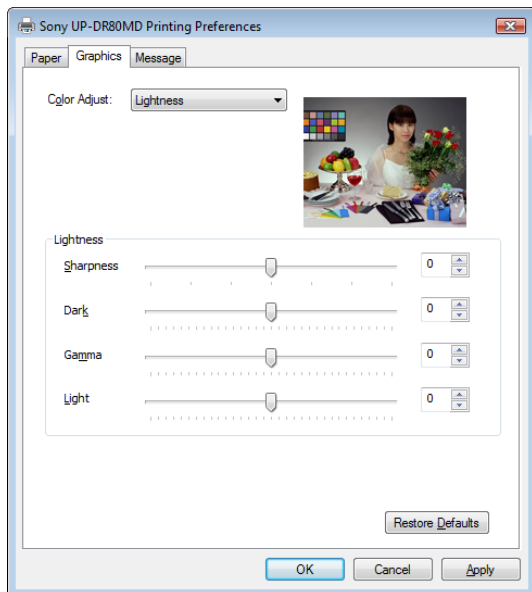

### Sharpness

Permite ajustar la nitidez de los contornos de imagen. Los contornos de las imágenes aparecen más nítidos al aumentar el valor del ajuste.

### Dark

Permite ajustar la escala de los tonos oscuros.

### Gamma


Permite ajustar la escala de los tonos medios.

### Light

Permite ajustar la escala de los tonos claros.

## Color Correction

Permite seleccionar el método de corrección del color. Los efectos de estos ajustes no quedan reflejados en la vista preliminar de la imagen, en la parte superior derecha.

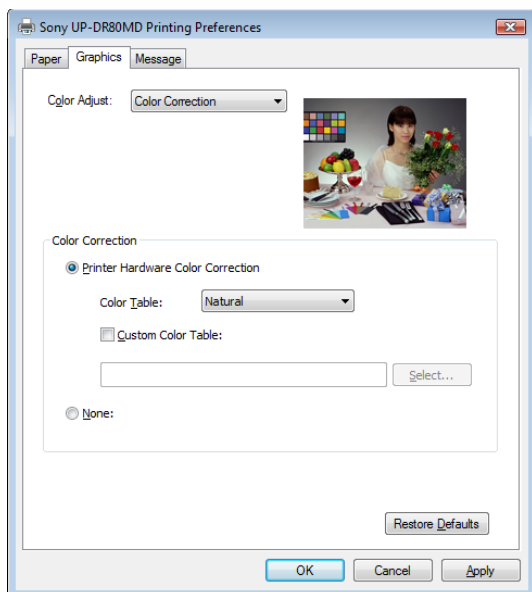

## Printer Hardware Color Correction

La impresora corrige el color.

### None

No se realiza ninguna corrección del color por parte del hardware de la impresora.

### Color Table

Permite seleccionar la tabla de color interna de la impresora.

Natural: permite realizar una corrección adecuada para imágenes compatibles con sRGB.

CG: permite realizar una corrección adecuada para imágenes CG.

### Custom Color Table


Se selecciona cuando se utiliza una tabla de color distinta a la tabla de color interna de la impresora.

## Gray Balance

Utilice esta pestaña para ajustar la tonalidad de una imagen impresa de forma que sea la misma que en el monitor.

Además, cuando instale una nueva cinta de tinta y cargue papel, es posible ajustar el balance de grises para corregir las desigualdades que pueda presentar el conjunto.

Los efectos de los ajustes quedan reflejados en la vista preliminar de la imagen, en la parte superior derecha.

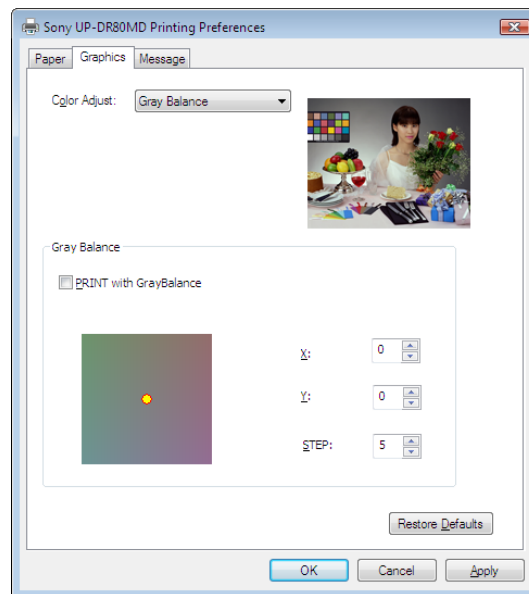

## PRINT with GrayBalance

Al seleccionar esta casilla de verificación, se crea una impresión de balance de grises de los datos de impresión.

## X, Y

Permite ajustar el balance de grises estableciendo coordenadas X e Y para el gráfico de balance de grises que aparece en la parte inferior izquierda. En esta configuración, el ajuste por defecto para ambos es 0 y el balance de grises no se ajusta.

Los efectos de los ajustes quedan reflejados en la vista preliminar de la imagen, en la parte superior derecha.


## STEP

Permite especificar el valor gradual de cambio en el balance de grises para impresiones de balance de grises. El ajuste por defecto es 5.

Establezca un valor más bajo cuando realice ajustes precisos del balance de grises y establezca un valor más alto cuando haga ajustes más amplios.

Para imprimir el balance de grises como referencia para un ajuste, seleccione la casilla de verificación [PRINT with GrayBalance] e imprima. Al hacerlo, aparecerá el cuadro de diálogo siguiente. Arrastre el marco (ventana de selección) en la imagen de vista preliminar para especificar el área que se utilizará para confirmar la tonalidad. Puede configurar el ajuste [Frame Size] para ajustar el tamaño del marco. Asimismo, puede configurar el ajuste [Frame Brightness] para cambiar el color del marco.

Marco (ventana de selección)

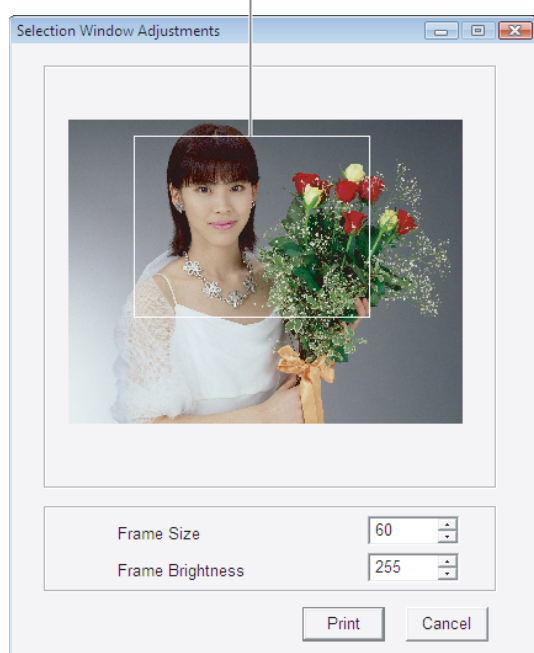

Al hacer clic en el botón [Print], la parte de la imagen encuadrada en la ventana de selección se imprimirá utilizando la disposición de 5 × 5 celdas. Seleccione la imagen con el mejor balance de grises de las 25 imágenes que se imprimen e introduzca las coordenadas X e Y (X,Y) impresas bajo cada imagen en los ajustes de [X] e [Y].

## Restore Defaults


Esta opción permite restablecer todos los ajustes modificados de la pestaña [Graphics] a sus valores predeterminados.

### Nota

Es posible que aparezcan diferencias en la calidad y el color de la imagen entre la imagen de la vista preliminar y la imagen real impresa. Esto se debe a las diferencias que pueden existir en los métodos de producción del color y en los entornos de visualización. Las imágenes en vista preliminar deberían utilizarse solo como guía.

## Ajustes de la pestaña [Message]

Seleccione la posición de visualización de los cuadros de diálogo de mensajes.

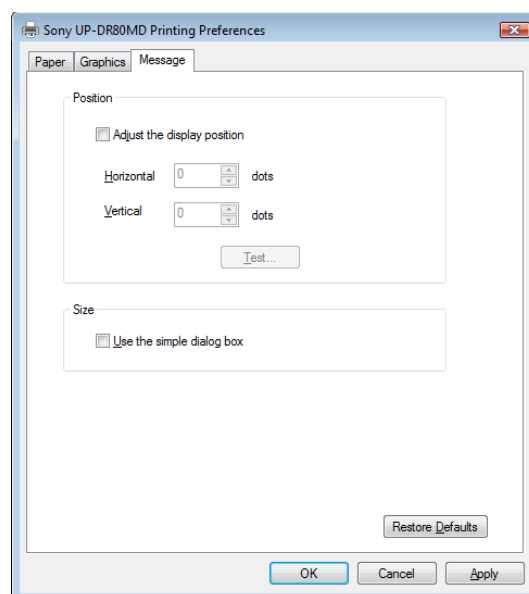

## Adjust the display position

Seleccione esta casilla de verificación para ajustar la posición de visualización de los cuadros de diálogo de mensajes. El cuadro de diálogo de mensaje aparecerá en la posición definida mediante los valores que especifique en los cuadros [Horizontal] y [Vertical]. Ajuste predeterminado: no se marca la casilla de verificación [Adjust the display position]. (Los cuadros de diálogo de mensajes aparecen en el centro de la pantalla.)

## Horizontal y Vertical

Permite definir la posición de los cuadros de diálogo de mensajes utilizando la esquina superior izquierda de la pantalla como punto de origen.

El cuadro de diálogo de mensaje aparecerá en la posición definida mediante los valores que especifique aquí.

## **Test**

Haga clic en este botón para visualizar un cuadro de diálogo de mensaje de prueba en la posición definida mediante los ajustes [Horizontal] y [Vertical], y comprobar de este modo la precisión de la posición.

## **Use the simple dialog box**

Seleccione esta casilla de verificación para visualizar cuadros de diálogo de mensajes de tamaño más reducido.

## **Restore Defaults**

Esta opción permite restablecer todos los ajustes modificados de la pestaña [Message] a sus valores predeterminados.