

Printer Driver

Guida per la configurazione

Questa guida descrive la configurazione del driver stampante per Windows 7, Windows Vista, Windows XP e Windows 2000.

Prima dell'utilizzo del software

Prima di procedere con l'utilizzo del driver stampante, leggere il file "Readme".

UP-DR80MD

Le immagini delle schermate utilizzate in questa guida per descrivere la configurazione del driver presuppongono che la stampante UP-DR80MD sia collegata a un computer sul quale è in esecuzione Windows Vista.

Configurazione della stampante

Prima di poter utilizzare la stampante per la stampa dalle varie applicazioni, è necessario aprire la finestra di configurazione della stampante e specificare le impostazioni desiderate.

La finestra di configurazione della stampante può essere aperta nei seguenti modi:

- Nel menu [Start], selezionare [Control Panel] e quindi [Printer] (menu [Start], quindi [Devices and Printers] con Windows 7; menu [Start], quindi [Printers and Faxes] con Windows XP; menu [Start], [Settings], quindi [Printers] con Windows 2000). Selezionare l'icona della stampante Sony UP-DR80MD, quindi selezionare [Select printing preferences] nella barra dei comandi ([Printing preferences] facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante con Windows 7; [Printing Preferences] nel menu [File] con Windows XP e Windows 2000). Le impostazioni definite in questo modo vengono utilizzate come impostazioni predefinite quando si stampa dalle applicazioni.
- Nel menu [File] dell'applicazione, fare clic sul comando utilizzato per definire le impostazioni della stampante. Le impostazioni effettuate con questo metodo rimangono attive solo fino all'uscita dall'applicazione.

Questa guida descrive le schede visualizzate nella finestra di configurazione della stampante UP-DR80MD.

Scheda [Paper]

Impostazioni di base relative alla stampa.

Scheda [Graphics]

Consente di impostare il grigio, la luminosità e altre impostazioni relative alla qualità dell'immagine.

Scheda [Message]

Consente di definire le impostazioni relative alle finestre di dialogo dei messaggi.

Impostazioni della scheda [Paper]

Impostazioni di base relative alla stampa.



Paper Size

Di seguito sono indicati i formati di carta che possono essere utilizzati nella stampante e le corrispondenti dimensioni massime di stampa.

Paper Size	Dimensioni massime di stampa
Letter	2.464 × 3.192 pixel
A4	2.392 × 3.400 pixel

Orientation

Selezionare [Portrait] o [Landscape] per l'orientamento delle stampe.

Copies

È possibile impostare un valore compreso tra 1 e 10.

Scale

Specifica la scala di ingrandimento o riduzione utilizzata per la stampa. Sono consentiti valori compresi fra 25 e 400%.

Printer Info

Visualizza informazioni relative alla stampante collegata.

Save Settings

Salva su di un file tutte le impostazioni di stampa configurate.

Load Settings

Carica da un file le impostazioni di stampa previamente salvate.

About

Visualizza informazioni sulla versione del driver stampante.

Restore Defaults


Ripristina tutti i valori predefiniti delle opzioni della scheda [Paper].

Impostazioni della scheda [Graphics]

Selezionare [Color Balance], [Lightness], [Color Correction] o [Gray Balance] nell'elenco [Color Adjust] per modificarne le impostazioni corrispondenti.

Color Balance


Regola il bilanciamento dei colori. Regolare l'impostazione spostando il cursore verso destra o verso sinistra. Le regolazioni possono essere eseguite anche digitando i valori desiderati nella casella sulla destra. Gli effetti delle regolazioni sono visualizzati nell'immagine di anteprima in alto a destra.

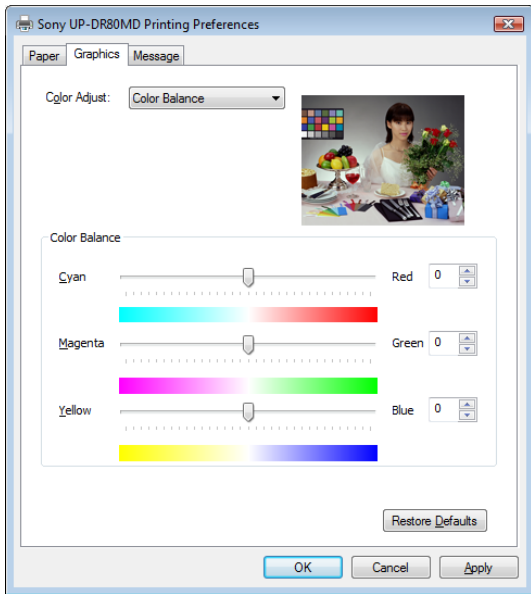

Lightness

Regola la luminosità. Regolare l'impostazione spostando il cursore verso destra o verso sinistra. Le regolazioni possono essere eseguite anche digitando i valori desiderati nella casella sulla destra. Gli effetti delle regolazioni sono visualizzati nell'immagine di anteprima in alto a destra. Gli effetti

della regolazione della nitidezza non sono tuttavia visualizzati.

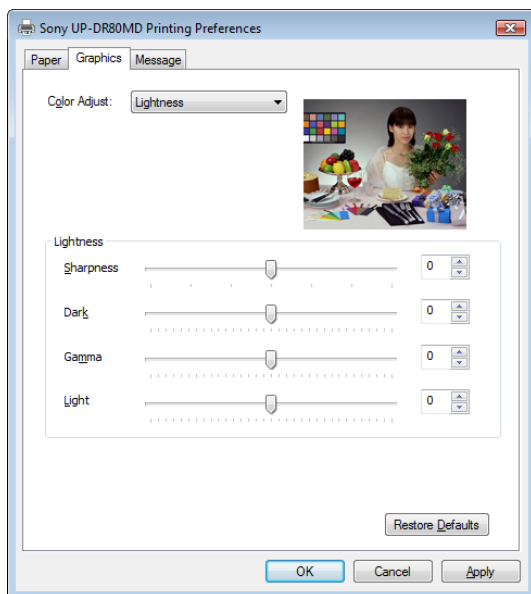

Sharpness

Regola la nitidezza dei contorni dell'immagine. La nitidezza dei contorni delle immagini aumenta proporzionalmente al valore impostato.

Dark

Regola la scala dei toni scuri.

Gamma

Regola la scala dei toni medi.


Light

Regola la scala dei toni chiari.

Color Correction

Consente di selezionare il metodo di correzione del colore utilizzato.

Gli effetti di queste regolazioni non sono visualizzati nell'immagine di anteprima in alto a destra.

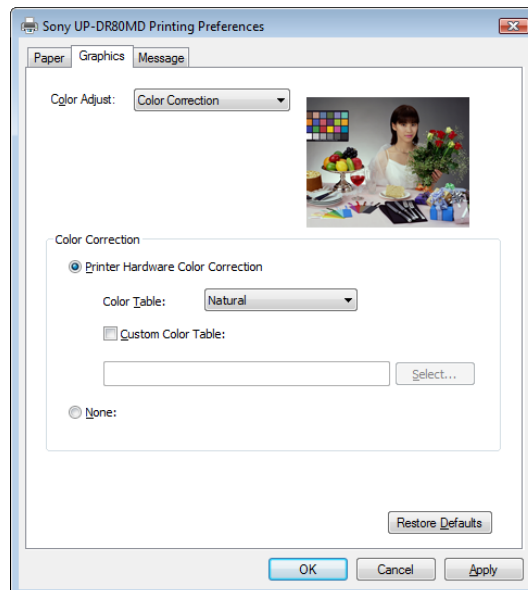

Printer Hardware Color Correction

Il colore è corretto sulla stampante.

None

Non viene effettuata nessuna correzione del colore.

Color Table

Seleziona la tabella dei colori interna della stampante.

Natural: esegue una correzione del colore ottimale per le immagini di tipo sRGB.

CG: esegue una correzione del colore ottimale per le immagini di tipo CG.

Custom Color Table


Selezionare questa opzione per utilizzare una tabella color diversa da quella interna della stampante.

Gray Balance

Utilizzare questa scheda per regolare la tonalità dell'immagine stampata in modo che corrisponda alla sua tonalità sullo schermo.

La correzione del bilanciamento del grigio consente, dopo aver installato un nuovo nastro di inchiostro e aver caricato la carta, di rettificare eventuali disuniformità.

Gli effetti delle regolazioni sono visualizzati nell'immagine di anteprima in alto a destra.

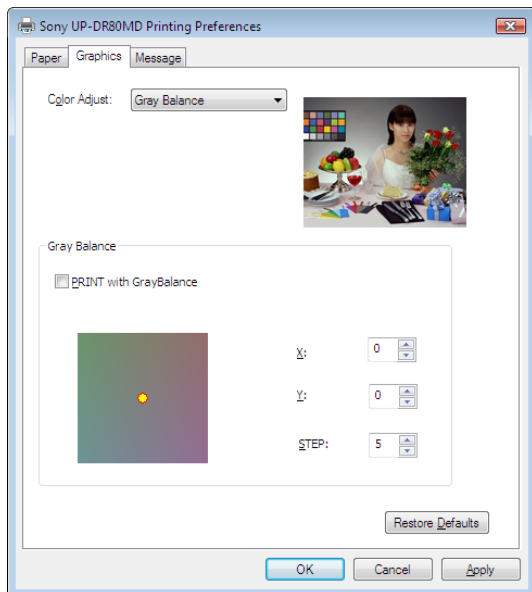

PRINT with GrayBalance

Selezionare questa casella di controllo per generare una stampa del bilanciamento del grigio per i dati di stampa.

X, Y

Queste opzioni consentono di regolare il bilanciamento del grigio impostando le coordinate X e Y desiderate sul grafico di bilanciamento del grigio in basso a sinistra nella finestra. L'impostazione predefinita per entrambi i valori è 0 per non apportare nessuna correzione al bilanciamento del grigio.

Gli effetti delle regolazioni sono visualizzati nell'immagine di anteprima in alto a destra.


STEP

Specifica il valore di incremento del bilanciamento del grigio per le stampe di bilanciamento. Il valore predefinito è 5.

Specificare valori inferiori per effettuare regolazioni fini del bilanciamento del grigio e valori superiori per effettuare regolazioni più generali.

Per stampare il bilanciamento del grigio come riferimento per la regolazione, selezionare la casella di controllo [PRINT with GrayBalance] e stampare. Viene visualizzata la finestra di dialogo seguente. Specificare l'area utilizzata per confermare la tonalità spostando la cornice (finestra di selezione) sull'anteprima dell'immagine. Regolare le dimensioni della cornice impostando opportunamente [Frame Size]. È possibile cambiare anche il colore della cornice tramite l'opzione [Frame Brightness].

Cornice (finestra di selezione)

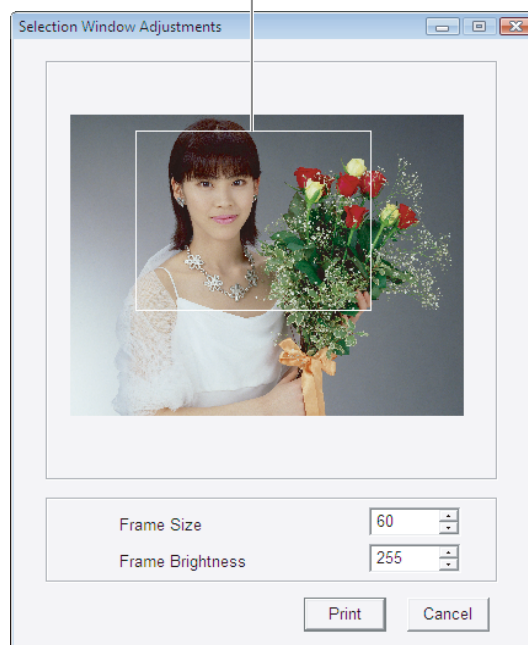

Quando si fa clic sul pulsante [Print], la porzione d'immagine specificata nella finestra di selezione viene stampata utilizzando un layout con 5 × 5 caselle. Selezionare l'immagine con il miglior bilanciamento del grigio fra le 25 immagini stampate e specificare in [X] e [Y] i corrispondenti valori delle coordinate X e Y (X,Y) indicati sotto tale immagine.

Restore Defaults


Ripristina tutte le impostazioni della scheda [Graphics] ai loro valori predefiniti.

Nota

È possibile che, fra l'immagine di anteprima e l'immagine effettivamente stampata, sussistano differenze in termini di qualità di immagine e colore causate dalle differenze che esistono fra i metodi di generazione dei colori e gli ambienti di visualizzazione grafica. Le immagini di anteprima devono essere usate solo come indicazione e guida.

Impostazioni della scheda [Message]

Selezionare la posizione di visualizzazione delle finestre di dialogo dei messaggi.

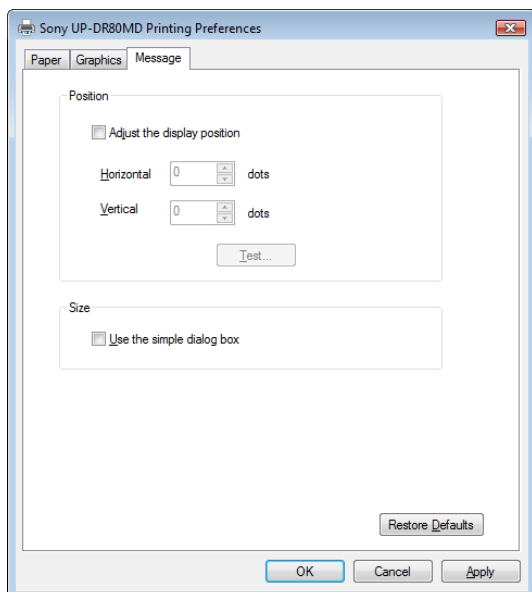

Restore Defaults

Ripristina tutte le impostazioni della scheda [Message] ai loro valori predefiniti.

Adjust the display position

Selezionare questa casella di controllo per modificare la posizione in cui saranno visualizzate le finestre di dialogo dei messaggi. Le finestre di dialogo dei messaggi vengono visualizzate nella posizione definita dai valori specificati nelle caselle [Horizontal] e [Vertical].

Impostazione predefinita: [Adjust the display position] non è selezionato. (Le finestre di dialogo dei messaggi sono visualizzate al centro del display.)

Horizontal e Vertical

Definisce la posizione delle finestre di dialogo dei messaggi, utilizzando come origine l'angolo superiore sinistro della schermata.

La finestra di dialogo dei messaggi viene visualizzata nella posizione definita dai valori specificati qui.

Test

Fare clic su questo pulsante per visualizzare una finestra messaggio di prova nella posizione definita mediante [Horizontal] e [Vertical]. Ciò consente di verificare che la posizione sia quella desiderata.

Use the simple dialog box

Selezionare questa casella di controllo per ridurre le dimensioni delle finestre di dialogo dei messaggi.