

Printer Driver

Sprievodca nastavením

Táto príručka opisuje, ako nastaviť ovládač tlačiarne pre systém Windows 7, Windows Vista a Windows XP.

Pred použitím tohto softvéru

Pred použitím ovládača tlačiarne s prečítajte súbor „Readme“.

UP-D711MD

Obsah

Konfigurácia tlačiarne	3
Karta nastavení [Main]	4
Karta nastavení [Density Adjust]	5
Karta nastavení [Message]	6
Zoznam hlásení	7

Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation. Ostatné názvy spoločností a výrobkov, uvedené v tomto sprievodcovi, sú taktiež ochranné známky a registrované ochranné známky.

Obrazovky použité v tejto príručke na opis nastavenia predpokladajú, že tlačiareň UP-D711MD sa používa v prostredí Windows 7. Ďalšie podrobnosti o nastavení nájdete v návode na obsluhu tlačiarne v kombinácii s touto príručkou.

Konfigurácia tlačiarne

Môžete otvoriť obrazovku nastavení UP-D711MD a nakonfigurovať rôzne nastavenia predtým, ako začnete s tlačou z aplikácií.

Tlačiareň nastavte v nasledujúcom prostredí.

- Rozlíšenie displeja viac ako SVGA (800 × 600)
- Veľkosť znakov obrazovky je predvolená.
 - Windows XP: Normal size (96 DPI)
 - Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more information
 - Windows 7: Smaller - 100% (default)

Obrazovku nastavení môžete otvoriť pomocou jedného z nasledovných spôsobov.

- V ponuke [Start] vyberte položku [Devices and Printers] ([Control Panel], potom položku [Printer] v systéme Windows Vista; [Printers and Faxes] v systéme Windows XP). Zvoľte ikonu tlačiarne Sony UP-D711MD a potom pravým tlačidlom myši vyberte položku [Printing preferences] ([Select printing preferences] z panelu príkazov v systéme Windows Vista; [Printing preferences] z ponuky [File] v systéme Windows XP). Nastavenia vykonané v tejto časti sa zvyčajne použijú ako predvolené nastavenia pre tlačiareň UP-D711MD. Predvolené nastavenia niektorých softvérových aplikácií sa však môžu uprednostniť.
- V ponuke [File] vašej aplikácie kliknite na príkaz, ktorý sa používa pre nastavenia tlačiarne. Nastavenia vykonané týmto spôsobom zostávajú v platnosti až do zatvorenia aplikácie.

Táto príručka opisuje karty, ktoré sa objavujú na obrazovke nastavení UP-D711MD.

Karta [Main]

Používa sa na konfiguráciu základných nastavení týkajúcich sa tlače, ako je veľkosť papiera, typ papiera, a počet tlačových kópií a podobne.

Karta [Density Adjust]


Používa sa na nastavenie hustoty tlačných obrázkov.

Karta [Message]

Používa sa na konfiguráciu nastavení zobrazenia pre dialógové okná s hláseniami.

Karta nastavení [Main]

Táto karta sa používa na konfiguráciu základných nastavení tlače.

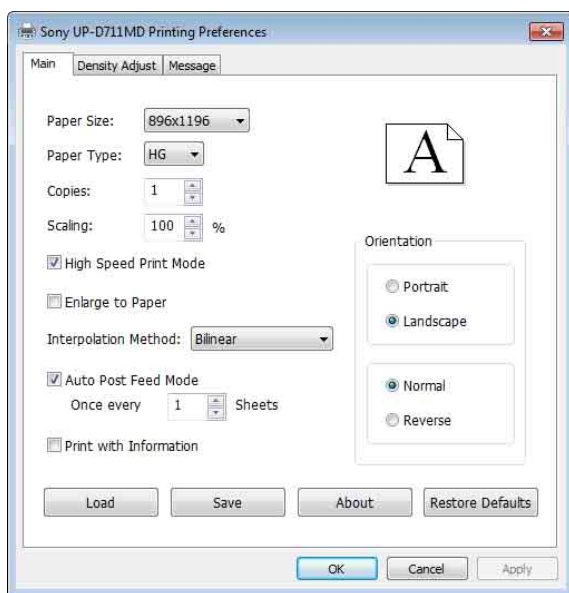

Paper Size

Vyberte veľkosť papiera.

Položka	Popis
596 × 896	50,4 mm × 75,7 mm
672 × 896	56,8 mm × 75,7 mm
896 × 896	75,7 mm × 75,7 mm
896 × 1196	75,7 mm × 101,1 mm
896 × 2688	75,7 mm × 227,1 mm

Paper Type

Výber typu papiera, ktorý sa má nastaviť. Hodnoty nastavení typu a veľkosti papiera sú nasledovné.

Paper type	Paper size
S	UPP-84S
HG	UPP-84HG

Copies

Voľba počtu kópií, ktoré sa majú vytlačiť (1 až 255).

Scaling

Výber veľkosti zväčšenia alebo zmenšenia (25 % až 400 %). Ak chcete zmeniť spôsob interpolácie, zvolte nastavenie [Interpolation Method] nižšie. Možnosť [Enlarge to Paper] nie je možné použiť s touto funkciou.

High Speed Print Mode

Začiarknite toto políčko, ak chcete tlačiť vo vysokorýchlostnom režime.

Enlarge to Paper

Ak je veľkosť obrázka menšia ako veľkosť papiera, obrázok sa automaticky zväčší, aby zodpovedal veľkosti papiera. Ak chcete zmeniť spôsob interpolácie, zvolte nastavenie [Interpolation Method] nižšie. Funkciu [Scaling] nie je možné použiť s touto funkciou.

Interpolation Method

Zvoľte spôsob interpolácie obrázka ([Bilinear], [Nearest Neighbor]).

Auto Post Feed Mode

Umožňuje nastavenie podávania papiera (krátke/dlhé). Začiarknutie tohto políčka spôsobí podávanie dlhšieho papiera po tlači. Pri podávaní dlhšieho papiera sa papier posunie do polohy rezania bez stlačenia tlačidla FEED. Toto políčko začiarknite, ak sa má papier po tlači odrezať. Ak sa vytlačí viac ako jedna strana, okraje medzi obrázkami sa zväčšia. Ak je začiarknuté toto políčko, je možné nastaviť položku [Once every __ Sheets].

Ak toto políčko nezačiarknete, po tlači sa podá kratší papier. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete tlačiť viac ako jednu stranu a zmenšiť okraje.

Poznámka

Ak je podaný krátky papier, stlačte tlačidlo FEED, aby sa papier odrezal po podaní. Ak sa papier odreže bez toho, aby ste stlačili tlačidlo FEED, obrázok sa môže prerezať napoly.


Once every __ Sheets

Môžete nastaviť hodnotu frekvencie podávania dlhého papiera.

Krátke podávanie sa použije, kým sa nevytlačí počet strán, ktorý ste nastavili. Následne sa použije podávanie dlhšieho papiera.

Počet sa vynuluje, keď počet vytlačených stránok dosiahne nastavenú hodnotu. Počet sa vynuluje aj keď zapnete napájanie, stlačíte tlačidlo FEED, zmení sa číslo tlače alebo sa tlač zruší.


(Príklad 1) Nastavená je hodnota 1:

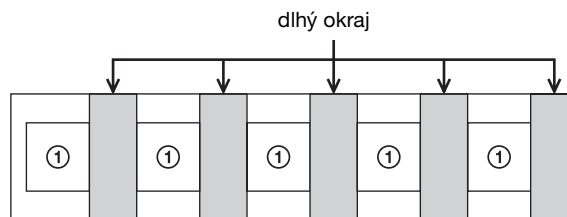

Zakrúžkované číslice predstavujú počítadlo.


(Príklad 2) Nastavená je hodnota 3, tlačí sa šesť strán:

- Keď sa nenuluje

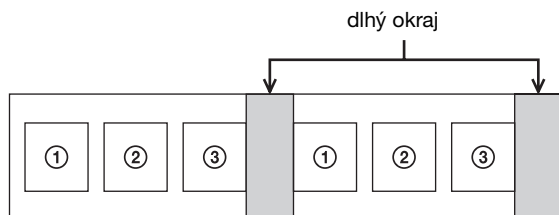

Zakrúžkované číslice predstavujú počítadlo.

- Vynulovanie po vytlačení druhej strany.

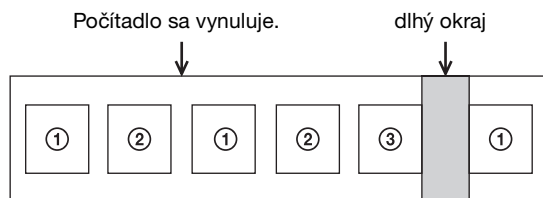

Zakrúžkované číslice predstavujú počítadlo.

Print with Information

Toto políčko začiarknite, ak chcete tlačíť obrázky a tiež informácie o nastavených hodnotách karty [Density Adjust] pod týmito obrázkami. Každá predvolená hodnota sa vytlačí spolu s nasledujúcimi notáciami.

Položka	Notácia
GAMMA	GAM
Advanced	ADV
Dark	DARK
Light	LIGHT
Sharpness	SHARP

Orientation

Výber orientácie obrázka. Keď tlačíte obrázok na výšku, začiarknite políčko [Portrait], ak tlačíte na šírku, začiarknite políčko [Landscape]. Ak chcete vytlačíť obrázok otočený o 180 stupňov, začiarknite políčko [Reverse].

Poznámka

Výsledky tlače sa môžu líšiť v závislosti od softvérovej aplikácie. Výsledok skontrolujte vytlačením obrázkov.

Load

Umožňuje načítať uložené nastavenia.

Save

Umožňuje uložiť aktuálne nastavenia.

About

Zobrazí informácie o verzii ovládača.

Restore Defaults

Po stlačení tlačidla karty [Main] sa všetky nastavenia obnovia na predvolené hodnoty.


Karta nastavení [Density Adjust]

Používa sa na nastavenie hustoty obrázkov.

Nastavenie sa prejaví na grafe hustoty v pravom hornom rohu obrazovky nastavení a na pruhu gradácie. Účinok nastavenej hodnoty pre položku [GAMMA] sa však neprejaví.

Zvislá os grafu hustoty vyjadruje hustotu práve tlačeneho obrázka, pričom jej horný okraj predstavuje hustotu bielej farby a spodný okraj predstavuje hustotu čiernej farby.

Vodorovná os vyjadruje údaje obrázka, pričom horná časť vyjadruje údaje o bielej farbe a spodná časť vyjadruje údaje o čiernej farbe. Pruh gradácie vyjadruje skutočnú hustotu namiesto hodnoty zvislej osi grafu hustoty.

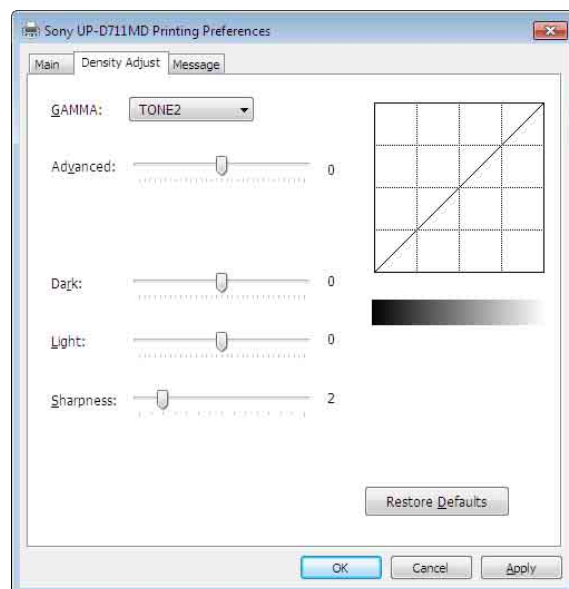

GAMMA

Voľba intenzity poltónovej gradácie.

Položka	Význam
TONE1	Svetlejší ako štandard
TONE2	Štandard
TONE3	Tvrdá gradácia
TONE4	Mäkká gradácia

Advanced

Posúvaním posúvača môžete vybrať úroveň gradácie. Čím vyššiu hodnotu zvolíte, tým bude gradácia tmavšia. Gradáciu možno nastaviť na jednu zo 65 hodnôt. Štandardná hodnota je 0. Rozsah nastavenia je -32 až +32.

Dark

Posúvaním posúvača môžete upraviť tmavé časti obrázka. Čím vyššia je zvolená hodnota, tým sú tmavé časti obrázka tmavšie. Gradáciu možno nastaviť na jednu zo 129 hodnôt. Štandardná hodnota je 0. Rozsah nastavenia je -64 až +64.

Light

Posúvaním posúvača môžete upraviť svetlé časti obrázka. Čím vyššia je zvolená hodnota, tým sú svetlé časti obrázka svetlejšie. Gradáciu možno nastaviť na jednu zo 129 hodnôt. Štandardná hodnota je 0. Rozsah nastavenia je -64 až +64.

Sharpness

Posúvaním posúvača môžete upraviť obrisy obrázka. Čím vyššia je zvolená hodnota, tým sú okraje obrázka ostrejšie. Gradáciu možno nastaviť na jednu zo 15 hodnôt. Štandardná hodnota je 2. Rozsah nastavenia je 0 až 14.

Restore Defaults

Po stlačení tlačidla karty [Density Adjust] sa všetky nastavenia obnovia na predvolené hodnoty.


Karta nastavení [Message]

Používa sa na konfiguráciu nastavení zobrazenia pre dialógové okná s hláseniami.

Dialógové okná s hláseniami sa zobrazia, ak sa napríklad vyskytne chyba UP-D711MD.

Dialógové okná s hláseniami sa zobrazujú v dvoch veľkostiach: štandardnej a malej. Štandardné dialógové okno s hlásením zobrazuje chybový stav tlačiarne a pokyny na odstránenie tejto chyby. Malé dialógové okno s hlásením zobrazuje jednoduché pokyny na riešenie chyby (v jednej vete).

Podrobné informácie o jednotlivých hláseniach nájdete v časti „Zoznam hlásení“ (strana 7).

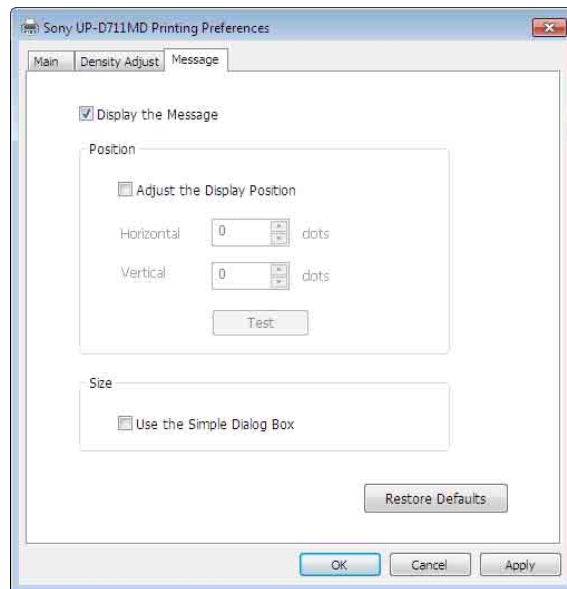

Display the Message

Možnosť nastavenia na ZAP./VYP. na zobrazenie dialógového okna s hlásením.

Ak toto políčko nie je začiarknuté (VYP.), nie je možné nastaviť ďalšie nastavenia na karte [Message].

Adjust the display position

Začiarknite toto políčko, ak chcete upravovať polohu zobrazenia dialógových okien s hláseniami. Dialógové okno s hlásením sa zobrazí v polohe definovanej hodnotami určenými v nastaveniach [Horizontal] a [Vertical].

Predvolené nastavenie: pri položke [Adjust the Display Position] nie je zaznačená značka začiarknutia. (Štandardné dialógové okno s hlásením sa zobrazuje v strede displeja, malé dialógové okno s hlásením sa zobrazuje v ľavom hornom rohu displeja.)

Horizontal, Vertical

Tieto nastavenia sú povolené, keď je začiarknuté políčko [Adjust the Display Position]. Zadať súradnice polohy zobrazenia (poloha ľavého horného rohu dialógového okna s hlásením). Dialógové okno s hlásením sa zobrazí na mieste definovanom hodnotami zadanými v tejto časti.

Test

Overenie polohy, v ktorej sa zobrazuje dialógové okno s hlásením na displeji alebo na obrazovke. Skúšobné dialógové okno sa zobrazí na mieste určenom nastavením [Horizontal] a [Vertical].

Use the Simple Dialog Box

Toto políčko začiarknite, ak sa majú zobrazovať menšie dialógové okná s hláseniami.

Restore Defaults

Všetky nastavenia v karte [Message] sa obnovia do predvoleného stavu.

Zoznam hlásení

Nižšie sú uvedené zobrazované správy. Akékoľvek problémy opravujte podľa nasledujúcich hlásení. Ďalšie podrobnosti o odstraňovaní problémov nájdete v návode na obsluhu zariadenia UP-D711MD a v tomto návode.

Štandardné dialógové okno s hlásením	Malé dialógové okno s hlásením
No thermal paper. Please set the thermal paper. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Set thermal paper.
Now, Feeding. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Door is open. Please close the door. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Close door.
Now regulating the head temperature of the printer. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Mechanical error. Printing has been aborted. Please turn off the printer, then turn it back on and print again.	Restart printer.
Printer is not ready. Make sure the printer is plugged in to a power source and the printer cable is correctly connected. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Check printer.