

打印机驱动程序

设置指南

本指南介绍如何在 Windows 7、Windows Vista 和 Windows XP 中设置打印机驱动程序。

使用本软件之前

使用打印机驱动程序之前，请务必阅读“Readme”文件。

UP-D711MD

目录

配置打印机	3
[Main] 选项卡设置	4
[Density Adjust] 选项卡设置	5
[Message] 选项卡设置	6
消息列表	7

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
本指南中提到的其他公司名称和产品名称也是商标和注册商标。

本指南中用于介绍设置的屏幕均假定 UP-D711MD 打印机在 Windows 7 环境中使用。有关设置的详细信息，请参阅打印机的操作说明和本手册。

配置打印机

从应用程序开始打印之前，可以打开 UP-D711MD 设置屏幕并配置各种设置。

请在以下环境中设置打印机。

- 显示分辨率超过 SVGA (800 × 600)
- 屏幕字号为默认。

Windows XP: Normal size (96 DPI)

Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more information

Windows 7: Smaller - 100% (default)

可以使用以下任一方法打开设置屏幕。

- 在 [Start] 菜单中，选择 [Devices and Printers]（对于 Windows Vista：打开 [Control Panel]，然后选择 [Printer]；对于 Windows XP：则选择 [Printers and Faxes]）。选择 Sony UP-D711MD 的打印机图标，然后右击选择 [Printing preferences]（对于 Windows Vista：从命令栏中选择 [Select printing preferences]；对于 Windows XP：从 [File] 菜单中选择 [Printing preferences]）。此处进行的设置通常用作 UP-D711MD 打印机的默认设置。然而，某些应用程序软件的默认设置可能优先。
- 在应用程序的 [File] 菜单中，单击用于进行打印机设置的命令。在关闭应用程序之前，通过这种方法进行的设置将一直保持有效。

本指南介绍出现在 UP-D711MD 设置屏幕中的选项卡。

[Main] 选项卡

用于调节与打印相关的基本设置，例如纸张尺寸、纸张类型、打印数量等。

[Density Adjust] 选项卡


用于调节打印图像的浓度。

[Message] 选项卡

用于设置与消息对话框相关的显示设置。

[Main] 选项卡设置

此选项卡用于进行基本打印设置。

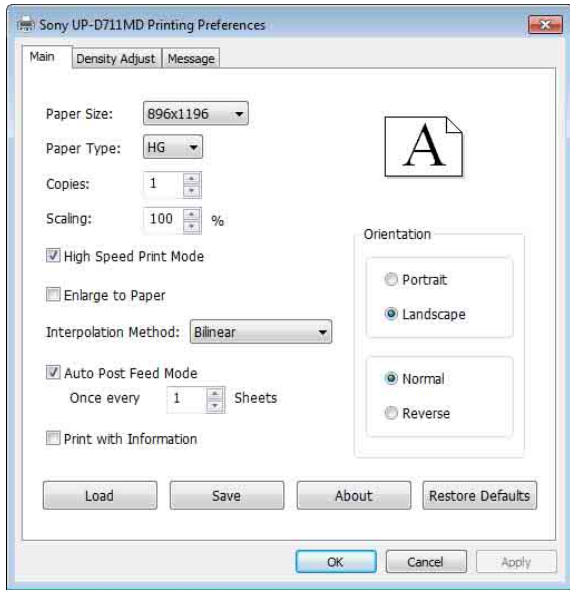

Paper Size

选择纸张尺寸。

项目	说明
596 × 896	50.4 mm × 75.7 mm
672 × 896	56.8 mm × 75.7 mm
896 × 896	75.7 mm × 75.7 mm
896 × 1196	75.7 mm × 101.1 mm
896 × 2688	75.7 mm × 227.1 mm

Paper Type

选择设置的纸张类型。纸张类型和纸张尺寸的设置值如下。

Paper type	Paper size
S	UPP-84S
HG	UPP-84HG

Copies

选择打印数量（1 至 255）。

Scaling

选择放大或缩小比例（25% 至 400%）。若要更改内插方法，请选择下面的 [Interpolation Method] 设置。[Enlarge to Paper] 无法与此功能一起使用。

High Speed Print Mode

选中此复选框可以启用高速打印模式。

Enlarge to Paper

如果图像尺寸小于纸张尺寸，图像会自动放大以填满纸张尺寸。若要更改内插方法，请选择下面的 [Interpolation Method] 设置。[Scaling] 无法与此功能配合使用。

Interpolation Method

选择图像内插方法（[Bilinear]、[Nearest Neighbor]）。

Auto Post Feed Mode

设置送纸（短 / 长）。选中此复选框将在打印后较长送纸。通过较长送纸，无需按 FEED 按钮，纸张就会前进到切割位置。

选中此复选框将在打印后切纸。如果打印页数超过一张，图像之间的间距将会增加。如果选中此复选框，可以设置 [Once every __ Sheets]。

未选中此复选框将在打印后较短送纸。未选中此复选框可打印多页和缩小间距。

注意

对于短送纸，请在送纸后按 FEED 按钮切纸。如果未按 FEED 按钮即切纸，可能会从图像中间切开。


Once every __ Sheets

可以设置应用长送纸的频率值。

打印完设置的页数以前应用短送纸，打印完之后将应用较长送纸。

当打印完预设页数时，计数将被重设。如果打开电源、按 FEED 按钮、改变打印数量或取消打印，计数也会重设。


（示例 1）值设置为 1：

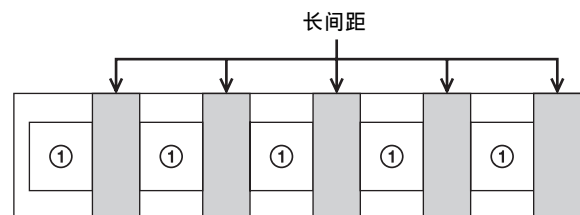

带圆圈的数字表示计数器。


（示例 2）值设置为 3，打印六页：

• 未重设时

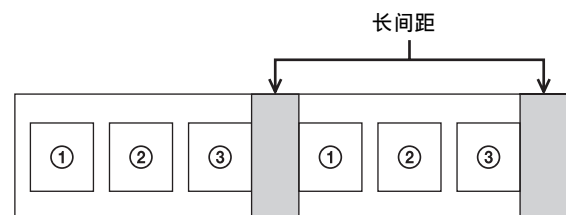

带圆圈的数字表示计数器。

- 打印第二页后重设时。

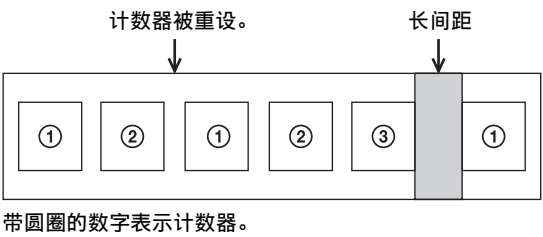

Print with Information

选中此复选框可以打印图像以及在这些图像下方打印 [Density Adjust] 选项卡上的预设值信息。打印的每个预设值均带有以下标记。

项目	标记
GAMMA	GAM
Advanced	ADV
Dark	DARK
Light	LIGHT
Sharpness	SHARP

Orientation

选择图像的方向。打印竖拍图像时，请选中 [Portrait] 复选框，打印横拍图像时，则选中 [Landscape] 复选框。选中 [Reverse] 复选框将以图像旋转 180 度的方式打印。

注意

打印结果可能会因应用程序软件而异。请通过实际打印图像确认结果。

Load

可以加载保存的设置。

Save

可以保存当前设置。

About


显示驱动程序版本信息。

Restore Defaults

按 [Main] 选项卡可将所有设置恢复为默认值。

[Density Adjust] 选项卡设置

用于调节图像的浓度。调节的结果会反映在设置屏幕右上方的浓度图中并以渐变条表示。但是无法反映 [GAMMA] 的预设值效果。浓度图的纵轴表示实际打印图像的浓度，上限与白色浓度相关，下限则与黑色浓度相关。横轴表示图像数据，上限与白色数据相关，下限则与黑色数据相关。渐变条表示实际浓度，而非浓度图的纵轴值。

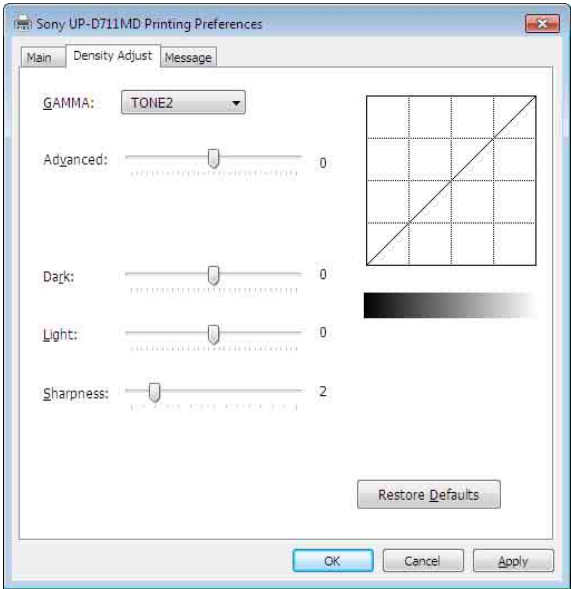

GAMMA

用来选择中间色调渐变的浓度。

项目	说明
TONE1	比标准亮
TONE2	标准
TONE3	硬调
TONE4	软调

Advanced

拖动滑块选择渐变等级。所选值越大，渐变越暗。可以将渐变调节为 65 个值之一。标准值为 0。可调范围为 -32 至 +32。

Dark

拖动滑块调节图像的暗部。所选值越大，图像的暗部越暗。可以将渐变调节为 129 个值之一。标准值为 0。可调范围为 -64 至 +64。

Light

拖动滑块调节图像的亮部。所选值越大，图像的亮部越亮。可以将渐变调节为 129 个值之一。标准值为 0。可调范围为 -64 至 +64。

Sharpness

拖动滑块调节图像的轮廓。所选值越大，图像边缘越锐利。可以将渐变调节为 15 个值之一。标准值为 2。可调范围为 0 至 14。

Restore Defaults


按 [Density Adjust] 选项卡可将所有设置恢复为默认值。

[Message] 选项卡设置

用于设置与消息对话框相关的显示设置。

例如，当 UP-D711MD 出错时会出现消息对话框。消息对话框显示为两种尺寸：标准尺寸和小尺寸。标准消息对话框显示打印机的错误状态和相关错误的处理说明。小尺寸消息对话框显示处理错误的简单说明（一句话）。

有关各消息的详细信息，请参阅“消息列表”（第 7 页）。

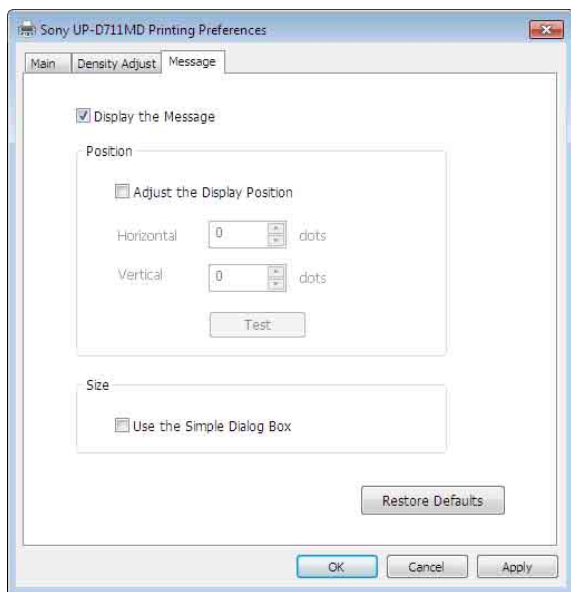

Display the Message

设置 ON/OFF 可显示消息对话框。

如果此复选框为 OFF，将无法在 [Message] 选项卡中设置其它设置。

Adjust the display position

选中此复选框可调整消息对话框的显示位置。消息对话框的显示位置由在 [Horizontal] 和 [Vertical] 设置中指定的值定义。

默认设置：[Adjust the Display Position] 内未添加复选标记。（标准消息对话框出现在显示屏中央，小尺寸消息对话框出现在显示屏左上角。）

Horizontal, Vertical

选中 [Adjust the Display Position] 复选框时会启用这些设置。输入显示位置的坐标（消息对话框左上角的位置）。

消息对话框会出现在此处指定值所定义的位置处。

Test

确认消息对话框出现在显示屏或屏幕上的位置。测试对话框将出现在 [Horizontal] 和 [Vertical] 设置所定义的位置处。

Use the Simple Dialog Box

选中此复选框可显示较小尺寸的消息对话框。

Restore Defaults

将 [Message] 选项卡中的所有设置恢复为默认状态。

消息列表

可显示的消息如下。请根据以下消息解决问题。有关解决问题的更多信息，请参阅 UP-D711MD 的使用说明书和本手册。

标准消息对话框	小尺寸消息对话框
No thermal paper. Please set the thermal paper. To continue printing, click “Retry.” Windows will automatically retry after 5 seconds.	Set thermal paper.
Now, Feeding. Please wait. To continue printing, click “Retry.” Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Door is open.Please close the door. To continue printing, click “Retry.” Windows will automatically retry after 5 seconds.	Close door.
Now regulating the head temperature of the printer. Please wait. To continue printing, click “Retry.” Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Mechanical error. Printing has been aborted. Please turn off the printer, then turn it back on and print again.	Restart printer.
Printer is not ready. Make sure the printer is plugged in to a power source and the printer cable is correctly connected. To continue printing, click “Retry.” Windows will automatically retry after 5 seconds.	Check printer.