

Printer Driver

Beállítási útmutató

Ez az útmutató a nyomtató-illesztőprogram Windows 7, Windows Vista és Windows XP rendszerben végzett beállítását írja le.

A szoftver használata előtt

A nyomtató-illesztőprogram használata előtt olvassa el a „Readme” fájlt.

UP-D711MD

Tartalomjegyzék

A nyomtató konfigurációja	3
[Main] lap beállításai	4
[Density Adjust] lap beállításai	5
[Message] lap beállításai	6
Üzenetlista	7

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

Az útmutatóban szereplő egyéb vállalatnevek és terméknevek is védjegyek és bejegyzett védjegyek.

Az útmutatóban a beállítás ismertetéséhez használt képernyők feltételezik, hogy az UP-D711MD nyomtatót Windows 7 környezetben használja. A beállításokkal kapcsolatban további részleteket a kézikönyv mellett a nyomtató használati útmutatójában talál.

A nyomtató konfigurációja

Megnyithatja az UP-D711MD beállítási képernyőjét, és konfigurálhatja a különböző beállításokat, mielőtt nyomtatást végezne az alkalmazásokból.

A következő környezetekben a következőképpen állítsa be a nyomtatót.

- Több mint SVGA (800 × 600) képernyőfelbontás
- A képernyő karaktermérete az alapértelmezett.
Windows XP: Normal size (96 DPI)
Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more information
Windows 7: Smaller - 100% (default)

A következő módszerekkel nyithatja meg a beállítási képernyőt.

- A [Start] menüben válassza a [Devices and Printers] elemet ([Control Panel], majd a [Printer] a Windows Vista rendszeren; [Printers and Faxes] a Windows XP rendszeren). Válassza a Sony UP-D711MD nyomtató ikonját, majd kattintson a jobb gombbal a [Printing preferences] kiválasztásához (a parancssor [Select printing preferences] eleme a Windows Vista rendszeren; a [File] menü [Printing preferences] eleme a Windows XP rendszeren). Az itt megadott beállítások általában az UP-D711MD nyomtató alapértelmezett beállításai. Egyes alkalmazási szoftverek alapértelmezett beállításai azonban elsőbbséget élvezhetnek.
- Az alkalmazás [File] menüjében kattintson a nyomtatóbeállítások megadásához használt parancsra. Az így megadott beállítások csak az alkalmazás bezárásáig érvényesek.

Ez az útmutató az UP-D711MD beállítási képernyőjén megjelenő lapokat ismerteti.

[Main] lap

A nyomtatással kapcsolatos alapvető beállításokat adja meg, például a papírméretet, a papír típusát, a másolatok számát stb.

[Density Adjust] lap


A nyomtatott képek sűrűségét állítja be.

[Message] lap

Megadja az üzenetet tartalmazó párbeszédpanelel kapcsolatos megjelenítési beállításokat.

[Main] lap beállításai

Ezen a lapon végezhető el az alapvető nyomtatási beállítások.

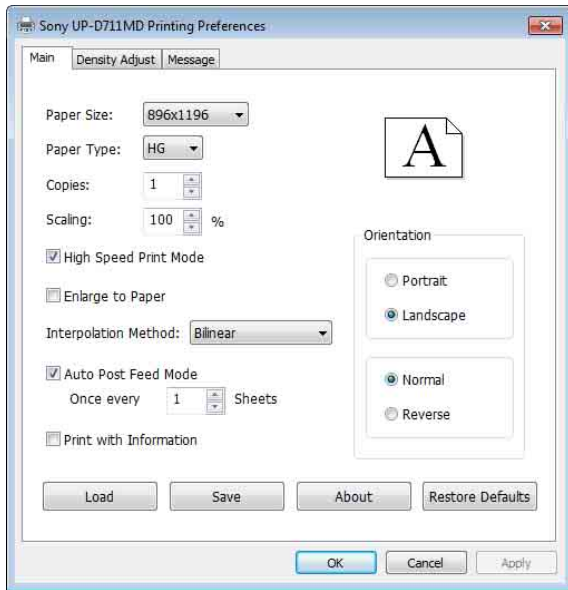

Paper Size

Válassza ki a papír méretét.

Elem	Leírás
596 × 896	50,4 mm × 75,7 mm
672 × 896	56,8 mm × 75,7 mm
896 × 896	75,7 mm × 75,7 mm
896 × 1196	75,7 mm × 101,1 mm
896 × 2688	75,7 mm × 227,1 mm

Paper Type

Kiválaszthatja a beállított papírtípust. A papírtípus és a papírméret beállítási értékei a következők.

Paper type	Paper size
S	UPP-84S
HG	UPP-84HG

Copies

Kiválaszthatja a kinyomtatni kívánt másolatok számát (1 és 255 között).

Scaling

Kiválaszthatja a nagyítás, illetve kicsinyítés mértékét (25% és 400% között). Az interpolálási módszer módosításához válasszon az alábbi [Interpolation Method] beállítások közül. Az [Enlarge to Paper] beállítás nem használható ezzel a funkcióval.

High Speed Print Mode

Bejelölheti ezt a jelölőnégyzetet a magas nyomtatási sebességű mód bekapcsolásához.

Enlarge to Paper

Ha a képméret kisebb, mint a papír mérete, a rendszer automatikusan kinagyítja a képet, hogy kitöltse a papír méretét. Az interpolálási módszer módosításához válasszon az alábbi [Interpolation Method] beállítások közül. A [Scaling] beállítás nem használható ezzel a funkcióval.

Interpolation Method

Válassza ki a kép interpolációs módszerét ([Bilinear], [Nearest Neighbor]).

Auto Post Feed Mode

Beállítja a papíradagolást (rövid/hosszú). Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, az hosszabb papíradagolást eredményez a nyomtatás után. A hosszabb papíradagolással a papír a FEED gomb megnyomása nélkül jut el a megvágás helyéhez. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a papír nyomtatás utáni vágásához. Ha több oldalt nyomtat, a képek közötti margó nő. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, megadható a [Once every __ Sheets] beállítás.

Ha nem jelöli be ezt a jelölőnégyzetet, az rövidebb papíradagolást eredményez a nyomtatás után. Törölje a jelölőnégyzetet több oldal nyomtatásához és a margók csökkentéséhez.

Megjegyzés

Rövid papíradagolás esetén nyomja meg a FEED gombot, hogy elvágja a papírt az adagolás után. Ha a FEED gomb megnyomása nélkül vágja a papírt, lehet, hogy félbevágja a képeket.


Once every __ Sheets

Beállíthatja, hogy milyen gyakran alkalmazza a készülék a hosszú adagolást.

A készülék rövid adagolást alkalmaz, amíg kinyomtatja a megadott lapszámot, majd hosszabb papíradagolást alkalmaz.

A rendszer visszaállítja a számot, amikor a kinyomtatott oldalak száma eléri a tárolt értéket. A szám úgy is visszaállítható, ha bekapcsolja a készüléket, megnyomja a FEED gombot, módosítja a nyomtatási számot vagy megszakítja a nyomtatást.


(1. példa) Az érték beállítása 1:

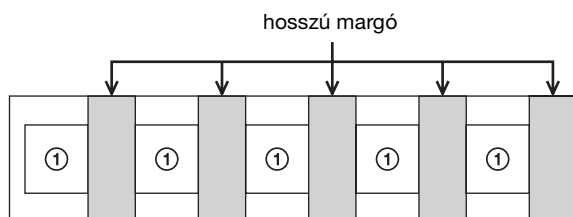

A bekarikázott számok számlálót jelentenek.


(2. példa) Az érték beállítása 3, hat oldalt nyomtatva:

- Nincs alaphelyzetbe állítás

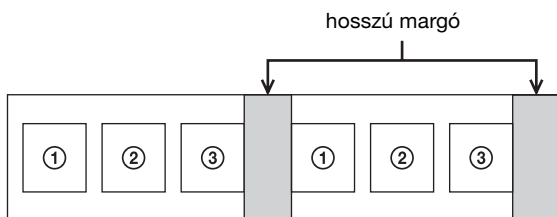

A bekarikázott számok számlálót jelentenek.

- Amikor a második oldal nyomtatása után alaphelyzetbe állítják a számlálót.

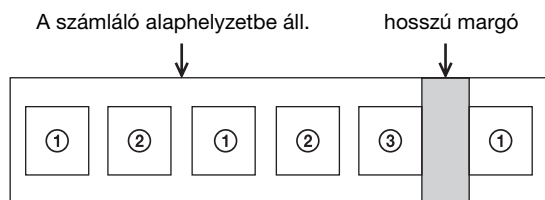

A bekarikázott számok számlálót jelentenek.

Print with Information

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a képek nyomtatása mellett a képek alá a [Density Adjust] lap előre beállított értékeit is ki szeretné nyomtatni. Mindegyik tárolt értéket a következő jelölésekkel nyomtatja ki.

Elem	Jelölés
GAMMA	GAM
Advanced	ADV
Dark	DARK
Light	LIGHT
Sharpness	SHARP

Orientation

Kiválaszthatja a képek tájolását. Amikor álló képet nyomtat, jelölje be a [Portrait] jelölőnégyzetet, illetve a fekvő típushoz jelölje be a [Landscape] jelölőnégyzetet. Jelölje be a [Reverse]

jelölőnégyzetet a 180 fokkal elforgatott kép kinyomtatásához.

Megjegyzés

Az alkalmazási szoftvertől függően változó lehet a nyomtatás eredménye. A kép(ek) tényleges kinyomtatásával ellenőrizheti az eredményt.

Load

Lehetővé teszi a mentett beállítások betöltését.

Save

Lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését.

About

Megjeleníti az illesztőprogram verziójával kapcsolatos információkat.


Restore Defaults

A [Main] fül használatával visszaállíthatja az összes beállítást az alapértékekre.

[Density Adjust] lap beállításai

Beállítja a kép sűrűségét. A beállítást a beállítási képernyő jobb felső sarkában lévő sűrűség grafikon és az átmenetsáv jelöli. A [GAMMA] előre beállított értékének hatása azonban nincs jelölve. A sűrűség grafikon függőleges tengelye fejezi ki a ténylegesen kinyomtatott kép sűrűségét, ahol a felső határ a fehér sűrűséghez van mérve, az alsó határ pedig a fekete sűrűséghez.

A vízszintes tengely fejezi ki a képadatokat, ahol a felső határ a fehér adatokhoz van mérve, az alsó határ pedig a fekete adatokhoz. Az átmenetsáv a tényleges sűrűséget jelzi a sűrűség grafikon függőleges tengelyének értéke helyett.

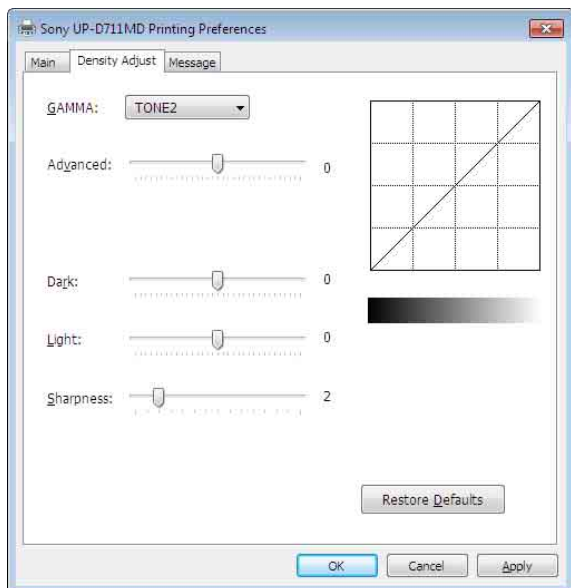

GAMMA

Megadja a féltónus átmenet intenzitását.

Elem	Magyarázat
TONE1	A normálnál világosabb
TONE2	Normál
TONE3	Éles átmenet
TONE4	Finom átmenet

Advanced

Húzza a csúszkát az átmenet szintjének kiválasztásához. Minél nagyobb a kiválasztott érték, annál sötétebb az átmenet. 65 érték közül választhatja ki az átmenetet. A normál érték 0. A beállítható tartomány -32 és +32 között van.

Dark

Húzza a csúszkát a kép sötét részeinek beállításához. Minél nagyobb a kiválasztott érték, annál sötétebbek a kép sötét részei. 129 érték közül választhatja ki az átmenetet. A normál érték 0. A beállítható tartomány -64 és +64 között van.

Light

Húzza a csúszkát a kép világos részeinek beállításához. Minél nagyobb a kiválasztott érték, annál világosabbak a kép világos részei. 129 érték közül választhatja ki az átmenetet. A normál érték 0. A beállítható tartomány -64 és +64 között van.

Sharpness

Húzza a csúszkát a kép körvonalának beállításához. Minél nagyobb a kiválasztott érték, annál élesebbek a kép szélei. 15 érték közül választhatja ki az átmenetet. A normál érték 2. A beállítható tartomány 0 és 14 között van.


Restore Defaults

A [Density Adjust] fül használatával visszaállítja az összes beállítást az alapértékekre.

[Message] lap beállításai

Megadja az üzenetet tartalmazó párbeszédpanellekkel kapcsolatos megjelenítési beállításokat.

Üzenetet tartalmazó párbeszédpanelek jelennek meg, amikor például UP-D711MD hiba történik. Az üzenetet tartalmazó párbeszédpanelek kétféle, normál és kicsi méretben jelennek meg. A normál méretű, üzenetet tartalmazó párbeszédpanel a nyomtató hibaállapotát és a hiba kezelésének útmutatását jeleníti meg. A kis méretű, üzenetet tartalmazó párbeszédpanel a hiba kezelésének (egymondatos) egyszerű útmutatását jeleníti meg. Az egyes üzenetekkel kapcsolatos részletekért lásd: „Üzenetlista” (7. oldal).

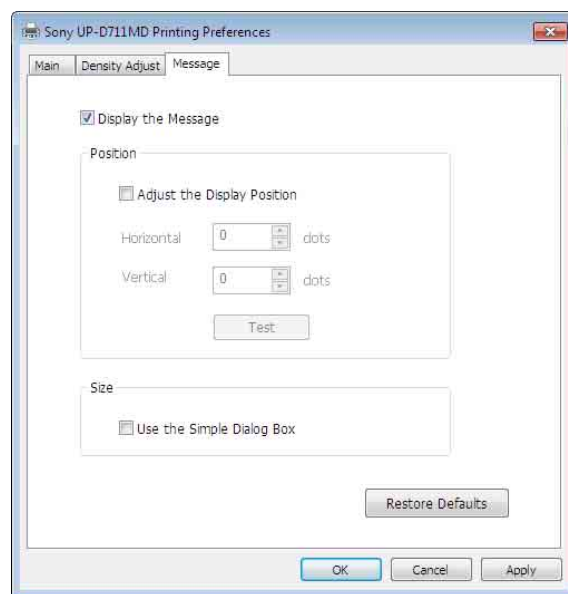

Display the Message

Be-, illetve kikapcsolhatja az üzenetet tartalmazó párbeszédpanelek megjelenítéséhez. Ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, nem adhatja meg a [Message] lap egyéb beállításait.

Adjust the display position

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet az üzenetet tartalmazó párbeszédpanelek megjelenítési helyének módosításához. Az üzenetet tartalmazó párbeszédpanel a [Horizontal] és [Vertical] beállításokban meghatározott helyen jelenik meg. Alapértelmezett beállítás: Az [Adjust the Display Position] jelölőnégyzet nincs bejelölve. (A normál méretű, üzenetet tartalmazó párbeszédpanel a képernyő közepén jelenik meg, a kis méretű párbeszédpanel pedig a képernyő bal felső sarkában.)

Horizontal, Vertical

Ezek a beállítások engedélyezettek, amikor az [Adjust the Display Position] jelölőnégyzet be van jelölve. Adja meg a megjelenítési hely koordinátáit (az üzenetet tartalmazó párbeszédpanel bal felső sarkának helyét).

A párbeszédpanel az itt megadott értékek által meghatározott helyen jelenik meg.

Test

Ellenőrizze, hogy az üzenetet tartalmazó párbeszédpanelek hol jelennek meg a képernyőn vagy kijelzőn. A teszt párbeszédpanel a [Horizontal] és [Vertical] beállításokban megadott helyen jelenik meg.

Use the Simple Dialog Box

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a kisebb méretű, üzenetet tartalmazó párbeszédpanelek megjelenítéséhez.

Restore Defaults

Az alapértelmezett állapotra állítja vissza a [Message] lap összes beállítását.

Üzenetlista

A következők a megjeleníthető üzenetek. Az alábbi üzeneteket követve javíthatja ki a problémákat. A problémák elhárításával kapcsolatban további részleteket a kézikönyv mellett az UP-D711MD használati útmutatójában talál.

Normál méretű, üzenetet tartalmazó párbeszédpanel	Kis méretű, üzenetet tartalmazó párbeszédpanel
No thermal paper. Please set the thermal paper. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Set thermal paper.
Now, Feeding. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Door is open. Please close the door. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Close door.
Now regulating the head temperature of the printer. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Mechanical error. Printing has been aborted. Please turn off the printer, then turn it back on and print again.	Restart printer.
Printer is not ready. Make sure the printer is plugged in to a power source and the printer cable is correctly connected. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Check printer.