

Printer Driver

Příručka nastavením

Tento příručka popisuje způsob nastavení ovladače tiskárny pro operační systémy Windows 7, Windows Vista a Windows XP.

Před použitím tohoto softwaru

Před použitím ovladače tiskárny si nezapomeňte přečíst soubor „Readme“.

UP-D711MD

Obsah

Konfigurace tiskárny	3
Nastavení karty [Main]	4
Nastavení karty [Density Adjust]	5
Nastavení karty [Message]	6
Seznam zpráv	7

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Ostatní názvy společností a výrobků uvedené v této příručce jsou také ochranné známky nebo registrované ochranné známky.

Obrazovky použité k popisu nastavení v tomto průvodci předpokládají, že tiskárna UP-D711MD se používá v prostředí Windows 7. Další podrobnosti o nastavení naleznete v návodu k obsluze k tiskárně v kombinaci s touto příručkou.

Konfigurace tiskárny

Před započítím tisku z aplikací můžete otevřít obrazovku nastavení UP-D711MD a nakonfigurovat různá nastavení.

Tiskárnu nastavujte v následujícím prostředí.

- Rozlišení obrazovky větší než SVGA (800 × 600)
- Výchozí velikost znaků na obrazovce.
 - Windows XP: Normal size (96 DPI)
 - Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more information
 - Windows 7: Smaller - 100% (default)

Obrazovku nastavení můžete otevřít jedním z následujících způsobů.

- V nabídce [Start] vyberte možnost [Devices and Printers] ([Control Panel] a pak možnost [Printer] v systému Windows Vista; [Printers and Faxes] v systému Windows XP). Vyberte ikonu tiskárny Sony UP-D711MD, pak klepněte pravým tlačítkem myši na volbu [Printing preferences] ([Select printing preferences] v panelu příkazů v systému Windows Vista; [Printing Preferences] v nabídce [File] v systému Windows XP). Zde provedená nastavení se běžně používají jako výchozí nastavení tiskárny UP-D711MD. Někdy však mohou být upřednostněna výchozí nastavení některých aplikací.
- V nabídce [File] aplikace klepněte na příkaz použitý k nastavování parametrů tiskárny. Nastavení provedená tímto způsobem jsou platná pouze do chvíle, než aplikaci zavřete.

Tento průvodce popisuje karty, které se zobrazují na obrazovce nastavení UP-D711MD.

Karta [Main]

Upravuje nastavení základních parametrů tisku, jako je velikost papíru, typ papíru, počet kopií apod.

Karta [Density Adjust]


Upravuje hustotu tisku při tisku obrazů.

Karta [Message]

Nastavuje zobrazení související s dialogovými okny zpráv.

Nastavení karty [Main]

Tato karta slouží k provádění základních nastavení tisku.

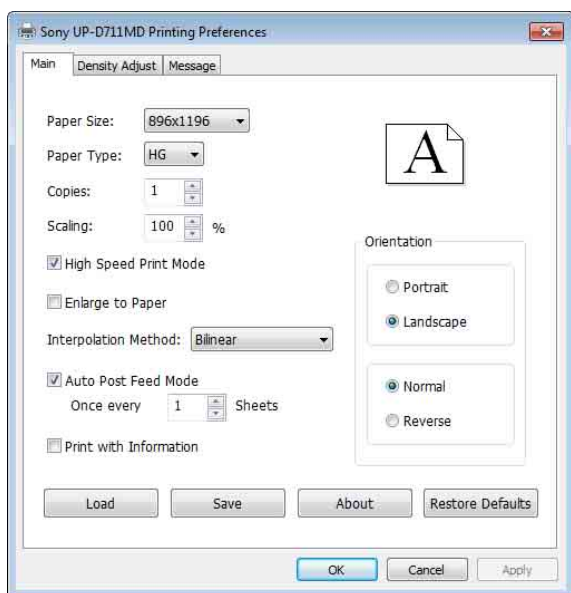

Paper Size

Zvolí velikost papíru.

Položka	Popis
596 × 896	50,4 mm × 75,7 mm
672 × 896	56,8 mm × 75,7 mm
896 × 896	75,7 mm × 75,7 mm
896 × 1196	75,7 mm × 101,1 mm
896 × 2688	75,7 mm × 227,1 mm

Paper Type

Zvolí typ vloženého papíru. Hodnoty nastavení pro typ papíru a velikost papíru jsou následující.

Paper type	Paper size
S	UPP-84S
HG	UPP-84HG

Copies

Zde můžete nastavit počet kopií (1 až 255).

Scaling

Nastavuje měřítko zvětšení nebo zmenšení (25 % až 400 %). Chcete-li změnit metodu interpolace, zvolte nastavení [Interpolation Method] níže. S touto funkcí nelze použít možnost [Enlarge to Paper].

High Speed Print Mode

Vybráním tohoto zaškrťovacího pole umožníte tisk ve vysokorychlostním režimu.

Enlarge to Paper

Pokud je velikost obrazu menší než velikost papíru, zvětší se obraz automaticky tak, aby se přizpůsobil velikosti papíru. Chcete-li změnit metodu interpolace, zvolte nastavení [Interpolation Method] níže. [Scaling] nelze s touto funkcí použít.

Interpolation Method

Zvolí metodu interpolace obrazu ([Bilinear], [Nearest Neighbor]).

Auto Post Feed Mode

Nastaví způsob zavádění papíru (krátké/dlouhé). Zaškrtnutím tohoto pole nastavíte delší zavádění papíru po tisku. Při delším zavádění bude papír odeslán do pozice pro oříznutí bez stisku tlačítka FEED.

Toto pole zaškrtněte, pokud chcete po tisku oříznout papír. Pokud budete tisknout více než jednu stránku, mezery mezi obrazy se zvětší. Pokud toto pole zaškrtnete, lze nastavit [Once every __ Sheets].

Pokud toto pole nezaškrtnete, nastavíte kratší zavádění papíru po tisku. Zrušte zaškrtnutí tohoto pole, pokud chcete tisknout více stránek a zmenšit mezery.

Poznámka

Pokud zvolíte krátké zavádění papíru, stiskněte po tisku tlačítko FEED, abyste mohli papír oříznout. Pokud papír oříznete, aniž byste stiskli tlačítko FEED, může se stát, že bude obraz přeříznut v polovině.


Once every __ Sheets

Zde můžete nastavit, jak často bude používáno dlouhé zavádění.

Krátké zavedení je používáno, dokud není vytištěn stanovený počet stránek, potom je použito dlouhé zavedení papíru.


Počítadlo je vynulováno, když počet vytištěných stránek dosáhne nastavené hodnoty. Počítadlo bude také vynulováno, pokud zapnete napájení, stisknete tlačítko FEED, změníte počet stránek nebo zrušíte tisk.

(Příklad 1) Hodnota je nastavena na 1:

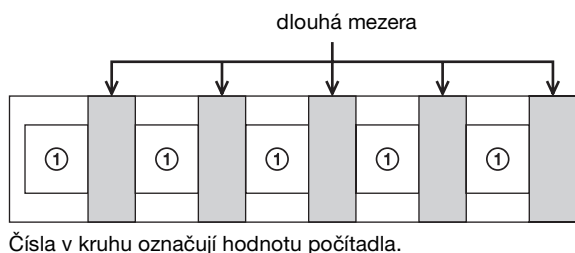


(Příklad 2) Hodnota je nastavena na 3, tisk šesti stránek:

- Bez vynulování

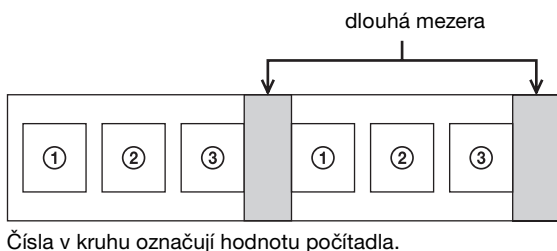

- S vynulování po vytisknutí druhé stránky.

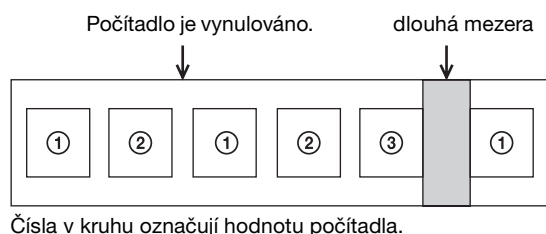

Print with Information

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete vytisknout obrazy zároveň s informacemi o nastavených hodnotách z tabulky [Density Adjust] pod těmito obrazy.

Jednotlivé nastavené hodnoty se vytisknou s následujícími popisy.

Položka	Popis
GAMMA	GAM
Advanced	ADV
Dark	DARK
Light	LIGHT
Sharpness	SHARP

Orientation

Nastaví orientaci obrazů. Když tisknete obrazy na výšku, zaškrtněte pole [Portrait], když tisknete obrazy na šířku, zaškrtněte pole [Landscape]. Zaškrtněte pole [Reverse], pokud chcete tisknout obrazy otočené o 180 stupňů.

Poznámka

Výsledek tisku se může lišit v závislosti na aplikaci. Výsledek zkontrolujte vytisknutím zkušebního obrazu (zkušebních obrazů).

Load

Načte uložená nastavení.

Save

Uloží aktuální nastavení.

About

Zobrazí informace o verzi ovladače.


Restore Defaults

Stisknutím karty [Main] obnovíte všechna nastavení na výchozí hodnoty.

Nastavení karty [Density Adjust]

Upravuje hustotu tisku obrazu. Úprava se odrazí v grafu hustoty v pravé horní části obrazovky nastavení a v liště přechodů. Účinek přednastavené hodnoty [GAMMA] se zde však neodrazí. Svislá osa grafu hustoty vyjadřuje hustotu tisknutého obrazu, kde horní mez označuje hustotu bílé barvy a spodní mez označuje hustotu černé barvy.

Vodorovná osa popisuje obrazová data, kde horní mez označuje bílá data a spodní mez označuje černá data. Lišta přechodů popisuje skutečnou hustotu namísto hodnoty svislé osy grafu hustoty.

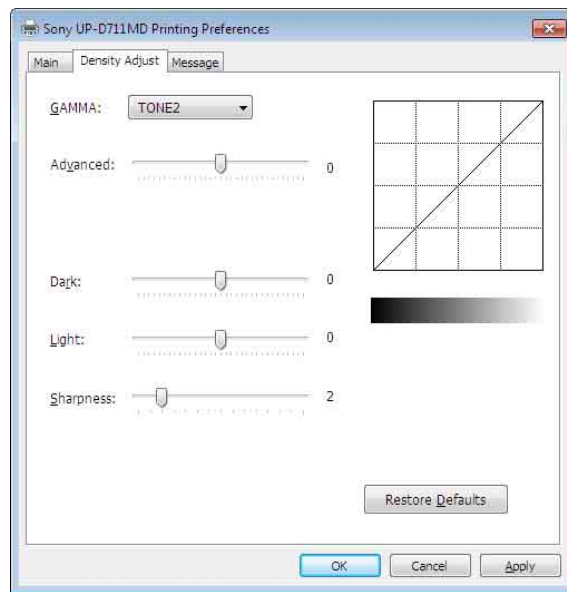

GAMMA

Volí intenzitu přechodů středních tónů.

Položka	Vysvětlení
TONE1	Světlejší než běžný
TONE2	Běžný
TONE3	Tvrde přechody
TONE4	Měkké přechody

Advanced

Přetáhnutím posuvníku zvolíte úroveň přechodů. Čím bude zvolená hodnota vyšší, tím budou přechody tmavší. Přechody můžete nastavit na jednu z 65 hodnot. Běžná hodnota je 0. Hodnotu můžete nastavit od -32 do +32.

Dark

Přetáhněte posuvník pro úpravu tmavých částí obrazu. Čím je zvolená hodnota vyšší, tím budou tmavé části obrazu tmavší. Přechody můžete nastavit na jednu ze 129 hodnot. Běžná hodnota je 0. Hodnotu můžete nastavit od -64 do +64.

Light

Přetáhněte posuvník pro úpravu světlých částí obrazu. Čím je zvolená hodnota vyšší, tím budou světlé části obrazu jasnější. Přechody můžete nastavit na jednu ze 129 hodnot. Běžná hodnota je 0. Hodnotu můžete nastavit od -64 do +64.

Sharpness

Přetáhněte posuvník pro úpravu obrysů obrazu. Čím je zvolená hodnota vyšší, tím budou okraje obrazu ostřejší. Přechody můžete nastavit na jednu z 15 hodnot. Běžná hodnota je 2. Hodnotu můžete nastavit od 0 do 14.

Restore Defaults

Stisknutím karty [Density Adjust] obnovíte všechna nastavení na výchozí hodnoty.


Nastavení karty [Message]

Nastavuje zobrazení související s dialogovými okny zpráv.

Dialogová okna se zprávami se zobrazují například při výskytu chyby tiskárny UP-D711MD.

Dialogová okna se zobrazují ve dvou velikostech - standardní a malé. Standardní dialogové okno zprávy zobrazuje stav chyby tiskárny a pokyny, jak lze chybu odstranit. Malé dialogové okno zprávy zobrazuje (jednu větu) jednoduchých pokynů, jak chybu odstranit.

Podrobnosti jednotlivých zpráv naleznete v části „Seznam zpráv“ (strana 7).

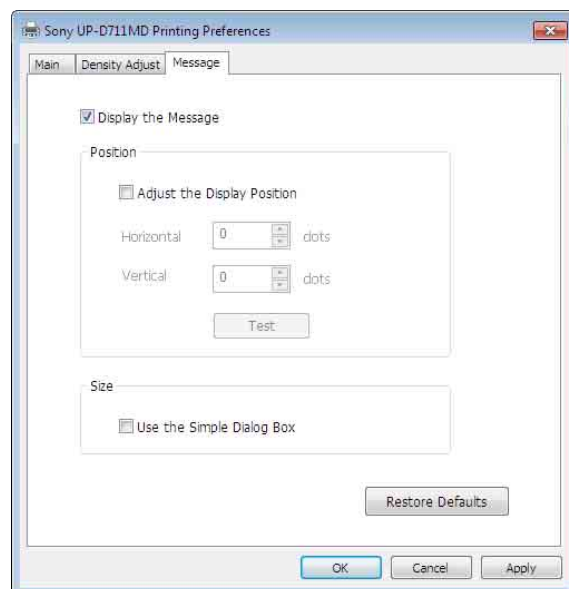

Display the Message

Umožňuje ON/OFF zobrazování dialogových oken. Pokud toto pole není zaškrtnuto, nelze na kartě [Message] provádět jiná nastavení.

Adjust the display position

Zaškrtnutím tohoto pole můžete upravit polohu zobrazení dialogových oken se zprávami. Dialogové okno se zprávou se zobrazuje v poloze definované hodnotou určenou v položkách [Horizontal] a [Vertical].

Výchozí nastavení: Pole [Adjust the Display Position] není zaškrtnuto. (Standardní dialogové okno se zprávou se zobrazí uprostřed obrazovky a malé dialogové okno se zprávou se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.)

Horizontal, Vertical

Tato nastavení jsou povolena, když zaškrtnete pole [Adjust the Display Position]. Zadejte souřadnice polohy zobrazení (poloha levého horního rohu dialogového okna se zprávou).

Dialogové okno se zprávou se zobrazí v poloze definované zadanou hodnotou.

Test

Umožňuje zkontrolovat polohu, ve které se dialogová okna se zprávami zobrazí na obrazovce. V poloze definované nastavenými parametry [Horizontal] a [Vertical] se zobrazí zkušební dialogové okno.

Use the Simple Dialog Box

Zaškrtnutím tohoto pole můžete zobrazit dialogová okna se zprávami o malé velikosti.

Restore Defaults

Obnoví všechna nastavení na kartě [Message] na výchozí hodnoty.

Seznam zpráv

Tyto zprávy se mohou zobrazit. Případné problémy můžete napravit s využitím zpráv uvedených níže. Další informace o řešení problémů naleznete v návodu k použití pro UP-D711MD v kombinaci s touto příručkou.

Standardní dialogové okno se zprávou	Malé dialogové okno se zprávou
No thermal paper. Please set the thermal paper. To continue printing, click "Retry". Windows will automatically retry after 5 seconds.	Set thermal paper.
Now, Feeding. Please wait. To continue printing, click "Retry". Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Door is open. Please close the door. To continue printing, click "Retry". Windows will automatically retry after 5 seconds.	Close door.
Now regulating the head temperature of the printer. Please wait. To continue printing, click "Retry". Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Mechanical error. Printing has been aborted. Please turn off the printer, then turn it back on and print again.	Restart printer.
Printer is not ready. Make sure the printer is plugged in to a power source and the printer cable is correctly connected. To continue printing, click "Retry". Windows will automatically retry after 5 seconds.	Check printer.