

Printer Driver

Navodila za nastavitev

V teh navodilih je opisana nastavitev gonilnika tiskalnika v operacijskih sistemih Windows 7, Windows Vista in Windows XP.

Pred uporabo te programske opreme

Pred uporabo tega gonilnika tiskalnika preberite datoteko »Readme«.

UP-D711MD

Kazalo vsebine

Konfiguriranje tiskalnika	3
Nastavitve na jezičku [Main]	4
Nastavitve na jezičku [Density Adjust]	5
Nastavitve na jezičku [Message]	6
Seznam sporočil	7

Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation. Druga imena družb in izdelkov, omenjena v teh navodilih, so prav tako blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke.

Zaslonski prikazi, uporabljeni pri opisovanju nastavitev v teh navodilih, veljajo ob predpostavki, da tiskalnik UP-D711MD uporabljate v okolju Windows 7. Več podrobnosti v zvezi z nastavitvami preberite v navodilih za uporabo tiskalnika, ki ga uporabljate skupaj s temi navodili.

Konfiguriranje tiskalnika

Pred tiskanjem iz računalniškega programa lahko odprete okno z nastavitvami tiskalnika UP-D711MD in določite želene nastavitve.

Tiskalnik lahko nastavite v naslednjih okoljih.

- Kjer je ločljivost prikaza večja od SVGA (800 × 600)
- Kjer je velikost znakov na zaslonu privzeta.
Windows XP: Normal size (96 DPI)
Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more information
Windows 7: Smaller - 100% (default)

Okno z nastavitvami lahko odprete na enega izmed naslednjih načinov:

- V meniju [Start] izberite [Devices and Printers] (v operacijskem sistemu Windows Vista izberite meni [Control Panel] in nato [Printer]; v operacijskem sistemu Windows XP izberite meni [Printers and Faxes]). Izberite ikono tiskalnika Sony UP-D711MD, nato z desno tipko miške kliknite [Printing preferences] (v operacijskem sistemu Windows Vista v ukazni vrstici izberite [Select printing preferences]; v operacijskem sistemu Windows XP v meniju [File] izberite [Printing preferences]). Nastavitve, ki jih določite tukaj, se uporabijo kot privzete nastavitve tiskalnika UP-D711MD. V nekaterih primerih pa imajo prednost privzete nastavitve določene programske opreme.
- V meniju [File] v programu, ki ga uporabljate, kliknite ukaz za določanje nastavitev tiskalnika. Nastavitve, določene na tak način, veljajo le, dokler programa ne zaprete.

V teh navodilih so opisani jeziki, prikazani v oknu z nastavitvami tiskalnika UP-D711MD.

Jeziček [Main]

Določite osnovne nastavitve tiskanja, kot so velikost papirja, vrsta papirja, število natisnjenih izvodov idr.

Jeziček [Density Adjust]


Prilagodi gostoto natisnjenih izvodov.

Jeziček [Message]

Določi nastavitve prikaza pogovornih oken s sporočili.

Nastavitve na jezičku [Main]

Na tem jezičku določate osnovne nastavitve tiskanja.

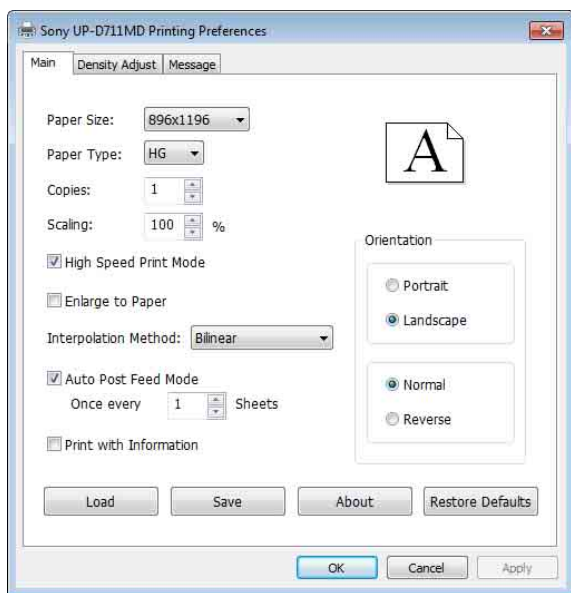

Paper Size

Izberite velikost papirja.

Postavka	Opis
596 × 896	50,4 mm × 75,7 mm
672 × 896	56,8 mm × 75,7 mm
896 × 896	75,7 mm × 75,7 mm
896 × 1196	75,7 mm × 101,1 mm
896 × 2688	75,7 mm × 227,1 mm

Paper Type

Izbere nastavljeno vrsto papirja. Vrednosti nastavitve vrste in velikosti papirja so naslednje.

Paper type	Paper size
S	UPP-84S
HG	UPP-84HG

Copies

Izberite število natisnjenih izpisov (od 1 do 255).

Scaling

Izberite merilo povečave ali zmanjšanja izpisov (od 25 % do 400 %). Če želite spremeniti način barvne razpršitve, izberite spodnjo nastavev [Interpolation Method]. S to funkcijo ni mogoče uporabiti možnosti [Enlarge to Paper].

High Speed Print Mode

Če želite omogočiti hitro tiskanje, potrdite to potrditveno polje.

Enlarge to Paper

Če je slika manjša od papirja, bo slika samodejno povečana, da bo ustrezala velikosti papirja. Če želite spremeniti način barvne razpršitve, izberite spodnjo nastavev [Interpolation Method]. S to funkcijo ni mogoče uporabiti možnosti [Scaling].

Interpolation Method

Izberite metodo interpolacije slike ([Bilinear], [Nearest Neighbor]).

Auto Post Feed Mode

Nastavi podajanje papirja (dolgo/kratko). Če to polje potrdite, se bo po tiskanju podalo več papirja. Če se bo podalo več papirja, bo papir poslan na mesto razreza brez držanja gumba FEED. Potrdite to polje, če želite po tiskanju razrezati papir. Če se natisne več strani, se bodo robovi med slikami povečali. Če potrdite to polje, lahko nastavite možnost [Once every __ Sheets]. Če tega polja ne potrdite, se bo po tiskanju podalo manj papirja. To polje počistite, kadar tiskate več strani in če želite zmanjšati robove.


Opomba

Če je podajanje papirja krajše, papir po podajanju razrežete tako, da pritisnete gumb FEED. Če se papir razreže, ne da bi pritisnili gumb FEED, se lahko zgodi, da bo slika prerezana na pol.

Once every __ Sheets


Nastavite, kako pogosto naj se podajajo dolge strani. Papir se bo podajal kratko, dokler ne bo natisnjenih toliko strani, kot ste jih nastavili, nato pa se bo podalo več papirja. Ko število natisnjenih strani doseže vnaprej nastavljeno vrednost, se števec ponastavi. Števec se bo ponastavil tudi, ko izklopite napravo, pritisnete gumb FEED, spremenite številko natisnjenih izpisov ali prekličete tiskanje.

(1. primer) Nastavljena je vrednost 1:

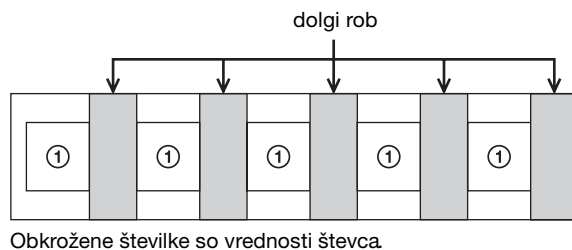


(2. primer) Nastavljena je vrednost 3, tiskanje šestih strani:

- Brez ponastavitve

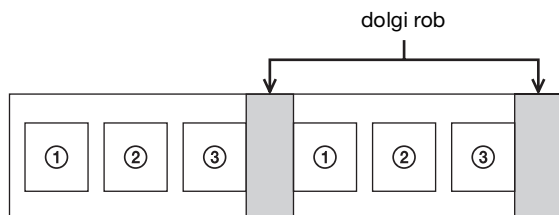

Obkrožene številke so vrednosti števca.

- Ponastavitev po tiskanju druge strani.

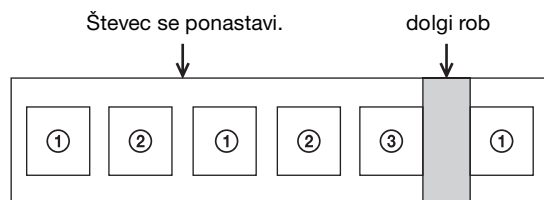

Obkrožene številke so vrednosti števca.

Print with Information

Potrdite to polje, če želite tiskati slike, pod njimi pa natisniti vnaprej določene informacije na jezičku [Density Adjust].

Vsaka vnaprej določena vrednost se natisne z naslednjimi oznakami.

Postavka	Oznaka
GAMMA	GAM
Advanced	ADV
Dark	DARK
Light	LIGHT
Sharpness	SHARP

Orientation

Izbere usmerjenost slik. Če tiskate pokončno sliko, potrdite polje [Portrait], za ležeče slike pa potrdite polje [Landscape]. Če je slika zasukana za 180 stopinj, potrdite polje [Reverse].

Opomba

Rezultat tiskanja je odvisen od uporabljenega programa. Dejansko kakovost tiskanja preverite, tako da natisnete sliko(e).

Load

S to nastavitvijo lahko naložite shranjene nastavitve.

Save

S to nastavitvijo lahko shranite trenutne nastavitve.

About

Prikaže informacije o različici gonilnika.


Restore Defaults

Vsem nastavitvam na jezičku [Main] povrne privzete vrednosti.

Nastavitve na jezičku [Density Adjust]

Prilagodi gostoto slike. Prilagoditev je prikazana v grafikonu gostote v zgornjem desnem kotu zaslona z nastavitvami ter v vrstici stopnjevanja. Učinek vnaprej nastavljene vrednosti [GAMMA] ni prikazan.

Na navpični osi grafikona gostote je prikazana gostota natisnjene slike, pri čemer je zgornja meja gostota bele, spodnja meja pa gostota črne barve. Na vodoravni osi so prikazani podatki o sliki, pri čemer so na zgornji meji podatki o belini, na spodnji pa podatki o črni barvi. Vrstica stopnjevanja prikazuje dejansko gostoto namesto vrednosti navpične osi grafikona gostote.

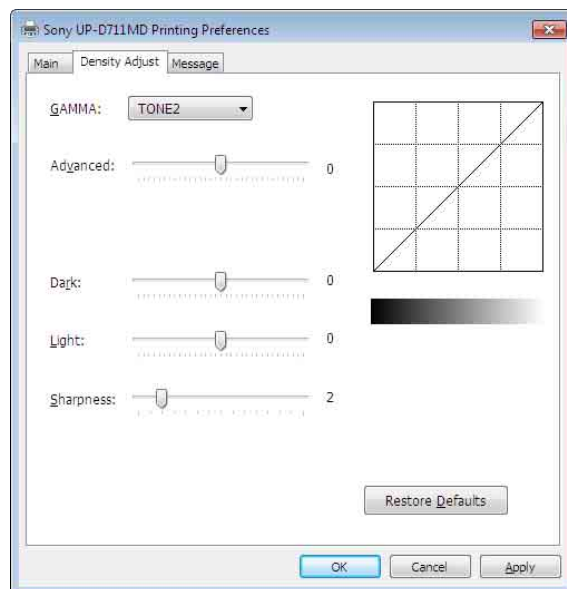

GAMMA

Izbere gostoto poltonskega stopnjevanja.

Postavka	Razlaga
TONE1	Svetlejšje od običajnega
TONE2	Običajno
TONE3	Grobo stopnjevanje
TONE4	Mehko stopnjevanje

Advanced

Povlecite drsnik in izberite raven stopnjevanja. Višja izbrana vrednost pomeni temnejše stopnjevanje. Za stopnjevanje imate na voljo 65 ravni. Standardna vrednost je 0. Nastavitveni razpon je od -32 do +32.

Dark

Povlecite drsnik, da prilagodite temne dele slike. Višja vrednost pomeni temnejše temne dele slike. Za stopnjevanje imate na voljo 129 ravni. Standardna vrednost je 0. Nastavitveni razpon je od -64 do +64.

Light

Povlecite drsnik, da prilagodite svetle dele slike. Višja vrednost pomeni svetlejša svetle dele slike. Za stopnjevanje imate na voljo 129 ravni. Standardna vrednost je 0. Nastavitveni razpon je od -64 do +64.

Sharpness

Povlecite drsnik, da prilagodite oris slike. Višja vrednost pomeni ostrejša robova slike. Za stopnjevanje imate na voljo 15 ravni. Standardna vrednost je 2. Nastavitveni razpon je od 0 do 14.

Restore Defaults

Vsem nastavitvam na jezičku [Density Adjust] povrne privzete vrednosti.


Nastavitve na jezičku [Message]

Določi nastavitve prikaza pogovornih oken s sporočili.

Sporočilno pogovorno okno se prikaže, če na primer v tiskalniku UP-D711MD pride do napake.

Pogovorna okna so dveh velikosti: standardna in majhna. Standardno sporočilno pogovorno okno vsebuje stanje napake tiskalnika in navodila za njeno odpravo. Majhno sporočilno pogovorno okno vsebuje preprosta navodila (v enem stavku) za odpravo napake.

Za podrobnosti posameznega sporočila glejte »Seznam sporočil« (stran 7).

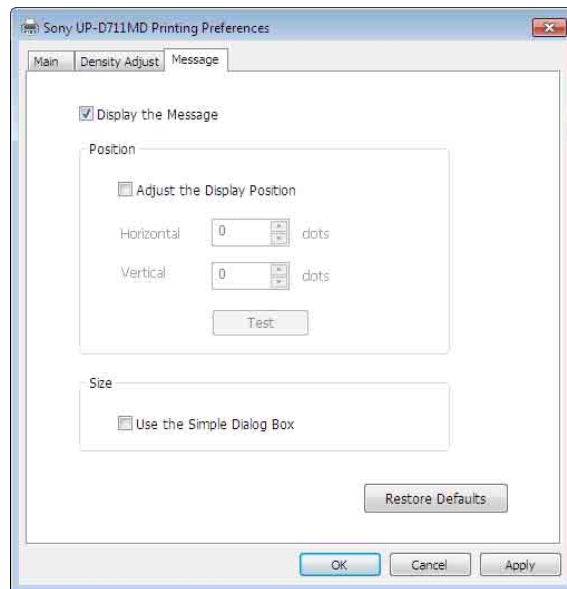

Display the Message

Z ON/OFF določite, ali naj se sporočilno pogovorno okno prikaže ali ne.

Če ste izbrali OFF, drugih nastavitvev na jezičku [Message] ni mogoče nastavljati.

Adjust the display position

To potrditveno polje potrdite, če želite določiti položaj prikaza sporočilnih pogovornih oken. Sporočilno pogovorno okno se prikaže na mestu, ki ga določata vrednosti nastavitvev [Horizontal] in [Vertical].

Privzeta nastavitvev: potrditveno polje [Adjust the Display Position] ni potrjeno. (Standardno sporočilno pogovorno okno se prikaže na sredini zaslona, majhno sporočilno pogovorno okno pa v zgornjem levem kotu zaslona.)

Horizontal, Vertical

Ti nastavitvi sta omogočeni, ko je potrditveno polje [Adjust the Display Position] potrjeno. Vnesite koordinati prikaza na zaslonu (položaj levega zgornjega vogala sporočilnega pogovornega okna). Sporočilno pogovorno okno se prikaže na mestu, ki ga določata tukaj podani vrednosti.

Test

Preverite položaj na zaslonu, kjer se bodo prikazovala sporočilna pogovorna okna. Preizkusno pogovorno okno se bo prikazalo na mestu, ki ga določata nastavitvi [Horizontal] in [Vertical].

Use the Simple Dialog Box

To potrditveno polje izberite, če želite uporabljati majhna pogovorna okna.

Restore Defaults

Vsem nastavitvam na jeziku [Message] povrne privzete vrednosti.

Seznam sporočil

Prikažejo se naslednja sporočila. Težave odpravite glede na spodnja sporočila. Za dodatne podrobnosti o odpravljanju težav glejte navodila za uporabo izdelka UP-D711MD in ta priročnik.

Standardno sporočilno pogovorno okno	Majhno sporočilno pogovorno okno
No thermal paper. Please set the thermal paper. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Set thermal paper.
Now, Feeding. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Door is open. Please close the door. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Close door.
Now regulating the head temperature of the printer. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Mechanical error. Printing has been aborted. Please turn off the printer, then turn it back on and print again.	Restart printer.
Printer is not ready. Make sure the printer is plugged in to a power source and the printer cable is correctly connected. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Check printer.