

Printer Driver

Guida per la configurazione

Questa guida descrive come impostare il driver della stampante per Windows 7, Windows Vista e Windows XP.

Prima di usare il software

Prima di usare il driver della stampante, leggere il file "Readme".

UP-D711MD

Sommario

Configurazione della stampante	3
Impostazioni scheda [Main]	4
Impostazioni scheda [Density Adjust]	5
Impostazioni scheda [Message]	6
Elenco messaggi	7

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Anche gli altri nomi di aziende e di prodotti citati in questa guida sono marchi e marchi registrati.

Le schermate usate in questa guida per descrivere l'impostazione presuppongono che la stampante UP-D711MD sia usata in ambiente Windows 7. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare, in unione a questo manuale, le istruzioni per l'utilizzo della stampante.

Configurazione della stampante

Prima di avviare la stampa dalle applicazioni, è possibile aprire la schermata di impostazioni di UP-D711MD e configurare le varie opzioni.

Impostare la stampante nel seguente ambiente.

- Risoluzione dello schermo superiore a SVGA (800 × 600)
- La dimensione dei caratteri sullo schermo è quella predefinita.
Windows XP: Normal size (96 DPI)
Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more information
Windows 7: Smaller - 100% (default)

È possibile aprire la schermata delle impostazioni usando uno dei metodi seguenti.

- Nel menu [Start], selezionare [Devices and Printers] ([Control Panel], quindi [Printer] in Windows Vista o [Printers and Faxes] in Windows XP). Selezionare l'icona della stampante Sony UP-D711MD, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare [Printing preferences] ([Select printing preferences] dalla barra di comando in Windows Vista o [Printing preferences] dal menu [File] in Windows XP). Le impostazioni configurate qui sono normalmente utilizzate come predefinite per la stampante UP-D711MD. Tuttavia, le impostazioni predefinite di alcune applicazioni possono essere prioritarie.
- Nel menu [File] dell'applicazione, fare clic sul comando utilizzato per effettuare le impostazioni della stampante. Le impostazioni effettuate in questo modo restano valide solo fino alla chiusura dell'applicazione.

Questa guida descrive le schede visualizzate nella schermata di impostazione di UP-D711MD.

Scheda [Main]

Consente di regolare le impostazioni di base relative alla stampa, ad esempio, formato e tipo di carta, numero di copie stampate e così via.

Scheda [Density Adjust]


Consente di regolare la densità delle immagini stampate.

Scheda [Message]

Consente di definire le impostazioni di visualizzazione relative alle finestre di dialogo dei messaggi.

Impostazioni scheda [Main]

Questa scheda è usata per effettuare impostazioni di stampa di base.

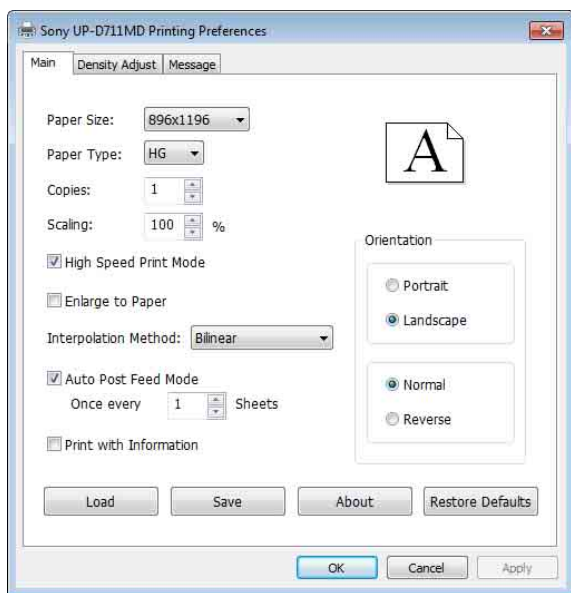

Paper Size

Consente di selezionare il formato della carta.

Elemento	Descrizione
596 × 896	50,4 mm × 75,7 mm
672 × 896	56,8 mm × 75,7 mm
896 × 896	75,7 mm × 75,7 mm
896 × 1196	75,7 mm × 101,1 mm
896 × 2688	75,7 mm × 227,1 mm

Paper Type

Consente di selezionare il tipo di carta impostato. I valori di impostazione del tipo e del formato della carta sono i seguenti.

Paper type	Paper size
S	UPP-84S
HG	UPP-84HG

Copies

Consente di selezionare il numero di copie da stampare (da 1 a 255).

Scaling

Consente di selezionare il fattore di ingrandimento o riduzione (da 25% a 400%). Per modificare il metodo di interpolazione, selezionare una impostazione di [Interpolation Method] di seguito. [Enlarge to Paper] non è utilizzabile con questa funzione.

High Speed Print Mode

Selezionare questa casella di controllo per stampare in modalità ad alta velocità.

Enlarge to Paper

Se la dimensione dell'immagine è inferiore a quella della carta, l'immagine viene ingrandita automaticamente per adattarsi alle dimensioni del foglio. Per modificare il metodo di interpolazione, selezionare una impostazione di [Interpolation Method] di seguito. [Scaling] non è utilizzabile con questa funzione.

Interpolation Method

Consente di selezionare il metodo di interpolazione per l'immagine ([Bilinear], [Nearest Neighbor]).

Auto Post Feed Mode

Consente di impostare l'alimentazione della carta (breve/lunga). Selezionando questa casella si imposta un'alimentazione più lunga della carta dopo la stampa. Con un'alimentazione più lunga, la carta avanza alla posizione di taglio senza premere il pulsante FEED. Selezionare questa casella per tagliare la carta dopo la stampa. Se vengono stampate più immagini, i margini fra le immagini sono incrementati. Se questa casella è selezionata, è possibile impostare [Once every __ Sheets].

Se non si seleziona questa casella, si imposta un'alimentazione più breve della carta dopo la stampa. Deselezionare questa casella per stampare più pagine e ridurre i margini.

Nota

Con alimentazione carta breve, premere il pulsante FEED per tagliare la carta dopo l'alimentazione. Se la carta viene tagliata senza premere il pulsante FEED, è possibile che l'immagine risulti tagliata a metà.


Once every __ Sheets

È possibile impostare il valore per la frequenza con la quale vengono alimentate pagine lunghe.

Viene applicata l'alimentazione breve finché il numero di pagine definito non viene stampato, quindi viene applicata l'alimentazione lunga.

Il conteggio viene reimpostato quando il numero di pagine stampate raggiunge il valore preimpostato. Il conteggio viene inoltre reimpostato all'accensione, quando il pulsante FEED viene premuto, il numero di stampe viene modificato o la stampa viene annullata.


(Esempio 1) Valore impostato su 1:

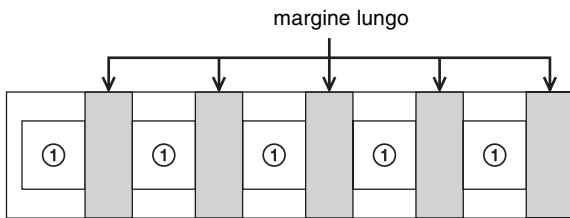

I numeri cerchiati rappresentano il contatore.


(Esempio 2) Valore impostato su 3, stampa di sei pagine:

- Quando non reimpostato

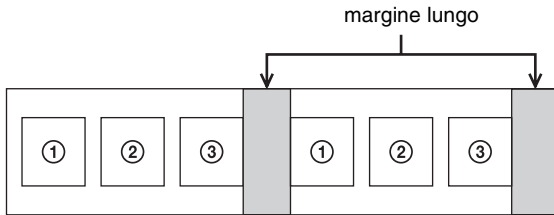

I numeri cerchiati rappresentano il contatore.

- Quando reimpostato dopo la stampa della seconda pagina.

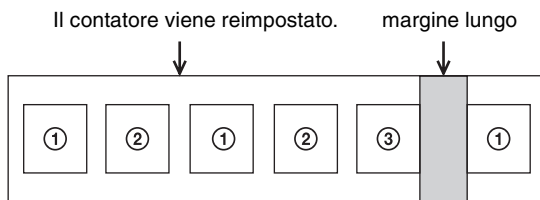

I numeri cerchiati rappresentano il contatore.

Print with Information

Selezionare questa casella per stampare immagini e per stampare il valore preimpostato della scheda [Density Adjust] sotto tali immagini.

Ciascun valore preimpostato viene stampato con le seguenti annotazioni.

Elemento	Annotazione
GAMMA	GAM
Advanced	ADV
Dark	DARK
Light	LIGHT
Sharpness	SHARP

Orientation

Consente di selezionare l'orientamento delle immagini. Quando si stampa un'immagine in verticale, selezionare la casella [Portrait] oppure, per l'orientamento orizzontale, selezionare la casella [Landscape]. Per stampare un'immagine ruotata di 180 gradi, selezionare la casella [Reverse].

Nota

I risultati della stampa possono differire in funzione dell'applicazione software. Verificare i risultati stampando una o più immagini.

Load

Consente di caricare le impostazioni salvate.

Save

Consente di salvare le impostazioni correnti.

About

Visualizza le informazioni sulla versione del driver.


Restore Defaults

Premendo la scheda [Main] si ripristinano tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

Impostazioni scheda [Density Adjust]

Consente di regolare la densità dell'immagine. La regolazione è riportata nel grafico della densità in alto a destra della schermata di impostazione e nella barra della gradazione. Tuttavia, l'effetto del valore preimpostato di [GAMMA] non è riportato. L'asse verticale del grafico della densità indica la densità dell'immagine effettivamente stampata, dove il limite superiore è correlato alla densità del bianco e il limite inferiore a quella del nero.

L'asse orizzontale indica i dati immagine, dove il limite superiore è correlato ai dati del bianco e il limite inferiore a quelli del nero. La barra della gradazione indica la densità effettiva anziché il valore dell'asse verticale del grafico della densità.

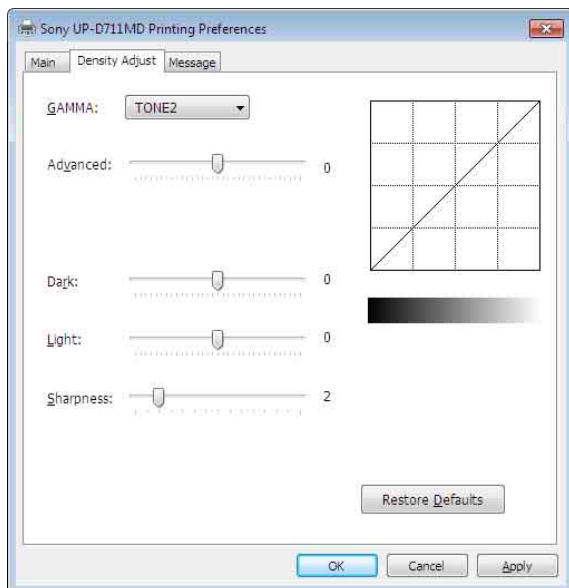

GAMMA

Consente di selezionare l'intensità della gradazione dei mezzitoni.

Elemento	Spiegazione
TONE1	Più chiaro dello standard
TONE2	Standard
TONE3	Gradazione dura
TONE4	Gradazione sfumata

Advanced

Trascinare il dispositivo di scorrimento per selezionare il livello di gradazione. Maggiore è il valore selezionato, più scura sarà la gradazione. È possibile scegliere fra 65 valori di regolazione della gradazione. Il valore standard è 0. La gamma di regolazione è compresa fra -32 e +32.

Dark

Trascinare il dispositivo di scorrimento per regolare le parti scure dell'immagine. Maggiore è il valore selezionato, più scure saranno le parti scure dell'immagine. È possibile scegliere fra 129 valori di regolazione della gradazione. Il valore standard è 0. La gamma di regolazione è compresa fra -64 e +64.

Light

Trascinare il dispositivo di scorrimento per regolare le parti chiare dell'immagine. Maggiore è il valore selezionato, più brillanti saranno le parti chiare dell'immagine. È possibile scegliere fra 129 valori di regolazione della gradazione. Il valore standard è 0. La gamma di regolazione è compresa fra -64 e +64.

Sharpness

Trascinare il dispositivo di scorrimento per regolare il contorno dell'immagine. Maggiore è il valore selezionato, più nitidi saranno i contorni dell'immagine. È possibile scegliere fra 15 valori di regolazione della gradazione. Il valore standard è 2. La gamma di regolazione è compresa fra 0 e 14.

Restore Defaults


Premendo la scheda [Density Adjust] si ripristinano tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

Impostazioni scheda [Message]

Consente di definire le impostazioni di visualizzazione relative alle finestre di dialogo dei messaggi.

Le finestre di dialogo dei messaggi vengono visualizzate quando si verifica, ad esempio, l'errore UP-D711MD. Sono disponibili una finestra di dialogo di dimensioni standard e una di dimensioni ridotte. La finestra di dialogo standard per i messaggi visualizza lo stato di errore della stampante, nonché istruzioni per correggerlo. La finestra di dialogo ridotta per i messaggi visualizza semplici istruzioni (una frase) per correggere l'errore.

Per i dettagli di ciascun messaggio, vedere "Elenco messaggi" (pagina 7).

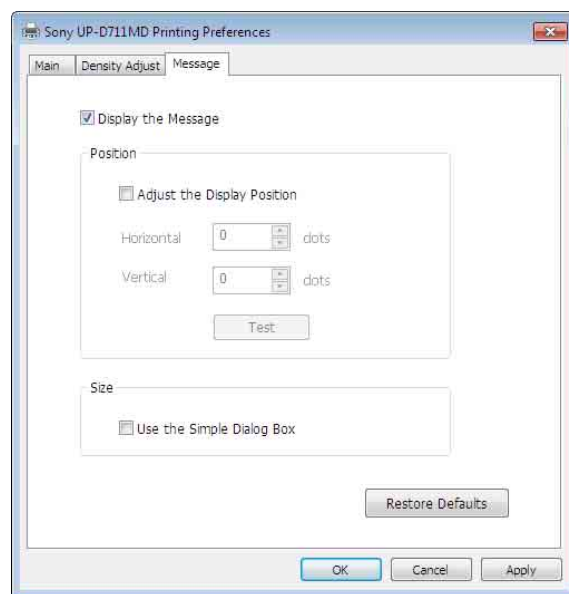

Display the Message

ON/OFF per mostrare la finestra di dialogo dei messaggi.

Se la casella di controllo è OFF, non sarà possibile definire le altre impostazioni nella scheda [Message].

Adjust the display position

Selezionare questa casella di controllo per regolare la posizione di visualizzazione delle finestre di dialogo dei messaggi. La finestra di dialogo dei messaggi viene visualizzata nella posizione definita dai valori specificati nelle impostazioni [Horizontal] e [Vertical]. Impostazione predefinita: non è presente un segno di spunta in [Adjust the Display Position]. (La finestra di dialogo standard per i messaggi viene visualizzata al centro del display e quella ridotta viene visualizzata in alto a sinistra.)

Horizontal, Vertical

Queste impostazioni sono attivate quando la casella di controllo [Adjust the Display Position] è selezionata. Immettere le coordinate per la posizione di visualizzazione (posizione dell'angolo superiore sinistro della finestra di dialogo dei messaggi). La finestra di dialogo dei messaggi viene visualizzata nella posizione definita dai valori qui specificati.

Test

Consente di verificare la posizione nella quale le finestre di dialogo dei messaggi vengono visualizzate sul display o sullo schermo. Una finestra di dialogo di prova per i messaggi viene visualizzata nella posizione definita dalle impostazioni [Horizontal] e [Vertical].

Use the Simple Dialog Box

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare finestre di dialogo dei messaggi di dimensioni ridotte.

Restore Defaults

Consente di ripristinare tutte le impostazioni nella scheda [Message] ai valori predefiniti.

Elenco messaggi

I messaggi disponibili sono i seguenti. Risolvere eventuali problemi utilizzando i seguenti messaggi. Per ulteriori informazioni su come risolvere i problemi, consultare le istruzioni di funzionamento per UP-D711MD in combinazione con questo manuale.

Finestra di dialogo standard per i messaggi	Finestra di dialogo ridotta per i messaggi
No thermal paper. Please set the thermal paper. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Set thermal paper.
Now, Feeding. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Door is open. Please close the door. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Close door.
Now regulating the head temperature of the printer. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Mechanical error. Printing has been aborted. Please turn off the printer, then turn it back on and print again.	Restart printer.
Printer is not ready. Make sure the printer is plugged in to a power source and the printer cable is correctly connected. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Check printer.