

Printer Driver

Installationsanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Installation des Druckertreibers für Windows 7, Windows Vista und Windows XP.

Vor der Verwendung dieser Software

Lesen Sie vor der Verwendung des Druckertreibers unbedingt die „Readme“-Datei.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Voraussetzungen für die Betriebsumgebung | 3 |
| Informationen über dieses Dokument | 3 |
| Installation des Druckertreibers unter | |
| Windows 7 | 4 |
| Vor der Installation | 4 |
| Installation unter Windows 7 | 4 |
| Deinstallation des Druckertreibers unter | |
| Windows 7 | 6 |
| Installation des Druckertreibers unter | |
| Windows Vista | 7 |
| Vor der Installation | 7 |
| Installation unter Windows Vista | 7 |
| Deinstallation des Druckertreibers unter | |
| Windows Vista | 10 |
| Installation des Druckertreibers unter | |
| Windows XP | 11 |
| Vor der Installation | 11 |
| Installation unter Windows XP | 12 |
| Deinstallation des Druckertreibers unter | |
| Windows XP | 14 |

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Andere in dieser Anleitung erwähnte Firmennamen und Produktnamen sind ebenfalls Marken und eingetragene Marken.

Voraussetzungen für die Betriebsumgebung

Zur Verwendung des Druckertreibers muss die Computerumgebung die folgenden Bedingungen erfüllen

- Computer
Erfüllt die Spezifikationen für USB 2.0^{*1}
- Betriebssystem
Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional/Home Edition
- USB-Treiber
Hergestellt von Microsoft Corporation^{*2}
- USB
USB-zertifiziertes Kabel

^{*1} Die Kompatibilität mit allen USB-Geräten, USB-Erweiterungsplatinen oder Erweiterungskarten kann nicht garantiert werden.

^{*2} Der Betrieb mit anderen USB 2.0-Treibern wird nicht garantiert.

Arbeiten Sie mit den folgenden Bildschirmeinstellungen.

- Anzeigeauflösung höher als SVGA (800 × 600)
- Textgröße auf dem Bildschirm in Standardgröße.
Windows XP: Normal size (96 DPI)
Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more information
Windows 7: Smaller - 100% (default)

Hinweis

Wenn der Drucker verbunden und eingeschaltet ist, darf der Computer nicht in den Ruhemodus, Standby oder Energiesparmodus eintreten. Anderenfalls kann der einwandfreie Druckerbetrieb nicht gewährleistet werden.

Informationen über dieses Dokument

Bei der Erläuterung der Steuerungsvorgänge in diesem Dokument wird auf Windows XP oder Windows Vista in der klassischen Ansicht Bezug genommen. Um zur klassischen Ansicht zu wechseln, klicken Sie auf [Start], wählen Sie [Control Panel] und klicken Sie in den links im Bildschirm angezeigten „Control Panel Properties“ auf [Switch to Classic View].

Die in dieser Anleitung dargestellten Bildschirmmeldungen gehen davon aus, dass ein UP-D711MD-Drucker angeschlossen ist. Wenn Sie einen Drucker eines anderen Modells benutzen, ersetzen Sie beim Lesen dieser Anleitung jede Erwähnung von „UP-D711MD“ durch den Modellnamen Ihres Druckers.

Diese Anleitung erläutert die Installation und die Deinstallation des Druckertreibers für Computer mit den folgenden Betriebssystemen: Microsoft Windows 7, Windows Vista und Windows XP. Befolgen Sie die Anweisungen für Ihr Betriebssystem.

Prüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Druckers und lesen Sie die Installationsanleitung des passenden Druckers.

Ziehen Sie zu allen nicht durch diese Anleitung abgedeckten Fragen die Bedienungsanleitung Ihres Druckers zu Rate, um die Installation durchzuführen.

Installation des Druckertreibers unter Windows 7

Vor der Installation

Hinweis

Verbinden Sie den Drucker erst dann mit Ihrem Computer, wenn Sie den Druckertreiber installiert haben. Wird der Drucker vorher angeschlossen, wird er vom Computer möglicherweise nicht erkannt.

Versionsaktualisierungen

Wenn Sie einen Druckertreiber aktualisieren, entfernen Sie den älteren Druckertreiber, bevor Sie mit der Installation beginnen.


Einzelheiten zur Vorgehensweise zum Entfernen des Druckertreibers finden Sie in Abschnitt „Deinstallation des Druckertreibers unter Windows 7“ dieser Anleitung.

Wenn die Installation fehlschlägt oder abgebrochen wird, starten Sie Ihren Computer vor dem nächsten Installationsversuch neu.

Installation unter Windows 7


- 1 Schalten Sie den Computer ein und melden Sie sich als Systemadministrator oder ein Mitglied der Administratorgruppe an.
- 2 Führen Sie „Setup.exe“ aus, das Sie im Ordner „PrinterDriver\Win7“ auf der mitgelieferten CD-ROM finden (oder von der Sony-Website herunterladen können).

Das Dialogfeld [User Account Control] erscheint.

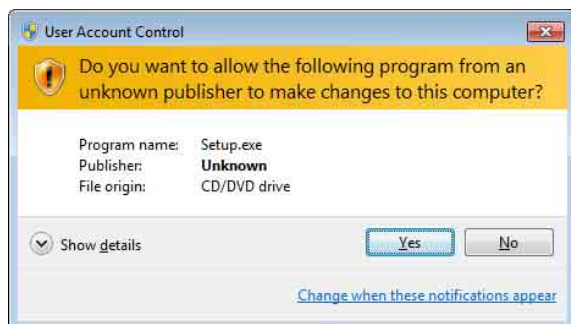

- 3 Klicken Sie auf [Yes].

Das folgende Dialogfeld erscheint.

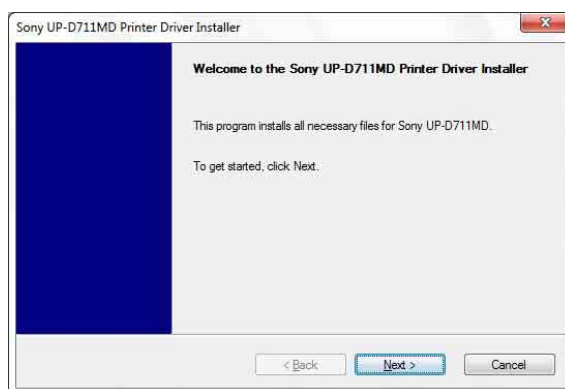


- 4 Klicken Sie auf [Next].

Die Endanwender-Lizenzvereinbarung erscheint.




- 5 Wählen Sie [I accept the terms of the license agreement] und klicken Sie dann auf [Next].

Das folgende Dialogfeld erscheint.

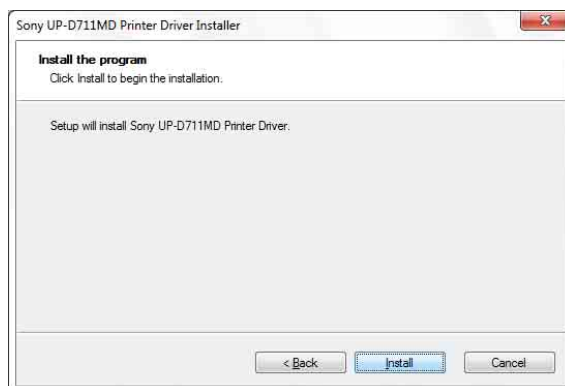

6 Klicken Sie auf [Install].


Die Installation beginnt. Der Installationsfortschritt wird während der Installation im Dialogfeld angezeigt.

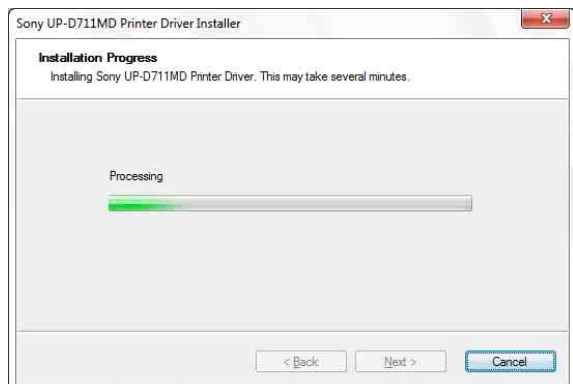

Wenn während der Installation das folgende Dialogfeld erscheint, klicken Sie auf [Install this driver software anyway].



Wenn die Installation beendet ist, erscheint das folgende Dialogfeld.

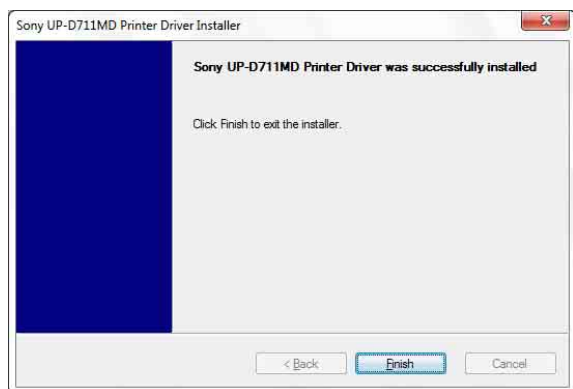

7 Klicken Sie auf [Finish].

8 Verbinden Sie den Drucker mit dem Computer.

Damit ist die Installation des Druckertreibers abgeschlossen.


Sie können auf [Start] klicken, [Control Panel] und anschließend [View devices and printers] auswählen, um zu überprüfen, ob der Drucker vom Computer erkannt wird.

Wenn der Computer den Drucker erkennt, sollte unter [Printers and Faxes] ein Druckersymbol erscheinen, wie unten dargestellt.



Wenn Ihr Computer den Drucker nicht erkennt

Wenn Sie den Drucker vor dem Installieren des Druckertreibers an den Computer angeschlossen haben, kann der Drucker unter [Unspecified] anstelle von [Printers and Faxes] aufgeführt werden. Wenn dies geschieht, wird der Drucker vom Computer nicht erkannt und kann nicht benutzt werden.

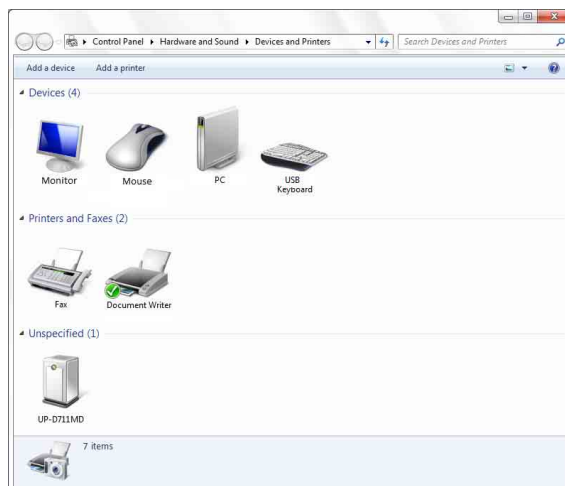


Aktualisieren Sie den Druckertreiber in diesen Fällen wie folgt.


- 1 Trennen Sie das Kabel zwischen dem Drucker und dem Computer.
- 2 Wenn Sie den Druckertreiber noch nicht installiert haben, führen Sie die Schritte unter „Installation unter Windows 7“ aus, um ihn jetzt zu installieren.
- 3 Verbinden Sie den Drucker mit dem Computer.

- 4 Klicken Sie auf [Start], wählen Sie [Control Panel] und anschließend [View devices and printers].
- 5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den UP-D711MD unter [Unspecified] und wählen Sie dann [Troubleshoot].

Das folgende Dialogfeld erscheint.

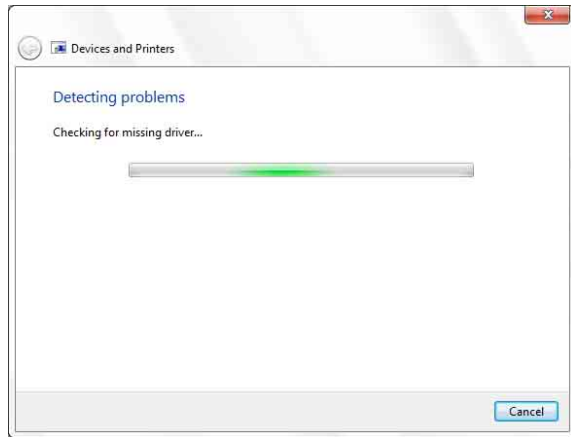


Der Bildschirm verändert sich nach einigen Momenten wie folgt.

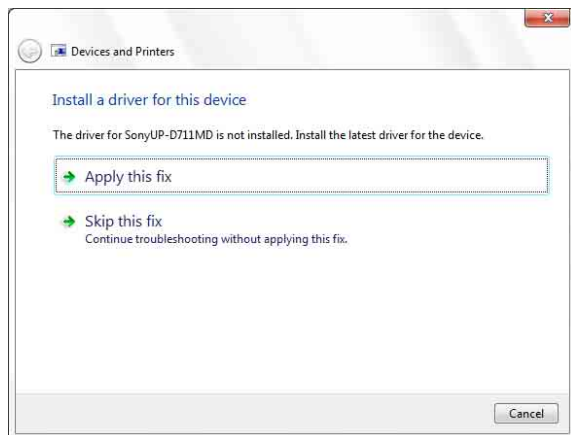


- 6 Klicken Sie auf [Apply this fix].

Das folgende Dialogfeld erscheint.

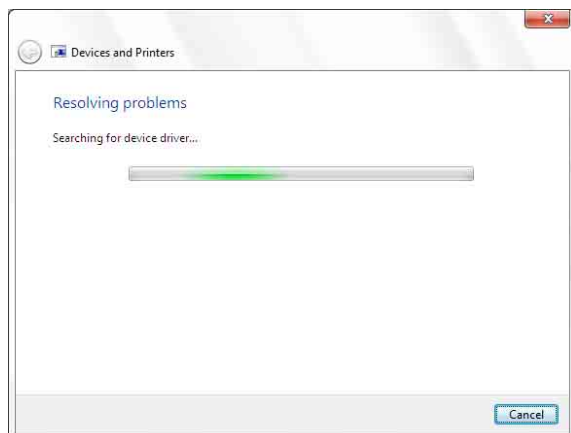

Der Bildschirm verändert sich nach einigen Momenten wie folgt.

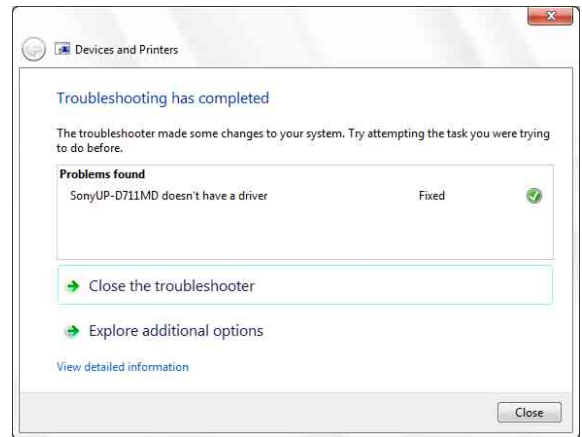

- 7 Klicken Sie auf [Close].

Damit ist die Aktualisierung des Druckertreibers abgeschlossen.


Deinstallation des Druckertreibers unter Windows 7

Hinweis

Bevor Sie mit den Deinstallationsvorgang beginnen, darf der Drucker nicht mit dem Computer verbunden werden, und der Computer sollte ausgeschaltet werden. Wenn das Dialogfeld [Found New Hardware] erscheint, trennen Sie das Kabel zwischen Drucker und Computer, klicken Sie auf [Cancel] und schließen Sie das Dialogfeld. Starten Sie dann den Deinstallationsvorgang erneut.

- 1 Schalten Sie den Drucker aus und trennen Sie das Kabel zwischen Drucker und Computer.
- 2 Schalten Sie den Computer ein und melden Sie sich als Systemadministrator oder ein Mitglied der Administratorgruppe an.

- 3 Klicken Sie auf [Start], wählen Sie [Control Panel] und anschließend [Uninstall a program].

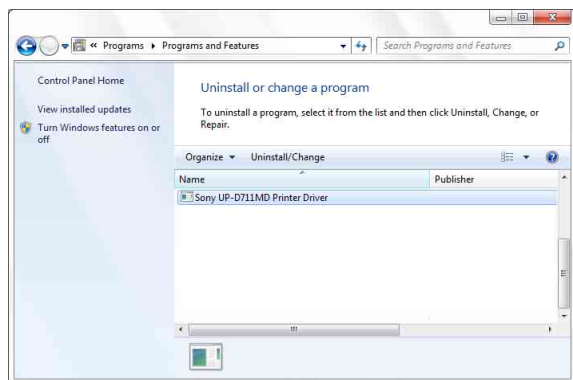

- 4 Wählen Sie den Drucker aus der Liste [Uninstall or change a program] aus und klicken Sie dann auf [Uninstall/Change].


Das folgende Dialogfeld erscheint.



- 5 Klicken Sie auf [Yes].

Die Deinstallation beginnt.

Wenn die Deinstallation beendet ist, erscheint das folgende Dialogfeld.

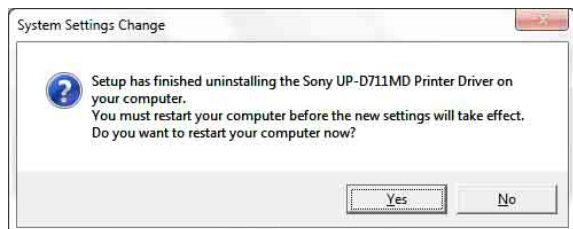

- 6 Klicken Sie auf [Yes].

Der Computer startet sich neu.

Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers abgeschlossen.

Installation des Druckertreibers unter Windows Vista

Vor der Installation

Versionsaktualisierungen

Wenn Sie einen Druckertreiber aktualisieren, entfernen Sie den älteren Druckertreiber, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Einzelheiten zur Vorgehensweise zum Entfernen des Druckertreibers finden Sie in Abschnitt „Deinstallation des Druckertreibers unter Windows Vista“ dieser Anleitung.

Wenn die Installation fehlschlägt oder abgebrochen wird, starten Sie Ihren Computer vor dem nächsten Installationsversuch neu.

Installation unter Windows Vista

- 1 Verbinden Sie den Drucker (nur einen), für den der Treiber auf dem Computer installiert werden soll.
- 2 Schalten Sie den angeschlossenen Drucker ein.
- 3 Schalten Sie den Computer ein und melden Sie sich als Systemadministrator oder ein Mitglied der Administratorgruppe an.

Das Dialogfeld [Found New Hardware] erscheint.



Falls die Meldung „Device driver software was not successfully installed“ anstelle des Dialogfelds [Found New Hardware] erscheint, ziehen Sie das USB-Kabel ab und stecken Sie es wieder ein. Sollte das Dialogfeld [Found New Hardware] auch

weiterhin nicht erscheinen, führen Sie die unten aufgeführten Schritte aus, während der Drucker, dessen Druckertreiber installiert werden soll, eingeschaltet und mit dem Computer verbunden ist. (Dabei sollten keine anderen USB-Drucker oder bereits installierten Drucker angeschlossen sein.)


- ① Klicken Sie auf [Start] und wählen Sie [Control Panel].
- ② Doppelklicken Sie auf [System].
- ③ Klicken Sie auf [Device Manager].
Das Dialogfeld [User Account Control] erscheint.
- ④ Klicken Sie auf [Continue].
Das Fenster [Device Manager] erscheint.
- ⑤ Klicken Sie auf [+] links von [Universal Serial Bus controllers].
- ⑥ Wählen Sie [USB Printing support] und dann [Uninstall] aus dem Menü [Action].
- ⑦ Starten Sie den Computer neu.
Das Dialogfeld [Found New Hardware] erscheint.

- 4** Klicken Sie auf [Locate and install driver software (recommended)].


Das folgende Dialogfeld erscheint.



- 5** Klicken Sie auf [Continue].
- 6** Klicken Sie auf [Don't search online], falls das folgende Dialogfeld erscheint.

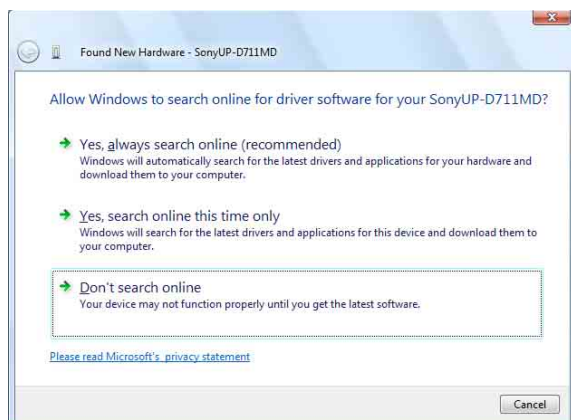

Der Bildschirm verändert sich wie folgt.

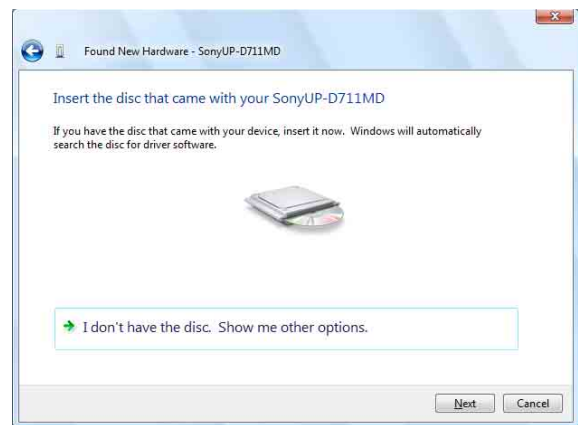


Ab hier ist die Vorgehensweise unterschiedlich, je nachdem, ob Sie die mitgelieferte CD-ROM verwenden oder nicht (also den Treiber online heruntergeladen haben).

Vorgehensweise mit der mitgelieferten CD-ROM

- 7** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Der Bildschirm verändert sich wie folgt.

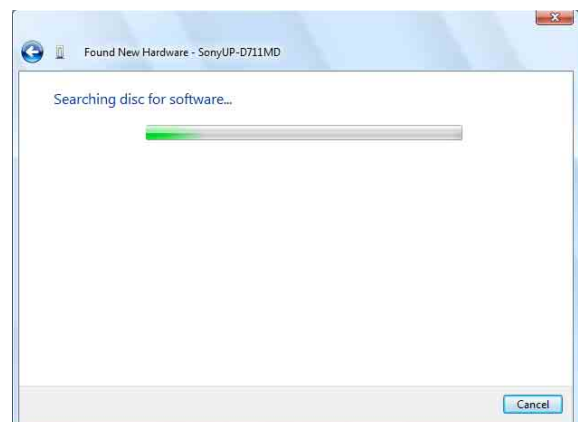


Wenn die Suche nach Software beendet ist, erscheint das folgende Dialogfeld.



- 8 Klicken Sie auf [Install this driver software anyway].

Das Dialogfeld schließt sich und das Dialogfeld [Found New Hardware] erscheint erneut.

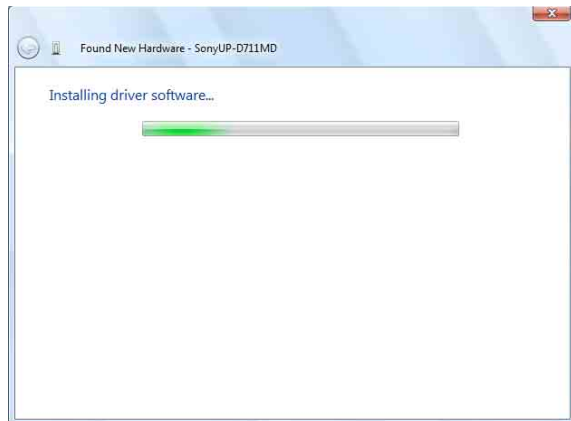

Wenn die Dateien kopiert wurden, ändert sich der Bildschirm wie folgt.




- 9 Klicken Sie auf [Close].

Damit ist die Installation des Druckertreibers abgeschlossen.

Vorgehensweise ohne die mitgelieferte CD-ROM


- 7 Klicken Sie auf [I don't have the disc. Show me other options].

Der Bildschirm verändert sich wie folgt.

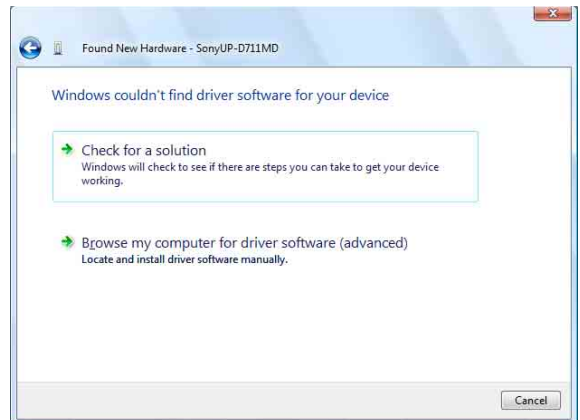

- 8 Klicken Sie auf [Browse my computer for driver software (advanced)].

Der Bildschirm verändert sich wie folgt.

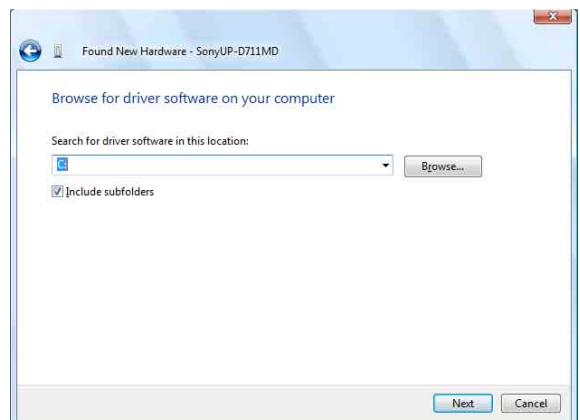

- 9 Klicken Sie auf [Browse], um das Dialogfeld [Browse For Folder] zu öffnen. Geben Sie den Ordner an, in den die heruntergeladene Datei extrahiert wurde, und klicken Sie auf [OK], um das Dialogfeld [Browse For Folder] zu schließen.


10 Klicken Sie auf [Next].

Das folgende Dialogfeld erscheint.




11 Klicken Sie auf [Install this driver software anyway].

Das Dialogfeld schließt sich und das Dialogfeld [Found New Hardware] erscheint erneut.

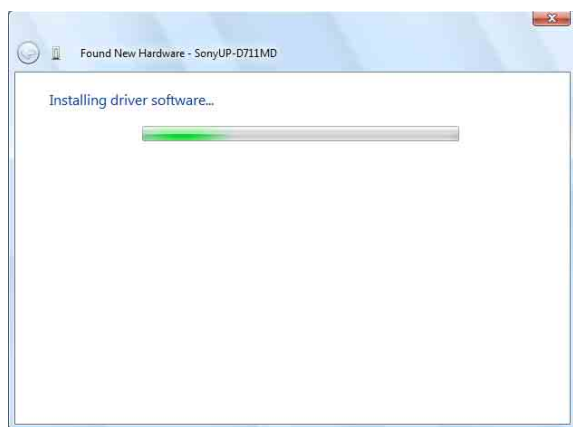

Wenn die Dateien kopiert wurden, ändert sich der Bildschirm wie folgt.

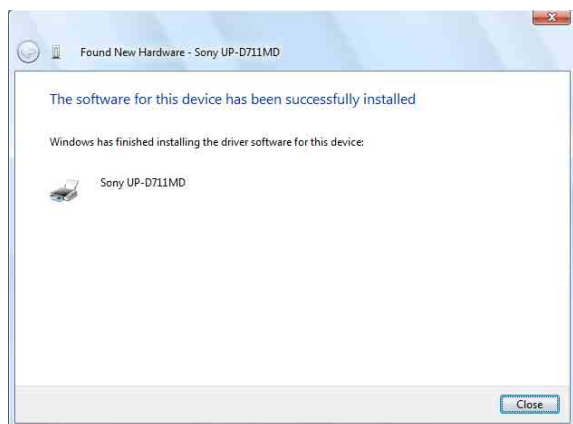

12 Klicken Sie auf [Close].

Damit ist die Installation des Druckertreibers abgeschlossen.


Deinstallation des Druckertreibers unter Windows Vista

Dieser Abschnitt beschreibt, wie sich der Druckertreiber entfernen lässt.


Hinweis

Bevor Sie mit den Deinstallationsvorgang beginnen, darf der Drucker nicht mit dem Computer verbunden werden, und der Computer sollte ausgeschaltet werden. Wenn das Dialogfeld [Found New Hardware] erscheint, trennen Sie das Kabel zwischen Computer und Drucker, klicken Sie auf allen Bildschirmen auf [Cancel], um das Dialogfeld zu schließen, und beginnen Sie den Deinstallationsvorgang erneut.

- 1 Schalten Sie den Drucker aus und trennen Sie das Kabel zwischen Computer und Drucker.
- 2 Schalten Sie den Computer ein und melden Sie sich als Systemadministrator oder ein Mitglied der Administratorgruppe an.
- 3 Klicken Sie auf [Start], wählen Sie [Control Panel] und anschließend [Programs and Features].

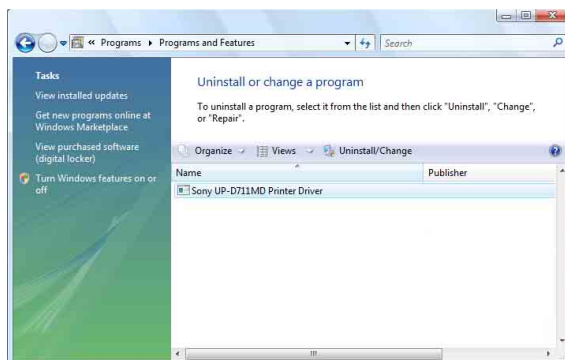

- 4 Wählen Sie den Drucker aus der Liste [Uninstall or change a program] aus und klicken Sie dann auf [Uninstall/Change].

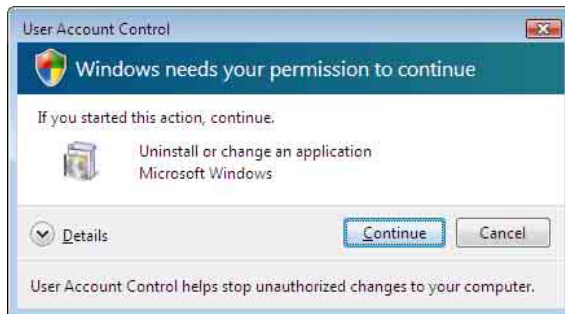


- 5 Klicken Sie auf [Continue].



- 6 Klicken Sie auf [Yes].

Wenn der Druckertreiber deinstalliert wurde, erscheint das folgende Dialogfeld.

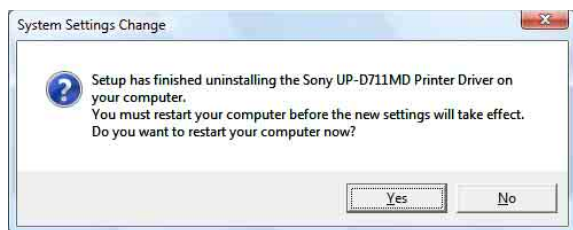

- 7 Klicken Sie auf [Yes].

Der Computer startet sich neu.

Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers abgeschlossen.

Installation des Druckertreibers unter Windows XP

Vor der Installation

Informationen zu Versionsaktualisierungen

Wenn Sie einen Druckertreiber aktualisieren, entfernen Sie den älteren Druckertreiber, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Einzelheiten zur Vorgehensweise zum Entfernen des Druckertreibers finden Sie in Abschnitt „Deinstallation des Druckertreibers unter Windows XP“ dieser Anleitung.

Wenn die Installation fehlschlägt oder abgebrochen wird, starten Sie Ihren Computer vor dem nächsten Installationsversuch neu.

Hinweis

Starten Sie den Computer unbedingt neu, wenn Sie den Druckertreiber installieren oder deinstallieren. Wenn Sie keinen Neustart durchführen, kann es zu einem instabilen Betrieb kommen.

Informationen zu Treibersignaturoptionen

Der vorliegende Drucker hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden; wenn Sie den Treiber installieren, kann deshalb eine Fehlermeldung erscheinen, die Sie daran hindert, den Treiber zu installieren.

Treffen Sie im Dialogfeld [Driver Signing Options] die Auswahl [Ignore] oder [Warn] im Gruppenfenster [What action do you want Windows to take?]. Wenn Sie [Block] auswählen, können Sie den Druckertreiber nicht installieren.



Öffnen Sie das Dialogfeld [Driver Signing Options] wie folgt:

- ① Klicken Sie im Menü [Start] auf [Control Panel].
- ② Doppelklicken Sie auf [System].
Das Dialogfeld [System Properties] öffnet sich.
- ③ Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware].
- ④ Klicken Sie auf die Schaltfläche [Driver Signing].

Alle Erläuterungen in dieser Anleitung gehen davon aus, dass die Einstellung dieses Dialogfelds [Warn] lautet.

Installation unter Windows XP

- 1** Verbinden Sie den Drucker (nur einen), für den der Treiber auf dem Computer installiert werden soll.
- 2** Schalten Sie den angeschlossenen Drucker ein.
- 3** Schalten Sie den Computer ein und melden Sie sich als Systemadministrator oder ein Mitglied der Administratorgruppe an.

Das Dialogfeld [Found New Hardware Wizard] erscheint.




- Wenn das gleiche Dialogfeld [Found New Hardware Wizard] wie in Schritt 3 erscheint, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Wenn ein anderes Dialogfeld [Found New Hardware Wizard] als in Schritt 3 erscheint, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
- Wenn das Dialogfeld [Found New Hardware Wizard] nicht erscheint, führen Sie die folgenden Schritte aus, während der zu installierende Drucker eingeschaltet und mit dem Computer verbunden ist. (Dabei sollten keine anderen USB-Drucker oder bereits installierten Drucker angeschlossen sein.)
 - ① Klicken Sie im Menü [Start] auf [Control Panel].
 - ② Doppelklicken Sie auf [System].
Das Dialogfeld [System Properties] öffnet sich.
 - ③ Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware].
 - ④ Klicken Sie auf die Schaltfläche [Device Manager].
Das Fenster [Device Manager] öffnet sich.
 - ⑤ Klicken Sie auf [+] links von [Universal Serial Bus controllers].
 - ⑥ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [USB Printing support] und öffnen Sie [Properties]. Prüfen Sie, dass der Modellname des gegenwärtig angeschlossenen Druckers für [Location] ausgewählt ist und treffen Sie im Menü [Action] die Auswahl [Uninstall].
 - ⑦ Starten Sie den Computer neu.
Wenn Windows XP startet, öffnet sich das Dialogfeld [Found New Hardware Wizard].

- 4** Klicken Sie auf [No, not this time] und dann auf [Next].



- 5 Wählen Sie [Install from a list or specific location (Advanced)] und klicken Sie auf die Schaltfläche [Next].

Der folgende Bildschirm öffnet sich.

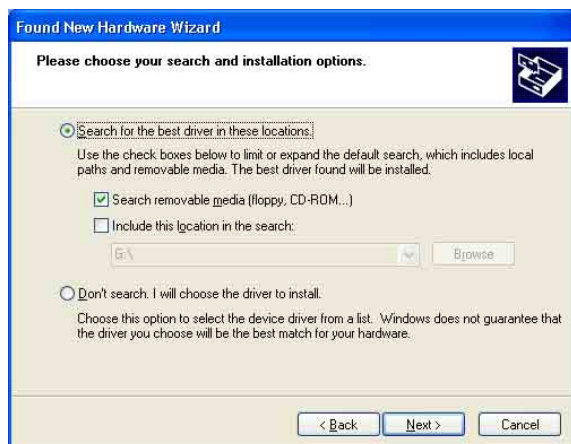

- 6 Geben Sie den Speicherort der Druckertreiber-Installationsdatei an.

Die Vorgehensweise ist unterschiedlich, je nachdem, ob Sie die mitgelieferte CD-ROM verwenden oder nicht (also den Treiber online heruntergeladen haben).

Vorgehensweise mit der mitgelieferten CD-ROM

Wählen Sie [Search for the best driver in these locations] und [Search removable media (floppy, CD-ROM...)] und legen Sie dann die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Vorgehensweise ohne die mitgelieferte CD-ROM

Wählen Sie [Search for the best driver in these locations] und [Include this location in the search] und klicken Sie dann auf [Browse], um das Dialogfeld [Browse For Folder] zu öffnen. Geben Sie den Ordner an, in den die heruntergeladene Datei extrahiert wurde, und klicken Sie auf [OK], um das Dialogfeld [Browse For Folder] zu schließen.

- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Next].

Das folgende Dialogfeld öffnet sich.



- 8 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Continue Anyway].

Wenn die Dateien kopiert wurden, öffnet sich der folgende Bildschirm.



- 9 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Finish].

Damit ist die Installation des Druckertreibers unter Windows XP abgeschlossen.

- 10 Starten Sie den Computer neu.


Deinstallation des Druckertreibers unter Windows XP

Dieser Abschnitt beschreibt, wie sich der Druckertreiber entfernen lässt.

Hinweis


Bevor Sie mit den Deinstallationsvorgang beginnen, darf der Drucker nicht mit dem Computer verbunden werden, und der Computer sollte ausgeschaltet werden. Wenn das Dialogfeld [Found New Hardware Wizard] erscheint, trennen Sie das Kabel zwischen Computer und Drucker, klicken Sie auf allen Bildschirmen auf [Cancel], um das Dialogfeld zu schließen, und beginnen Sie den Deinstallationsvorgang erneut.

- 1 Schalten Sie den Drucker aus und trennen Sie das Kabel zwischen Computer und Drucker.
- 2 Schalten Sie den Computer ein und melden Sie sich als Systemadministrator oder ein Mitglied der Administratorgruppe an.
- 3 Klicken Sie auf [Start], wählen Sie [Control Panel] und anschließend [Add or Remove Programs].

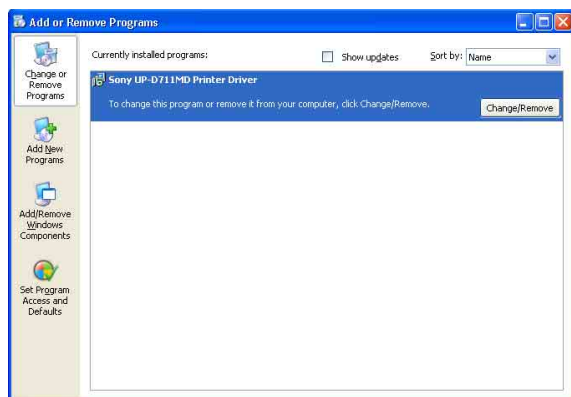


- 4 Wählen Sie den Drucker aus der Liste [Currently installed programs] aus und klicken Sie dann auf [Change/Remove].

Der folgende Bildschirm öffnet sich.

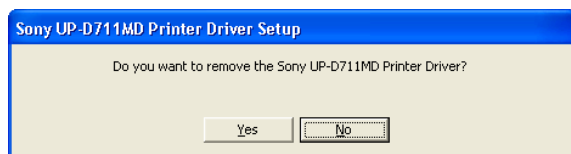

- 5 Klicken Sie auf [Yes].

Wenn der Druckertreiber deinstalliert wurde, erscheint das folgende Dialogfeld.

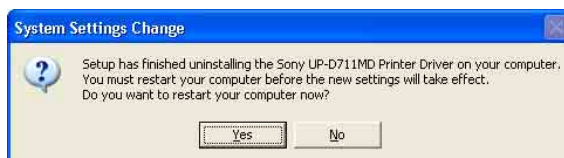

- 6 Klicken Sie auf [Yes].

Der Computer startet sich neu.

Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers abgeschlossen.