

Printer Driver

Oppsettsveiledning

Denne veiledningen beskriver hvordan du setter opp skriverdriveren for Windows 7, Windows Vista og Windows XP.

Før du bruker dette programmet

Før du bruker skriverdriveren, må du lese "Readme"-filen.

UP-D711MD

Innhold

Konfigurere skriveren	3
Innstillinger på [Main]-fanen	4
Innstillinger på [Density Adjust]-fanen	5
Innstillinger på [Message]-fanen	6
Meldingsliste	7

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Andre firmanavn og produktnavn nevnt i denne håndboken, er også varemerker og registrerte varemerker.

Skjermbildene som brukes til å beskrive oppsettet i denne veiledningen, forutsetter at UP-D711MD-skriveren brukes i et Windows 7-miljø. Du finner mer informasjon om innstillinger i instruksjonene for bruk av skriveren sammen med denne håndboken.

Konfigurere skriveren

Du kan åpne innstillingsskjermbildet for UP-D711MD og konfigurere ulike innstillinger før du begynner å skrive ut fra programmer.

Sett opp skriveren i følgende miljø.

- Skjermoppløsning på over SVGA (800 × 600)
- Tegnstørrelsen på skjermen er standardinnstillingen.
Windows XP: Normal size (96 DPI)
Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more information
Windows 7: Smaller - 100% (default)

Du kan åpne innstillingsskjermbildet på én av følgende måter.

- Velg [Devices and Printers] på [Start]-menyen ([Control Panel] og deretter [Printer] i Windows Vista; [Printers and Faxes] i Windows XP). Velg skriverikonet for Sony UP-D711MD, og høyreklikk for å velge [Printing preferences] ([Select printing preferences] fra kommandolinjen i Windows Vista; [Printing preferences] fra [File]-menyen i Windows XP). Innstillingene du gjør her, brukes som standardinnstillinger for UP-D711MD-skriveren. Innstillingene kan imidlertid bli overstyrt av standardinnstillingene i enkelte programmer.
- Klikk på kommandoen som brukes til å sette skriverinnstillinger, på [File]-menyen i programmet. Innstillingene som gjøres på denne måten, gjelder bare til du lukker programmet.

Denne veiledningen beskriver fanene som vises på innstillingsskjermbildet for UP-D711MD.

[Main]-fanen

Justerer de grunnleggende innstillingene relatert til utskrift, eksempelvis papirstørrelse, papirtype, antall eksemplarer osv.

[Density Adjust]-fanen


Justerer tettheten på utskriftene.

[Message]-fanen

Angir visningsinnstillingene relatert til meldingsdialogbokser.

Innstillinger på [Main]-fanen

Denne fanen brukes til å angi grunnleggende utskriftsinnstillinger.

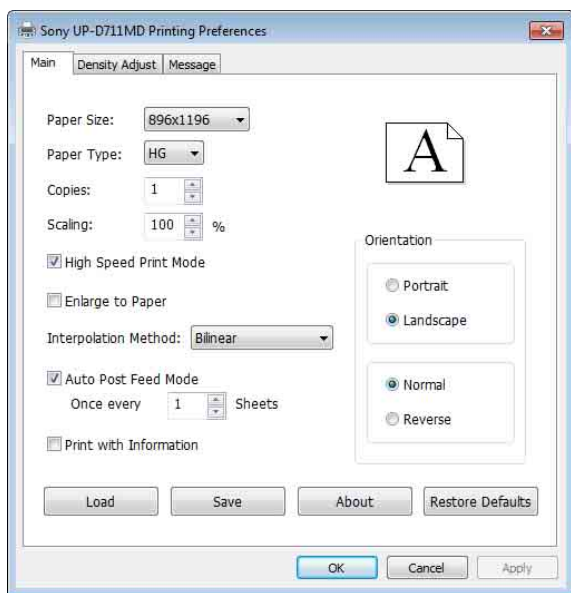

Paper Size

Velg papirstørrelse.

Element	Beskrivelse
596 × 896	50,4 mm × 75,7 mm
672 × 896	56,8 mm × 75,7 mm
896 × 896	75,7 mm × 75,7 mm
896 × 1196	75,7 mm × 101,1 mm
896 × 2688	75,7 mm × 227,1 mm

Paper Type

Velger papirtypen som er angitt. Innstillingsverdiene for papirtype og papirstørrelse er som følger.

Paper type	Paper size
S	UPP-84S
HG	UPP-84HG

Copies

Angi hvor mange eksemplarer som skal skrives ut (1 til 255).

Scaling

Angi forstørrelsen eller forminskningen (25 % til 400 %). Hvis du vil endre interpoleringsmetode, velger du en [Interpolation Method]-innstilling nedenfor. [Enlarge to Paper] kan ikke brukes med denne funksjonen.

High Speed Print Mode

Merk av for dette alternativet for å skrive ut i høyhastighetsmodus.

Enlarge to Paper

Hvis bildestørrelsen er mindre enn papirstørrelsen, forstørres bildet automatisk til samme størrelse som papiret. Hvis du vil endre interpoleringsmetode, velger du en [Interpolation Method]-innstilling nedenfor. [Scaling] kan ikke brukes med denne funksjonen.

Interpolation Method

Velg interpoleringsmetoden for bildet ([Bilinear], [Nearest Neighbor]).

Auto Post Feed Mode

Angir papirmatingen (kort/lang). Når du merker av for dette alternativet, angir du lenger papirmating etter utskrift. Med lenger papirmating trekkes papiret ut til posisjonen for kutting av papiret uten at du trykker på FEED-knappen.

Merk av her for å kutte papiret etter utskrift. Hvis flere sider skrives ut, økes margene mellom bildene. Hvis du har merket av for dette alternativet, kan [Once every __ Sheets] angis.

Når du ikke merker av for dette alternativet, angir du kortere papirmating etter utskrift. Fjern haken i denne avmerkingsboksen for å skrive ut flere sider og for å redusere mager.


Merk

Med kort papirmating trykker du på FEED-knappen for å kutte papiret etter mating. Hvis papiret kuttet uten at du trykker på FEED-knappen, kan bildet bli kuttet i to.

Once every __ Sheets

Du kan angi verdien for hvor ofte lang mating skal brukes. Kort mating brukes til det antallet sider du angir, er skrevet ut. Etter det brukes lenger papirmating. Antallet nullstilles når antall utskrevne sider når den forhåndsinnstilte verdien. Antallet nullstilles også hvis strømmen slås av, FEED-knappen trykkes inn, utskriftsantallet endres eller utskriften avbrytes.


(Eksempel 1) Verdien er satt til 1:

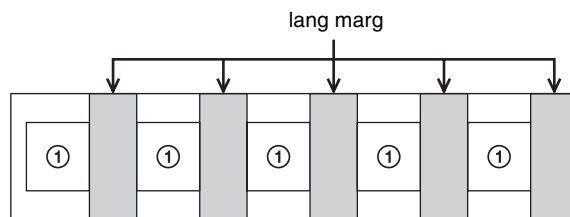

Tallene i sirkler betyr teller.


(Eksempel 2) Verdien er satt til 3, skriver ut seks sider:

- Uten nullstilling

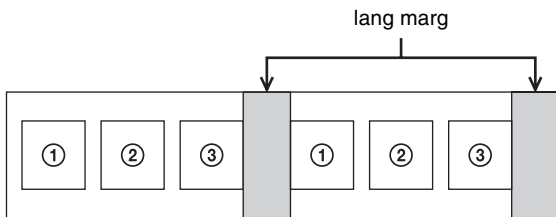

Tallene i sirkler betyr teller.

- Ved nullstilling etter utskrift av en annen side.

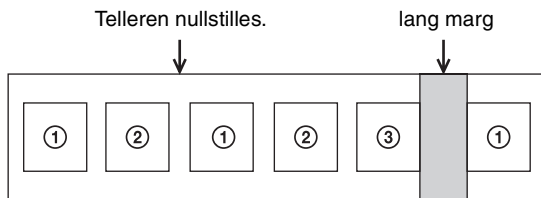

Tallene i sirkler betyr teller.

Print with Information

Merk av for dette alternativet for å skrive ut bilder samt forhåndsangitt verdiinformasjon på [Density Adjust]-fanen under disse bildene.

Hver av de forhåndsinnstilte verdiene skrives ut med følgende merknader.

Element	Merknad
GAMMA	GAM
Advanced	ADV
Dark	DARK
Light	LIGHT
Sharpness	SHARP

Orientation

Angir retningen på utskriftene. Når du skriver ut et bilde i stående størrelse, merker du av for [Portrait], og når du skriver ut liggende, merker du av for [Landscape]. Merk av for [Reverse] for å skrive ut et bilde rotert 180 grader.

Merk

Utskriftsresultatet kan variere etter hvilken programvare du bruker. Kontroller resultatet med én eller flere utskrifter.

Load

Brukes til å laste inn lagrede innstillinger.

Save

Brukes til å lagre gjeldende innstillinger.

About

Viser informasjon om driverversjonen.

Restore Defaults


Når du trykker på [Main]-fanen, gjenopprettes alle innstillingene til standardverdiene.

Innstillinger på [Density Adjust]-fanen

Justerer tettheten på bildet. Justeringen gjenspeiles i tetthetsdiagrammet øverst til høyre på innstillingsskjermbildet samt på graderingslinjen. Men effekten av den forhåndsinnstilte verdien for [GAMMA] gjenspeiles ikke.

Den lodrette akse på tetthetsdiagrammet uttrykker tettheten på bildet som faktisk skrives ut, der den øvre grensen gjelder tetthet av hvitt, og den nedre grensen gjelder tetthet av svart.

Den vannrette akse uttrykker billedata, der den øvre grensen gjelder data i hvitt og den nedre grensen gjelder data i svart. Graderingslinjen uttrykker den faktiske tettheten i stedet for verdien på den lodrette akse i tetthetsdiagrammet.

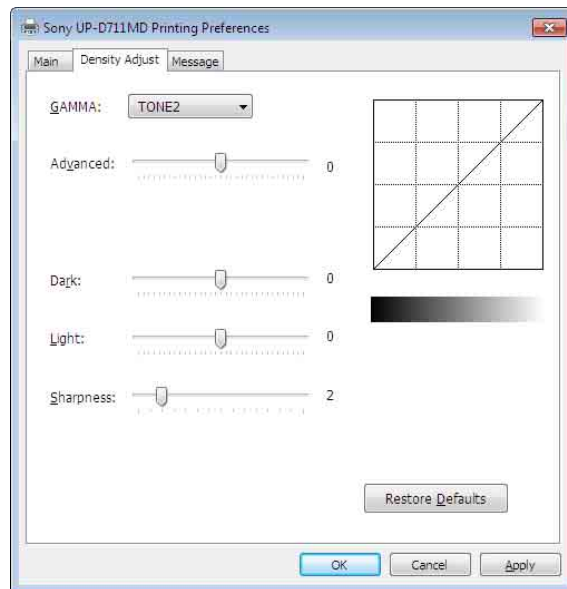

GAMMA

Velger intensiteten for halvtonegraderingen.

Element	Forklaring
TONE1	Lysere enn standard
TONE2	Standard
TONE3	Hard gradering
TONE4	Myk gradering

Advanced

Dra glidebryteren for å velge graderingsnivå. Jo høyere valgt verdi, desto mørkere gradering. Du kan justere graderingen til én av 65 verdier. Standardverdien er 0. Det justerbare området er fra -32 til +32.

Dark

Dra glidebryteren for å justere de mørke delene av bildet. Jo høyere valgt verdi, desto mørkere blir de mørke delene av bildet. Du kan justere graderingen til én av 129 verdier. Standardverdien er 0. Det justerbare området er fra -64 til +64.

Light

Dra glidebryteren for å justere de lyse delene av bildet. Jo høyere valgt verdi, desto lysere blir de lyse delene av bildet. Du kan justere graderingen til én av 129 verdier. Standardverdien er 0. Det justerbare området er fra -64 til +64.

Sharpness


Dra glidebryteren for å justere omrisset av bildet. Jo høyere valgt verdi, desto skarpere blir kantene i bildet. Du kan justere graderingen til én av 15 verdier. Standardverdien er 2. Det justerbare området er fra 0 til 14.

Restore Defaults

Når du trykker på [Density Adjust]-fanen, gjenopprettes alle innstillingene til standardverdiene.

Innstillinger på [Message]-fanen

Angir visningsinnstillingene relatert til meldingsdialogbokser. Meldingsdialogbokser vises for eksempel når feilen UP-D711MD oppstår. Meldingsdialogbokser finnes i to størrelser: standard og liten. Standarddialogboksen viser feilstatusen for skriveren og instruksjoner for hvordan du håndterer feilen. Den lille dialogboksen viser (én setning av) enkle instruksjoner for hvordan du håndterer feilen. Du finner detaljer om hver melding under "Meldingsliste" (side 7).

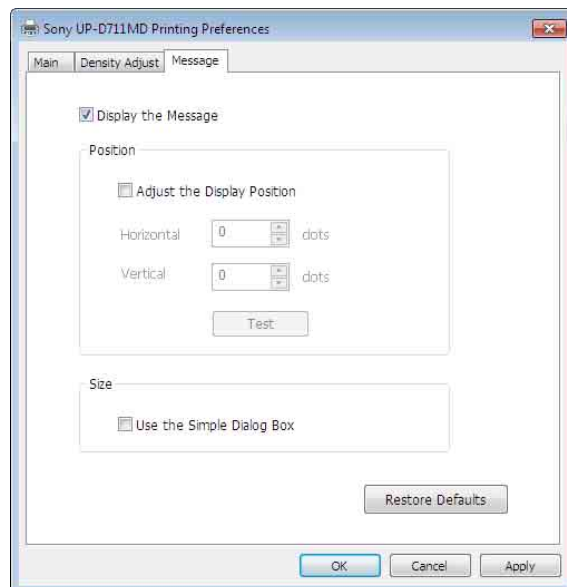

Display the Message

Velg ON/OFF for å vise meldingsdialogboksen. Hvis OFF er valgt, kan du ikke angi de andre innstillingene på [Message]-fanen.

Adjust the display position

Merk av for dette alternativet for å justere visningsposisjonen for meldingsdialogbokser. Meldingsdialogboksen vises på det stedet som er definert av verdiene for innstillingene [Horizontal] og [Vertical].

Standardinnstilling: Ingen hake i [Adjust the Display Position]. (Standarddialogboksen vises midt på skjermen, og den lille dialogboksen vises øverst til venstre på skjermen.)

Horizontal, Vertical

Disse innstillingene aktiveres når du merker av for [Adjust the Display Position]. Legg inn koordinatene for visningsposisjonen (posisjonen for øvre, venstre hjørne av meldingsdialogboksen).

Meldingsdialogboksen vises på det stedet som er definert av verdiene du angir her.

Test

Kontroller posisjonen for meldingsdialogboksen på displayet eller på skjermen. En testdialogboks vises på det stedet som er definert av innstillingene [Horizontal] og [Vertical].

Use the Simple Dialog Box

Merk av for dette alternativet for å vise mindre meldingsdialogbokser.

Restore Defaults

Gjenoppretter alle innstillingene på [Message]-fanen til standardbetingelsen.

Meldingsliste

Visbare meldinger er som følger. Løs eventuelle problemer ved å følge meldingene nedenfor. Du finner mer informasjon om løsning av problemer i instruksjonene for bruk av UP-D711MD sammen med denne håndboken.

Standard meldingsdialogboks	Liten meldingsdialogboks
No thermal paper. Please set the thermal paper. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Set thermal paper.
Now, Feeding. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Door is open. Please close the door. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Close door.
Now regulating the head temperature of the printer. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Mechanical error. Printing has been aborted. Please turn off the printer, then turn it back on and print again.	Restart printer.
Printer is not ready. Make sure the printer is plugged in to a power source and the printer cable is correctly connected. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Check printer.