

Printer Driver

Navodila za namestitev

V teh navodilih je opisana namestitev tiskalniškega gonilnika v operacijskih sistemih Windows 7, Windows Vista in Windows XP.

Pred uporabo te programske opreme

Pred uporabo tiskalniškega gonilnika preberite datoteko »Readme«.

Kazalo vsebine

Zahteve v zvezi z delovnim okoljem	3
Informacije o tem dokumentu	3
Namestitev tiskalniškega gonilnika v operacijskem sistemu Windows 7	4
Pred namestitvijo	4
Namestitev v operacijskem sistemu Windows 7	4
Odstranitev tiskalniškega gonilnika v operacijskem sistemu Windows 7	6
Namestitev tiskalniškega gonilnika v operacijskem sistemu Windows Vista	7
Pred namestitvijo	7
Namestitev v operacijskem sistemu Windows Vista	7
Odstranitev tiskalniškega gonilnika v operacijskem sistemu Windows Vista	10
Namestitev tiskalniškega gonilnika v operacijskem sistemu Windows XP	11
Pred namestitvijo	11
Namestitev v operacijskem sistemu Windows XP	12
Odstranitev tiskalniškega gonilnika v operacijskem sistemu Windows XP	14

Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation. Druga imena družb in izdelkov, omenjena v teh navodilih, so prav tako blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke.

Zahteve v zvezi z delovnim okoljem

Če želite uporabljati ta tiskalniški gonilnik, potrebujete naslednje okolje

- Računalnik
Skladen s specifikacijo USB 2.0^{*1}
- Operacijski sistem
Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional/Home Edition
- Gonilnik USB
Izdovalec: Microsoft Corporation^{*2}
- USB
Potrjeni kabel USB

^{*1} Ne jamčimo za združljivost z vsemi napravami, razširitvenimi ploščami ali razširitvenimi karticami USB.

^{*2} Delovanja z drugimi gonilniki USB 2.0 ni mogoče zagotoviti.

Uporabljajte naslednje nastavitve zaslona.

- Ločljivost zaslona najmanj SVGA (800 × 600)
- Privzeta velikost znakov na zaslonu.
Windows XP: Normal size (96 DPI)
Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more information
Windows 7: Smaller - 100% (default)

Opomba

Ko je tiskalnik priključen in vklopljen, računalnik ne sme preklopiti v stanje mirovanja, pripravljenosti (odloženo) ali hibernacije. To lahko povzroči nepravilno delovanje.

Informacije o tem dokumentu

Pojasnila glede uporabe nadzorne plošče v tem dokumentu se nanašajo na operacijska sistema Windows XP in Windows Vista v klasičnem pogledu. Če želite vklopiti klasični pogled, kliknite [Start], izberite [Control Panel] in nato v lastnostih nadzorne plošče na levi strani zaslona kliknite [Switch to Classic View].

Zaslonska sporočila, prikazana v teh navodilih, veljajo za tiskalnik UP-D711MD. Če imate drug model tiskalnika, pri branju zaslonkih sporočil v teh navodilih nadomestite »UP-D711MD« z imenom tiskalnika, ki ga uporabljate.

Ta vodič opisuje, kako namestite in odstranite tiskalniški gonilnik v računalnikih z naslednjimi operacijskimi sistemi: Microsoft Windows 7, Windows Vista in Windows XP. Sledite navodilom za vaš operacijski sistem.

Preverite navodila za uporabo tiskalnika in preberite navodila za namestitev ustreznega tiskalnika.

Če vas zanima še kaj, kar v teh navodilih ni opisano, glejte navodila za uporabo vašega tiskalnika, nato izvedite namestitev.

Namestitev tiskalniškega gonilnika v operacijskem sistemu Windows 7

Pred namestitvijo

Opomba

Tiskalnika ne priključite v računalnik pred namestitvijo tiskalniškega gonilnika. Če tiskalnik priključite pred namestitvijo, ga računalnik morda ne bo prepoznal.

Informacije o nadgradnjah

Če želite nadgraditi tiskalniški gonilnik, pred začetkom namestitve odstranite prejšnji tiskalniški gonilnik.


Podrobnosti o postopku odstranjevanja tiskalniškega gonilnika preberite v poglavju »Odstranitev tiskalniškega gonilnika v operacijskem sistemu Windows 7« v teh navodilih.

Če namestitev ne uspe ali če se prekine, pred vnovičnim poskusom namestitve znova zaženite računalnik.

Namestitev v operacijskem sistemu Windows 7


- 1 Vklopite računalnik in se prijavite kot skrbnik sistema ali član skupine Skrbniki.
- 2 Zaženite datoteko »Setup.exe«, ki jo najdete v mapi »PrinterDriver\Win7« na priloženem disku CD-ROM (ali prenesite datoteko s spletnega mesta Sony).

Prikaže se pogovorno okno [User Account Control].

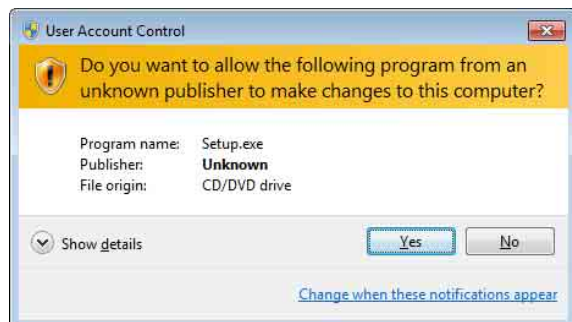


- 3 Kliknite [Yes].

Prikaže se naslednje pogovorno okno.

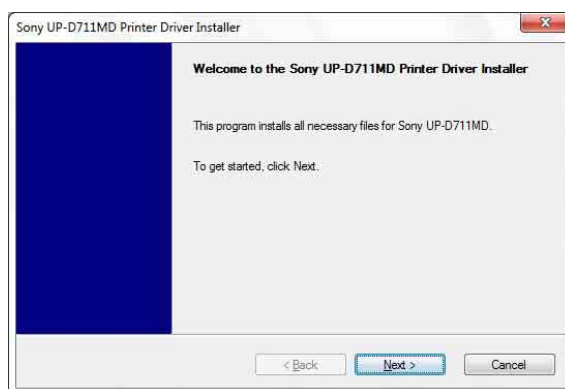


- 4 Kliknite [Next].

Prikaže se licenčna pogodba za končnega uporabnika.

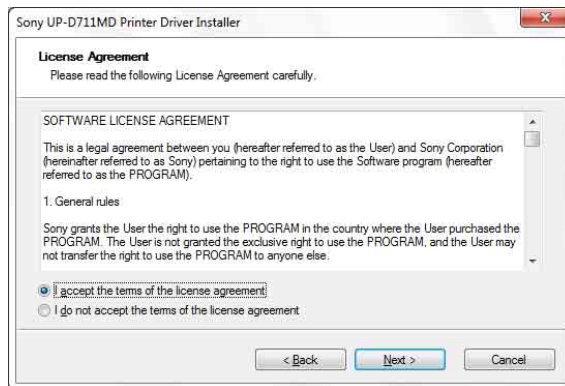


- 5 Izberite [I accept the terms of the license agreement] in kliknite [Next].

Prikaže se naslednje pogovorno okno.

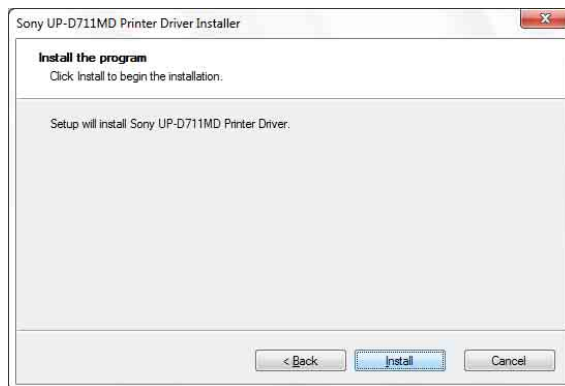

6 Kliknite [Install].


Namestitev se začne. Stanje namestitve je med namestitvijo prikazano v pogovornem oknu.

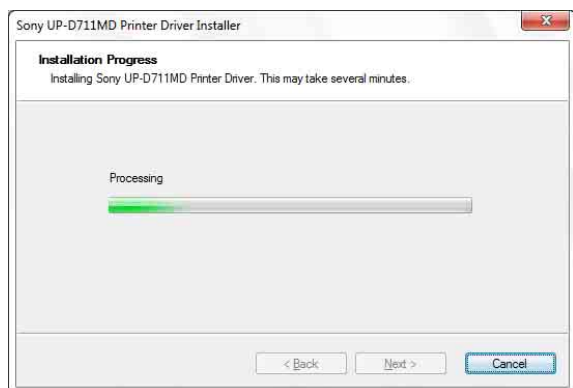

Če se med namestitvijo prikaže naslednje pogovorno okno, kliknite [Install this driver software anyway].



Ko je namestitev dokončana, se prikaže naslednje pogovorno okno.

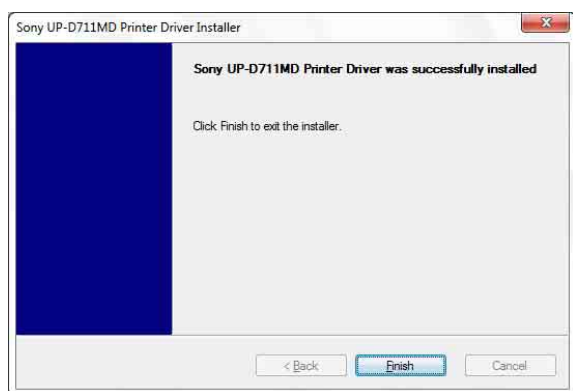

7 Kliknite [Finish].

8 Priključite tiskalnik v računalnik.


Namestitev tiskalniškega gonilnika je končana.

Kliknete lahko [Start], izberete [Control Panel] in nato izberete [View devices and printers], da preverite, ali računalnik prepozna tiskalnik. Če računalnik prepozna tiskalnik, se v [Printers and Faxes] prikaže ikona tiskalnika.



Če vaš računalnik ne prepozna tiskalnika

Če ste tiskalnik priključili v računalnik pred namestitvijo tiskalniškega gonilnika, bo tiskalnik morda prikazan v mapi [Unspecified] namesto v [Printers and Faxes]. V tem primeru računalnik ne prepozna tiskalnika in tiskalnika ne morete uporabljati.

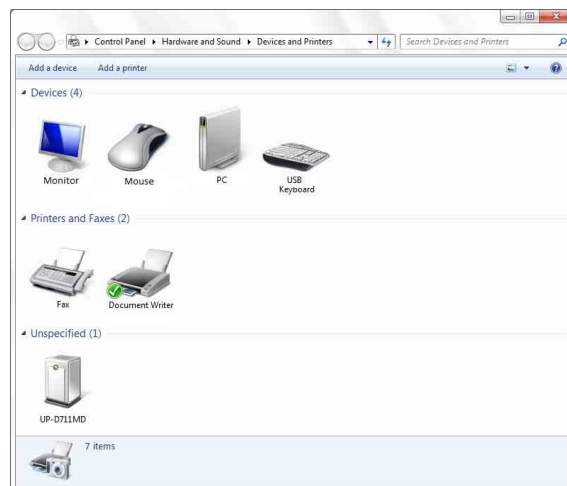


V takšnih primerih tiskalniški gonilnik posodobite na naslednji način.

- 1 Izključite kabel, s katerim je tiskalnik priključen v računalnik.
- 2 Če niste namestili tiskalniškega gonilnika, izvedite korake, opisane v poglavju »Namestitev v operacijskem sistemu Windows 7«, da ga namestite zdaj.
- 3 Priključite tiskalnik v računalnik.

- 4 Kliknite [Start], izberite [Control Panel] in nato izberite [View devices and printers].
- 5 Z desno tipko miške kliknite UP-D711MD v mapi [Unspecified] in nato izberite [Troubleshoot].

Prikaže se naslednje pogovorno okno.

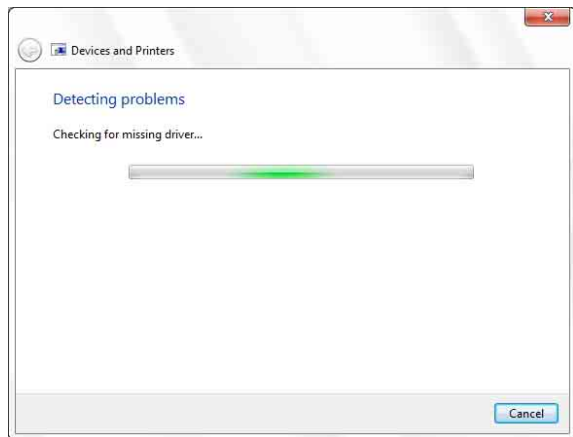


Čez nekaj sekund se zaslon spremeni.




- 6 Kliknite [Apply this fix].

Prikaže se naslednje pogovorno okno.

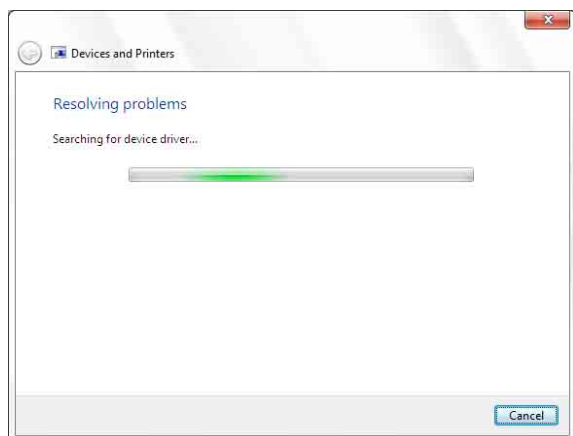

Čez nekaj sekund se zaslon spremeni.

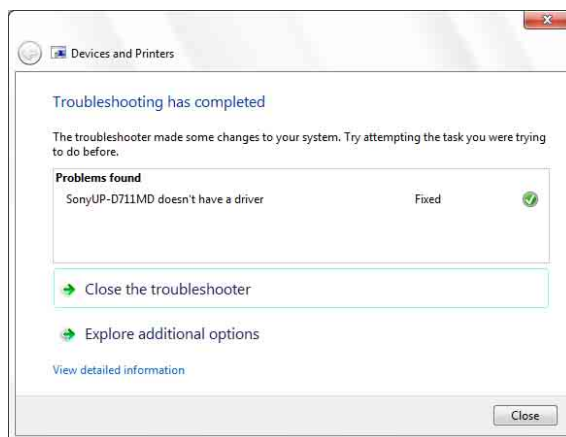

- 7 Kliknite [Close].


Posodobitev tiskalniškega gonilnika je končana.

Odstranitev tiskalniškega gonilnika v operacijskem sistemu Windows 7

Opomba

Pred začetkom postopka odstranjevanja tiskalnik ne sme biti priključen v računalnik, računalnik pa mora biti izklopljen. Če se prikaže pogovorno okno [Found New Hardware], izključite kabel, s katerim je tiskalnik priključen v računalnik, kliknite [Cancel] in zaprite pogovorno okno. Nato znova začnete postopek odstranjevanja.

- 1 Izklopite tiskalnik in izključite kabel, s katerim je tiskalnik priključen v računalnik.
- 2 Vključite računalnik in se prijavite kot skrbnik sistema ali član skupine Skrbniki.
- 3 Kliknite [Start], izberite [Control Panel] in nato izberite [Uninstall a program].

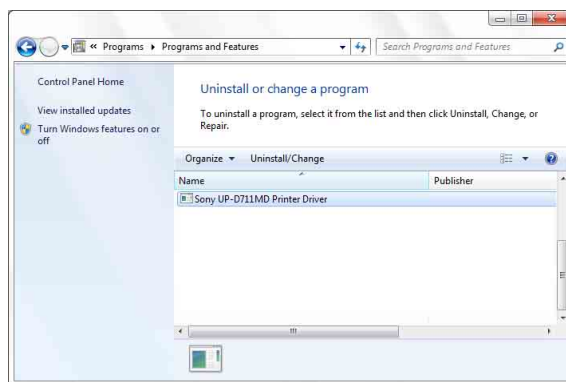

- 4 S seznama [Uninstall or change a program] izberite tiskalniški gonilnik in kliknite [Uninstall/Change].

Prikaže se naslednje pogovorno okno.



- 5 Kliknite [Yes].

Postopek odstranjevanja se začne. Ko je odstranjevanje dokončano, se prikaže naslednje pogovorno okno.



- 6 Kliknite [Yes].

Računalnik se znova zažene.

Odstranitev tiskalniškega gonilnika je končana.

Namestitev tiskalniškega gonilnika v operacijskem sistemu Windows Vista

Pred namestitvijo

Informacije o nadgradnjah

Če želite nadgraditi tiskalniški gonilnik, pred začetkom namestitve odstranite prejšnji tiskalniški gonilnik.

Podrobnosti o postopku odstranjevanja tiskalniškega gonilnika preberite v poglavju »Odstranitev tiskalniškega gonilnika v operacijskem sistemu Windows Vista« v teh navodilih.

Če namestitev ne uspe ali če se prekine, pred vnovičnim poskusom namestitve znova zaženite računalnik.

Namestitev v operacijskem sistemu Windows Vista

- 1 Priključite tiskalnik (samo enega), za katerega želite namestiti gonilnik v računalnik.
- 2 Vklopite priključeni tiskalnik.
- 3 Vklopite računalnik in se prijavite kot skrbnik sistema ali član skupine Skrbniki.

Prikaže se pogovorno okno [Found New Hardware].



Če se izpiše sporočilo »Device driver software was not successfully installed« (Programska oprema naprave ni bila uspešno nameščena), pogovorno okno [Found New Hardware] pa se ne prikaže, poskusite izključiti in znova priključiti kabel USB. Če se pogovorno okno [Found New Hardware] še vedno ne prikaže, izvedite spodaj opisane korake. Tiskalnik, za katerega želite namestiti gonilnik, mora biti vklopljen in priključen v računalnik. (Drugi tiskalniki USB ali že nameščeni tiskalniki med postopkom ne smejo biti priključeni.)

① Kliknite [Start] in izberite [Control Panel].

② Dvakrat kliknite [System].

③ Kliknite [Device Manager].

Prikaže se pogovorno okno [User Account Control].

④ Kliknite [Continue].

Prikaže se pogovorno okno [Device Manager].

⑤ Kliknite [+] na levi strani postavke [Universal Serial Bus controllers].

⑥ Izberite [USB Printing support], nato v meniju [Action] izberite možnost [Uninstall].

⑦ Znova zaženite računalnik.

Prikaže se pogovorno okno [Found New Hardware].


4 Kliknite [Locate and install driver software (recommended)].

Prikaže se naslednje pogovorno okno.




5 Kliknite [Continue].

6 Če se prikaže naslednje pogovorno okno, kliknite [Don't search online].

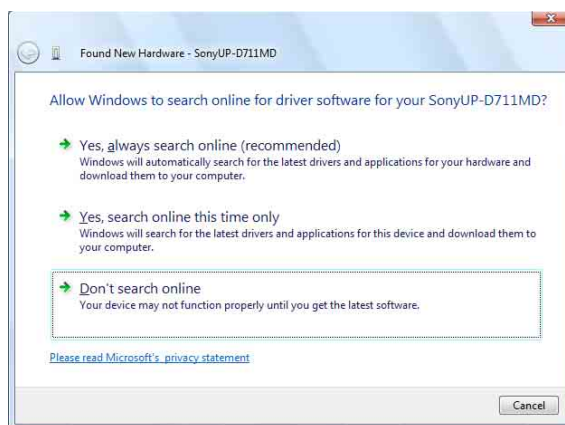

Vsebina okna se spremeni.

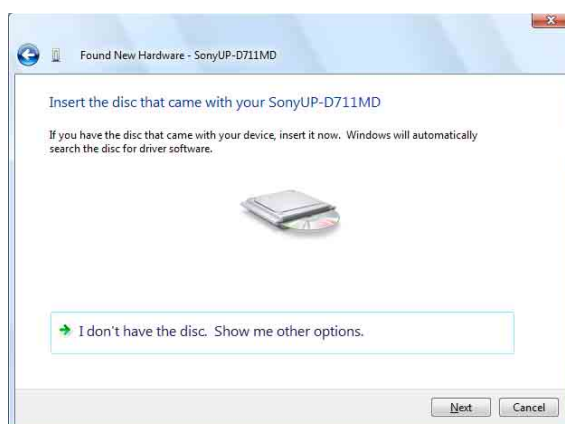


Od tukaj naprej je postopek odvisen od tega, ali uporabljate priloženi CD-ROM (ali pa ste gonilnik prenesli z interneta).

Postopek s priloženim diskom CD-ROM

7 Vstavite priloženi CD-ROM v pogon CD-ROM.

Vsebina okna se spremeni.

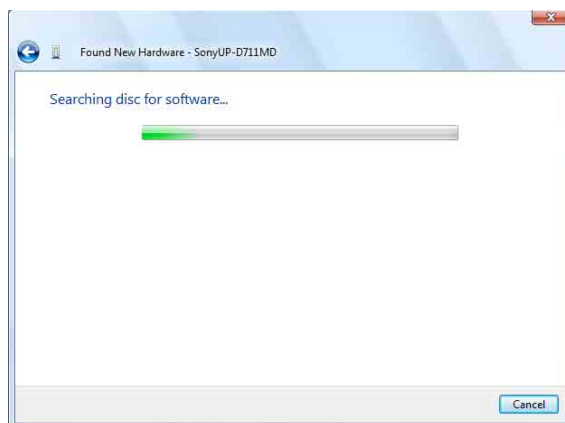


Ko je iskanje programske opreme končano, se prikaže naslednje pogovorno okno.




- 8 Kliknite [Install this driver software anyway].

Trenutno pogovorno okno se zapre in znova se prikaže pogovorno okno [Found New Hardware].

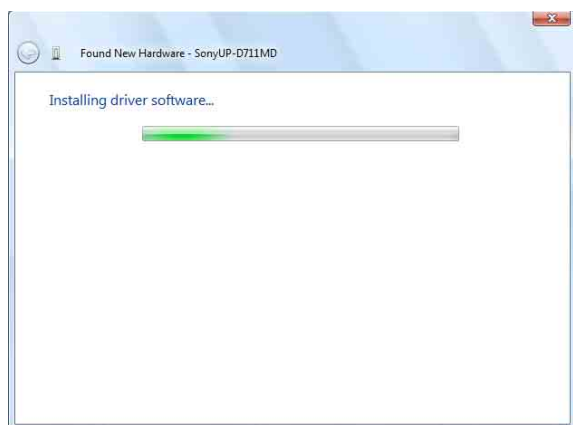

Ko so datoteke prekopirane, se vsebina okna spremeni.

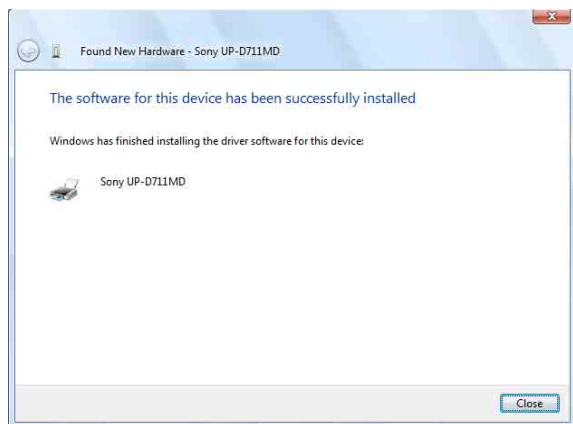


- 9 Kliknite [Close].

Namestitev tiskalniškega gonilnika je končana.

Postopek brez priloženega diska CD-ROM


- 7 Kliknite [I don't have the disc. Show me other options].

Vsebina okna se spremeni.

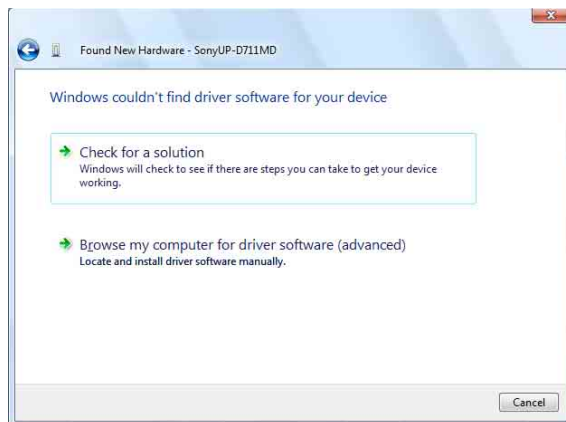

- 8 Kliknite [Browse my computer for driver software (advanced)].

Vsebina okna se spremeni.

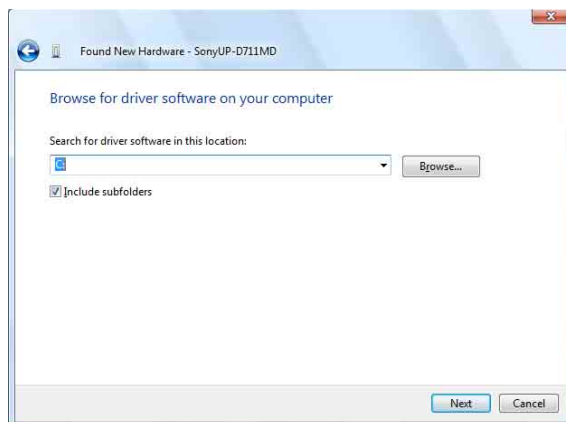

- 9 Kliknite [Browse], da se odpre pogovorno okno [Browse For Folder]. Izberite mapo, v katero ste izvlekli namestitveno datoteko, ki ste jo prenesli s spleta, in kliknite [OK], da zaprete pogovorno okno [Browse For Folder].


10 Kliknite [Next].

Prikaže se naslednje pogovorno okno.




11 Kliknite [Install this driver software anyway].

Trenutno pogovorno okno se zapre in znova se prikaže pogovorno okno [Found New Hardware].

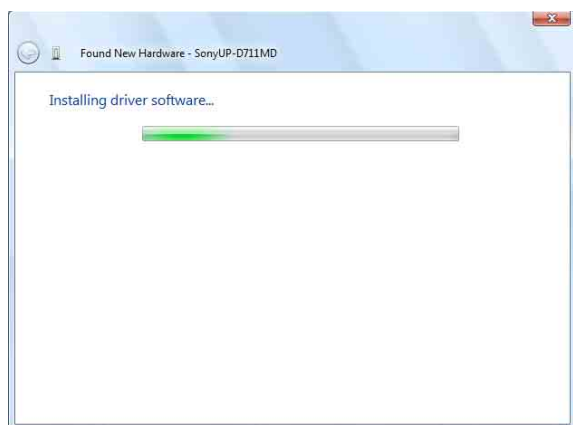

Ko so datoteke prekopirane, se vsebina okna spremeni.

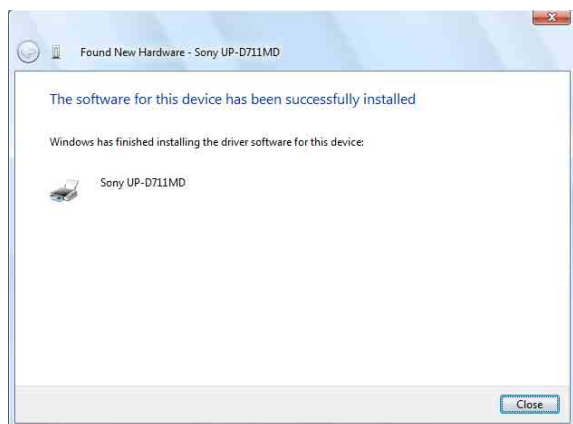

12 Kliknite [Close].

Namestitev tiskalniškega gonilnika je končana.


Odstranitev tiskalniškega gonilnika v operacijskem sistemu Windows Vista

V tem poglavju je opisan postopek odstranitve tiskalniškega gonilnika.


Opomba

Pred začetkom postopka odstranjevanja tiskalnik ne sme biti priključen v računalnik, računalnik pa mora biti izklopljen. Če se prikaže pogovorno okno [Found New Hardware], izključite kabel, ki povezuje računalnik s tiskalnikom, in v vseh oknih kliknite [Cancel], da zaprete pogovorno okno. Nato znova začnite postopek odstranitve tiskalniškega gonilnika.

- 1 Izklopite tiskalnik in izključite kabel, ki povezuje računalnik s tiskalnikom.
- 2 Vključite računalnik in se prijavite kot skrbnik sistema ali član skupine Skrbniki.
- 3 Kliknite [Start], izberite [Control Panel] in nato izberite [Programs and Features].

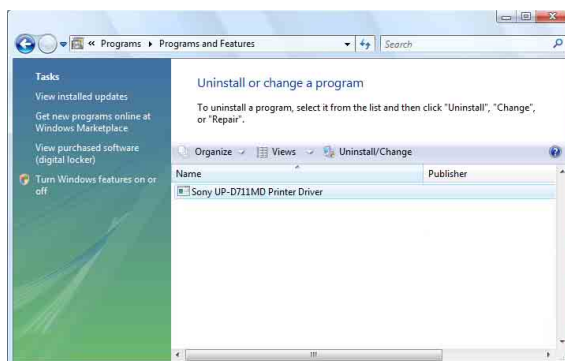

- 4 S seznama [Uninstall or change a program] izberite tiskalniški gonilnik in kliknite [Uninstall/Change].

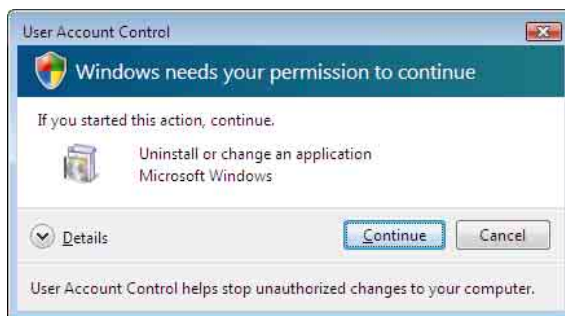


5 Kliknite [Continue].



6 Kliknite [Yes].

Ko je tiskalniški gonilnik odstranjen, se prikaže naslednje pogovorno okno.

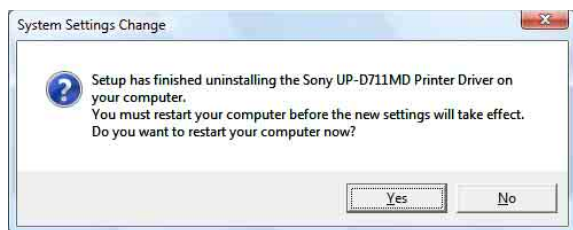

7 Kliknite [Yes].

Računalnik se znova zažene.

Odstranitev tiskalniškega gonilnika je končana.

Namestitev tiskalniškega gonilnika v operacijskem sistemu Windows XP

Pred namestitvijo

Informacije o nadgradnjah

Če želite nadgraditi tiskalniški gonilnik, pred začetkom namestitve odstranite prejšnji tiskalniški gonilnik.

Podrobnosti o postopku odstranjevanja tiskalniškega gonilnika preberite v poglavju »Odstranitev tiskalniškega gonilnika v operacijskem sistemu Windows XP« v teh navodilih.

Če namestitev ne uspe ali če se prekine, pred prvotnim poskusom namestitve znova zaženite računalnik.

Opomba

Po namestitvi ali odstranitvi tiskalniškega gonilnika morate znova zagnati računalnik. Če tega ne storite, lahko pride do napak pri delovanju računalnika.

Informacije o podpisovanju gonilnikov

Za ta tiskalniški gonilnik ni bil opravljen preizkus Windows Logo, zato se lahko pri nameščanju prikaže sporočilo o napaki, ki preprečuje namestitev gonilnika.

V okvirčku skupine [What action do you want Windows to take?] v pogovornem oknu [Driver Signing Options] izberite možnost [Ignore] ali [Warn]. Če izberete možnost [Block], tiskalniškega gonilnika ne boste mogli namestiti.



Odprite pogovorno okno [Driver Signing Options] po naslednjem postopku:

- ① V meniju [Start] kliknite [Control Panel].
- ② Dvakrat kliknite [System].
Prikaže se pogovorno okno [System Properties].
- ③ Kliknite jeziček [Hardware].
- ④ Kliknite gumb [Driver Signing].

Vsa pojasnila v teh navodilih veljajo ob predpostavki, da ste v tem pogovornem oknu izbrali možnost [Warn].

Namestitev v operacijskem sistemu Windows XP

- 1** Priključite tiskalnik (samo enega), za katerega želite namestiti gonilnik v računalnik.
- 2** Vključite priključeni tiskalnik.
- 3** Vključite računalnik in se prijavite kot skrbnik sistema ali član skupine Skrbniki.

Prikaže se pogovorno okno [Found New Hardware Wizard].




- Če se prikaže isto pogovorno okno [Found New Hardware Wizard] kot v 3. koraku, nadaljujte na 4. korak.
 - Če se prikaže drugačno pogovorno okno [Found New Hardware Wizard] kot v 3. koraku, nadaljujte na 5. korak.
 - Če se pogovorno okno [Found New Hardware Wizard] ne prikaže, opravite postopek, opisan v nadaljevanju. Tiskalnik, ki ga želite namestiti, mora biti vklopljen in priključen v računalnik. (Drugi tiskalniki USB ali že nameščeni tiskalniki med postopkom ne smejo biti priključeni.)
- ① V meniju [Start] kliknite [Control Panel].
 - ② Dvakrat kliknite [System].
Prikaže se pogovorno okno [System Properties].
 - ③ Kliknite jeziček [Hardware].
 - ④ Kliknite gumb [Device Manager].
Prikaže se pogovorno okno [Device Manager].
 - ⑤ Kliknite [+] na levi strani postavke [Universal Serial Bus controllers].
 - ⑥ Z desno tipko miške kliknite [USB Printing support] in izberite [Properties].
Preverite, ali je v rubriki [Location] navedeno ime trenutno priključenega tiskalnika, nato v meniju [Action] izberite [Uninstall].
 - ⑦ Znova zaženite računalnik.
Ko se sistem Windows XP zažene, se odpre pogovorno okno [Found New Hardware Wizard].

- 4 Kliknite [No, not this time] in nato [Next].



- 5 Izberite možnost [Install from a list or specific location (Advanced)] in kliknite gumb [Next].

Prikaže se naslednji zaslon.

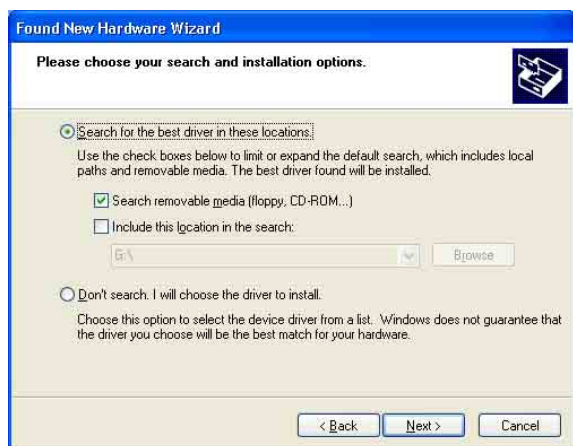

- 6 Vnesite mesto namestitvene datoteke tiskalniškega gonilnika. Nadaljnji postopek je odvisen od tega, ali uporabljate priloženi CD-ROM (ali pa ste gonilnik prenesli z interneta).

Postopek s priloženim diskom CD-ROM

Izberite [Search for the best driver in these locations] in [Search removable media (floppy, CD-ROM...)], nato vstavite priloženi CD-ROM v pogon CD-ROM.

Postopek brez priloženega diska CD-ROM

Izberite [Search for the best driver in these locations] in [Include this location in the search], nato kliknite [Browse], da odprete pogovorno okno [Browse For Folder]. Izberite mapo, v katero ste izvlekli namestitveno datoteko, ki ste jo prenesli s spleta, in kliknite [OK], da zaprete pogovorno okno [Browse For Folder].

- 7 Kliknite gumb [Next].

Prikaže se naslednje pogovorno okno.



- 8 Kliknite gumb [Continue Anyway].

Ko so datoteke prekopirane, se prikaže naslednji zaslon.



- 9 Kliknite gumb [Finish].

Namestitev tiskalniškega gonilnika v operacijskem sistemu Windows XP je končana.

- 10 Znova zaženite računalnik.


Odstranitev tiskalniškega gonilnika v operacijskem sistemu Windows XP

V tem poglavju je opisan postopek odstranitve tiskalniškega gonilnika.

Opomba

Pred začetkom postopka odstranjevanja tiskalnik ne sme biti priključen v računalnik, računalnik pa mora biti izklopljen. Če se prikaže pogovorno okno [Found New Hardware Wizard], izključite kabel, ki povezuje računalnik s tiskalnikom, in v vseh oknih kliknite [Cancel], da zaprete pogovorno okno. Nato znova začnite postopek odstranitve tiskalniškega gonilnika.

- 1 Izklopite tiskalnik in izključite kabel, ki povezuje računalnik s tiskalnikom.
- 2 Vključite računalnik in se prijavite kot skrbnik sistema ali član skupine Skrbniki.
- 3 Kliknite [Start], izberite [Control Panel] in nato izberite [Add or Remove Programs].

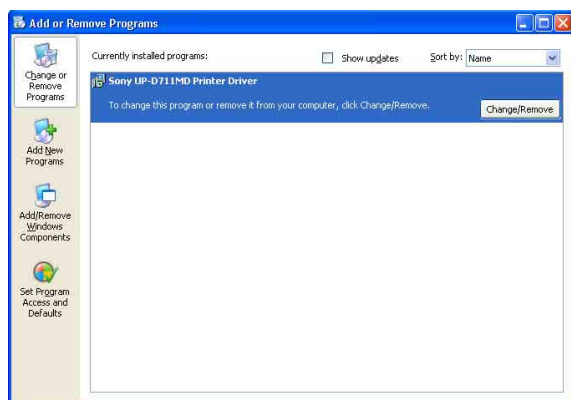


- 4 S seznama [Currently installed programs] izberite tiskalniški gonilnik in kliknite [Change/Remove].

Prikaže se naslednji zaslon.



- 5 Kliknite [Yes].

Ko je tiskalniški gonilnik odstranjen, se prikaže naslednje pogovorno okno.

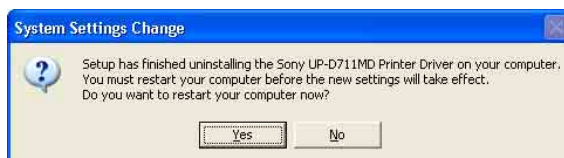

- 6 Kliknite [Yes].

Računalnik se znova zažene.

Odstranitev tiskalniškega gonilnika je končana.