

Printer Driver

Diegimo vedlys

Šis vedlys aprašo spausdintuvo tvarkyklės operacinėms sistemoms „Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“ įdiegimą.

Prieš naudojant šią programinę įrangą

Prieš naudodami spausdintuvo tvarkyklę, būtinai perskaitykite failą „Readme“.

Turinys

Darbo aplinkos reikalavimai	3
Apie šį dokumentą	3
Spausdintuvo tvarkyklės diegimas sistemoje	
„Windows 7“	4
Prieš diegimą	4
Diegimas sistemoje „Windows 7“	4
Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas iš sistemos „Windows 7“	6
Spausdintuvo tvarkyklės diegimas sistemoje	
„Windows Vista“	7
Prieš diegimą	7
Diegimas sistemoje „Windows Vista“	7
Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas iš sistemos „Windows Vista“	10
Spausdintuvo tvarkyklės diegimas sistemoje	
„Windows XP“	11
Prieš diegimą	11
Diegimas sistemoje „Windows XP“	12
Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas iš sistemos „Windows XP“	13

„Microsoft“ ir „Windows“ yra bendrovės „Microsoft Corporation“ registruoti prekių ženklai.
Kiti šiame vedlyje minimi bendrovių ir produktų pavadinimai taip pat yra prekių ženklai ir registruoti prekių ženklai.

Darbo aplinkos reikalavimai

Naudoti spausdintuvo tvarkyklei būtina ši aplinka

- Kompiuteris
Tenkina USB 2.0 specifikacijas^{*1}
- Operacinė sistema
„Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP Professional/Windows XP Home Edition“
- USB tvarkyklė
Pagaminta bendrovės „Microsoft Corporation“^{*2}
- USB
Atestuotas USB kabelis

^{*1} Negalime garantuoti suderinamumo su visais USB įtaisais, USB plėtimo plokštėmis ar plėtimo kortelėmis.

^{*2} Negerantuojuame veikimo su kitomis USB 2.0 tvarkyklėmis.

Dirbkite esant tokiems ekrano nustatymams.

- Ekrano skyra didesnė nei SVGA (800 × 600)
- Ekrano ženklų dydis yra numatytasis.
„Windows XP“: Normal size (96 DPI)
„Windows Vista“: Default scale (96 DPI) - fit more information
„Windows 7“: Smaller - 100% (default)

Pastaba

Užtikrinkite, kad kompiuteris nepereis į miego, parengties (pristabdymo) ar užmigdymo režimą, kai prie jo yra prijungtas ir įjungtas spausdintuvas. Kitaip negarantuojuame tinkamo veikimo.

Apie šį dokumentą

Valdymo skydelio darbas šiame dokumente aiškinamas remiantis operacinių sistemų „Windows XP“ arba „Windows Vista“ klasikiniu rodimu. Norėdami perjungti į klasikinį rodinį, spustelėkite [Start], pasirinkite [Control Panel] ir ekrano kairėje rodomose valdymo skydelio ypatybėse spustelėkite [Switch to Classic View].

Šiame vedlyje ekrano pranešimai rodomi laikant, kad spausdintuvas UP-D711MD yra prijungtas. Jei naudojate kito modelio spausdintuvą, ekrano pranešimus šiame vedlyje skaitykite, vietoje „UP-D711MD“ įrašydami savo spausdintuvo modelio pavadinimą.

Šis vedlys aprašo, kaip įdiegti ir pašalinti spausdintuvo tvarkyklę kompiuteriuose su šiomis operacinėmis sistemomis: „Microsoft Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“. Vadovaukitės nurodymais savo operacinei sistemai.

Pasitikrinkite savo spausdintuvo darbo vadove ir perskaitykite atitinkamo spausdintuvo diegimo vedlį. Dalykų, kurie neaprašyti šiame vedlyje, ieškokite spausdintuvo naudojimo instrukcijoje, tuomet atlikite diegimą.

Spausdintuvo tvarkyklės diegimas sistemoje „Windows 7“

Prieš diegimą

Pastaba

Neprijunkite spausdintuvo prie kompiuterio neįdiegę tvarkyklės. Jei spausdintuvas prijungtas iš anksto, kompiuteris gali jo nepažinti.

Apie versijų naujinimus


Jei naujinote spausdintuvo tvarkyklę, prieš diegimą pašalinkite ankstesnę spausdintuvo tvarkyklę. Išsamiau apie spausdintuvo tvarkyklės pašalinimo procedūrą žiūrėkite šio vedlio skyriuje „Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas iš sistemos „Windows 7““.

Jei diegimas nepavyko arba buvo atšauktas, prieš kartodami diegimą paleiskite kompiuterį iš naujo.

Diegimas sistemoje „Windows 7“


- 1 Įjunkite kompiuterį, įeikite kaip sistemos administratorius arba administratorių grupės narys.
- 2 Paleiskite „Setup.exe“, kurį rasite pateikto (arba atsisiųsto iš „Sony“ svetainės) CD-ROM disko aplanke „PrinterDriver\Win7“.

Pasirodys dialogo langas [User Account Control].

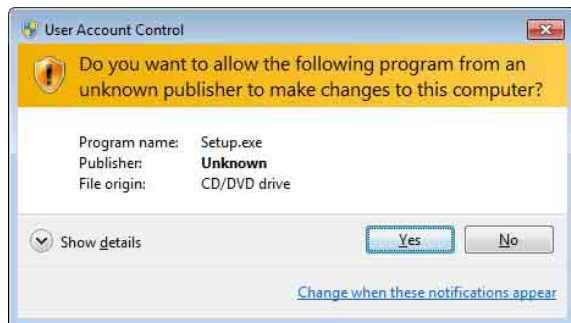


- 3 Spustelėkite [Yes].

Pasirodys šis dialogo langas.

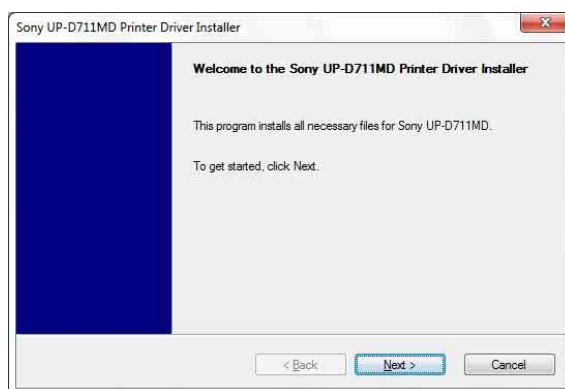


- 4 Spustelėkite [Next].

Pasirodys galutinio vartotojo licencijos sutartis.

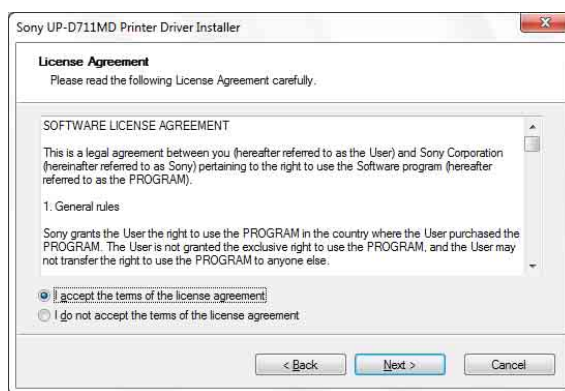


- 5 Pasirinkite [I accept the terms of the license agreement], tuomet spustelėkite [Next].

Pasirodys šis dialogo langas.

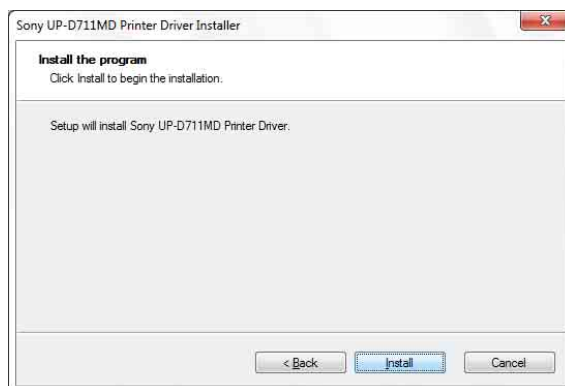

6 Spustelėkite [Install].


Prasidės diegimas. Diegimo metu dialogo lange bus rodoma diegimo būsena.

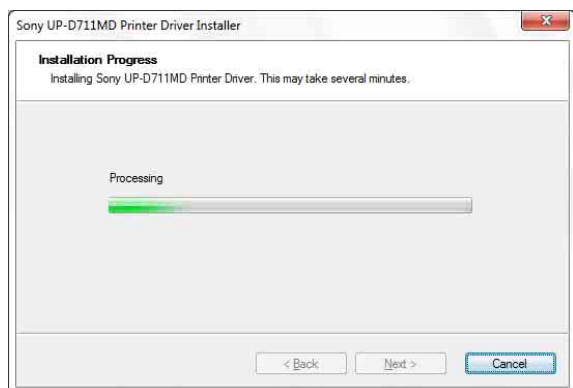

Jei diegimo metu pasirodys šis dialogo langas, spustelėkite [Install this driver software anyway].



Baigus diegimą, pasirodys šis dialogo langas.

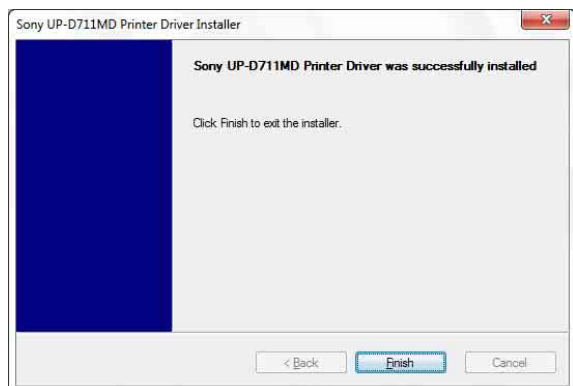

7 Spustelėkite [Finish].

8 Prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio.


Tuo spausdintuvo tvarkyklės diegimas baigiamas.

Norėdami įsitikinti, kad kompiuteris atpažįsta spausdintuvą, spustelėkite [Start], pasirinkite [Control Panel], tuomet pasirinkite [View devices and printers]. Jei kompiuteris atpažino spausdintuvą, ties [Printers and Faxes] turi pasirodyti spausdintuvo piktograma.



Jei kompiuteris neatpažino spausdintuvo

Jei prijungėte spausdintuvą prie kompiuterio dar neįdiegė tvarkyklės, spausdintuvas gali būti rodomas ties [Unspecified] vietoje [Printers and Faxes]. Jei taip nutiko, kompiuteris spausdintuvo neatpažįsta ir šio negalima naudoti.

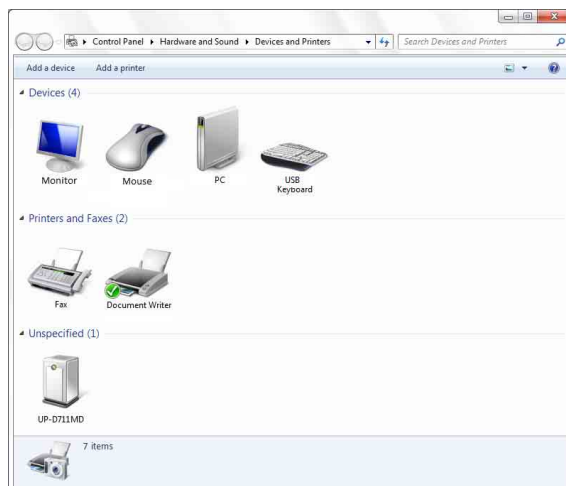


Tokiu atveju atnaujinkite spausdintuvo tvarkyklę šiuo būdu.

- 1 Atjunkite spausdintuvą prie kompiuterio jungiantį kabelį.
- 2 Jei spausdintuvo tvarkyklės neįdiegėte, vykdykite veiksmus skirsnyje „Diegimas sistemoje „Windows 7““ jei įdiegti.
- 3 Prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio.
- 4 Spustelėkite [Start], pasirinkite [Control Panel], tuomet pasirinkite [View devices and printers].

- 5 Dešiniu pelės mygtuku spustelėkite UP-D711MD iš [Unspecified], tuomet pasirinkite [Troubleshoot].

Pasirodys šis dialogo langas.

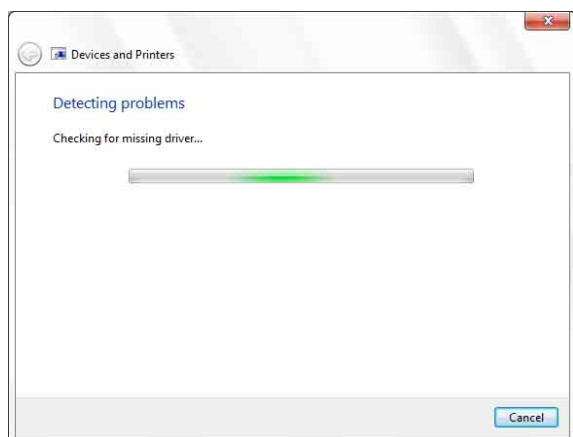


Po kelių akimirkų ekranas taps toks.




- 6 Spustelėkite [Apply this fix].

Pasirodys šis dialogo langas.

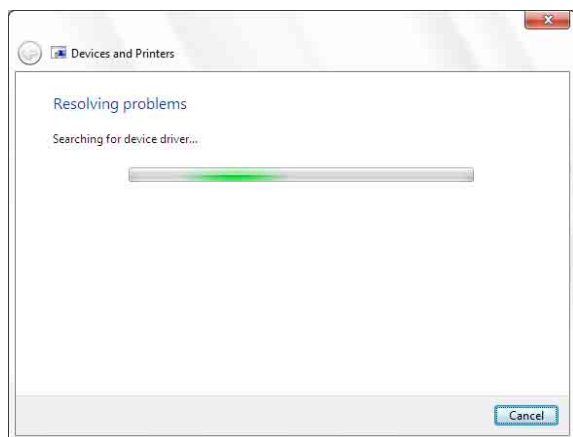

Po kelių akimirkų ekranas taps toks.

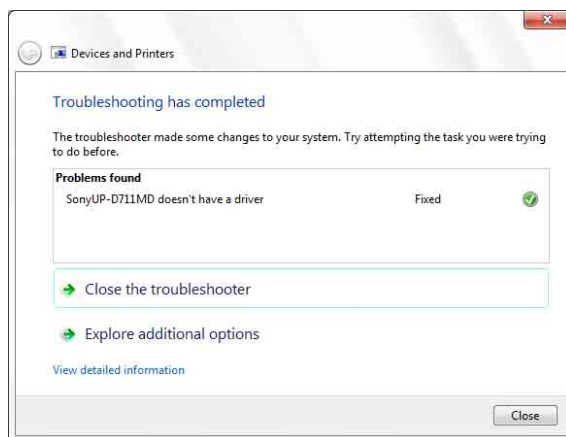

- 7 Spustelėkite [Close].


Tuo spausdintuvo tvarkyklės naujinimas baigiamas.

Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas iš sistemos „Windows 7“

Pastaba

Prieš pradėdami pašalinimo procedūrą, būtina išjungti spausdintuvą nuo kompiuterio ir išjunkite kompiuterį. Jei pasirodys dialogo langas [Found New Hardware], atjunkite kabelį, jungiantį spausdintuvą su kompiuteriu, spustelėkite [Cancel] ir uždarykite dialogo langą. Po to pradėkite šalinimo procedūrą iš naujo.

- 1 Išjunkite spausdintuvą ir atjunkite kabelį, jungiantį jį prie kompiuterio.
- 2 Įjunkite kompiuterį, įeikite kaip sistemos administratorius arba administratorių grupės narys.
- 3 Spustelėkite [Start], pasirinkite [Control Panel], tuomet pasirinkite [Uninstall a program].

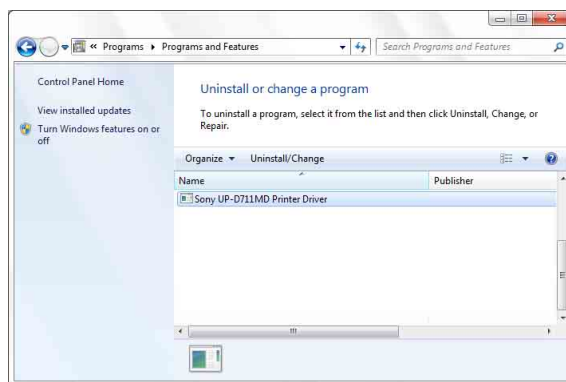

- 4 Pasirinkite spausdintuvo tvarkyklę sąrašė [Uninstall or change a program], tuomet spustelėkite [Uninstall/Change].


Pasirodys šis dialogo langas.



- 5 Spustelėkite [Yes].

Prasidės šalinimas.

Baigus šalinimą, pasirodys šis dialogo langas.

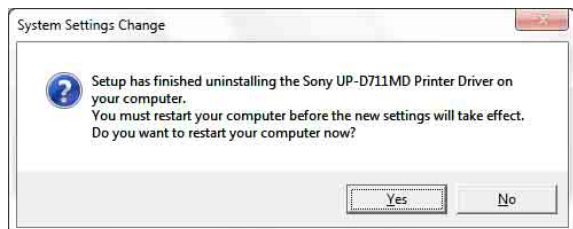

- 6 Spustelėkite [Yes].

Kompiuteris pasileis iš naujo.

Tuo spausdintuvo tvarkyklės šalinimas baigiamas.

Spausdintuvo tvarkyklės diegimas sistemoje „Windows Vista“

Prieš diegimą

Apie versijų naujinimus

Jei naujinote spausdintuvo tvarkyklę, prieš diegimą pašalinkite ankstesnę spausdintuvo tvarkyklę. Išsamiau apie spausdintuvo tvarkyklės pašalinimo procedūrą žiūrėkite šio vedlio skyriuje „Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas iš sistemos „Windows Vista““.

Jei diegimas nepavyko arba buvo atšauktas, prieš kartodami diegimą paleiskite kompiuterį iš naujo.

Diegimas sistemoje „Windows Vista“

- 1 Prijunkite prie kompiuterio spausdintuvą (tik vieną), kuriam norite diegti tvarkyklę.
- 2 Įjunkite prijungtą spausdintuvą.
- 3 Įjunkite kompiuterį, įeikite kaip sistemos administratorius arba administratorių grupės narys.

Pasirodys dialogo langas [Found New Hardware].




Jei pasirodys pranešimas „Device driver software was not successfully installed“, bet nepasirodys dialogo langas [Found New Hardware], pabandykite atjungti ir vėl prijungti USB kabelį. Jei dialogo langas [Found New Hardware] vis tiek nepasirodo, vykdykite toliau aprašytus veiksmus, esant įjungtam ir prie kompiuterio prijungtam spausdintuvui, kurio tvarkyklė diegiama. (Šiuo

metu negali būti prijungti kiti USB spausdintuvai ar anksčiau įdiegti spausdintuvai.)

- ① Spustelėkite [Start], pasirinkite [Control Panel].
- ② Dukart spustelėkite [System].
- ③ Spustelėkite [Device Manager].
Pasirodys dialogo langas [User Account Control].
- ④ Spustelėkite [Continue].
Pasirodys langas [Device Manager].
- ⑤ Spustelėkite [+] eilutės [Universal Serial Bus controllers] dešinėje.
- ⑥ Pasirinkite [USB Printing support], tuomet meniu [Action] pasirinkite [Uninstall].
- ⑦ Paleiskite kompiuterį iš naujo.
Pasirodys dialogo langas [Found New Hardware].


- 4 Spustelėkite [Locate and install driver software (recommended)].

Pasirodys šis dialogo langas.

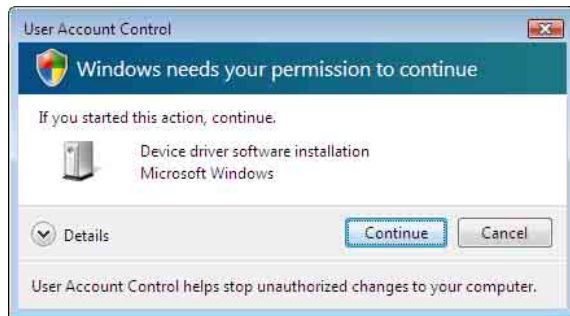


- 5 Spustelėkite [Continue].

- 6 Jei pasirodys šis dialogo langas, spustelėkite [Don't search online].

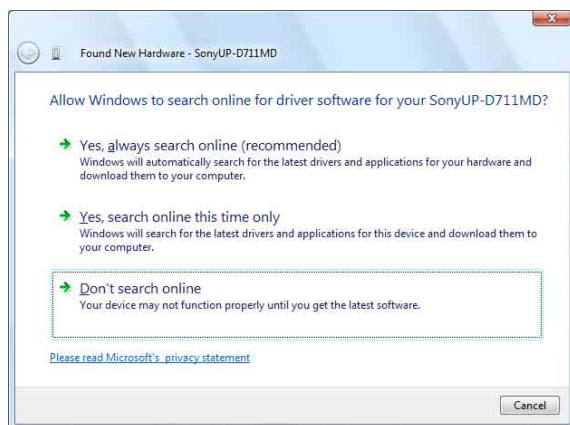

Ekranas taps toks.

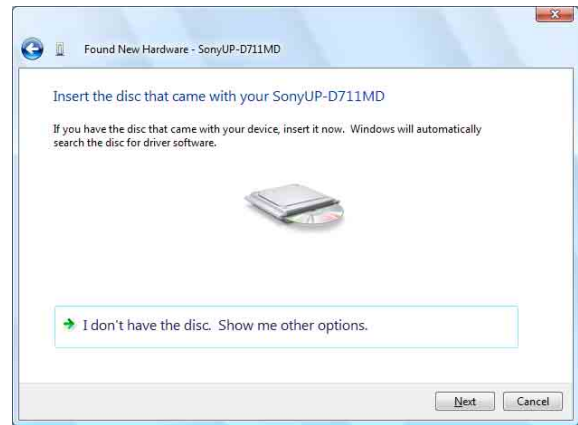


Nuo šios vietos procedūra skiriasi, priklausomai nuo to, naudosite pateiktą CD-ROM diską ar ne (jei atsisiuntėte tvarkyklę internetu).

Procedūra, naudojant pateiktą CD-ROM diską

- 7 Įdėkite pateiktą CD-ROM diską į CD-ROM įrenginį.

Ekranas taps toks.

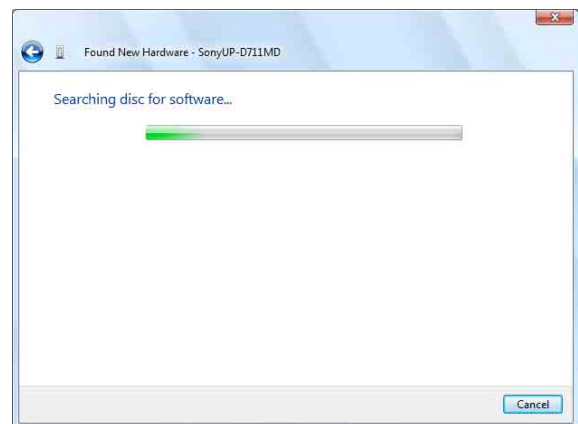


Baigus programinės įrangos iešką, pasirodys šis dialogo langas.



- 8 Spustelėkite [Install this driver software anyway].

Dialogo langas užsidarys ir pasirodys naujas dialogo langas [Found New Hardware].

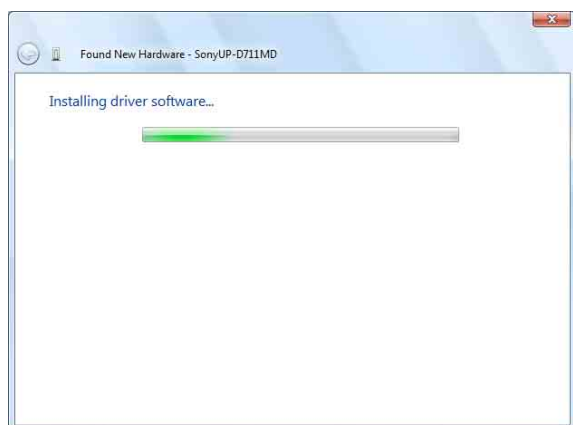

Baigus kopijuoti failus, ekranas taps toks.




- 9 Spustelėkite [Close].

Tuo spausdintuvo tvarkyklės diegimas baigiamas.

Procedūra nenaudojant pateikto CD-ROM disko


- 7 Spustelėkite [I don't have the disc. Show me other options].

Ekranas taps toks.

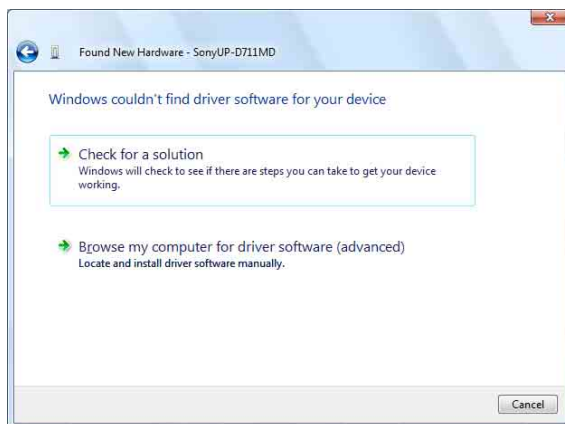

- 8 Spustelėkite [Browse my computer for driver software (advanced)].

Ekranas taps toks.

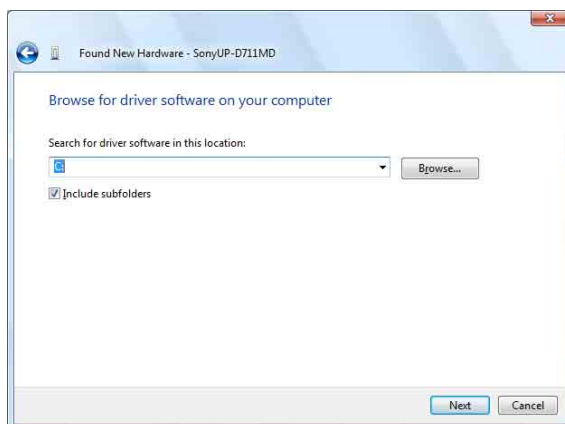

- 9 Spustelėkite [Browse], kad atidarytumėte dialogo langą [Browse For Folder]. Nurodykite aplanką, kuriame išskleidėte atsisiųstą diegimo failą, tuomet spustelėkite [OK] dialogo langui uždaryti.


10 Spustelėkite [Next].

Pasirodys šis dialogo langas.




11 Spustelėkite [Install this driver software anyway].

Dialogo langas uždarys ir pasirodys naujas dialogo langas [Found New Hardware].

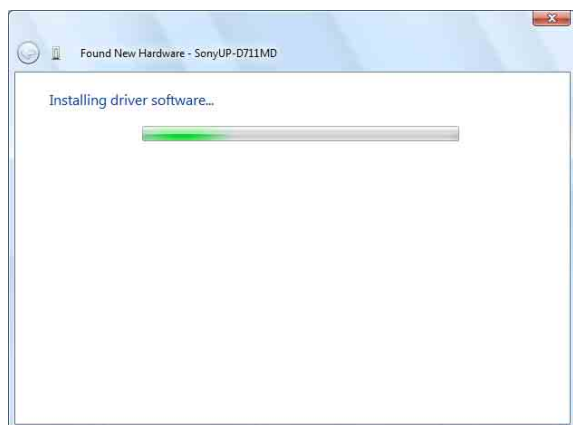

Baigus kopijuoti failus, ekranas taps toks.

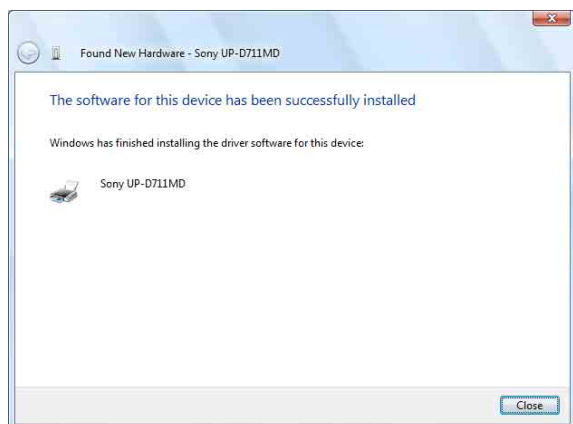

12 Spustelėkite [Close].

Tuo spausdintuvo tvarkyklės diegimas baigiamas.


Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas iš sistemos „Windows Vista“

Šis skirsnis aprašo, kaip pašalinti spausdintuvo tvarkyklę.


Pastaba

Prieš pradėdami pašalinimo procedūrą, būtinai ATJUNKITE spausdintuvą nuo kompiuterio ir išjunkite kompiuterį. Jei pasirodys dialogo langas [Found New Hardware], atjunkite kabelį tarp spausdintuvo ir kompiuterio, visuose languose spustelėkite [Cancel] uždaryti šiam dialogo langui, tuomet vėl pradėkite šalinimo procedūrą.

- 1 Išjunkite spausdintuvą ir atjunkite kabelį tarp spausdintuvo ir kompiuterio.
- 2 Įjunkite kompiuterį, įeikite kaip sistemos administratorius arba administratorių grupės narys.
- 3 Spustelėkite [Start], pasirinkite [Control Panel], tuomet pasirinkite [Programs and Features].

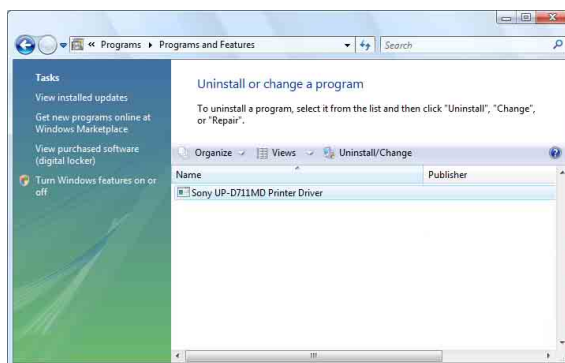

- 4 Pasirinkite spausdintuvo tvarkyklę sąraše [Uninstall or change a program], tuomet spustelėkite [Uninstall/Change].

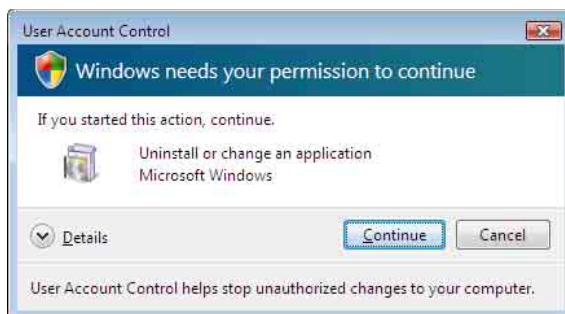


5 Spustelėkite [Continue].



6 Spustelėkite [Yes].

Baigus spausdintuvo tvarkyklės šalinimą, pasirodys šis dialogo langas.

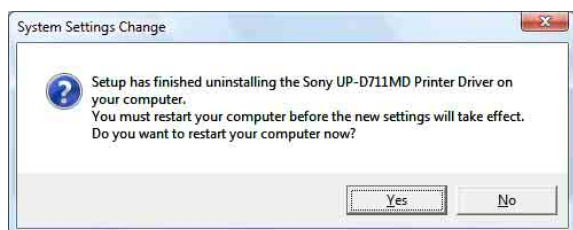

7 Spustelėkite [Yes].

Kompiuteris pasileis iš naujo.

Tuo spausdintuvo tvarkyklės šalinimas baigiamas.

Spausdintuvo tvarkyklės diegimas sistemoje „Windows XP“

Prieš diegimą

Apie versijų naujinimus

Jei naujinate spausdintuvo tvarkyklę, prieš diegimą pašalinkite ankstesnę spausdintuvo tvarkyklę. Išsamiau apie spausdintuvo tvarkyklės pašalinimo procedūrą žiūrėkite šio vedlio skyriuje „Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas iš sistemos „Windows XP““.

Jei diegimas nepavyko arba buvo atšauktas, prieš kartodami diegimą paleiskite kompiuterį iš naujo.

Pastaba

Įdiegę arba pašalinę spausdintuvo tvarkyklę, būtinai paleiskite kompiuterį iš naujo. Sistemos neperkrovus, darbas gali būti nestabilus.

Apie tvarkyklės parašo parinktis

Esama spausdintuvo tvarkyklė nepraėjo „Windows Logo“ patikros, todėl diegiant tvarkyklę gali pasirodyti klaidos pranešimas, neleidžiantis įdiegti tvarkyklės. Dialogo lange [Driver Signing Options] pasirinkite [Ignore] arba [Warn] grupės [What action do you want Windows to take?] polangyje. Jei pasirinksite [Block], negalėsite įdiegti spausdintuvo tvarkyklės.



Atidarykite dialogo langą [Driver Signing Options] šiuo būdu:

- ① Meniu [Start] spustelėkite [Control Panel].
- ② Dukart spustelėkite [System].
Pasirodys dialogo langas [System Properties].
- ③ Spustelėkite skirtuką [Hardware].
- ④ Spustelėkite mygtuką [Driver Signing].

Visi paaiškinimai šiame vedlyje pateikiami laikant, kad nustatymas šiame dialogo lange yra [Warn].

Diegimas sistemoje „Windows XP“

- 1 Prijunkite prie kompiuterio spausdintuvą (tik vieną), kuriam norite diegti tvarkyklę.
- 2 Įjunkite prijungtą spausdintuvą.
- 3 Įjunkite kompiuterį, tuomet įeikite kaip sistemos administratorius arba administratorių grupės narys.

Atsidarys dialogo langas [Found New Hardware Wizard].



- Jei pasirodys toks pat dialogo langas [Found New Hardware Wizard] kaip 3 veiksmas, pereikite prie 4 veiksmo.
- Jei pasirodys kitoks dialogo langas [Found New Hardware Wizard] nei 3 veiksmas, pereikite prie 5 veiksmo.
- Jei dialogo langas [Found New Hardware Wizard] nepasirodys, vykdykite toliau aprašytus veiksmus, esant įjungtam ir prie kompiuterio prijungtam spausdintuvui, kurio tvarkyklė diegiama. (Šiuo metu negali būti prijungti kiti USB spausdintuvai ar anksčiau įdiegti spausdintuvai.)
 - ① Meniu [Start] spustelėkite [Control Panel].
 - ② Dukart spustelėkite [System].
Pasirodys dialogo langas [System Properties].
 - ③ Spustelėkite skirtuką [Hardware].


- ④ Spustelėkite mygtuką [Device Manager].
Pasirodys langas [Device Manager].
- ⑤ Spustelėkite [+] eilutės [Universal Serial Bus controllers] dešinėje.
- ⑥ Dešiniu pelės mygtuku spustelėkite [USB Printing support] ir atidarykite [Properties].
Įsitikinkite, kad kaip [Location] yra pasirinktas šiuo metu prijungto spausdintuvo modelio pavadinimas, tuomet meniu [Action] pasirinkite [Uninstall].
- ⑦ Paleiskite kompiuterį iš naujo.
Įsikrovus sistemai „Windows XP“, atsidarys dialogo langas [Found New Hardware Wizard].

- 4 Spustelėkite [No, not this time] ir spustelėkite [Next].



- 5 Pasirinkite [Install from a list or specific location (Advanced)], tuomet spustelėkite [Next].

Atsidarys šis langas.

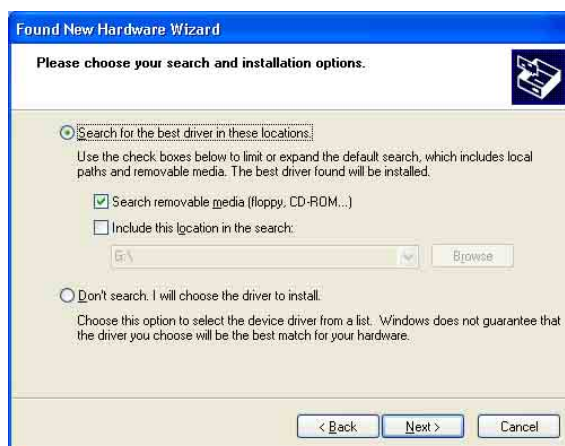

- 6 Nurodykite spausdintuvo tvarkyklės diegimo failo vietą.
Procedūra skiriasi, priklausomai nuo to, naudosite pateiktą CD-ROM diską ar ne (jei atsisiuntėte tvarkyklę internetu).

Procedūra, naudojant pateiktą CD-ROM diską

Pasirinkite [Search for the best driver in these locations] ir [Search removable media (floppy, CD-ROM...)], tuomet įdėkite pateiktą CD-ROM diską į CD-ROM įrenginį.

Procedūra nenaudojant pateikto CD-ROM disko

Pasirinkite [Search for the best driver in these locations] ir [Include this location in the search], tuomet spustelėkite [Browse] atidaryti dialogo langui [Browse For Folder]. Nurodykite aplanką, kuriame išskleidėte atsisiųstą diegimo failą, tuomet spustelėkite [OK] dialogo langui uždaryti.

- 7 Spustelėkite mygtuką [Next].

Atsidarys šis dialogo langas.



- 8 Spustelėkite mygtuką [Continue Anyway].

Baigus kopijuoti failus, pasirodys šis langas.



- 9 Spustelėkite mygtuką [Finish].

Tuo spausdintuvo tvarkyklės diegimas sistemoje „Windows XP“ baigiamas.

- 10 Paleiskite kompiuterį iš naujo.


Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas iš sistemos „Windows XP“

Šis skirsnis aprašo, kaip pašalinti spausdintuvo tvarkyklę.

Pastaba


Prieš pradėdami pašalinimo procedūrą, būtinai ATJUNKITE spausdintuvą nuo kompiuterio ir išjunkite kompiuterį. Jei pasirodys dialogo langas [Found New Hardware Wizard], atjunkite kabelį tarp spausdintuvo ir kompiuterio, visuose languose spustelėkite [Cancel] uždaryti šiam dialogo langui, tuomet vėl pradėkite šalinimo procedūrą.

- 1 Išjunkite spausdintuvą ir atjunkite kabelį tarp spausdintuvo ir kompiuterio.
- 2 Įjunkite kompiuterį, įeikite kaip sistemos administratorius arba administratorių grupės narys.
- 3 Spustelėkite [Start], pasirinkite [Control Panel], tuomet pasirinkite [Add or Remove Programs].

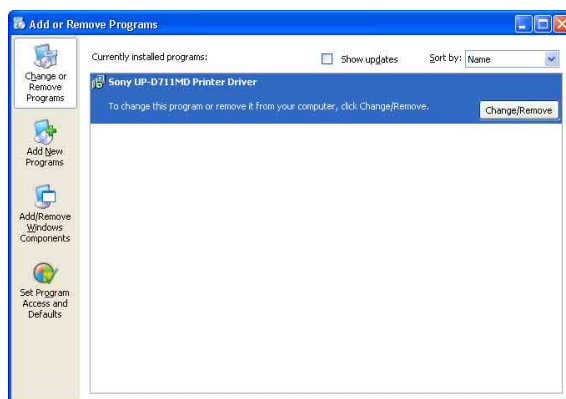


- 4 Pasirinkite spausdintuvo tvarkyklę sąraše [Currently installed programs], tuomet spustelėkite [Change/Remove].

Atsidarys šis langas.

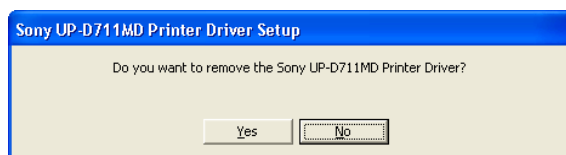

5 Spustelėkite [Yes].

Baigus spausdintuvo tvarkyklės šalinimą, pasirodys šis dialogo langas.

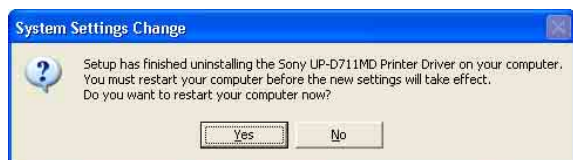

6 Spustelėkite [Yes].

Kompiuteris pasileis iš naujo.

Tuo spausdintuvo tvarkyklės šalinimas baigiamas.