

# Printer Driver

## Konfigurationsvejledning

Denne vejledning beskriver, hvordan du skal konfigurere printerdriveren til brug med Windows 7, Windows Vista og Windows XP.

### **Før du bruger denne software**

Før du bruger printerdriveren, skal du sikre dig, at du har læst "Readme"-filen.

## UP-D711MD

---

# Indholdsfortegnelse

<b>Konfigurering af printeren .....</b>	<b>3</b>
Indstillinger for fanen [Main] .....	4
Indstillinger for fanen [Density Adjust] .....	5
Indstillinger for fanen [Message] .....	6
<b>Liste over meddelelser .....</b>	<b>7</b>

Microsoft og Windows er registrerede varemærker for Microsoft Corporation.  
Andre firma- og produktnavne omtalt i denne vejledning er også varemærker og registrerede varemærker.

Skærbillederne, der anvendes til at beskrive konfigurationen i denne vejledning, forudsætter, at UP-D711MD-printeren anvendes i et Windows 7-miljø. For yderligere oplysninger om indstillinger henvises til brugervejledningen for printeren sammen med denne vejledning.

## Konfigurerings af printeren

Du kan åbne UP-D711MD-indstillingsskærmen og konfigurere forskellige indstillinger, før du begynder at udskrive fra programmer.

Konfigurer printeren i følgende miljø.

- Skærmopløsning på mere end SVGA (800 × 600)
- Tegnstørrelsen på skærmen er standarden.  
Windows XP: Normal size (96 DPI)  
Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more information  
Windows 7: Smaller - 100% (default)

Du kan åbne skærmen til indstilling ved at bruge en af følgende metoder.

- I menuen [Start] skal du vælge [Devices and Printers] ([Control Panel] og derefter [Printer] med Windows Vista; [Printers and Faxes] med Windows XP). Vælg Sony UP-D711MD-printerikonet og højreklik derefter for at vælge [Printing preferences] ([Select printing preferences] fra kommandobjælken med Windows Vista; [Printing preferences] fra menuen [File] med Windows XP). Indstillingerne, du udfører her, anvendes normalt som standardindstillinger for UP-D711MD-printeren. Det kan dog ske, at standardindstillingerne for nogle softwarepakker prioriteres højere og derfor anvendes i stedet for.
- I dit programs [File]-menu skal du klikke på kommandoen, der bruges til at udføre printerindstillinger. Indstillinger udført på denne måde, vil kun være gyldige, indtil du lukker programmet.

Denne vejledning beskriver de faner, der optræder i indstillingsskærmen for UP-D711MD.

### Fanen [Main]

Justerer de grundlæggende indstillinger for udskrift, som fx papirformat, papirtype og antal udskriftkopier.

### Fanen [Density Adjust]


Justerer udskriftsbilledernes densitet.

### Fanen [Message]

Vælger skærmindstillinger for dialogbokse med meddelelser.

## Indstillinger for fanen [Main]

Denne fane anvendes til at udføre grundlæggende printerindstillinger.

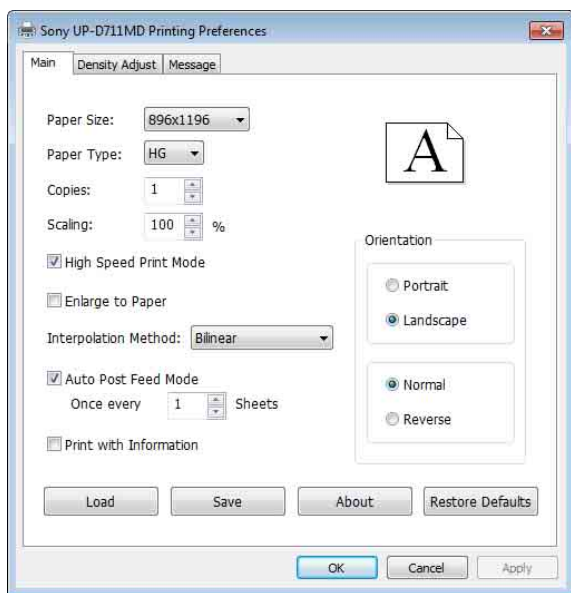

### Paper Size

Vælger papirformatet.

Punkt	Beskrivelse
596 × 896	50,4 mm × 75,7 mm
672 × 896	56,8 mm × 75,7 mm
896 × 896	75,7 mm × 75,7 mm
896 × 1196	75,7 mm × 101,1 mm
896 × 2688	75,7 mm × 227,1 mm

### Paper Type

Vælger den ønskede papirtype. Du kan vælge papirtype og tilsvarende papirstørrelse som følger.

Paper type	Paper size
S	UPP-84S
HG	UPP-84HG

### Copies

Vælger antallet af kopier, der skal udskrives (1 til 255).

### Scaling

Du kan vælge at formindske eller forstørre billedet (25% til 400%). For at ændre interpolationsmetode skal du vælge en af indstillingerne i [Interpolation Method] nedenfor. [Enlarge to Paper] kan ikke anvendes med denne funktion.

## High Speed Print Mode

Afkryds denne boks for at udskrive med høj hastighed.

## Enlarge to Paper

Hvis billedet er mindre end det valgte papirformat, bliver det automatisk forstørret, så det passer til papirformatet. For at ændre interpolationsmetode skal du vælge en af indstillingerne i [Interpolation Method] nedenfor. [Scaling] kan ikke anvendes med denne funktion.

## Interpolation Method

Væg den ønskede metode til interpolation af billedet ([Bilinear], [Nearest Neighbor]).

## Auto Post Feed Mode

Valger, hvor meget papiret skal fremføres (kort/lang). Afkrydsning af dette felt resulterer i en længere papirfremføring efter udskrivning. Med en længere papirfremføring, vil papiret blive fremført til afskæringspositionen uden at du skal trykke på FEED-knappen.

Afkryds denne boks for at skære papiret af efter udskrift. Hvis der udskrives mere end én side, øges margenen mellem billederne. [Once every \_\_ Sheets] kan vælges, hvis denne boks er afkrydset.

Hvis du ikke afkrydser denne boks, fremføres papiret et kortere stykke efter udskrivning. Fjern krydset fra denne boks, hvis du skal udskrive flere sider og vil have mindre margener.

### Bemærk


Hvis du bruger kort papirfremføring, skal du trykke på FEED-knappen for at skære papiret af efter fremføring. Hvis papiret skæres af, uden at der er trykket på FEED-knappen, kan et billede blive skåret midt over.

## Once every \_\_ Sheets

Du kan vælge, hvor ofte der skal anvendes lang fremføring.


Papiret fremføres kort, indtil det valgte antal sider er udskrevet, hvorefter der anvendes en lang fremføring. Tællingen nulstilles, når antallet af udskrevne sider når den forvalgte værdi. Tællingen vil også blive nulstillet, når der tændes for strømmen, FEED-knappen bruges, antallet af udskrifter ændres eller udskrivning annulleres.

(Eksempel 1) Værdien er sat til 1:

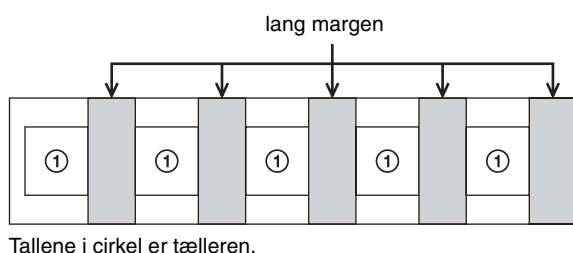


(Eksempel 2) Værdien er sat til 3, og der udskrives seks sider:

- Når der ikke nulstilles

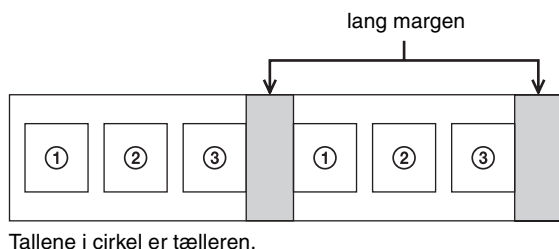

- Ved nulstilling efter udskrift af en side 2.

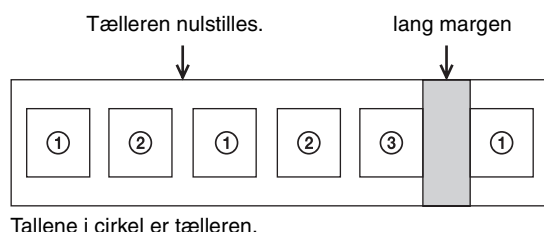

## Print with Information

Afkryds denne boks for at udskrive billeder sammen med informationen fra fanen [Density Adjust] under billederne.

Hver forvalgt værdi udskrives med følgende notation.

Punkt	Notation
GAMMA	GAM
Advanced	ADV
Dark	DARK
Light	LIGHT
Sharpness	SHARP

## Orientation

Vælger orientering for billederne. For at udskrive et billede i portrætformat skal du afkrydse boksen [Portrait], og for landskabsformat skal du afkrydse boksen [Landscape]. Afkryds boksen [Reverse] for at få et billede udskrevet med 180 graders rotation.

## Bemærk

Udskriftsresultatet kan afvige afhængig af programmet. Kontrollér resultatet ved at lave en prøveudskrift af et eller flere billeder.

## Load

Bruges til at indlæse gemte indstillinger.

## Save

Bruges til at gemme de aktuelle indstillinger.

## About

Viser information om driverversionen.

## Restore Defaults


Ved tryk på fanen [Main] bliver alle indstillinger gendannet til deres standard.

## Indstillinger for fanen [Density Adjust]

Justerer udskriftsbilledets densitet. Justeringen afspejles i densitetsgrafen øverst til højre i indstillingsskærmbilledet og gråtonebjælken. Men effekten af den forvalgte værdi for [GAMMA] afspejles ikke.

Den lodrette akse på densitetsgrafen afspejler densiteten for billedet, der faktisk udskrives, hvor den øvre grænse svarer til hvid og den nedre svarer til sort.

Den vandrette akse udtrykker billeddata, hvor den øvre grænse svarer til hvid og den nedre grænse svarer til sort. Gråtonebjælken udtrykker den faktiske densitet i stedet for værdien på densitetsgrafens lodrette akse.

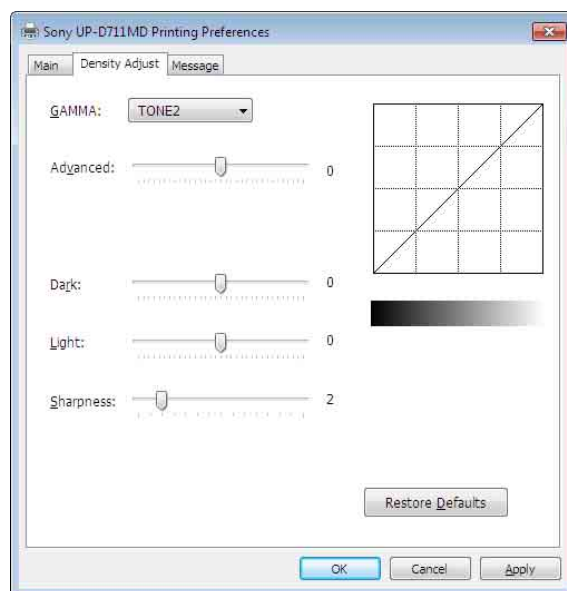

## GAMMA

Vælger intensiteten af gråtonerne.

Punkt	Forklaring
TONE1	Lysere end standard
TONE2	Standard
TONE3	Hård graduering af gråtoner
TONE4	Blød graduering af gråtoner

## Advanced

Flyt skyderen for at vælge gråtoneniveauet. Jo større valgt værdi, desto mørkere gråtone. Du kan justere gråtonen til en af 65 værdier. Standarden er 0. Det justérbare område er -32 til +32.

## Dark

Flyt skyderen for at justere billedets mørke dele. Jo større valgt værdi, desto mørkere bliver billedets mørke dele. Du kan justere gråtonen til en af 129 værdier. Standarden er 0. Det justérbare område er -64 til +64.

## Light

Flyt skyderen for at justere billedets lyse dele. Jo større valgt værdi, desto lysere bliver billedets lyse dele. Du kan justere gråtonen til en af 129 værdier. Standarden er 0. Det justérbare område er -64 til +64.

## Sharpness

Flyt skyderen for at justere billedets kanter. Jo større valgt værdi, desto skarpere bliver billedets kanter. Du kan justere gråtonen til en af 15 værdier. Standarden er 2. Det justérbare område er 0 til 14.

## Restore Defaults

Ved tryk på fanen [Density Adjust] bliver alle indstillinger gendannet til deres standard.

## Indstillinger for fanen [Message]


Vælger skærmindstillinger for dialogbokse med meddelelser.

Der vises bokse med meddelelser, når fx UP-D711MD ikke kan udskrive på grund af fejl.

Der er dialogbokse i standardstørrelse og en lille.

Dialogbokse i standardstørrelse viser printerens fejlstatus og anvisninger på, hvordan fejlen skal håndteres. Små dialogbokse bruges til at vise en enkelt sætning med simple anvisninger på, hvordan man skal håndtere fejlen.

For oplysninger om hver meddelelse henvises til "Liste over meddelelser" (side 7).

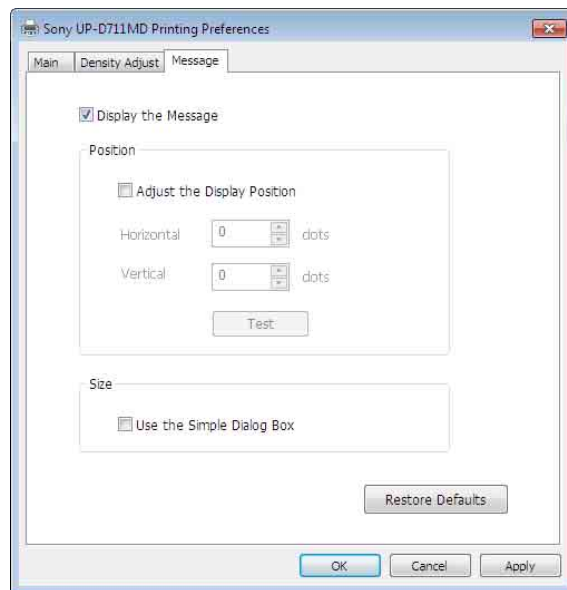

## Display the Message

Brug ON/OFF til at vise meddelelsesdialogboksen. Hvis afkrydsningsfeltet er OFF, kan du ikke indstille andet i fanen [Message].

## Adjust the display position

Afkryds denne boks for at justere positionen på skærmen af meddelelsesdialogbokse.

Meddelelsesdialogboksen vises i den position, der er defineret af værdierne angivet af indstillingerne for [Horizontal] og [Vertical].

Standardindstilling: Boksen ved [Adjust the Display Position] er ikke afkrydset.

(Standardmeddelelsesboksen vises i midten af skærmen, men den lille meddelelsesboks vises øverst til venstre på skærmen).

## Horizontal, Vertical

Disse indstillinger er aktiverede, når afkrydsningsfeltet ud for [Adjust the Display Position] er udfyldt. Indtast koordinaterne for positionen på skærmen (øverste venstre hjørne af meddelelsesdialogboksen). Meddelelsesboksen vises i den position, der er defineret ved de værdier, der angives her.

## Test

Kontrollér den position, hvor meddelelsesdialogboks vises på skærmen. En testdialogboks vises i den position, som er defineret med [Horizontal] og [Vertical].

## Use the Simple Dialog Box

Udfyld dette afkrydsningsfelt for at få vist de små meddelelsesdialogbokse.

## Restore Defaults

Gendanner alle indstillinger i fanen [Message] til deres standard.

# Liste over meddelelser

Følgende meddelelser kan vises. Løs problemer ved at følge nedenstående anvisninger. For yderligere information om løsning af problemer henvises til brugsanvisningen for UP-D711MD i kombination med denne brugsanvisning.

Standardmeddelelses-dialogboks	Lille meddelelsesdialogboks
No thermal paper. Please set the thermal paper. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Set thermal paper.
Now, Feeding. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Door is open. Please close the door. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Close door.
Now regulating the head temperature of the printer. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Mechanical error. Printing has been aborted. Please turn off the printer, then turn it back on and print again.	Restart printer.
Printer is not ready. Make sure the printer is plugged in to a power source and the printer cable is correctly connected. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Check printer.