

# Printer Driver

## 설치 안내서

이 안내서는 Windows 7, Windows Vista 및 Windows XP용 프린터 드라이버 설치에 대해 설명합니다.

### **본 소프트웨어를 사용하기 전에**

프린터 드라이버를 사용하기 전에 반드시 "Readme" 파일을 읽으십시오.

---

# 목차

<b>작동 환경 요구 사항</b>	<b>3</b>
<b>본 문서 정보</b>	<b>3</b>
<b>Windows 7에서 프린터 드라이버 설치</b>	<b>4</b>
설치하기 전에	4
Windows 7에서 설치	4
Windows 7에서 프린터 드라이버 제거	6
<b>Windows Vista에서 프린터 드라이버 설치</b>	<b>7</b>
설치하기 전에	7
Windows Vista에서 설치	7
Windows Vista에서 프린터 드라이버 제거	10
<b>Windows XP에서 프린터 드라이버 설치</b>	<b>11</b>
설치하기 전에	11
Windows XP에서 설치	12
Windows XP에서 프린터 드라이버 제거	13

Microsoft 및 Windows는 Microsoft Corporation  
의 등록 상표입니다.  
본 안내서에 나오는 기타 회사명과 제품명도 상표와  
등록 상표입니다.

## 작동 환경 요구 사항

프린터 드라이버를 사용하려면 다음과 같은 환경이 필요합니다.

- 컴퓨터  
USB 2.0 규격 준수\*1
- 운영 체제  
Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional/Home Edition
- USB 드라이버  
Microsoft Corporation에서 제조\*2
- USB  
인증된 USB 케이블

\*1 모든 USB 장치, USB 확장 보드 또는 확장 카드와의 호환성은 보장되지 않습니다.

\*2 다른 USB 2.0 드라이버와의 작동은 보장되지 않습니다.

다음과 같은 화면 설정에서 작동합니다.

- 디스플레이 해상도 SVGA (800 × 600) 이상
- 화면 문자 크기는 기본값을 사용합니다.  
Windows XP: Normal size (96 DPI)  
Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more information  
Windows 7: Smaller - 100% (default)

### 참고

프린터가 연결되어 있고 전원이 켜져 있을 때 컴퓨터가 절전, 대기(일시 정지) 또는 최대 절전 모드로 들어가지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 올바른 작동을 보장할 수 없습니다.

## 본 문서 정보

본 문서의 Control Panel 조작에 대한 설명은 Windows XP 또는 Windows Vista에서 클래식 보기인 것으로 가정합니다. 클래식 보기로 전환하려면 [Start]를 클릭해 [Control Panel]을 선택하고 화면 왼쪽에 표시되는 Control Panel Properties에서 [Switch to Classic View]를 클릭하십시오.

본 안내서에 표시되는 화면 메시지는 UP-D711MD 프린터가 연결되어 있는 상태를 가정합니다. 다른 모델의 프린터를 사용하고 있을 경우 본 안내서의 화면 메시지를 읽을 때는 "UP-D711MD"를 사용 중인 프린터 모델명으로 대체하십시오.

이 안내서에는 다음과 같은 운영 체제에서 실행되는 컴퓨터에서 프린터 드라이버를 설치 및 제거하는 방법이 나와 있습니다: Microsoft Windows 7, Windows Vista 및 Windows XP. 사용하는 운영 체제의 지침을 따르십시오.

사용하는 프린터의 사용 설명서를 확인하고 적합한 프린터의 설치 안내서를 읽으십시오.

이 안내서에 나와있지 않은 문제에 대해서는 사용하는 프린터의 사용 설명서를 참조한 다음 설치를 수행하십시오.

# Windows 7에서 프린터 드라이버 설치

## 설치하기 전에

### 참고

프린터 드라이버를 설치하기 전에 컴퓨터에 프린터를 연결하지 마십시오. 프린터를 미리 연결해 놓으면 컴퓨터에서 인식되지 않을 수 있습니다.

### 버전 업그레이드 정보

프린터 드라이버를 업그레이드하려는 경우 설치를 시작하기 전에 이전 프린터 드라이버를 제거하십시오. 프린터 드라이버 제거 절차에 대한 자세한 내용은 이 안내서의 "Windows 7에서 프린터 드라이버 제거" 절을 참조하십시오.

설치가 실패하거나 취소될 경우 설치를 다시 시도하기 전에 컴퓨터를 다시 시작하십시오.

## Windows 7에서 설치


- 1 컴퓨터의 전원을 켜고 시스템 관리자 또는 Administrators 그룹의 구성원으로 로그인합니다.
- 2 부속된 CD-ROM의 "PrinterDriver\Win7" 폴더에 있는 "Setup.exe"를 실행합니다(또는 Sony 웹 사이트에서 다운로드).

[User Account Control] 대화 상자가 나타납니다.




- 3 [Yes]를 클릭합니다.

다음과 같은 대화 상자가 나타납니다.

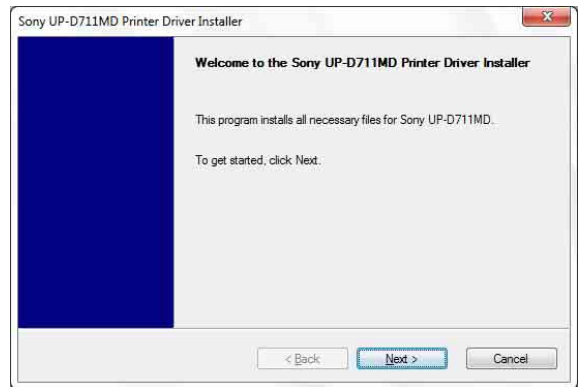


- 4 [Next]를 클릭합니다.

최종 사용자 사용권 계약이 나타납니다.

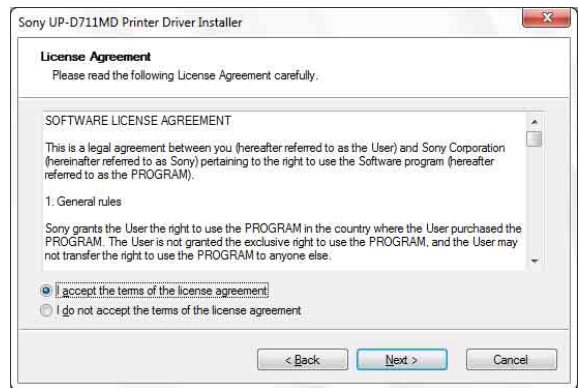


- 5 [I accept the terms of the license agreement]를 선택하고 [Next]를 클릭합니다.

다음과 같은 대화 상자가 나타납니다.

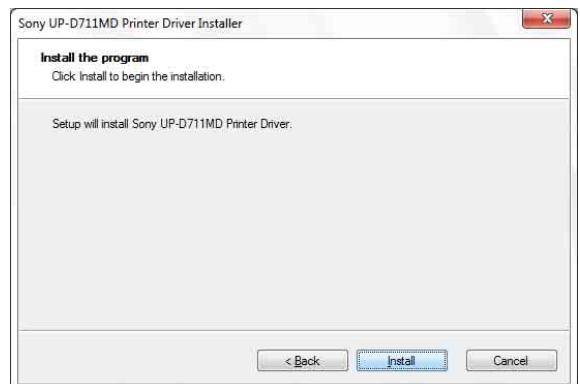

## 6 [Install] 을 클릭합니다.


설치가 시작됩니다. 설치가 진행 중인 동안 설치 상태가 대화 상자에 나타납니다.

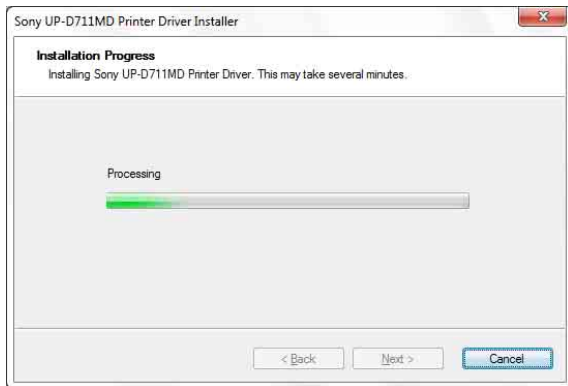

설치가 진행 중인 동안 다음 대화 상자가 나타나면 [Install this driver software anyway] 를 클릭합니다.



설치가 끝나면 다음 대화 상자가 나타납니다.

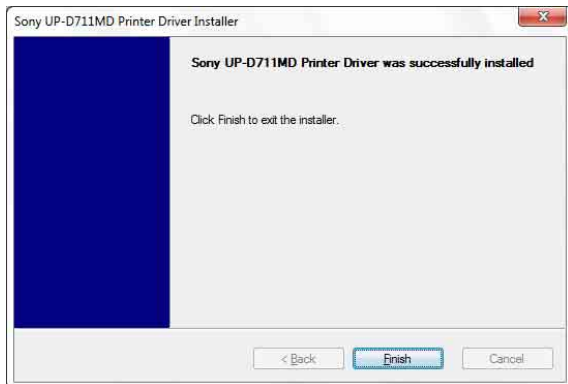

## 7 [Finish] 를 클릭합니다.

## 8 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.


프린터 드라이버 설치가 완료되었습니다.

[Start] 를 클릭하고 [Control Panel] 과 [View devices and printers] 를 차례로 선택하면 프린터가 컴퓨터에서 인식되는지 확인할 수 있습니다. 프린터가 컴퓨터에서 인식된 경우 다음과 같이 [Printers and Faxes] 에 프린터 아이콘이 나타납니다.



## 컴퓨터가 프린터를 인식하지 못할 경우

프린터 드라이버를 설치하기 전에 프린터를 컴퓨터에 연결한 경우 프린터가 [Printers and Faxes] 가 아닌 [Unspecified] 에 나타날 수 있습니다. 이런 경우 프린터가 컴퓨터에서 인식되지 않아 사용할 수 없습니다.

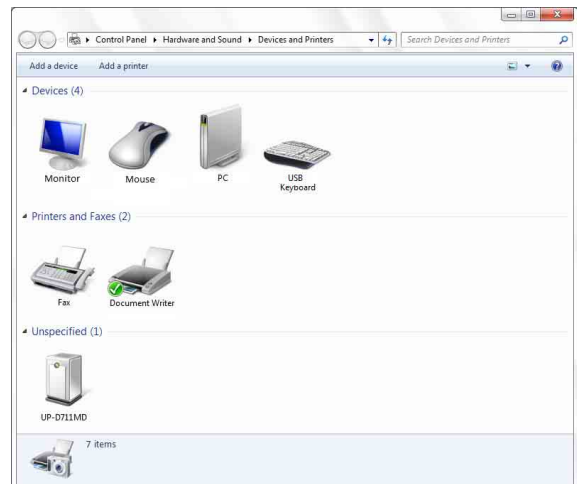


이러한 경우에는 다음과 같이 프린터 드라이버를 업데이트하십시오.

- 1 컴퓨터에 프린터를 연결하는 케이블을 분리합니다.
- 2 프린터 드라이버를 설치하지 않은 경우 "Windows 7에서 설치"의 단계에 따라 지금 설치합니다.
- 3 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.

- 4 [Start]를 클릭하고, [Control Panel]과 [View devices and printers]를 차례로 선택합니다.
- 5 [Unspecified]에서 UP-D711MD를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 [Troubleshoot]을 선택합니다.

다음과 같은 대화 상자가 나타납니다.

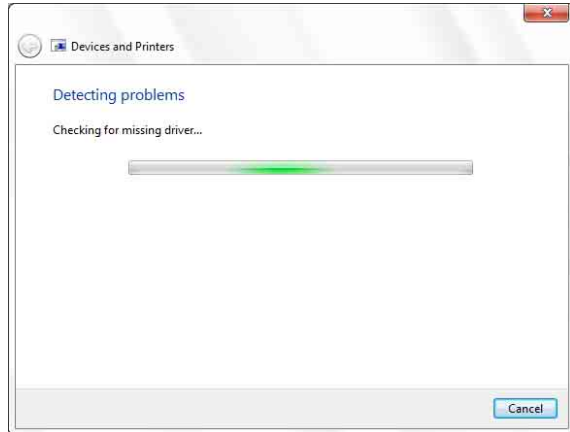


잠시 후에 화면은 다음과 같이 변경됩니다.




- 6 [Apply this fix]를 클릭합니다.

다음과 같은 대화 상자가 나타납니다.

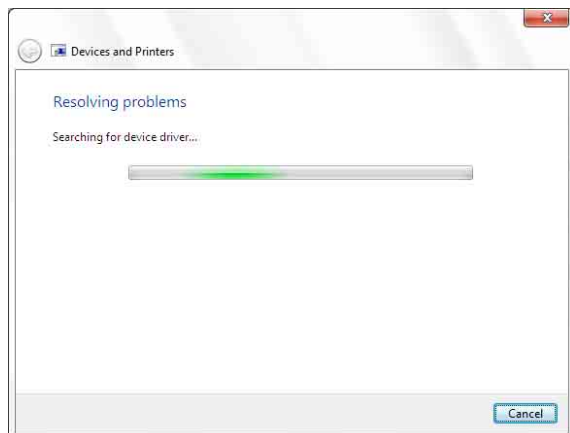

잠시 후에 화면은 다음과 같이 변경됩니다.

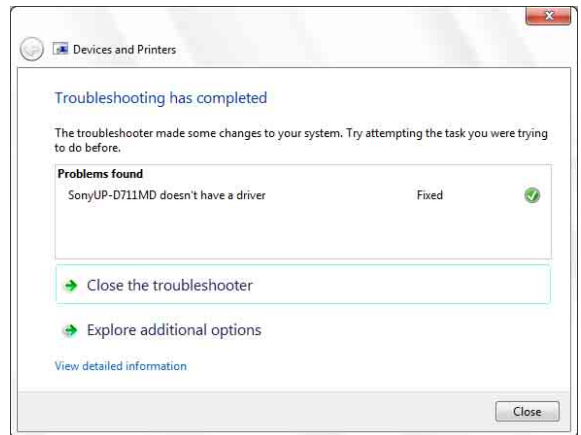

- 7 [Close]를 클릭합니다.


프린터 드라이버 업데이트가 완료되었습니다.

## Windows 7에서 프린터 드라이버 제거

### 참고

제거 절차를 시작하기 전에 프린터가 컴퓨터에 연결되어 있지 않아야 하고 컴퓨터는 꺼져 있어야 합니다. [Found New Hardware] 대화 상자가 나타나면 컴퓨터에 프린터를 연결하는 케이블을 분리한 다음 [Cancel]을 클릭하고 대화 상자를 닫습니다. 그런 다음 제거 절차를 다시 시작합니다.

- 1 프린터의 전원을 끄고 컴퓨터에 연결하는 케이블을 분리합니다.
- 2 컴퓨터의 전원을 켜고 시스템 관리자 또는 Administrators 그룹의 구성원으로 로그인합니다.
- 3 [Start]를 클릭하고 [Control Panel]과 [Uninstall a program]을 차례로 선택합니다.

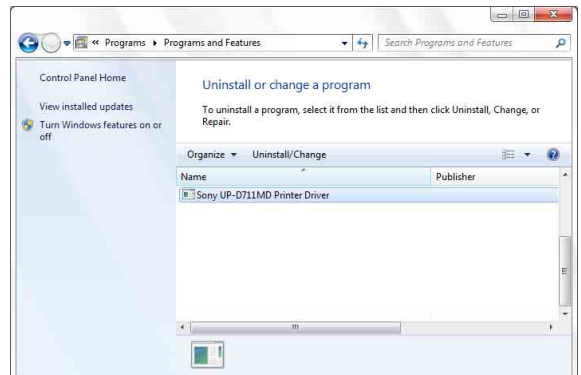

- 4 [Uninstall or change a program] 목록에서 프린터 드라이버를 선택한 다음 [Uninstall/Change]를 클릭합니다.

다음과 같은 대화 상자가 나타납니다.



- 5 [Yes]를 클릭합니다.

제거가 시작됩니다.

제거가 끝나면 다음 대화 상자가 나타납니다.



- 6 [Yes]를 클릭합니다.

컴퓨터가 다시 시작됩니다.

프린터 드라이버 제거가 완료되었습니다.

## Windows Vista에서 프린터 드라이버 설치

### 설치하기 전에

#### 버전 업그레이드 정보

프린터 드라이버를 업그레이드하려는 경우 설치를 시작하기 전에 이전 프린터 드라이버를 제거하십시오. 프린터 드라이버 제거 절차에 대한 자세한 내용은 이 안내서의 "Windows Vista에서 프린터 드라이버 제거" 절을 참조하십시오.

설치가 실패하거나 취소될 경우 설치를 다시 시도하기 전에 컴퓨터를 다시 시작하십시오.

### Windows Vista에서 설치

- 1 드라이버를 설치하려는 프린터(한 대만)를 컴퓨터에 연결합니다.
- 2 연결된 프린터의 전원을 켭니다.
- 3 컴퓨터의 전원을 켜고 시스템 관리자 또는 Administrators 그룹의 구성원으로 로그인합니다.

[Found New Hardware] 대화 상자가 나타납니다.




"Device driver software was not successfully installed" 메시지가 나타나고 [Found New Hardware] 대화 상자가 나타나지 않을 경우 USB 케이블을 뽑았다가 다시 연결하십시오. 그래도 [Found New Hardware] 대화 상자가 나타나지 않는다면 프린터 드라이버를 설치할 프린터가 켜져 있고 컴퓨터에 연결되어 있는 상태에서 아래 설명된 단계를 수행하십시오. (이 때 다른 USB 프린터 또는 먼저 설치한 프린터가 연결되어 있으면 안 됩니다.)



- ① [Start]를 클릭하고 [Control Panel]을 선택합니다.
- ② [System]을 두 번 클릭합니다.
- ③ [Device Manager]를 클릭합니다.  
[User Account Control] 대화 상자가 나타납니다.
- ④ [Continue]를 클릭합니다.  
[Device Manager] 창이 나타납니다.
- ⑤ [Universal Serial Bus controllers] 왼쪽의 [+]를 클릭합니다.
- ⑥ [USB Printing support]를 선택한 다음 [Action] 메뉴에서 [Uninstall]을 선택합니다.
- ⑦ 컴퓨터를 다시 시작합니다.  
[Found New Hardware] 대화 상자가 나타납니다.


#### 4 [Locate and install driver software (recommended)]를 클릭합니다.

다음과 같은 대화 상자가 나타납니다.

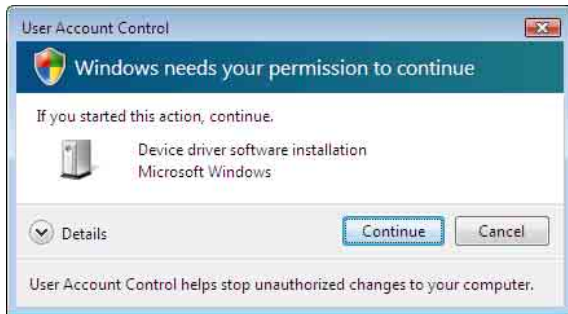


#### 5 [Continue]를 클릭합니다.

#### 6 다음 대화 상자가 나타날 경우 [Don't search online]을 클릭합니다.

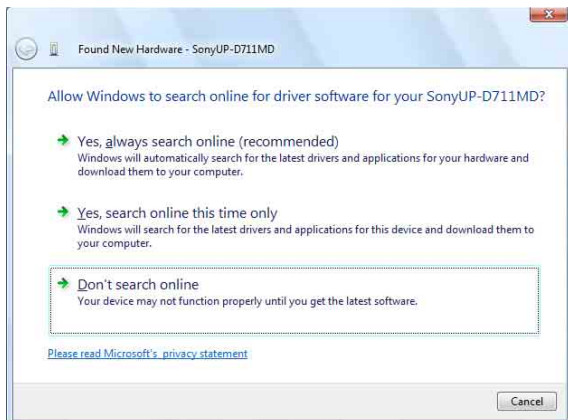

화면이 다음과 같이 변경됩니다.

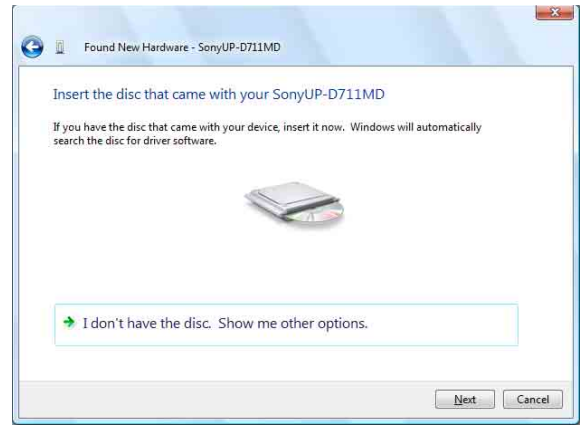


여기에서는 사용자가 부속된 CD-ROM을 사용하는지(아니면 온라인으로 드라이버를 다운로드했는지)에 따라 절차가 달라집니다.

#### 부속된 CD-ROM을 사용할 때의 절차

#### 7 부속된 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

화면이 다음과 같이 변경됩니다.

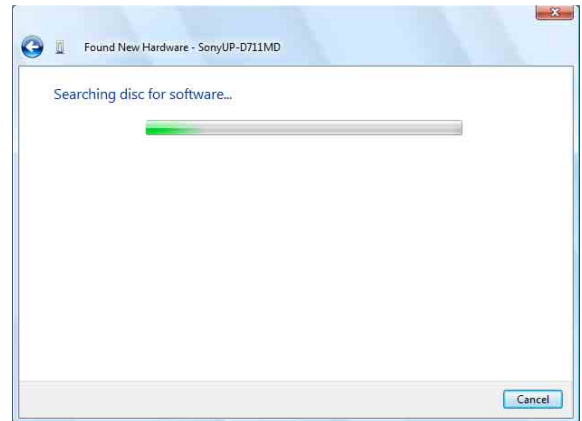


소프트웨어 검색이 끝나면 다음 대화 상자가 나타납니다.





- 8 [Install this driver software anyway]를 클릭합니다.

대화 상자가 닫히고 [Found New Hardware] 대화 상자가 다시 나타납니다.

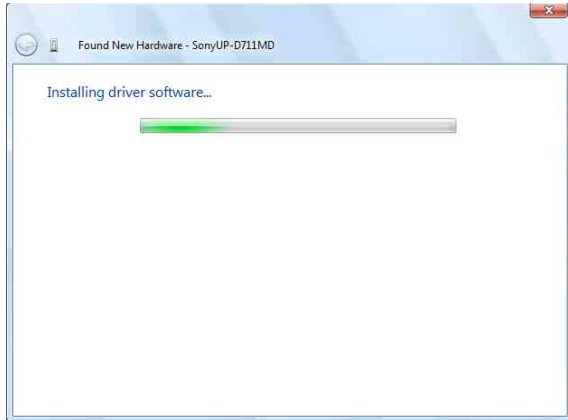

파일이 복사되면 화면이 다음과 같이 변경됩니다.




- 9 [Close]를 클릭합니다.

프린터 드라이버 설치가 완료되었습니다.

## 부속된 CD-ROM이 없을 경우의 절차


- 7 [I don't have the disc. Show me other options]를 클릭합니다.

화면이 다음과 같이 변경됩니다.

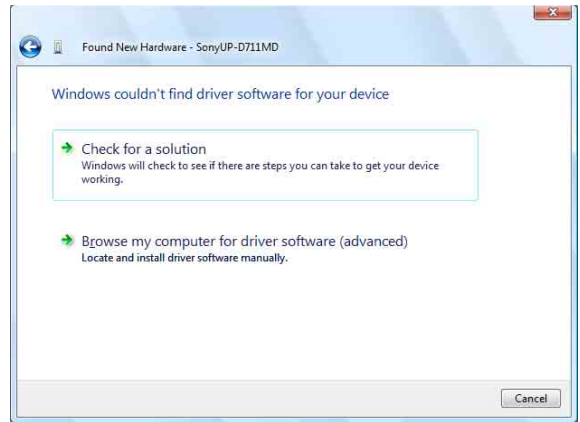

- 8 [Browse my computer for driver software (advanced)]를 클릭합니다.

화면이 다음과 같이 변경됩니다.

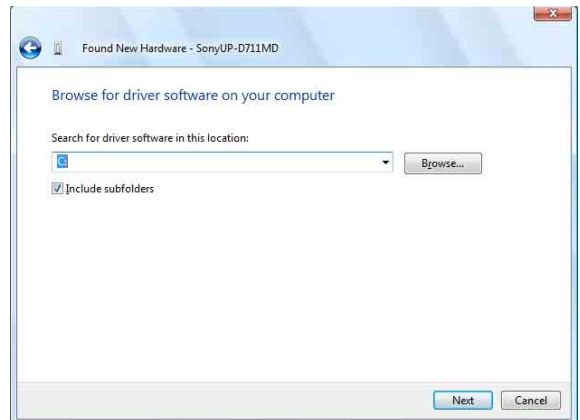

- 9 [Browse]를 클릭해 [Browse For Folder] 대화 상자를 엽니다. 다운로드한 설치 파일의 압축을 풀 폴더를 지정한 다음 [OK]를 클릭해 [Browse For Folder] 대화 상자를 닫습니다.


## 10 [Next]를 클릭합니다.

다음과 같은 대화 상자가 나타납니다.



## 11 [Install this driver software anyway]를 클릭합니다.

대화 상자가 닫히고 [Found New Hardware] 대화 상자가 다시 나타납니다.

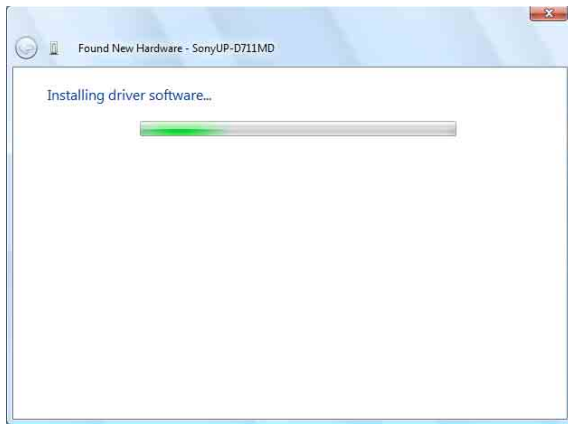

파일이 복사되면 화면이 다음과 같이 변경됩니다.



## 12 [Close]를 클릭합니다.

프린터 드라이버 설치가 완료되었습니다.


## Windows Vista에서 프린터 드라이버 제거

이 단원에서는 프린터 드라이버 제거 방법에 대해 설명합니다.


### 참고

제거 절차를 시작하기 전에 프린터가 컴퓨터에 연결되어 있지 않아야 하고 컴퓨터는 꺼져 있어야 합니다. [Found New Hardware] 대화 상자가 나타나면 컴퓨터와 프린터를 연결한 케이블을 분리하고, 모든 화면에서 [Cancel]을 클릭해 대화 상자를 닫은 다음, 제거 절차를 한 번 더 시작하십시오.

- 1 프린터의 전원을 끄고 컴퓨터와 프린터를 연결한 케이블을 분리합니다.
- 2 컴퓨터의 전원을 켜고 시스템 관리자 또는 Administrators 그룹의 구성원으로 로그인합니다.
- 3 [Start]를 클릭하고 [Control Panel]과 [Programs and Features]를 차례로 선택합니다.

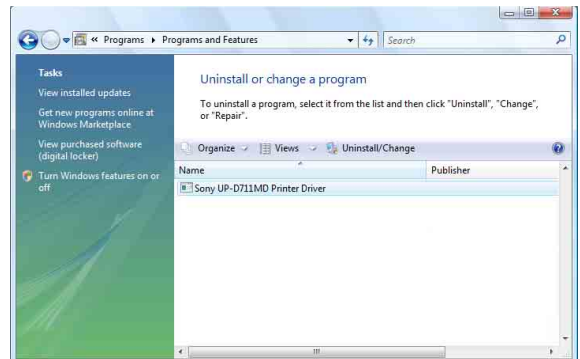

- 4 [Uninstall or change a program] 목록에서 프린터 드라이버를 선택한 다음 [Uninstall/Change]를 클릭합니다.

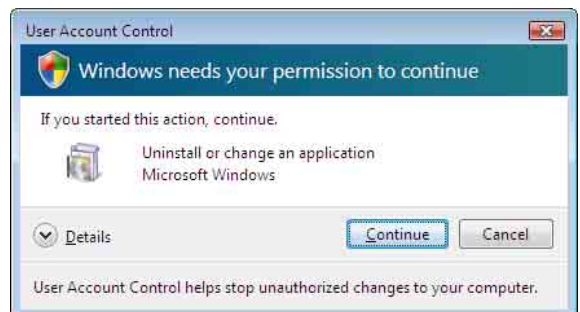


5 [Continue]를 클릭합니다.



6 [Yes]를 클릭합니다.

프린터 드라이버가 제거되면 다음 대화 상자가 나타납니다.

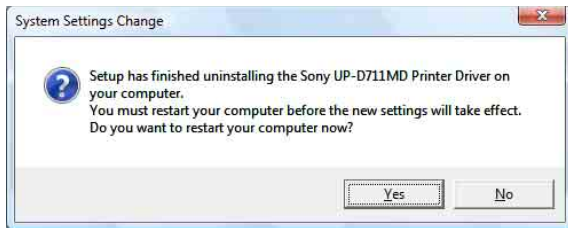

7 [Yes]를 클릭합니다.

컴퓨터가 다시 시작됩니다.

프린터 드라이버 제거가 완료되었습니다.

## Windows XP에서 프린터 드라이버 설치

### 설치하기 전에

#### 버전 업그레이드 정보

프린터 드라이버를 업그레이드하려는 경우 설치를 시작하기 전에 이전 프린터 드라이버를 제거하십시오. 프린터 드라이버 제거 절차에 대한 자세한 내용은 이 안내서의 "Windows XP에서 프린터 드라이버 제거" 절을 참조하십시오.

설치가 실패하거나 취소될 경우 설치를 다시 시도하기 전에 컴퓨터를 다시 시작하십시오.

#### 참고

프린터 드라이버를 설치 또는 제거한 후에는 반드시 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 재부팅하지 않을 경우 작동이 불안정할 수 있습니다.

#### Driver Signing Options 정보

현재 프린터 드라이버는 Windows Logo 테스트를 통과하지 못했습니다. 따라서 드라이버 설치 시 오류 메시지가 나타나고 드라이버가 설치되지 않을 수 있습니다.

[Driver Signing Options] 대화 상자의 [What action do you want Windows to take?] 그룹 상자에서 [Ignore] 또는 [Warn]을 선택하십시오. [Block]을 선택하면 프린터 드라이버를 설치할 수 없습니다.



다음과 같이 [Driver Signing Options] 대화 상자를 여십시오.

- ① [Start] 메뉴에서 [Control Panel]을 클릭합니다.
- ② [System]을 두 번 클릭합니다.  
[System Properties] 대화 상자가 열립니다.
- ③ [Hardware] 탭을 클릭합니다.
- ④ [Driver Signing] 버튼을 클릭합니다.

본 안내서의 모든 설명에서는 이 대화 상자의 설정을 [Warn]으로 가정합니다.

## Windows XP에서 설치

- 1 드라이버를 설치하려는 프린터(한 대만)를 컴퓨터에 연결합니다.
- 2 연결된 프린터의 전원을 켭니다.
- 3 컴퓨터의 전원을 켜고 시스템 관리자 또는 Administrators 그룹의 구성원으로 로그인합니다.

[Found New Hardware Wizard] 대화 상자가 열립니다.



- 3단계와 같은 [Found New Hardware Wizard] 대화 상자가 나타나면 4단계로 진행하십시오.
- 3단계와 다른 [Found New Hardware Wizard] 대화 상자가 나타나면 5단계로 진행하십시오.
- [Found New Hardware Wizard] 대화 상자가 나타나지 않으면 설치할 프린터가 켜져 있고 컴퓨터에 연결된 상태에서 다음 작업을 수행하십시오. (이 때 다른 USB 프린터 또는 먼저 설치한 프린터가 연결되어 있으면 안 됩니다.)
  - ① [Start] 메뉴에서 [Control Panel]을 클릭합니다.
  - ② [System]을 두 번 클릭합니다.  
[System Properties] 대화 상자가 열립니다.


- ③ [Hardware] 탭을 클릭합니다.
- ④ [Device Manager] 버튼을 클릭합니다.  
[Device Manager] 창이 열립니다.
- ⑤ [Universal Serial Bus controllers] 왼쪽의 [+]를 클릭합니다.
- ⑥ [USB Printing support]를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [Properties]를 엽니다. [Location]에서 현재 연결된 프린터의 모델명을 선택했는지 확인한 다음 [Action] 메뉴에서 [Uninstall]을 선택합니다.
- ⑦ 컴퓨터를 다시 시작합니다.  
Windows XP가 시작되면 [Found New Hardware Wizard] 대화 상자가 열립니다.

- 4 [No, not this time]과 [Next]를 차례로 클릭합니다.



- 5 [Install from a list or specific location (Advanced)]을 선택한 다음 [Next] 버튼을 클릭합니다.

다음과 같은 화면이 열립니다.

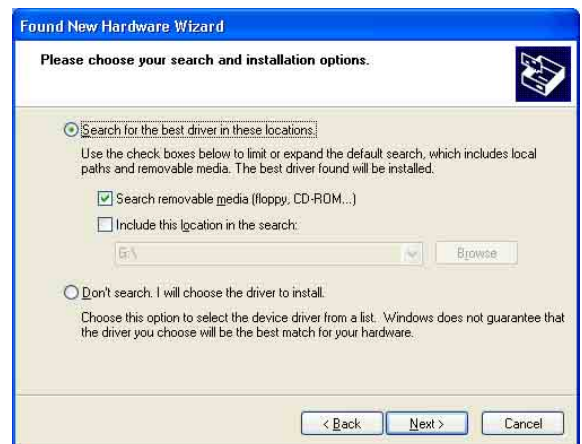

- 6 프린터 드라이버 설치 파일의 위치를 지정합니다. 사용자가 부속된 CD-ROM을 사용하는지(아니면 온라인으로 드라이버를 다운로드했는지)에 따라 절차가 달라집니다.

#### 부속된 CD-ROM을 사용할 때의 절차

[Search for the best driver in these locations]와 [Search removable media (floppy, CD-ROM...)]을 선택한 다음 부속된 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

#### 부속된 CD-ROM이 없을 경우의 절차

[Search for the best driver in these locations]와 [Include this location in the search]를 선택한 다음 [Browse]를 클릭해 [Browse For Folder] 대화 상자를 엽니다. 다운로드한 설치 파일의 압축을 풀 폴더를 지정한 다음 [OK]를 클릭해 [Browse For Folder] 대화 상자를 닫습니다.

- 7 [Next] 버튼을 클릭합니다.

다음과 같은 대화 상자가 열립니다.



- 8 [Continue Anyway] 버튼을 클릭합니다.

파일이 복사되면 다음 화면이 열립니다.



- 9 [Finish] 버튼을 클릭합니다.

Windows XP에 프린터 드라이버 설치가 완료되었습니다.

- 10 컴퓨터를 다시 시작합니다.


## Windows XP에서 프린터 드라이버 제거

이 단원에서는 프린터 드라이버 제거 방법에 대해 설명합니다.

### 참고


제거 절차를 시작하기 전에 프린터가 컴퓨터에 연결되어 있지 않아야 하고 컴퓨터는 꺼져 있어야 합니다. [Found New Hardware Wizard] 대화 상자가 나타나면 컴퓨터와 프린터를 연결한 케이블을 분리하고, 모든 화면에서 [Cancel]을 클릭해 대화 상자를 닫은 다음, 제거 절차를 한 번 더 시작하십시오.

- 1 프린터의 전원을 끄고 컴퓨터와 프린터를 연결한 케이블을 분리합니다.
- 2 컴퓨터의 전원을 켜고 시스템 관리자 또는 Administrators 그룹의 구성원으로 로그인합니다.
- 3 [Start]를 클릭하고 [Control Panel]과 [Add or Remove Programs]를 차례로 선택합니다.

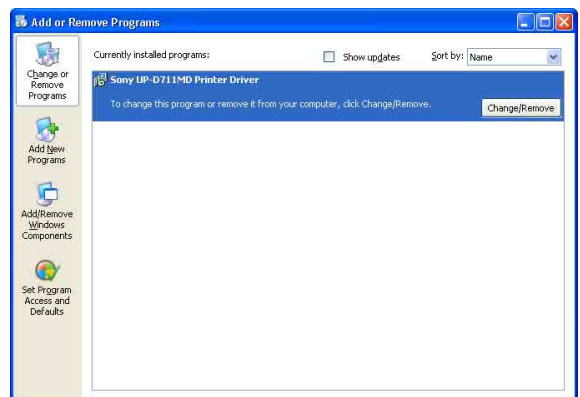

- 4 [Currently installed programs] 목록에서 프린터 드라이버를 선택한 다음 [Change/Remove]를 클릭합니다.

다음과 같은 화면이 열립니다.

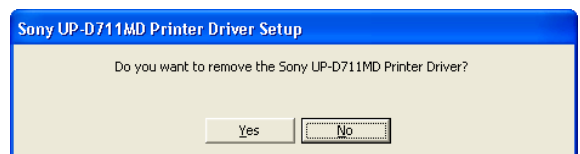

**5** [Yes]를 클릭합니다.

프린터 드라이버가 제거되면 다음 대화 상자가 나타납니다.



**6** [Yes]를 클릭합니다.

컴퓨터가 다시 시작됩니다.

프린터 드라이버 제거가 완료되었습니다.