

Printer Driver

Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων

Ο παρών οδηγός περιγράφει τη διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows 7, Windows Vista και Windows XP.

Πριν από τη χρήση αυτού του λογισμικού

Προτού χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, διαβάστε οπωσδήποτε το αρχείο "Readme".

UP-D711MD

Πίνακας περιεχομένων

Διαμόρφωση του εκτυπωτή	3
Ρυθμίσεις καρτέλας [Main]	4
Ρυθμίσεις καρτέλας [Density Adjust]	6
Ρυθμίσεις καρτέλας [Message]	7
Λίστα μηνυμάτων	8

Οι επωνυμίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Άλλες επωνυμίες εταιρειών και ονόματα προϊόντων που αναφέρονται σε αυτόν τον οδηγό είναι επίσης εμπορικά και κατατεθέντα σήματα.

Στις οθόνες που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της διαδικασίας ρύθμισης παραμέτρων στον παρόντα οδηγό λαμβάνεται ως δεδομένο ότι ο εκτυπωτής UP-D711MD χρησιμοποιείται σε περιβάλλον Windows 7. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για τον εκτυπωτή σε συνδυασμό με το παρόν εγχειρίδιο.

Διαμόρφωση του εκτυπωτή

Μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων της μονάδας UP-D711MD και να διαμορφώσετε τις διάφορες ρυθμίσεις πριν να ξεκινήσετε την εκτύπωση από εφαρμογές.

Ρυθμίστε τον εκτυπωτή στο παρακάτω περιβάλλον.

- Ανάλυση οθόνης μεγαλύτερη από SVGA (800 × 600)
- Το μέγεθος των χαρακτήρων της οθόνης είναι το προεπιλεγμένο.

Windows XP: Normal size (96 DPI)

Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more information

Windows 7: Smaller - 100% (default)

Μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

- Στο μενού [Start] επιλέξτε [Devices and Printers] ([Control Panel] και, στη συνέχεια [Printer] στα Windows Vista, [Printers and Faxes] στα Windows XP). Επιλέξτε το εικονίδιο του εκτυπωτή Sony UP-D711MD και, στη συνέχεια, κάντε δεξιό κλικ για να επιλέξετε το στοιχείο [Printing preferences] (το στοιχείο [Select printing preferences] από τη γραμμή εντολών στα Windows Vista, το στοιχείο [Printing preferences] από το μενού [File] στα Windows XP). Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε εδώ χρησιμοποιούνται συνήθως ως οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τον εκτυπωτή UP-D711MD. Ωστόσο, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών ενδέχεται να υπερσχύσουν.
- Στο μενού [File] της εφαρμογής σας, κάντε κλικ στην εντολή που χρησιμοποιείτε για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή. Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται με αυτόν τον τρόπο θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να κλείσετε την εφαρμογή.

Ο παρών οδηγός περιγράφει τις καρτέλες που εμφανίζονται στην οθόνη ρυθμίσεων του εκτυπωτή UP-D711MD.

Καρτέλα [Main]

Προσαρμόζει τις βασικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εκτύπωση, όπως το μέγεθος χαρτιού, τον τύπο χαρτιού, τον αριθμό των αντιγράφων προς εκτύπωση κλπ.

Καρτέλα [Density Adjust]


Ρυθμίζει την πυκνότητα των ειδώλων προς εκτύπωση.

Καρτέλα [Message]

Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις οθόνης που σχετίζονται με τα παράθυρα διαλόγου μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις καρτέλας [Main]

Αυτή η καρτέλα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των βασικών ρυθμίσεων εκτύπωσης.

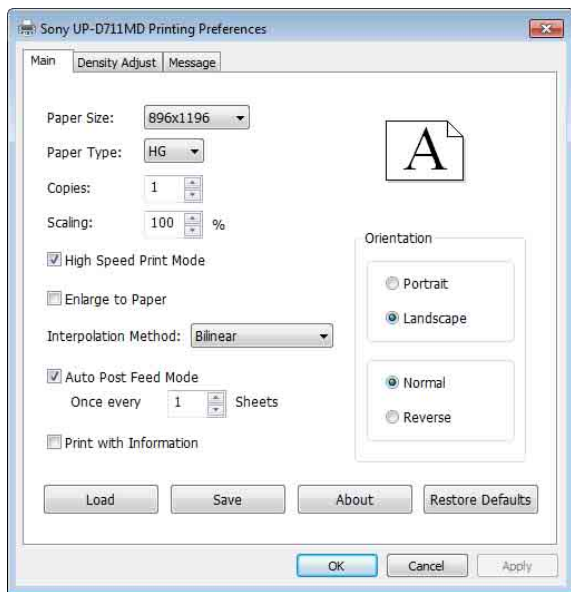

Paper Size

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού.

Στοιχείο	Περιγραφή
596 × 896	50,4 mm × 75,7 mm
672 × 896	56,8 mm × 75,7 mm
896 × 896	75,7 mm × 75,7 mm
896 × 1196	75,7 mm × 101,1 mm
896 × 2688	75,7 mm × 227,1 mm

Paper Type

Επιλέγει τον τύπο χαρτιού που έχει οριστεί. Οι τιμές των ρυθμίσεων για τον τύπο χαρτιού και το μέγεθος χαρτιού είναι οι εξής.

Paper type	Paper size
S	UPP-84S
HG	UPP-84HG

Copies

Επιλέξτε τον αριθμό των αντιγράφων προς εκτύπωση (1 έως 255).

Scaling

Επιλέξτε το βαθμό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης (25% έως 400%). Για να αλλάξετε τη μέθοδο παρεμβολής, επιλέξτε μια από τις παρακάτω ρυθμίσεις της λειτουργίας [Interpolation Method]. Η ρύθμιση [Enlarge to Paper] δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτήν τη δυνατότητα.

High Speed Print Mode

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για εκτύπωση στη λειτουργία υψηλής ταχύτητας.

Enlarge to Paper

Εάν το μέγεθος του ειδώλου είναι μικρότερο από το μέγεθος του χαρτιού, το είδωλο μεγεθύνεται αυτόματα ώστε να ταιριάζει με το μέγεθος του χαρτιού. Για να αλλάξετε τη μέθοδο παρεμβολής, επιλέξτε μια από τις παρακάτω ρυθμίσεις της λειτουργίας [Interpolation Method]. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα [Scaling] με αυτήν τη λειτουργία.

Interpolation Method

Επιλέξτε τη μέθοδο παρεμβολής ειδώλου ([Bilinear], [Nearest Neighbor]).

Auto Post Feed Mode

Ρυθμίζει το μήκος του χαρτιού που τροφοδοτείται (μικρό/μεγάλο). Εάν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο, θα ορίσετε την τροφοδοσία χαρτιού μεγαλύτερου μήκους μετά από την εκτύπωση. Με τη ρύθμιση της τροφοδοσίας χαρτιού μεγαλύτερου μήκους, το χαρτί θα προχωρήσει στη θέση κοπής, χωρίς να πατήσετε το κουμπί FEED.

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να κοπεί το χαρτί μετά από την εκτύπωση. Εάν πρόκειται να εκτυπωθούν περισσότερες από μία σελίδες, τα περιθώρια μεταξύ των ειδώλων αυξάνονται. Εάν έχει επιλεγεί αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να ορίσετε την επιλογή [Once every __ Sheets].

Εάν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο, το χαρτί που τροφοδοτείται θα είναι μικρότερο μετά από την εκτύπωση.

Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου για να εκτυπώσετε περισσότερες από μία σελίδες και να μειώσετε τα περιθώρια.

Σημείωση

Ενώ έχετε επιλέξει την τροφοδοσία χαρτιού μικρότερου μήκους, πατήστε το κουμπί FEED, για να κοπεί το χαρτί μετά από την τροφοδοσία. Εάν το χαρτί κοπεί χωρίς να πατήσετε το κουμπί FEED, τα είδωλα ενδέχεται να κοπούν στη μέση.


Once every __ Sheets

Μπορείτε να ορίσετε τη συχνότητα με την οποία θα εφαρμόζεται τροφοδοσία σελίδων μεγάλου μήκους.

Η τροφοδοσία χαρτιού μικρού μήκους εφαρμόζεται μέχρι να εκτυπωθεί ο αριθμός των σελίδων που έχετε ορίσει και, στη συνέχεια, εφαρμόζεται τροφοδοσία χαρτιού μεγαλύτερου μήκους.

Όταν ο αριθμός των σελίδων που εκτυπώνονται φτάσει την προκαθορισμένη τιμή, γίνεται επαναφορά της μέτρησης. Επίσης, γίνεται επαναφορά της μέτρησης, εάν ενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής, εάν πατηθεί το κουμπί FEED, εάν αλλάξει ο αριθμός των εκτυπώσεων ή εάν ακυρωθεί η εκτύπωση.


(Παράδειγμα 1) Η τιμή έχει οριστεί σε 1:

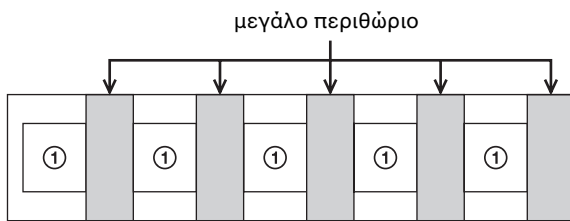

Οι αριθμοί σε κύκλους υποδεικνύουν το μετρητή.

(Παράδειγμα 2) Η τιμή έχει οριστεί σε 3 και γίνεται εκτύπωση έξι σελίδων:


- Όταν δεν γίνεται επαναφορά

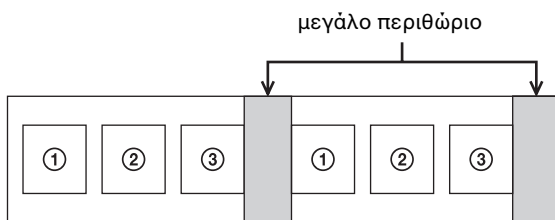

Οι αριθμοί σε κύκλους υποδεικνύουν το μετρητή.

- Όταν γίνεται επαναφορά μετά από την εκτύπωση της δεύτερης σελίδας.

Γίνεται επαναφορά του μετρητή. μεγάλο περιθώριο

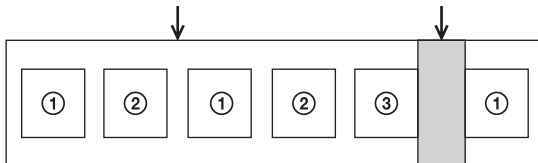

Οι αριθμοί σε κύκλους υποδεικνύουν το μετρητή.

Print with Information

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να εκτυπώσετε είδωλα καθώς και τις πληροφορίες για την προκαθορισμένη τιμή της λειτουργίας [Density Adjust] κάτω από αυτά τα είδωλα.

Κάθε προκαθορισμένη τιμή εκτυπώνεται με τις παρακάτω σημάνσεις.

Στοιχείο	Σήμανση
GAMMA	GAM
Advanced	ADV
Dark	DARK
Light	LIGHT
Sharpness	SHARP

Orientation

Επιλέγει τον προσανατολισμό των ειδώλων. Κατά την εκτύπωση ενός ειδώλου σε μέγεθος πορτραίτου, επιλέξτε το πλαίσιο [Portrait] ή εάν θέλετε να εκτυπώσετε σε μέγεθος τοπίου, επιλέξτε το πλαίσιο [Landscape]. Επιλέξτε το πλαίσιο [Reverse] για να εκτυπώσετε ένα είδωλο με περιστροφή κατά 180 μοίρες.

Σημείωση

Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό. Ελέγξτε το αποτέλεσμα εκτυπώνοντας ένα είδωλο.

Load

Σας δίνει τη δυνατότητα να φορτώσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

Save

Σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

About

Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του προγράμματος οδήγησης.

Restore Defaults


Εάν πατήσετε την καρτέλα [Main], θα γίνει επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Ρυθμίσεις καρτέλας [Density Adjust]

Ρυθμίζει την πυκνότητα του ειδώλου. Η ρύθμιση απεικονίζεται στο γράφημα πυκνότητας στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης ρυθμίσεων και στη γραμμή διαβάθμισης. Ωστόσο, δεν απεικονίζεται το αποτέλεσμα της προκαθορισμένης τιμής της ρύθμισης [GAMMA].

Ο κατακόρυφος άξονας του γραφήματος πυκνότητας εκφράζει την πυκνότητα του ειδώλου που εκτυπώνεται τη δεδομένη στιγμή, όπου το ανώτατο όριο σχετίζεται με την πυκνότητα λευκού χρώματος και το χαμηλότερο όριο σχετίζεται με την πυκνότητα μαύρου χρώματος.

Ο οριζόντιος άξονας εκφράζει τα δεδομένα εικόνας, όπου το ανώτατο όριο σχετίζεται με τα δεδομένα του λευκού χρώματος και το χαμηλότερο όριο σχετίζεται με τα δεδομένα του μαύρου χρώματος. Η γραμμή διαβάθμισης εκφράζει την τρέχουσα πυκνότητα και όχι την τιμή του κατακόρυφου άξονα του γραφήματος πυκνότητας.

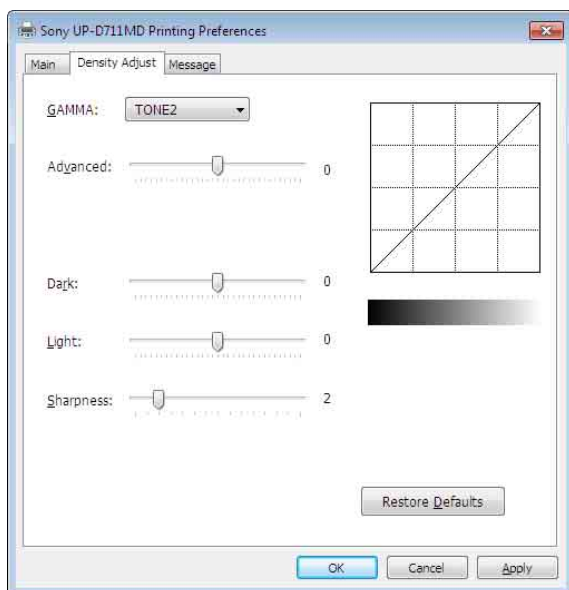

GAMMA

Επιλέγει την ένταση της διαβάθμισης των μεσαίων τόνων.

Στοιχείο	Επεξήγηση
TONE1	Φωτεινότερη από την τυπική
TONE2	Τυπική
TONE3	Έντονη διαβάθμιση
TONE4	Απαλή διαβάθμιση

Advanced

Σύρτε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε το επίπεδο της διαβάθμισης. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιλεγμένη τιμή, τόσο σκουρότερη θα είναι η διαβάθμιση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαβάθμιση σε μία από τις 65 τιμές. Η κανονική τιμή είναι 0. Το εύρος ρύθμισης κυμαίνεται από -32 έως +32.

Dark

Σύρτε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση των σκούρων τμημάτων του ειδώλου. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιλεγμένη τιμή, τόσο σκουρότερα θα είναι τα σκούρα τμήματα του ειδώλου. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαβάθμιση σε μία από τις 129 τιμές. Η κανονική τιμή είναι 0. Το εύρος ρύθμισης κυμαίνεται από -64 έως +64.

Light

Σύρτε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση των φωτεινών τμημάτων του ειδώλου. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιλεγμένη τιμή, τόσο φωτεινότερα θα είναι τα φωτεινά τμήματα του ειδώλου. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαβάθμιση σε μία από τις 129 τιμές. Η κανονική τιμή είναι 0. Το εύρος ρύθμισης κυμαίνεται από -64 έως +64.

Sharpness

Σύρτε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ένταση του περιγράμματος του ειδώλου. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιλεγμένη τιμή, τόσο ευκρινέστερα θα είναι τα άκρα του ειδώλου. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαβάθμιση σε μία από τις 15 τιμές. Η κανονική τιμή είναι 2. Το εύρος ρύθμισης κυμαίνεται από 0 έως 14.


Restore Defaults

Εάν πατήσετε την καρτέλα [Density Adjust], θα γίνει επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Ρυθμίσεις καρτέλας [Message]

Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις οθόνης που σχετίζονται με τα παράθυρα διαλόγου μηνυμάτων. Τα παράθυρα διαλόγου μηνυμάτων εμφανίζονται, όταν, για παράδειγμα, προκύπτει σφάλμα στον εκτυπωτή UP-D711MD.

Τα παράθυρα διαλόγου μηνυμάτων εμφανίζονται σε δύο μεγέθη: τυπικό μέγεθος και μικρό μέγεθος. Το παράθυρο διαλόγου τυπικού μεγέθους εμφανίζει την κατάσταση σφάλματος του εκτυπωτή καθώς και οδηγίες για την αντιμετώπιση του σφάλματος. Το παράθυρο διαλόγου μικρού μεγέθους εμφανίζει (μία πρόταση με) απλές οδηγίες για την αντιμετώπιση του σφάλματος. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα "Λίστα μηνυμάτων" (σελίδα 8).

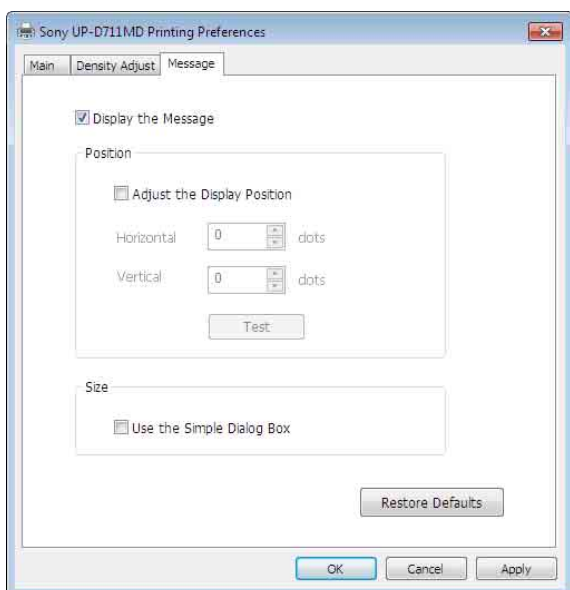

Display the Message

ON/OFF την επιλογή από αυτό το πλαίσιο, για να καθορίσετε εάν θα εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου μηνυμάτων.

Εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο, δεν μπορείτε να ορίσετε τις άλλες ρυθμίσεις της καρτέλας [Message].

Adjust the display position

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να ρυθμίσετε τη θέση εμφάνισης των παραθύρων διαλόγου μηνυμάτων. Το παράθυρο διαλόγου μηνυμάτων εμφανίζεται στη θέση που έχει καθοριστεί από τις τιμές που ορίζονται στις ρυθμίσεις [Horizontal] και [Vertical].

Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Δεν έχει επιλεγθεί το πλαίσιο ελέγχου [Adjust the Display Position]. (Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου μηνυμάτων

τυπικού μεγέθους στο κέντρο της οθόνης και το παράθυρο διαλόγου μηνυμάτων μικρότερου μεγέθους εμφανίζεται στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης.)

Horizontal, Vertical

Αυτές οι ρυθμίσεις ενεργοποιούνται, όταν επιλέγετε το πλαίσιο ελέγχου [Adjust the Display Position]. Εισαγάγετε τις συντεταγμένες για τη θέση εμφάνισης (τη θέση της επάνω αριστερής γωνίας του παραθύρου διαλόγου μηνυμάτων). Το παράθυρο διαλόγου μηνυμάτων εμφανίζεται στη θέση που έχει καθοριστεί από τις τιμές που ορίζονται σε αυτές τις ρυθμίσεις.

Test

Επαληθεύστε τη θέση στην οποία εμφανίζονται τα παράθυρα διαλόγου μηνυμάτων στην οθόνη. Ένα δοκιμαστικό παράθυρο διαλόγου θα εμφανιστεί στη θέση που έχει καθοριστεί με τις ρυθμίσεις [Horizontal] και [Vertical].

Use the Simple Dialog Box

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εμφανίσετε τα παράθυρα διαλόγου μηνυμάτων μικρού μεγέθους.

Restore Defaults

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στην καρτέλα [Message] στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Λίστα μηνυμάτων

Παρακάτω αναφέρονται τα μηνύματα που μπορούν να εμφανιστούν. Διορθώστε τυχόν προβλήματα ακολουθώντας τα παρακάτω μηνύματα. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για το μοντέλο UP-D711MD σε συνδυασμό με το παρόν εγχειρίδιο.

Παράθυρο διαλόγου μηνυμάτων τυπικού μεγέθους	Παράθυρο διαλόγου μηνυμάτων μικρού μεγέθους
No thermal paper. Please set the thermal paper. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Set thermal paper.
Now, Feeding. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Door is open. Please close the door. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Close door.
Now regulating the head temperature of the printer. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Mechanical error. Printing has been aborted. Please turn off the printer, then turn it back on and print again.	Restart printer.
Printer is not ready. Make sure the printer is plugged in to a power source and the printer cable is correctly connected. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Check printer.