

# プリンタードライバー

## インストールガイド

本書は Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 用プリンタードライバーのインストール方法について説明しています。

### ご使用になる前に

プリンタードライバーをご使用になる前に、必ず“Readme”ファイルをお読みください。

# 目次

動作環境の確認 .....	3
本インストールガイドについて .....	4
Windows 8 にプリンタードライバーを インストールする .....	4
プリンタードライバーをインストールする前に ....	4
Windows 8 へのインストール .....	5
Windows 8 からプリンタードライバーを アンインストールする .....	7
Windows 7 にプリンタードライバーを インストールする .....	8
プリンタードライバーをインストールする前に ....	8
Windows 7 へのインストール .....	9
Windows 7 からプリンタードライバーを アンインストールする .....	11
Windows Vista にプリンタードライバーを インストールする .....	12
プリンタードライバーをインストール する前に .....	12
Windows Vista へのインストール .....	13
Windows Vista からプリンタードライバーを アンインストールする .....	15
Windows XP にプリンタードライバーを インストールする .....	17
プリンタードライバーをインストール する前に .....	17
Windows XP へのインストール .....	17
Windows XP からプリンタードライバーを アンインストールする .....	19
Windows 2000 にプリンタードライバーを インストールする .....	20
プリンタードライバーをインストール する前に .....	20
Windows 2000 へのインストール .....	20
Windows 2000 からプリンタードライバーを アンインストールする .....	22

Microsoft、Windows は、それぞれ米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
その他記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

# 動作環境の確認

プリンタードライバーを動作させるには、以下のいずれかのオペレーティングシステムが動作するコンピューターが必要です。

- ・ Microsoft Windows 8 が動作するコンピューター
- ・ Microsoft Windows 7 が動作するコンピューター
- ・ Microsoft Windows Vista が動作するコンピューター
- ・ Microsoft Windows XP Professional/Home Edition が動作するコンピューター
- ・ Microsoft Windows 2000 Professional が動作するコンピューター

なお、お使いのプリンターの対応するオペレーティングシステムについては、弊社ホームページ上の対応 OS 表をご覧ください。

[http://www.sony.co.jp/Products/DP-driver/os/win\\_mp.html](http://www.sony.co.jp/Products/DP-driver/os/win_mp.html)

## USB 2.0 について

- ・ プリンターは USB 2.0 に対応しています。
- ・ USB 2.0 は、USB 1.1 の完全上位互換の規格です。
- ・ USB 2.0 では、従来の Full (Low) Speed に加え、Hi-Speed がサポートされています。
- ・ USB 1.1 環境では、Full Speed として接続できます。Hi-Speed USB としてご使用の場合は、以下の環境が必要です。
  - － コンピューター  
Hi-Speed USB 対応 (USB 2.0 規格に準拠) のコンピューター (※)
  - － OS  
Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP Professional/Home Edition、または Windows 2000 Professional
  - － USB 2.0 ドライバー  
マイクロソフト社製 USB 2.0 ドライバー (マイクロソフト社製以外の USB 2.0 ドライバーでの動作は保証しておりません。)
  - － USB 2.0 認証ケーブル
- ※ すべての USB 2.0 対応機器、および USB 2.0 拡張ボード／拡張カードの動作を保証するものではありません。

以下の画面設定で作業を行ってください。

- ・ ディスプレイ解像度 SVGA (800 × 600) 以上

- ・ 画面上の文字のサイズ は既定値  
Windows 2000：小さいフォント  
Windows XP：通常のサイズ (96DPI)  
Windows Vista：既定のスケール (96DPI) (D) – より多くの情報  
Windows 8、Windows 7：小 – 100% (既定) (S)

### ご注意

プリンターが電源の入っている状態で接続されているときは、お使いのコンピューターをスリープ状態、スタンバイ (サスペンド) 状態や休止状態にしないでください。正しく動作しなくなる場合があります。

# 本インストールガイドについて

本書では、本文中の Windows XP、Windows Vista のコントロールパネルの操作については、クラシック表示で説明しています。クラシック表示に切り替えるには、[スタート] から [コントロールパネル] を選択し、画面の左側に表示されているコントロールパネルの詳細で、[クラシック表示に切り替える] をクリックしてください。

本書の中で使用されている画面は、UP-D25MD を接続した場合に表示される画面です。UP-D25MD 以外のプリンターをご使用の場合は、画面中の「UP-D25MD」を、お使いの機種名にお読み替えてください。

本書では、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 それぞれの Windows バージョンのインストールまたはアンインストールの手順を説明しています。  
お使いの Windows バージョンに対応した手順をご覧ください。いただき作業を行ってください。

# Windows 8 にプリンタードライバーをインストールする

## プリンタードライバーをインストールする前に

### ご注意

プリンタードライバーをインストールする前に、プリンターをコンピューターに接続しないでください。先にプリンターを接続すると、プリンターがコンピューターに認識されなくなる場合があります。

## バージョンアップについて

プリンタードライバーをバージョンアップする場合は、最初に以前のプリンタードライバーをアンインストールしてから、インストール操作を行ってください。  
アンインストールの手順については、本書の「Windows 8 からプリンタードライバーをアンインストールする」をご覧ください。

インストールに失敗した場合や、キャンセルした場合は、いったんコンピューターを再起動してから、再度インストール操作を行ってください。

## Windows 8 へのインストール

- 1 コンピューターの電源を入れ、Administrator、または Administrators グループのメンバーとしてログオンする。
- 2 付属のCD-ROMのPrinterDriver¥Win8フォルダ内（または、弊社ホームページからダウンロードしたファイル内）にある Setup.exe を実行する。

「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されます。




- 3 [はい (Y)] をクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。



- 4 [次へ (N)] をクリックする。

使用許諾契約書が表示されます。

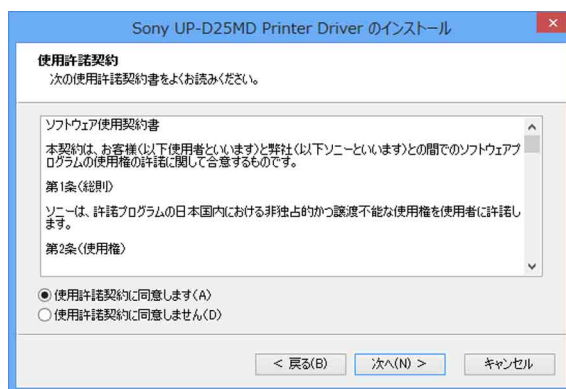


- 5 [使用許諾契約に同意します (A)] を選択してから、[次へ (N)] をクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。



- 6 [インストール (I)] をクリックする。

インストールが始まります。インストール中は、進行状況がダイアログボックス上に表示されます。

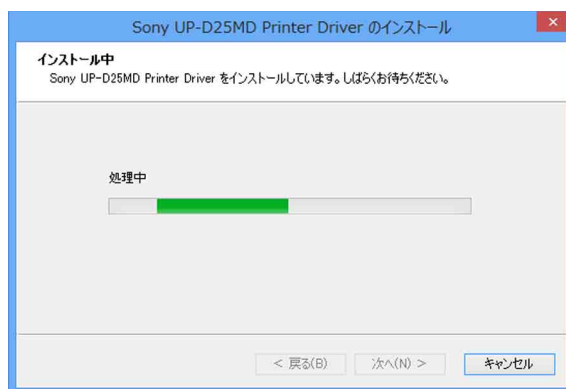

インストール中に次のダイアログボックスが表示された場合は、[インストール (I)] をクリックします。



インストールが完了すると、次のダイアログボックスが表示されます。




7 [終了 (F)] をクリックする。

8 プリンターをコンピューターに接続する。


以上でプリンタードライバーのインストールは完了です。

[設定] の [コントロールパネル] から [デバイスとプリンターの表示] を選択すると、プリンターがコンピューターに認識されているかどうかを確認できます。プリンターがコンピューターに認識されている場合は、次のように [プリンター] にプリンターアイコンが表示されます。

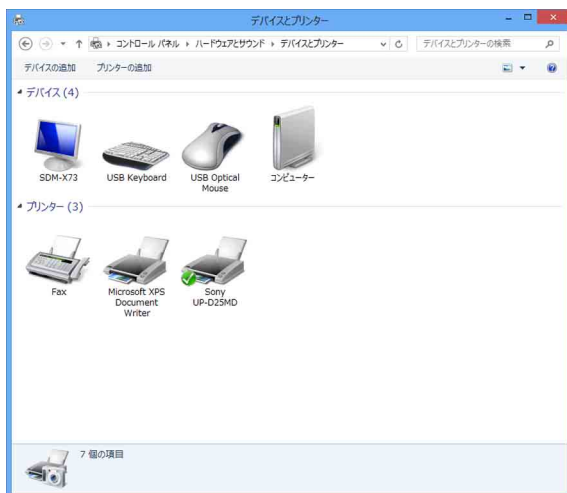

## プリンターがコンピューターに認識されない場合には

プリンタードライバーのインストール前にプリンターをコンピューターに接続した場合、プリンターが「プリンター」ではなく、次のように「未指定」に登録されることがあります。この状態では、プリンターが正常にコンピューターに認識されておらず、プリンターを使用できません。

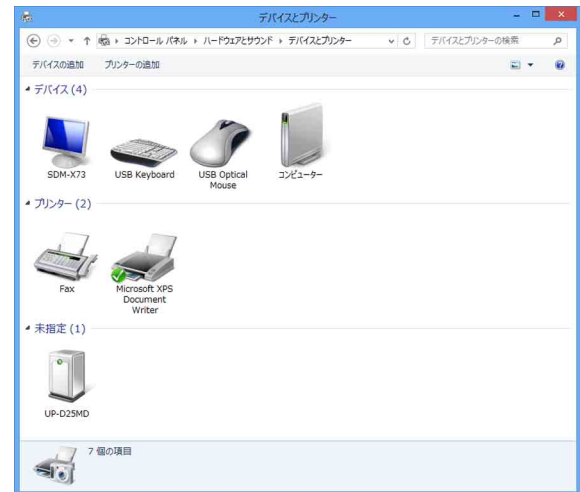


この場合は、以下の手順でプリンタードライバーを更新してください。


1 インストールしようとしているプリンターの電源が入っている状態で、コンピューターと接続されていることを確認する。(他の USB 接続のプリンターや、既にインストールが完了したプリンターが接続されている場合は、インストールしようとしているプリンターのみを接続し、以下の操作を行ってください。)

2 [設定] の [コントロールパネル] から [デバイスとプリンターの表示] を選択する。


- 3 「未指定」に登録されているプリンターのアイコンを右クリックし、[デバイスの削除 (T)] を選択する。

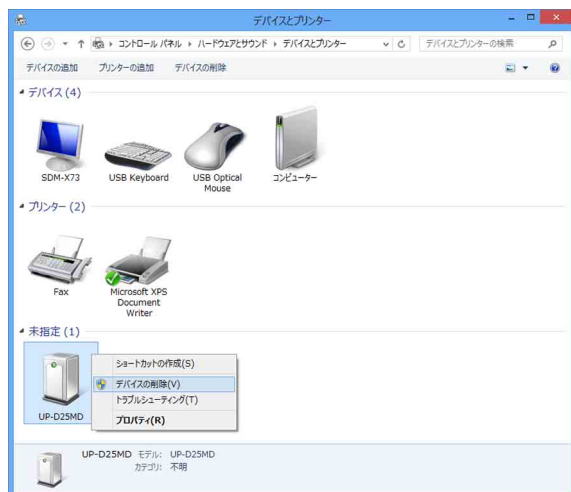

- 4 次のダイアログボックスが表示されるので、[はい (Y)] を選択する。

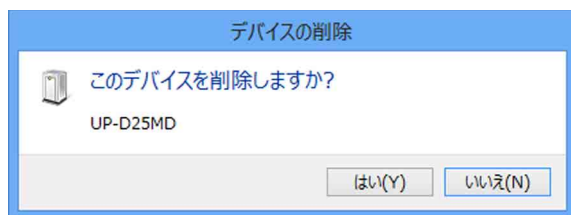

- 5 [デバイスとプリンターの表示] の「未指定」から、インストールしようとしているプリンターが削除されます。

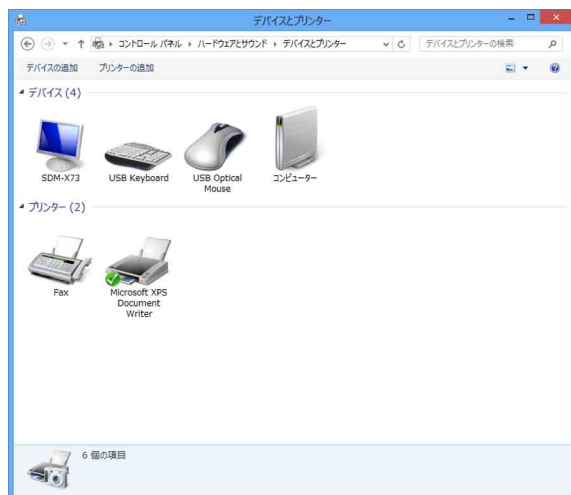

- 6 コンピューターとプリンターを接続しているケーブルをはずす。
- 7 プリンタードライバーをインストールしていない場合は、「Windows 8 へのインストール」の手順に従って、プリンタードライバーをインストールする。

- 8 プリンターをコンピューターに接続する。


以上でドライバーの更新は完了です。

## Windows 8 からプリンタードライバーをアンインストールする

### ご注意

アンインストールを行うときは、コンピューターとプリンターを接続していない状態およびコンピューターの電源が切れている状態で操作を開始してください。「新しいハードウェアが見つかりました」ダイアログボックスが表示された場合は、コンピューターとプリンターを接続しているケーブルをはずし、すべて [キャンセル] をクリックして、ダイアログボックスを閉じてください。その後、アンインストールをやり直してください。

- 1 プリンターの電源を切り、コンピューターと接続しているケーブルをはずす。
- 2 コンピューターの電源を入れ、Administrator、または Administrators グループのメンバーとしてログオンする。
- 3 [設定] の [コントロールパネル] から [プログラムのアンインストール] を選択する。

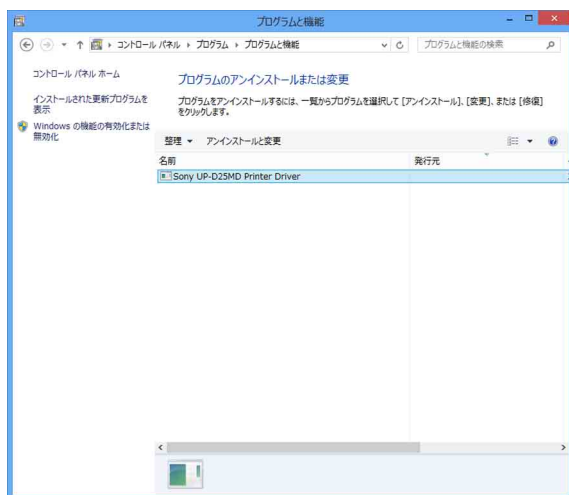

- 4 [プログラムのアンインストールまたは変更] の一覧からプリンタードライバーを選択し、[アンインストールと変更] をクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。



## 5 [はい (Y)] をクリックする。

アンインストールが開始されます。  
アンインストールが完了すると、次のダイアログボックスが表示されます。



## 6 [はい (Y)] をクリックする。

コンピュータが再起動されます。

以上でプリンタードライバーのアンインストールは完了です。

# Windows 7 にプリンタードライバーをインストールする

## プリンタードライバーをインストールする前に

### ご注意

プリンタードライバーをインストールする前に、プリンターをコンピュータに接続しないでください。先にプリンターを接続すると、プリンターがコンピュータに認識されなくなる場合があります。


## バージョンアップについて


プリンタードライバーをバージョンアップする場合は、最初に以前のプリンタードライバーをアンインストールしてから、インストール操作を行ってください。アンインストールの手順については、本書の「Windows 7 からプリンタードライバーをアンインストールする」をご覧ください。

インストールに失敗した場合や、キャンセルした場合は、いったんコンピュータを再起動してから、再度インストール操作を行ってください。

## USB 2.0 の接続について

プリンターは USB 2.0 に対応していますが、お使いのコンピュータまたは USB ハブが USB 2.0 に対応していない場合は、以下のメッセージが表示されます。

 をクリックしてメッセージを閉じてください。

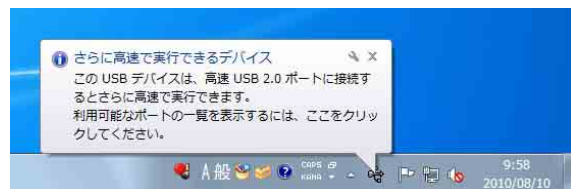




## Windows 7 へのインストール

- 1 コンピューターの電源を入れ、Administrator、または Administrators グループのメンバーとしてログオンする。
- 2 付属のCD-ROMのPrinterDriver¥Win7フォルダ内（または、弊社ホームページからダウンロードしたファイル内）にある Setup.exe を実行する。

「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されます。

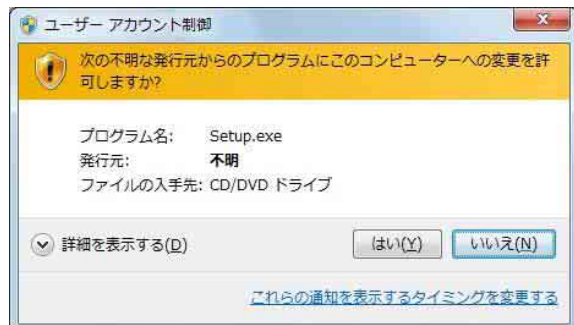

- 3 [はい (Y)] をクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。



- 4 [次へ (N)] をクリックする。

使用許諾契約書が表示されます。



- 5 [使用許諾契約に同意します (A)] を選択してから、[次へ (N)] をクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。




- 6 [インストール (I)] をクリックする。

インストールが始まります。インストール中は、進行状況がダイアログボックス上に表示されます。



インストール中に次のダイアログボックスが表示された場合は、[このドライバーソフトウェアをインストールします (I)] をクリックします。

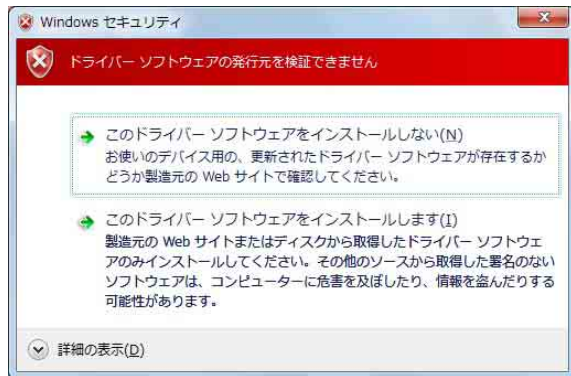

インストールが完了すると、次のダイアログボックスが表示されます。




**7** 「終了 (F)」をクリックする。

**8** プリンターをコンピュータに接続する。

以上でプリンタードライバーのインストールは完了です。

[スタート] の [コントロールパネル] から [デバイスとプリンターの表示] を選択すると、プリンターがコンピュータに認識されているかどうかを確認できます。プリンターがコンピュータに認識されている場合は、次のように [プリンターと FAX] にプリンターアイコンが表示されます。

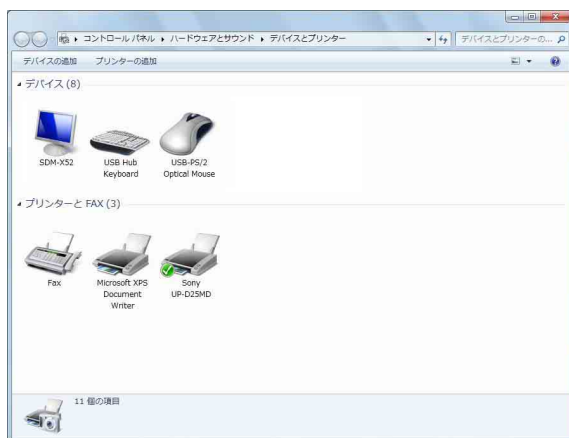

## プリンターがコンピュータに認識されない場合には


プリンタードライバーのインストール前にプリンターをコンピュータに接続した場合、プリンターが「プリンターと FAX」ではなく、次のように「未指定」に登録されることがあります。この状態では、プリンターが正常にコンピュータに認識されておらず、プリンターを使用できません。




この場合は、以下の手順でプリンタードライバーを更新してください。

- 1** コンピューターとプリンターを接続しているケーブルをはずす。
- 2** プリンタードライバーをインストールしていない場合は「Windows 7 へのインストール」の手順に従って、プリンタードライバーをインストールする。
- 3** プリンターをコンピュータに接続する。
- 4** [スタート] の [コントロールパネル] から [デバイスとプリンターの表示] を選択する。
- 5** 「未指定」にあるプリンターのアイコンを右クリックし、[トラブルシューティング (T)] を選択する。

次のダイアログボックスが表示されます。

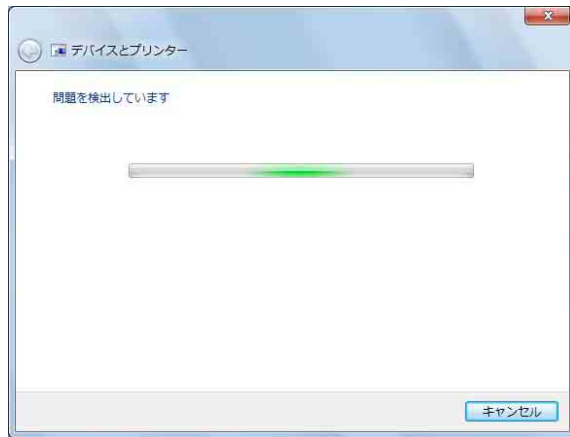


しばらくすると、画面が次のようになります。

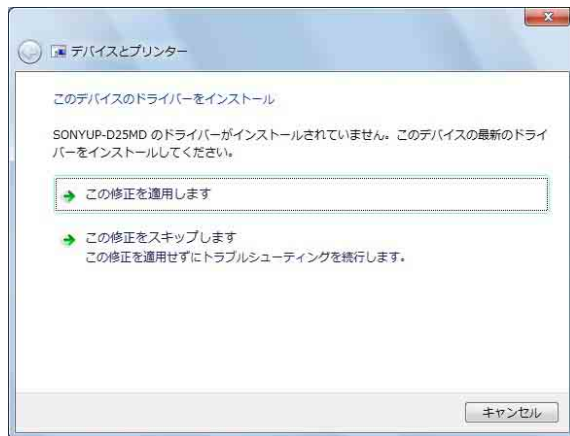


## 6 [この修正を適用します] をクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。

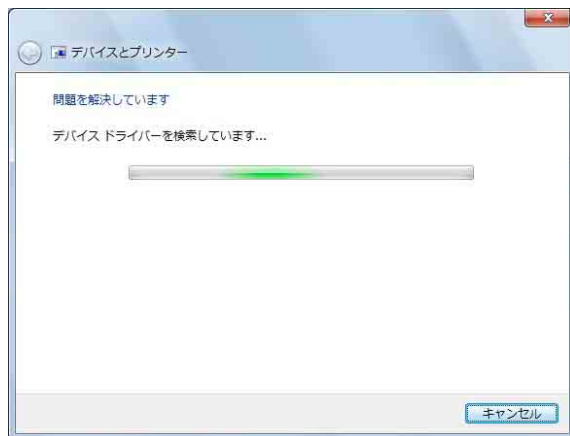

しばらくすると、画面が次のようになります。

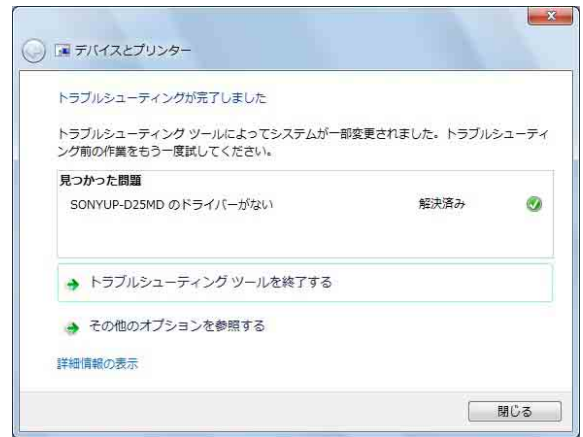

## 7 [閉じる] をクリックする。

以上でドライバーの更新は完了です。


# Windows 7 からプリンタードライバーをアンインストールする

### ご注意

アンインストールを行うときは、コンピューターとプリンターを接続していない状態で操作を開始してください。「新しいハードウェアが見つかりました」ダイアログボックスが表示された場合は、コンピューターとプリンターを接続しているケーブルをはずし、すべて [キャンセル] をクリックして、ダイアログボックスを閉じてください。その後、アンインストールをやり直してください。

- 1 プリンターの電源を切り、コンピューターと接続しているケーブルをはずす。
- 2 コンピューターの電源を入れ、Administrator、または Administrators グループのメンバーとしてログオンする。

- 3 [スタート] の [コントロールパネル] から [プログラムのアンインストール] を選択する。

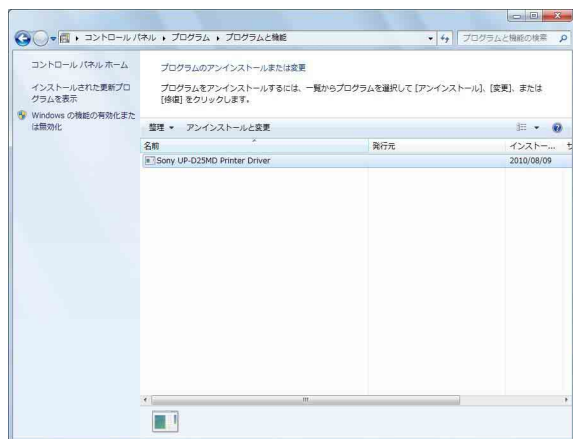

- 4 [プログラムのアンインストールまたは変更] の一覧からプリンタードライバーを選択し、[アンインストールと変更] をクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。



- 5 [はい (Y)] をクリックする。

アンインストールが開始されます。  
アンインストールが完了すると、次のダイアログボックスが表示されます。



- 6 [はい (Y)] をクリックする。

コンピュータが再起動されます。

以上でプリンタードライバーのアンインストールは完了です。

## Windows Vista にプリンタードライバーをインストールする

### プリンタードライバーをインストールする前に


#### バージョンアップについて


プリンタードライバーをバージョンアップする場合は、最初に以前のプリンタードライバーをアンインストールしてから、インストール操作を行ってください。アンインストールの手順については、本書の「Windows Vista からプリンタードライバーをアンインストールする」をご覧ください。

インストールに失敗した場合や、キャンセルした場合は、いったんコンピュータを再起動してから、再度インストール操作を行ってください。

#### USB 2.0 の接続について

プリンターは USB 2.0 に対応していますが、お使いのコンピュータまたは USB ハブが USB 2.0 に対応していない場合は、以下のメッセージが表示されます。


 をクリックしてメッセージを閉じてください。

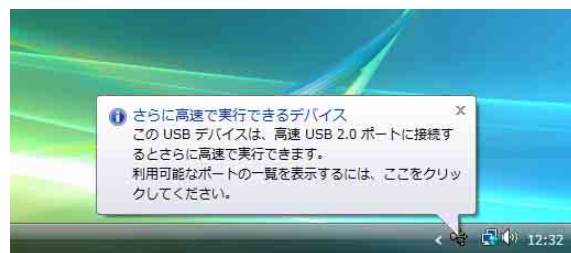

## Windows Vista へのインストール

- 1 インストールするプリンターを 1 台だけコンピューターに接続する。
- 2 接続したプリンターの電源を入れる。
- 3 コンピューターの電源を入れ、Administrator、または Administrators グループのメンバーとしてログオンする。

「新しいハードウェアが見つかりました」ダイアログボックスが表示されます。

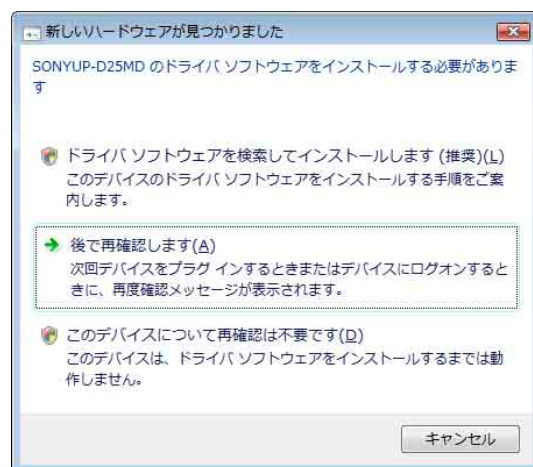

「デバイスドライバーは正しくインストールされませんでした」と表示され、「新しいハードウェアが見つかりました」ダイアログボックスが表示されなかった場合は、USB ケーブルの抜き差しを行ってください。それでも、「新しいハードウェアが見つかりました」ダイアログボックスが表示されなかった場合は、インストールしようとしているプリンターの電源が入っている状態でコンピューターに接続したまま、以下の操作を行ってください（他の USB 接続のプリンターや、既にインストールが完了したプリンターが接続されている場合は、インストールしようとしているプリンターのみを接続し、以下の操作を行ってください）。

- ① [スタート] から [コントロールパネル] を選択する。
- ② [システム] をダブルクリックする。
- ③ [デバイスマネージャ (M)] をクリックする。「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されます。
- ④ [続行 (C)] をクリックする。「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- ⑤ [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] の左側にある [+] をクリックする。


- ⑥ [USB 印刷サポート] を選択し、[操作 (A)] メニューから [削除 (U)] を選択する。
- ⑦ コンピューターを再起動する。「新しいハードウェアが見つかりました」ダイアログボックスが表示されます。

- 4 [ドライバソフトウェアを検索してインストールします (推奨) (L)] をクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。



- 5 [続行 (C)] をクリックする。
- 6 次のダイアログボックスが表示された場合は、[オンラインで検索しません (D)] をクリックする。

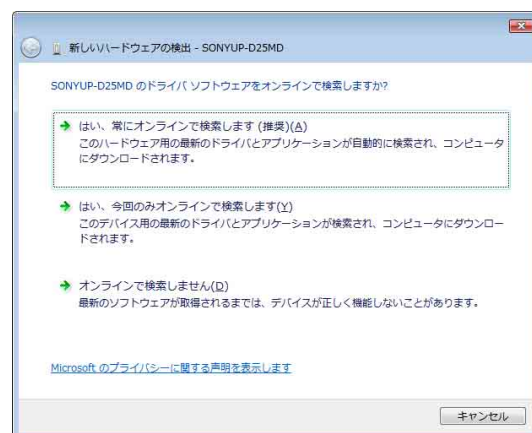

画面が次のようになります。






この後は、付属の CD-ROM を使用する場合と、付属の CD-ROM を使用しない場合（インターネットでドライバーをダウンロードした場合）とで操作が異なります。


## 付属の CD-ROM を使用する場合

### 7 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入する。

画面が次のようになります。

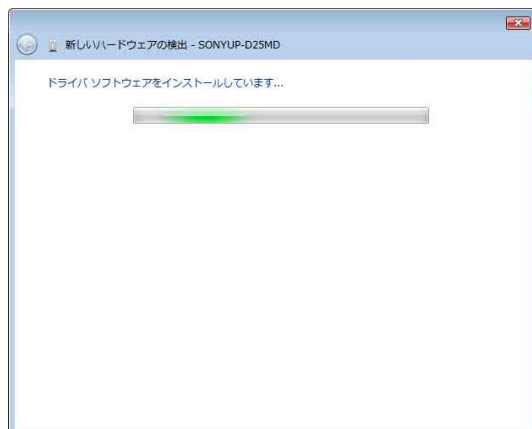


ソフトウェアの検索が行われた後、次のダイアログボックスが表示されます。

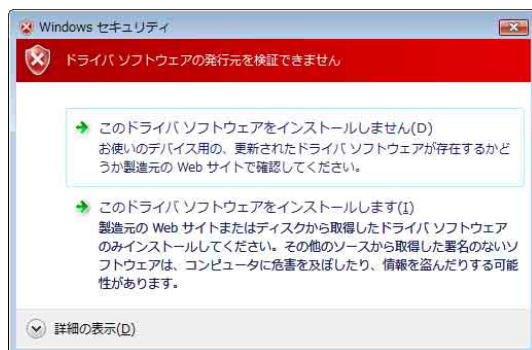


### 8 [このドライバソフトウェアをインストールします (I)] をクリックする。

ダイアログボックスが閉じ、「新しいハードウェアの検出」ダイアログボックスに戻ります。

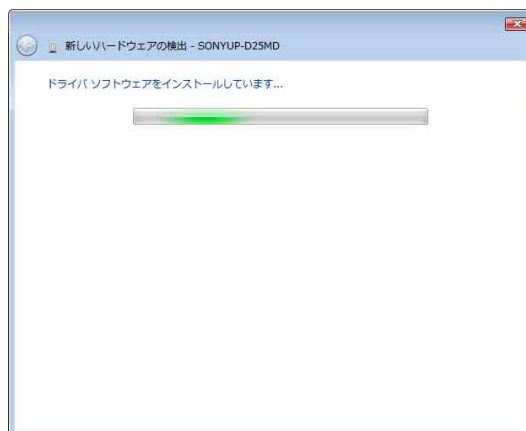

ファイルのコピーが行われた後、画面が次のようになります。

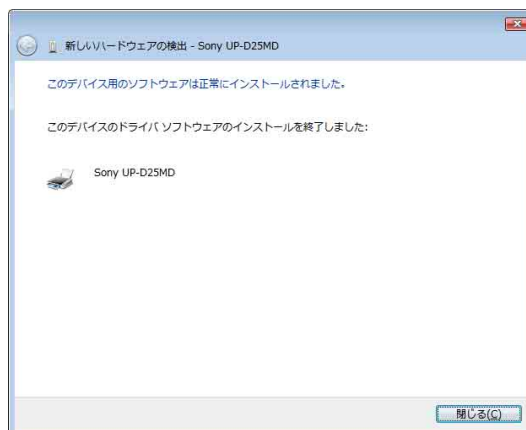


### 9 [閉じる (C)] をクリックする。

以上でプリンタードライバーのインストールは完了です。

## 付属の CD-ROM を使用しない場合


### 7 [ディスクはありません。他の方法を試します (I)] をクリックする。

画面が次のようになります。

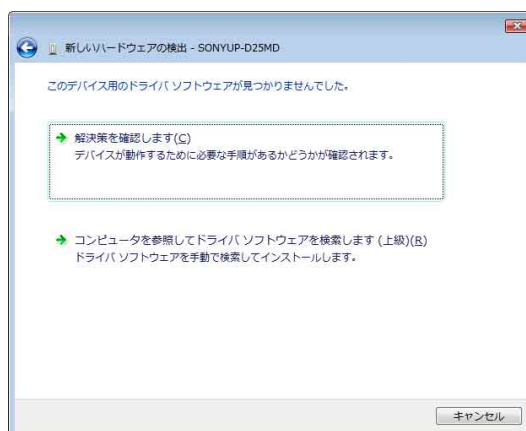

- 8 [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します (上級) (R)] をクリックする。


画面が次のようになります。

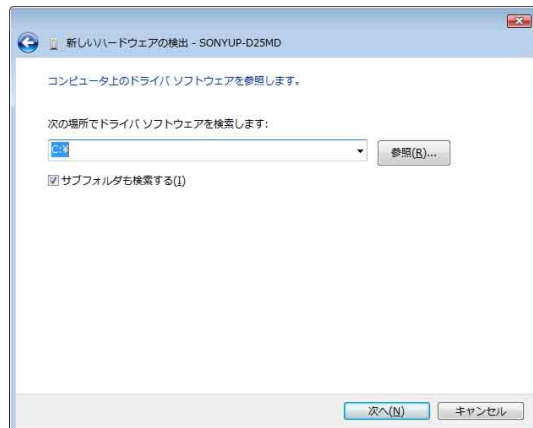

- 9 [参照 (R)] をクリックして「フォルダの参照」ダイアログボックスを表示させる。ダウンロードしたインストールファイルを解凍したフォルダを指定し、[OK] をクリックして「フォルダの参照」ダイアログボックスを閉じる。


- 10 [次へ (N)] をクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。

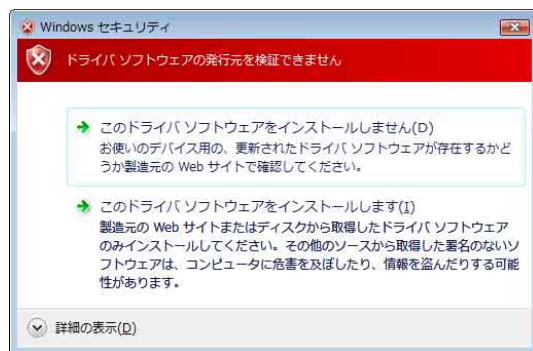


- 11 [このドライバソフトウェアをインストールします (I)] をクリックする。

ダイアログボックスが閉じ、「新しいハードウェアの検出」ダイアログボックスに戻ります。

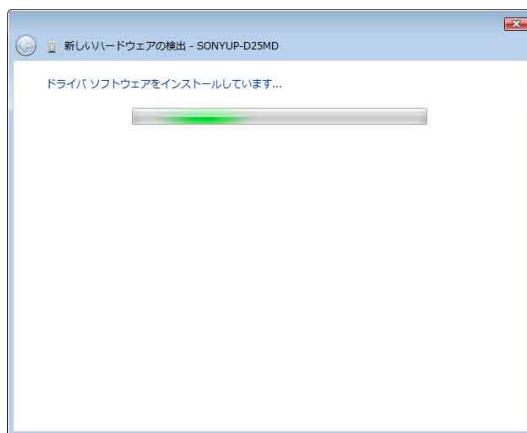

ファイルのコピーが行われた後、画面が次のようになります。

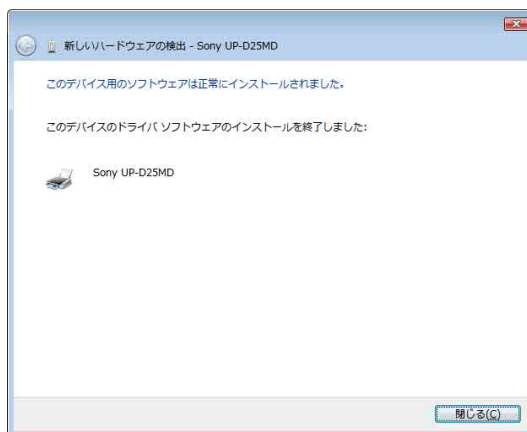

- 12 [閉じる (C)] をクリックする。

以上でプリンタードライバーのインストールは完了です。


## Windows Vista からプリンタードライバーをアンインストールする

プリンタードライバーをアンインストールする手順について説明します。

### ご注意

アンインストールを行うときは、コンピュータとプリンターを接続していない状態で操作を開始してください。「新しいハードウェアが見つかりました」ダイアログボックスが表示された場合は、コンピュータとプリンターを接続しているケーブルをはずし、すべて [キャンセル] をクリックして、ダイアログボックスを閉じてください。その後、アンインストールをやり直してください。

- 1 プリンターの電源を切り、コンピューターと接続しているケーブルをはずす。
- 2 コンピューターの電源を入れ、Administrator、または Administrators グループのメンバーとしてログオンする。
- 3 [スタート] の [コントロールパネル] から [プログラムと機能] を選択する。

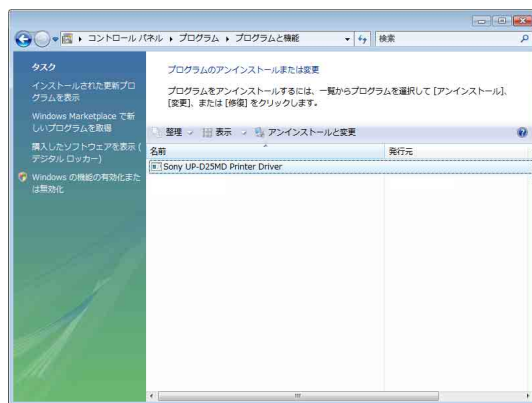

- 4 [プログラムのアンインストールまたは変更] の一覧からプリンタードライバーを選択し、[アンインストールと変更] をクリックする。



- 5 [続行 (C)] をクリックする。



- 6 [はい (Y)] をクリックする。

アンインストールが完了すると次のダイアログボックスが表示されます。



- 7 [はい (Y)] をクリックする。

コンピューターが再起動されます。

以上でプリンタードライバーのアンインストールは完了です。



# Windows XP にプリンタードライバをインストールする

## プリンタードライバをインストールする前に

### バージョンアップについて

プリンタードライバをバージョンアップする場合は、最初に以前のプリンタードライバをアンインストールしてから、インストール操作を行ってください。アンインストールの手順については、本書の「Windows XP からプリンタードライバをアンインストールする」をご覧ください。

インストールに失敗した場合や、キャンセルした場合は、いったんコンピューターを再起動してから、再度インストール操作を行ってください。


### ご注意

アンインストール操作、およびインストール操作の最後に行う「コンピューターの再起動」を忘れずに行ってください。正しく動作しなくなる場合があります。

### USB 2.0 の接続について


プリンターは USB 2.0 に対応していますが、お使いのコンピューターまたは USB ハブが USB 2.0 に対応していない場合は、以下のメッセージが表示されます。

✖ をクリックしてメッセージを閉じてください。

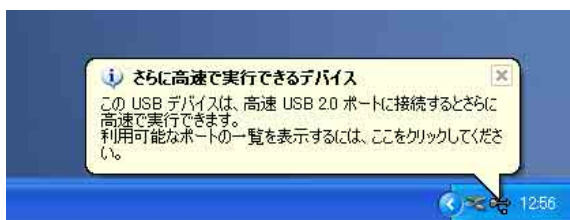

### ドライバ署名オプションについて

本プリンタードライバは、Windows ログテストを受けていないため、インストール時にエラーメッセージが表示され、インストールできない場合があります。[ドライバ署名オプション] で、[無視] または [警告] に設定されていることを確認してください。[ブロック] が選択されている場合、プリンタードライバのインストールはできません。

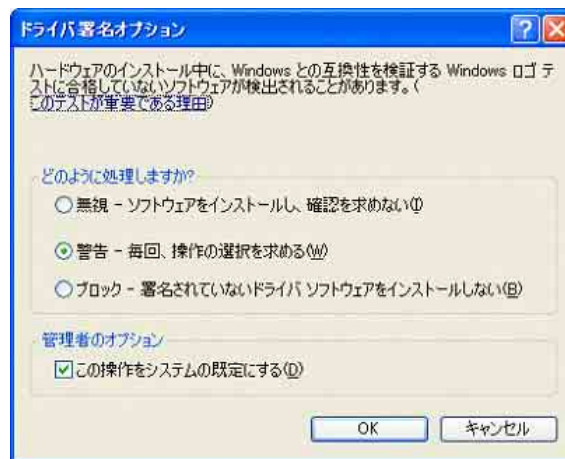

[ドライバ署名オプション] は、以下の操作で表示できます。


- ① [スタート] から [コントロールパネル (C)] を選択する。
- ② [システム] をダブルクリックする。  
[システムのプロパティ] ウィンドウが開きます。
- ③ [ハードウェア] タブをクリックする。
- ④ [ドライバの署名 (S)] ボタンをクリックする。

本書では、[ドライバ署名オプション] で [警告] が設定されている場合について説明しています。

## Windows XP へのインストール


- 1 インストールするプリンターを 1 台だけコンピューターに接続する。
- 2 接続したプリンターの電源を入れる。
- 3 コンピューターの電源を入れ、Administrator、または Administrators グループのメンバーとしてログオンする。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

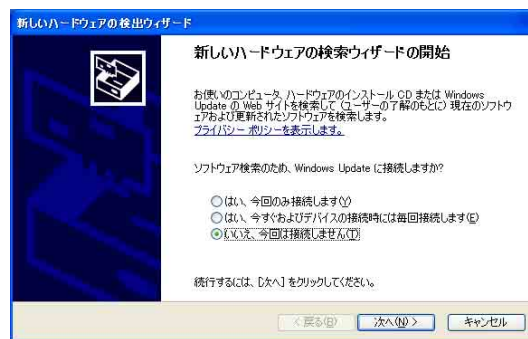


- ・手順 **3** と同じ「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示された場合は手順 **4** へ進んでください。
  - ・手順 **3** と異なる「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示された場合は手順 **5** へ進んでください。
  - ・「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されなかった場合は、インストールしようとしているプリンターの電源が入っている状態でコンピュータに接続したまま、以下の操作を行ってください。(他の USB 接続のプリンターや、既にインストールが完了したプリンターが接続されている場合は、インストールしようとしているプリンターのみを接続し、以下の操作を行ってください。)
- ① [スタート] から [コントロールパネル (C)] を選択する。
  - ② [システム] をダブルクリックする。  
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  - ③ [ハードウェア] タブをクリックする。
  - ④ [デバイスマネージャ (D)] をクリックする。  
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
  - ⑤ [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] の左側にある [＋] をクリックする。
  - ⑥ [USB 印刷サポート] を選択し、右クリックの [プロパティ (R)] を開き、[場所] が現在接続されているプリンターの機種名であることを確認し、[操作 (A)] メニューから [削除 (U)] を選択する。
  - ⑦ コンピューターを再起動する。  
Windows XP の起動時に「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

- 4** [いいえ、今回は接続しません (T)] を選択し、[次へ (N)] をクリックする。

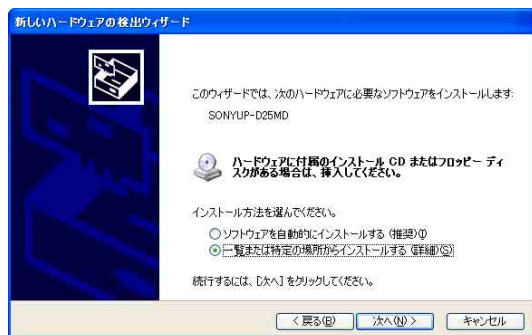

- 5** [一覧または特定の場所からインストールする (詳細) (S)] を選択し、[次へ (N)] をクリックする。

画面が次のように変わります。

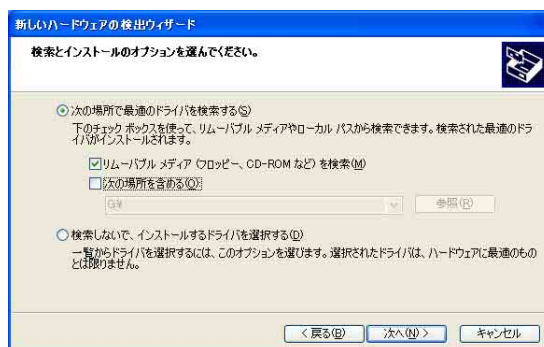

- 6** プリンタードライバーのインストールファイルの場所を指定する。

付属の CD-ROM を使用する場合と、付属の CD-ROM を使用しない場合 (インターネットでドライバーをダウンロードした場合) とで操作が異なります。

#### 付属の CD-ROM を使用する場合


[次の場所で最適のドライバを検索する (S)] を選択し、[リムーバブルメディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索 (M)] を選択してから、付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入する。

#### 付属の CD-ROM を使用しない場合

[次の場所で最適のドライバを検索する (S)] を選択し、[次の場所を含める (O)] を選択してから、[参照 (R)] をクリックして「フォルダの参照」ダイアログボックスを表示させる。ダウンロードしたインストールファイルを解凍したフォルダを指定し、[OK] をクリックして「フォルダの参照」ダイアログボックスを閉じる。

- 7** [次へ (N)] をクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。

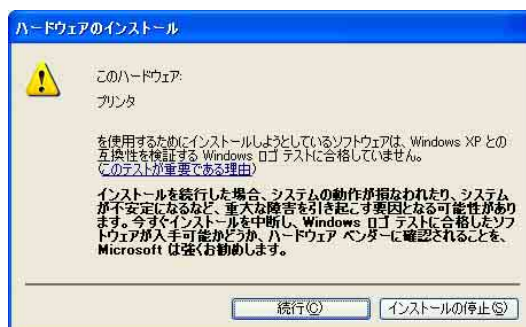

## 8 [続行 (C)] をクリックする。

ファイルのコピーが行われた後、画面が次のように変わります。



## 9 [完了] をクリックする。

以上でプリンタードライバーのインストールは完了です。

## 10 コンピューターを再起動する。

# Windows XP からプリンタードライバーをアンインストールする

プリンタードライバーをアンインストールする手順について説明します。

### ご注意

アンインストールを行うときは、コンピューターとプリンターを接続していない状態で操作を開始してください。「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示された場合は、コンピューターとプリンターを接続しているケーブルをはずし、すべて [キャンセル] をクリックして、ウィザードを終了させてください。その後、アンインストールをやり直してください。

- 1 プリンターの電源を切り、コンピューターと接続しているケーブルをはずす。
- 2 コンピューターの電源を入れ、Administrator、または Administrators グループのメンバーとしてログオンする。
- 3 [スタート] の [コントロールパネル (C)] から [プログラムの追加と削除] を選択する。



- 4 [現在インストールされているプログラム] からアンインストールするプリンタードライバーを選択して、[変更と削除] をクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。



- 5 [はい (Y)] をクリックする。

プリンタードライバーがアンインストールされると、次のダイアログボックスが表示されます。



- 6 [はい (Y)] をクリックする。

コンピューターが再起動されます。

以上でプリンタードライバーのアンインストールは完了です。

# Windows 2000 にプリンタードライバーをインストールする

## プリンタードライバーをインストールする前に

### バージョンアップについて

プリンタードライバーをバージョンアップする場合は、最初に以前のプリンタードライバーをアンインストールしてから、インストール操作を行ってください。アンインストールの手順については、本書の「Windows 2000 からプリンタードライバーをアンインストールする」をご覧ください。

インストールに失敗した場合や、キャンセルした場合は、いったんコンピューターを再起動してから、再度インストール操作を行ってください。

### ご注意

アンインストール操作、およびインストール操作の最後に行う「コンピューターの再起動」を忘れずに行ってください。正しく動作しなくなる場合があります。


### ドライバ署名オプションについて

本プリンタードライバーは、Windows ログテストを受けていないため、インストール時にエラーメッセージが表示され、インストールできない場合があります。

[ドライバ署名オプション] で、[無視] または [警告] に設定されていることを確認してください。[ブロック] が選択されている場合、プリンタードライバーのインストールはできません。

[ドライバ署名オプション] は、以下の操作で表示できます。

- ① [スタート] の [設定] から [コントロールパネル (C)] を選択する。
- ② [システム] をダブルクリックする。  
[システムのプロパティ] ウィンドウが開きます。
- ③ [ハードウェア] タブをクリックする。
- ④ [ドライバの署名 (S)] ボタンをクリックする。

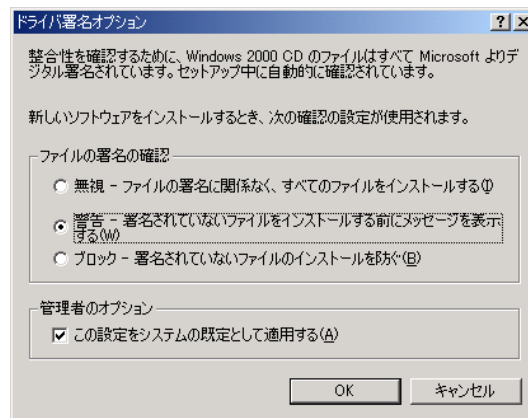


本書では、[ドライバ署名オプション] で [警告] が設定されている場合について説明しています。

## Windows 2000 へのインストール

- 1 インストールするプリンターを 1 台だけコンピューターに接続する。
- 2 接続したプリンターの電源を入れる。
- 3 コンピューターの電源を入れ、Administrator、または Administrators グループのメンバーとしてログオンする。

Windows 2000 の起動時に「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

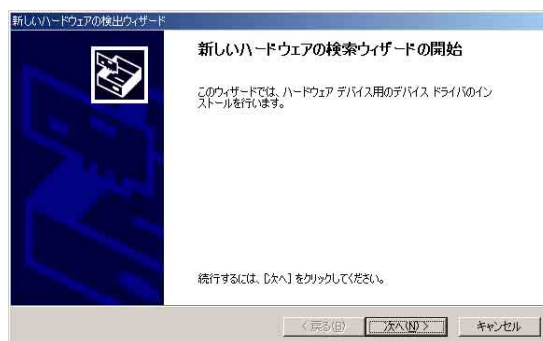

### 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されなかった場合


インストールしようとしているプリンターの電源が入っている状態でコンピューターに接続したまま、以下の操作を行ってください。(他の USB 接続のプリンターや、既にインストールが完了したプリンターが接続されている場合は、インストールしようとしているプリンターのみを接続し、以下の操作を行ってください。)



- ① [スタート] の [設定] から [コントロールパネル (C)] を選択する。
- ② [システム] をダブルクリックする。  
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- ③ [ハードウェア] タブをクリックする。
- ④ [デバイスマネージャ (D)] をクリックする。  
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- ⑤ [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] の左側にある [+] をクリックする。
- ⑥ [USB 印刷サポート] を選択し、右クリックの [プロパティ (R)] を開き、[場所] が現在接続されているプリンターの機種名であることを確認し、[操作 (A)] メニューから [削除 (U)] を選択する。
- ⑦ コンピューターを再起動する。  
Windows 2000 の起動時に「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。


#### 4 [次へ] をクリックする。

画面が次のようになります。

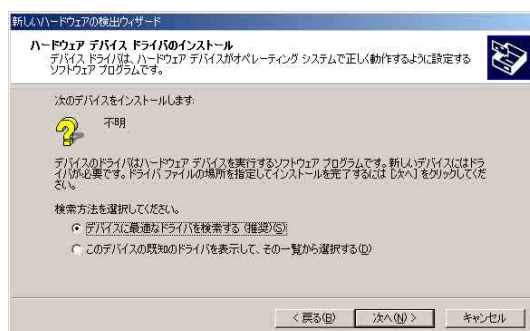

#### 5 [デバイスに最適なドライバを検索する (S)] を選択し、[次へ (N)] をクリックする。


画面が次のようになります。

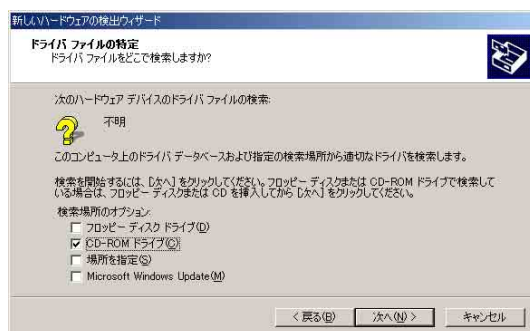

## 付属の CD-ROM を使用する場合

- 6 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入する。
- 7 [CD-ROM ドライブ (C)] を選択し、[次へ (N)] をクリックする。

画面が次のようになります。

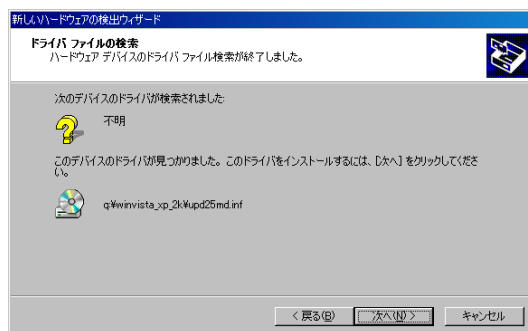


#### 8 [次へ (N)] をクリックする。



「デジタル署名が見つかりませんでした」ダイアログボックスが表示された場合には、[はい (Y)] をクリックする。

ファイルのコピーが行われた後、画面が次のようになります。

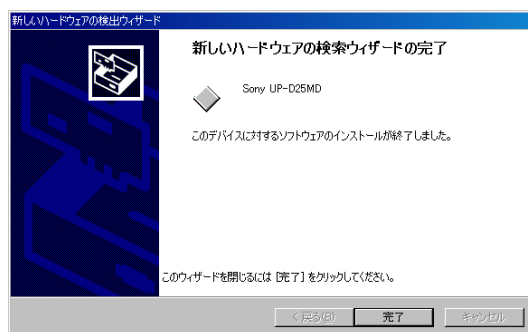

#### 9 [完了] をクリックする。


以上でインストールは完了です。

#### 10 コンピューターを再起動する。

## 付属の CD-ROM を使用しない場合

- 6 [場所を指定 (S)] を選択し、[次へ (N)] をクリックする。


画面が次のようになります。

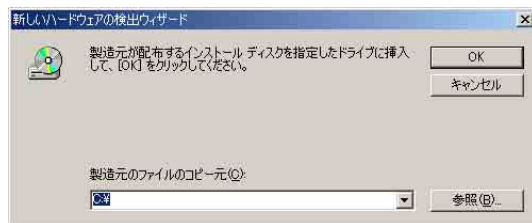


- 7 [参照 (B)] をクリックして、「ファイルの場所」ダイアログボックスを表示させる。ダウンロードしたインストールファイルを解凍したフォルダを指定し、「開く (O)」をクリックして「ファイルの場所」ダイアログボックスを閉じる。

- 8 [OK] をクリックする。

画面が次のようになります。

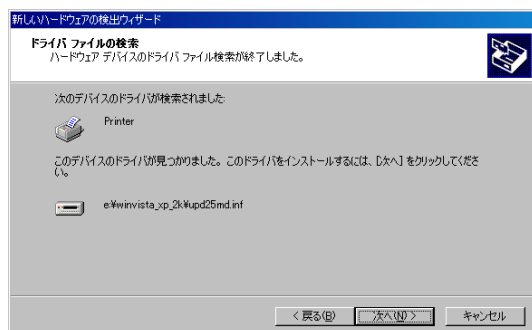


- 9 [次へ (N)] をクリックする。

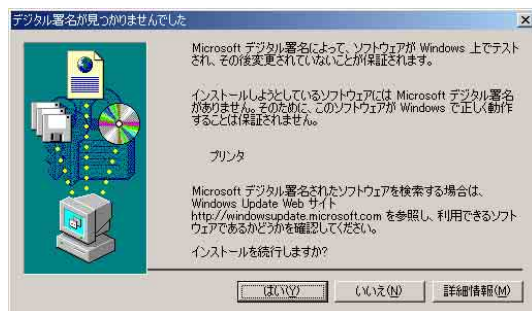

「デジタル署名が見つかりませんでした」ダイアログボックスが表示された場合には、[はい (Y)] をクリックする。

ファイルのコピーが行われた後、画面が次のように変わります。

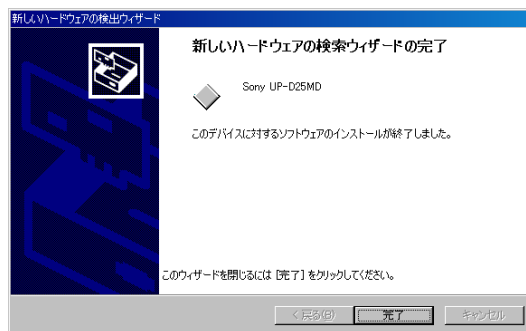

- 10 [完了] をクリックする。

以上でインストールは完了です。

- 11 コンピューターを再起動する。

### ご注意

手順 7 の画面で [キャンセル] を、または手順 8 の画面で [いいえ (N)] を選択した場合、その後のインストール時に「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合があります。この場合は手順 3 の「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されなかった場合」に記載されている操作を行ってください。

## Windows 2000 からプリンタードライバをアンインストールする

プリンタードライバをアンインストールする手順について説明します。

### ご注意

アンインストールを行うときは、コンピューターとプリンターを接続していない状態で操作を開始してください。「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示された場合は、コンピューターとプリンターを接続しているケーブルをはずし、すべて [キャンセル] をクリックして、ウィザードを終了させてください。その後、アンインストールをやり直してください。

- 1 プリンターの電源を切り、コンピューターと接続しているケーブルをはずす。
- 2 コンピューターの電源を入れ、Administrator、または Administrators グループのメンバーとしてログオンする。

- 3 [スタート] をクリックし、[設定 (S)] の [コントロールパネル (C)] から [アプリケーションの追加と削除] を選択する。



- 4 [現在インストールされているプログラム] からアンインストールするプリンタードライバーを選択して、[変更と削除] をクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。



- 5 [はい (Y)] をクリックする。

プリンタードライバーがアンインストールされると、次のダイアログボックスが表示されます。



- 6 [はい (Y)] をクリックする。

コンピューターが再起動されます。

以上でプリンタードライバーのアンインストールは完了です。