

Printer Driver

Instelgids

In deze handleiding wordt beschreven hoe u het printerstuurprogramma configureert onder Windows 7, Windows Vista, Windows XP en Windows 2000.

Voordat u deze software gaat gebruiken

Voordat u het printerstuurprogramma gebruikt, moet u eerst het Leesmij-bestand ("Readme") lezen.

UP-DR80MD

Bij de schermafbeeldingen die als illustratie worden gebruikt in deze handleiding wordt er vanuitgegaan dat de UP-DR80MD-printer is aangesloten op een computer waarop Windows Vista is geïnstalleerd.

De printer instellen

Voordat u gaat afdrukken vanuit toepassingen, dient u het printerinstellingenvenster te openen en de instellingen te configureren.

U kunt het printerinstellingscherm openen op een van de volgende manieren.

- In het [Start]-menu, selecteert u [Control Panel] en vervolgens [Printer] (menu [Start] en dan [Devices and Printers] onder Windows 7; menu [Start] en dan [Printers and Faxes] onder Windows XP; menu [Start], [Settings] en dan [Printers] onder Windows 2000). Selecteer het printerpictogram voor de Sony UP-DR80MD en selecteer dan [Select printing preferences] vanuit de opdrachtbalk ([Printing preferences] door met de rechtermuisknop te klikken op het printerpictogram onder Windows 7; [Printing Preferences] in het menu [File] onder Windows XP en Windows 2000). Als u op deze manier de instellingen kiest, dan gelden deze als de standaardwaarden voor het afdrukken vanuit toepassingen.
- In het menu [File] van uw toepassing klikt u op de opdracht voor het instellen van de printer. Instellingen die u op deze manier maakt gelden alleen totdat u de toepassing sluit.

In deze handleiding worden de tabbladen besproken die verschijnen in het instellingenvenster van de UP-DR80MD.

Het tabblad [Paper]

Basisinstellingen voor afdrukken.

Het tabblad [Graphics]


Op dit tabblad stelt u grijswaarden en helderheid in en andere instellingen die te maken hebben met beeldkwaliteit.

Het tabblad [Message]

Hier kunt u instellingen configureren die te maken hebben met berichtvensters.

Instellingen op het tabblad [Paper]

Hier configureert u basisinstellingen voor afdrukken.

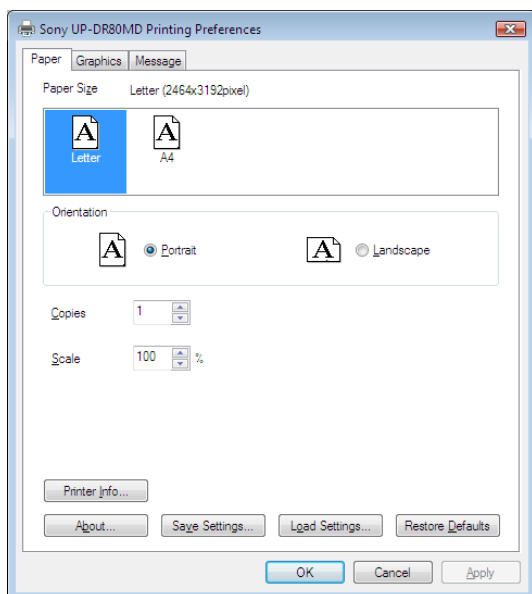

Paper Size

Hieronder vindt u de papierformaten en maximumafdrukgroottes die u met deze printer kunt gebruiken.

| Paper Size | Maximumafdrukgrootte |
|------------|----------------------|
| Letter | 2.464 × 3.192 pixels |
| A4 | 2.392 × 3.400 pixels |

Orientation

Kies ofwel [Portrait] ofwel [Landscape] als afdrukrichting.

Copies

U kunt dit instellen tussen 1 en 10.

Scale

Hiermee kiest u de afdrukvergroting. U kunt de vergroting instellen tussen 25 en 400%.

Printer Info

Geeft informatie weer over de huidige aangesloten printer.

Save Settings

Hiermee slaat u alle printerinstellingen op in een bestand.

Load Settings

Hiermee haalt u opgeslagen instellingen weer op uit een bestand.

About

Hiermee geeft u de versie-informatie van het printerstuurprogramma weer.

Restore Defaults


Hiermee worden alle instellingen op het tabblad [Paper] teruggezet op hun standaardwaarden.

Instellingen op het tabblad [Graphics]

Selecteer [Color Balance], [Lightness], [Color Correction] of [Gray Balance] in de lijst [Color Adjust] als u deze instellingen wilt wijzigen.


Color Balance

Hiermee past u de kleurbalans aan. U kunt de instelling aanpassen door het schuifblokje naar links of naar rechts te schuiven. U kunt de instelling ook aanpassen door waarden te typen in de vakjes rechts. Het effect van de aanpassingen wordt weergegeven in het voorbeeld rechtsboven.

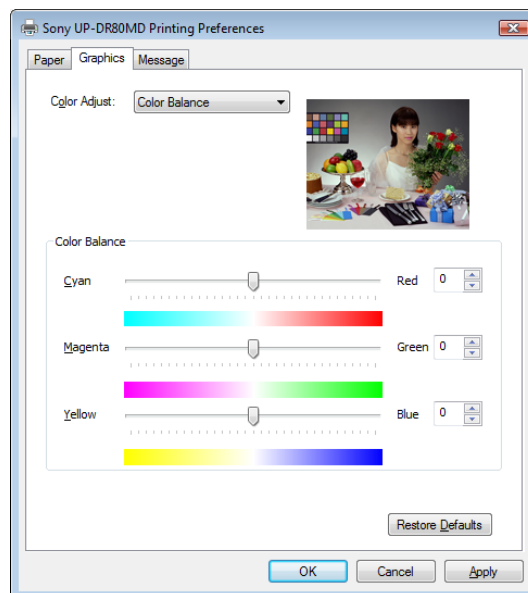

Lightness

Hiermee past u de lichtheid aan. U kunt de instelling aanpassen door het schuifblokje naar links of naar rechts te schuiven. U kunt de instelling ook aanpassen door waarden te typen in de vakjes rechts. Het effect van de aanpassingen wordt weergegeven in het voorbeeld rechtsboven. Het effect van scherpteaanpassingen wordt echter niet weergegeven.

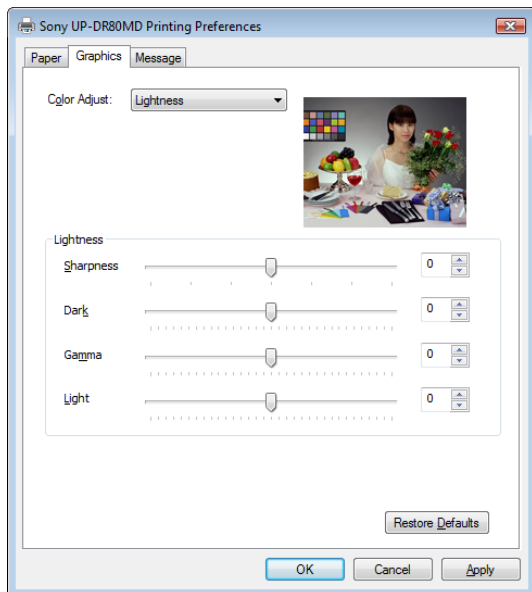

Sharpness

Hiermee past u de scherpte aan van afbeeldingscontouren. De contouren van afbeeldingen worden scherper als u de instelling verhoogt.

Dark

Hiermee past u de sterkte van schaduwen aan.

Gamma

Hiermee past u de sterkte van middentonen aan.


Light

Hiermee past u de sterkte van hoge lichten aan.

Color Correction

Selecteer de methode voor kleurcorrectie.

Het effect van de instellingen wordt niet weergegeven in het voorbeeld rechtsboven.

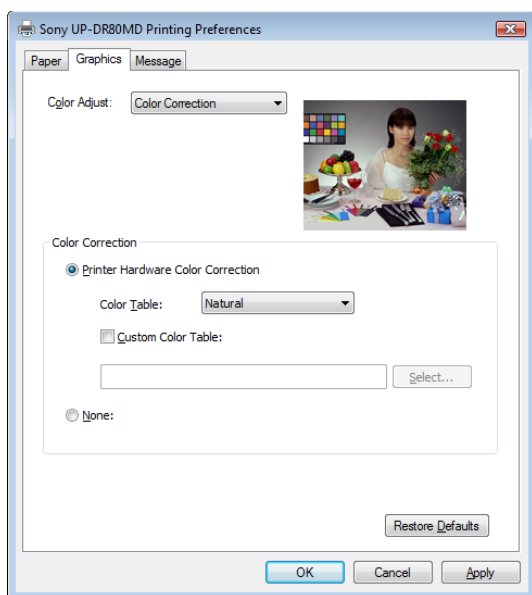

Printer Hardware Color Correction

De printer corrigeert de kleuren.

None

Er wordt geen kleurcorrectie uitgevoerd door de printerhardware.

Color Table

Hiermee selecteert u de interne kleurtabel van de printer.

Natural: Correctie die geschikt is voor sRGB-afbeeldingen.


CG: Correctie die geschikt is voor CG-afbeeldingen.

Custom Color Table

Selecteer dit wanneer u een andere kleurtabel wilt gebruiken dan de interne kleurtabel van de printer.

Gray Balance

Met dit tabblad kunt u de kleurschakering van een afgedrukte afbeelding aanpassen zodat deze overeenkomt met de kleurschakering op de monitor. Als u een nieuw inktlint en nieuw papier aanbrengt, dan kunt u de grijsbalans aanpassen ter correctie van eventuele ongelijkheden tussen het lint en het papier. Het effect van de aanpassingen wordt weergegeven in het voorbeeld rechtsboven.

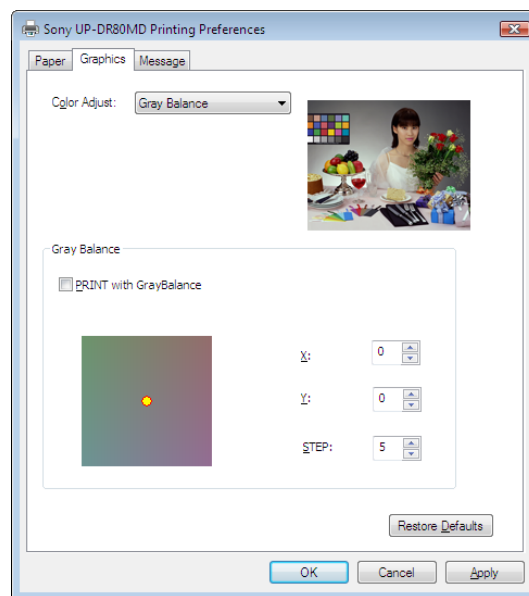

PRINT with GrayBalance

Wanneer u dit aankruisvakje selecteert, wordt een grijsbalansafdruk gemaakt voor de afdrukgegevens.

X, Y

Pas de grijsbalans aan door de x- en y-coördinaten in te stellen voor de grijsbalanskaart links onder. Standaard staan beide instellingen op 0 en wordt de grijsbalans niet aangepast.

Het effect van de aanpassingen wordt weergegeven in het voorbeeld rechtsboven.

STEP

Geef op met hoeveel telkens de grijsbalans voor grijsbalansafdrukken wordt aangepast. De standaardinstelling is 5.

Stel een lagere waarde in wanneer u precieze aanpassingen wilt maken in de grijsbalans, en stel een grotere waarde in wanneer u grovere aanpassingen wilt doen.

Wilt u de grijsbalans afdrukken als referentiepunt voor het aanpassen, selecteer dan het aankruisvakje [PRINT with GrayBalance] en druk af. Wanneer u dit doet, verschijnt het volgende dialoogvenster. Geef het gebied aan dat u wilt gebruiken om de kleurschakering te controleren door het kader (selectievenster) te slepen in het voorbeeld. U kunt de grootte van het kader aanpassen met de instelling [Frame Size]. U kunt ook de kleur van het kader aanpassen met de instelling [Frame Brightness].



Als u op de knop [Print] klikt, dan wordt het deel van afbeelding afgedrukt dat u hebt geselecteerd, in de opmaak 5 × 5 cellen. Selecteer de afbeelding met de beste grijsbalans uit de 25 afbeeldingen die zijn afgedrukt en voer de x- en y-coördinaten (X, Y) die onder die afbeelding zijn afgedrukt in voor de instellingen [X] en [Y].

Restore Defaults


Hiermee worden alle instellingen op het tabblad [Graphics] teruggezet op hun standaardwaarden.

Opmerking

Er kunnen kleine verschillen optreden in afbeeldingskwaliteit en kleuren tussen voorbeeld en werkelijke afdruk. Dit is het gevolg van verschillen in kleurproductiemethoden en weergaveomgeving. De voorbeelden gelden alleen als richtlijn.

Instellingen op het tabblad [Message]

Hiermee bepaalt u de plek waar berichtvensters weergegeven worden.

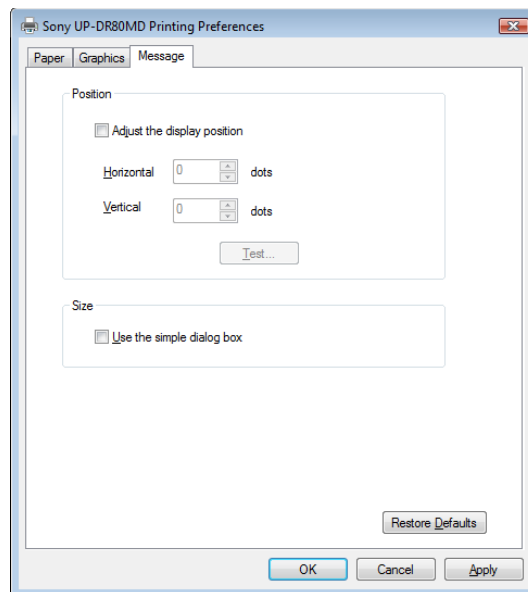

Adjust the display position

Selecteer dit aankruisvakje als u de weergavepositie van berichtvensters wilt aanpassen. Het berichtvenster verschijnt op de positie die u opgeeft met behulp van de vakken [Horizontal] en [Vertical].

Standaardinstelling: Het aankruisvakje [Adjust the display position] wordt niet geselecteerd. (Het berichtvenster verschijnt in het midden van het scherm.)

Horizontal en Vertical

Hiermee legt u de positie van berichtvensters vast, waarbij u de linker bovenhoek van het scherm als oorsprong gebruikt.

Het berichtvenster verschijnt op de positie die wordt bepaald door de hier opgegeven waarden.

Test

Klik op deze knop als u een testberichtvenster wilt weergeven op de positie die is vastgelegd met [Horizontal] en [Vertical].

Use the simple dialog box

Selecteer dit aankruisvakje als u kleinere berichtvensters wilt gebruiken.

Restore Defaults

Hiermee worden alle instellingen op het tabblad [Message] teruggezet op hun standaardwaarden.