

Printer Driver

Instrukcja instalacji

Ten podręcznik opisuje sposób instalacji sterownika drukarki w systemie Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP i Windows 2000.

Przeczytaj zanim rozpocznesz korzystanie z tego oprogramowania

Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik „Readme”.

Spis treści

Wymagania w zakresie środowiska operacyjnego	3
Informacje o tym dokumencie	4
Instalacja sterownika drukarki w systemie Windows 8	4
Przed rozpoczęciem instalacji	4
Instalacja w systemie Windows 8	4
Odinstalowywanie sterownika drukarki w systemie Windows 8	7
Instalacja sterownika drukarki w systemie Windows 7	8
Przed rozpoczęciem instalacji	8
Instalacja w systemie Windows 7	8
Odinstalowywanie sterownika drukarki w systemie Windows 7	11
Instalacja sterownika drukarki w systemie Windows Vista	12
Przed rozpoczęciem instalacji	12
Instalacja w systemie Windows Vista	13
Odinstalowywanie sterownika drukarki w systemie Windows Vista	15
Instalacja sterownika drukarki w systemie Windows XP	16
Przed rozpoczęciem instalacji	16
Instalacja w systemie Windows XP	17
Odinstalowywanie sterownika drukarki w systemie Windows XP	19
Instalacja sterownika drukarki w systemie Windows 2000	20
Przed rozpoczęciem instalacji	20
Instalacja w systemie Windows 2000	20
Odinstalowywanie sterownika drukarki w systemie Windows 2000	23

Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Nazwy innych firm i produktów wymienione w niniejszej instrukcji są również znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Wymagania w zakresie środowiska operacyjnego

Ten sterownik drukarki jest przeznaczony do instalacji na komputerze pracującym pod kontrolą jednego z następujących systemów operacyjnych:

- Komputery, które mogą pracować pod kontrolą systemu Microsoft Windows 8
 - Komputery, które mogą pracować pod kontrolą systemu Microsoft Windows 7
 - Komputery, które mogą pracować pod kontrolą systemu Microsoft Windows Vista
 - Komputery, które mogą pracować pod kontrolą systemu Microsoft Windows XP Professional/Home Edition
 - Komputery, które mogą pracować pod kontrolą systemu Microsoft Windows 2000 Professional
- Informacje na temat systemów operacyjnych współpracujących z tą drukarką znajdują się w odpowiedniej tabeli na stronie firmy Sony.
http://www.sony.net/Products/DP-driver/os/win_mp.html

Informacje o interfejsie USB 2.0

- Drukarka jest zgodna ze specyfikacją USB 2.0.
- Interfejs USB 2.0 jest w pełni kompatybilny wstecznie z interfejsem USB 1.1.
- Interfejs USB 2.0 obsługuje pracę zarówno z konwencjonalną prędkością Full Speed (Low Speed), jak i z prędkością Hi-Speed.
- W środowisku USB 1.1 możliwe jest podłączenie i praca w trybie Full Speed. Do pracy w trybie Hi-Speed muszą być spełnione następujące wymagania:
 - Komputer
Komputer obsługujący tryb Hi-Speed interfejsu USB (zgodny z USB 2.0)*
 - System operacyjny
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional/Home Edition i Windows 2000 Professional
 - Sterownik USB 2.0
Sterownik urządzenia USB 2.0 opracowany przez Microsoft Corporation (Działanie z innymi sterownikami USB 2.0 nie jest gwarantowane.)
 - Certyfikowany kabel USB 2.0

* Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami USB 2.0 oraz kartami rozszerzeń USB 2.0 nie może zostać zagwarantowana.

Do pracy potrzebne są następujące ustawienia ekranu.

- Rozdzielczość SVGA (800×600) lub wyższa
- Domyślny rozmiar czcionki
Windows 2000: Mniejsza
Windows XP: Normalna (96 DPI)
Windows Vista: Skala domyślna (96 DPI) — pozwoli zmieścić więcej informacji
Windows 8 i Windows 7: Mniejsza — 100% (domyślne)

Uwaga

Po podłączeniu drukarki do komputera i jej włączeniu, nie wolno dopuścić do tego, by komputer przeszedł w stan uśpienia, wstrzymania lub hibernacji. W przeciwnym razie prawidłowa praca drukarki nie jest gwarantowana.

Informacje o tym dokumencie

Sposób funkcjonowania Panelu sterowania opisany w tym dokumencie zakłada, że system Windows XP lub Windows Vista pracuje w trybie widoku klasycznego. Aby przełączyć do widoku klasycznego, kliknij menu [Start], wybierz [Control Panel], a następnie kliknij [Switch to Classic View] we właściwościach Panelu sterowania wyświetlanych po lewej stronie ekranu.

Komunikaty ekranowe zawarte w niniejszej instrukcji zostały przedstawione przy założeniu, że drukarka UP-D25MD jest podłączona. Jeśli używasz innego modelu drukarki, to podczas czytania komunikatów ekranowych w niniejszej instrukcji zastąp każde wystąpienie nazwy „UP-D25MD” nazwą swojego modelu drukarki.

W tym przewodniku został przedstawiony sposób instalacji i dezinstalacji sterownika w komputerach z następującymi systemami operacyjnymi: Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP i Windows 2000. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi odpowiedniego systemu.

Instalacja sterownika drukarki w systemie Windows 8

Przed rozpoczęciem instalacji

Uwaga

Nie wolno podłączać drukarki do komputera przed zainstalowaniem sterownika drukarki. Jeśli drukarka zostanie wcześniej podłączona, może nie zostać rozpoznana przez komputer.

Informacja na temat aktualizacji do nowych wersji

Jeśli aktualizujesz sterownik drukarki, to usuń poprzedni sterownik drukarki przed rozpoczęciem instalacji.


Szczegółowa procedura usuwania sterownika drukarki została opisana w niniejszej instrukcji w sekcji „Odinstalowywanie sterownika drukarki w systemie Windows 8”.

Jeśli instalacja nie powiedzie się lub zostanie anulowana, uruchom ponownie komputer przed ponowną próbą instalacji.

Instalacja w systemie Windows 8


- 1** Włącz komputer i zaloguj się jako administrator systemu lub członek grupy Administratorzy.
- 2** Uruchom plik „Setup.exe” znajdujący się w folderze „PrinterDriver\Win8” na dostarczonej płycie CD-ROM (lub pobrany ze strony internetowej Sony).

Zostanie wyświetlone okno dialogowe [User Account Control].

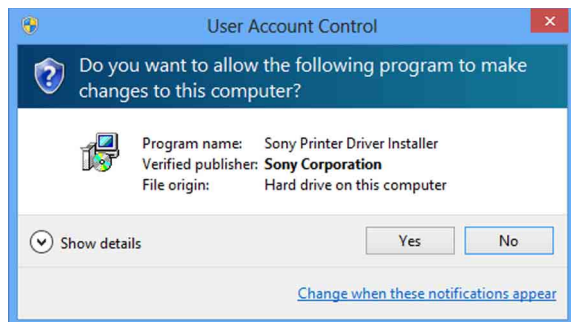


3 Kliknij [Yes].

Pojawi się następujące okno dialogowe.

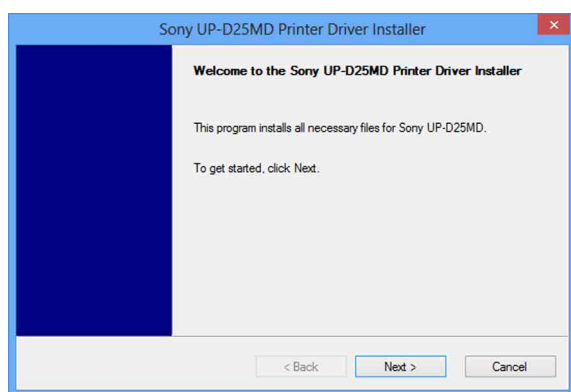


4 Kliknij [Next].

Zostanie wyświetlona umowa licencyjna użytkownika końcowego.

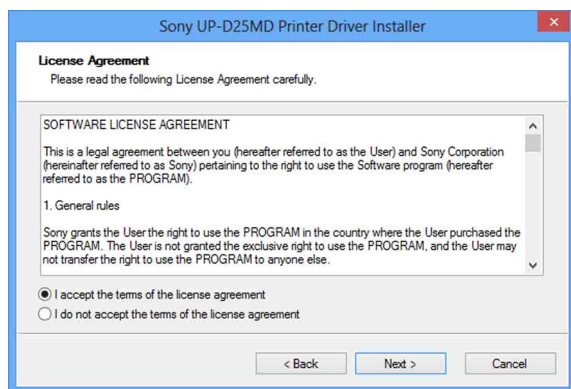


5 Wybierz opcję [I accept the terms of the license agreement], a następnie kliknij [Next].

Pojawi się następujące okno dialogowe.

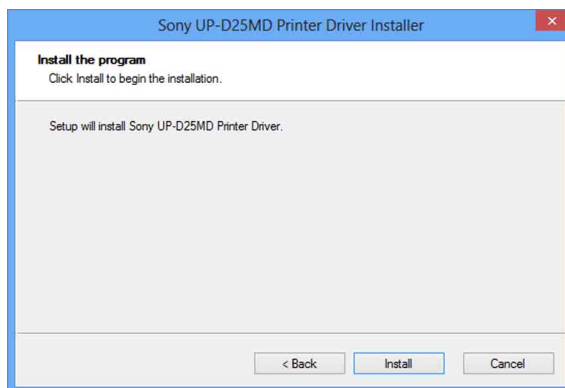

6 Kliknij [Install].


Instalacja zostanie rozpoczęta. W czasie trwania instalacji, w oknie dialogowym wyświetlany jest jej stan.

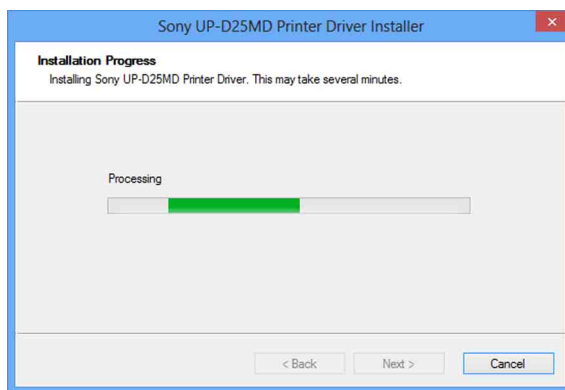

Jeśli następujące okno dialogowe zostanie wyświetlane w czasie trwania instalacji, kliknij przycisk [Install].



Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe.

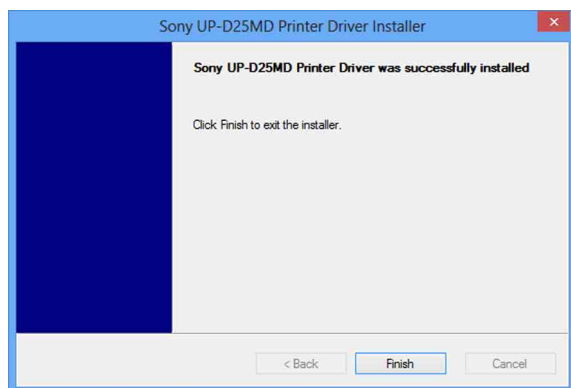


7 Kliknij [Finish].

8 Podłącz drukarkę do komputera.


Krok ten kończy procedurę instalacji sterownika drukarki.

Aby sprawdzić, czy drukarka została rozpoznana przez komputer, można kliknąć menu [Settings], wybrać opcję [Control Panel], a następnie wybrać opcję [View devices and printers]. Jeśli drukarka zostanie rozpoznana przez komputer, w sekcji [Printers] powinna zostać wyświetlona ikona drukarki, tak jak to pokazano.

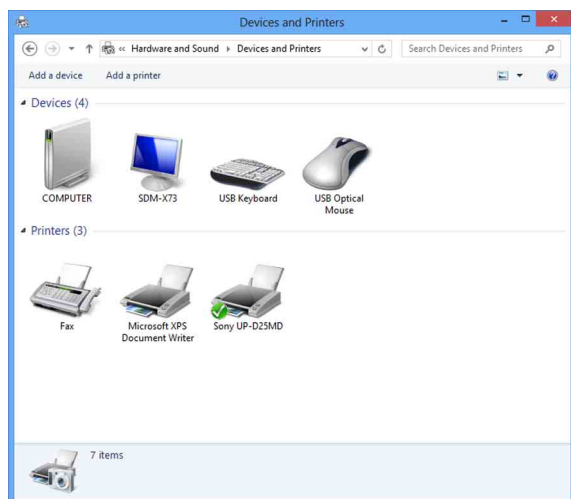

Jeśli komputer nie rozpoznaje drukarki


Jeśli drukarka została podłączona do komputera przed zainstalowaniem sterownika drukarki, drukarka może być wyświetlana w sekcji [Unspecified] zamiast w sekcji [Printers]. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że drukarka nie została rozpoznana przez komputer i nie można jej używać.

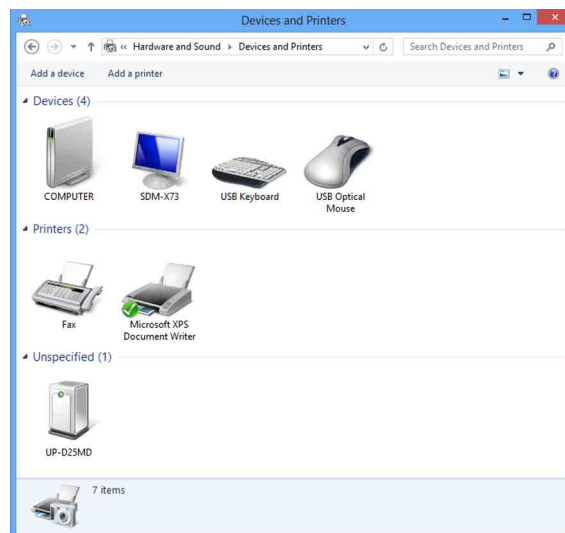


W takiej sytuacji należy zaktualizować sterownik drukarki w następujący sposób.

- 1** Sprawdź, czy drukarka, dla której trwa instalacja sterownika, jest włączona oraz podłączona do komputera. Inne drukarki USB nie powinny być jednocześnie podłączone.
- 2** Kliknij polecenie [Settings], wybierz polecenie [Control Panel] i wybierz polecenie [View devices and printers].


- 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy w sekcji [Unspecified] i kliknij polecenie [Remove device].

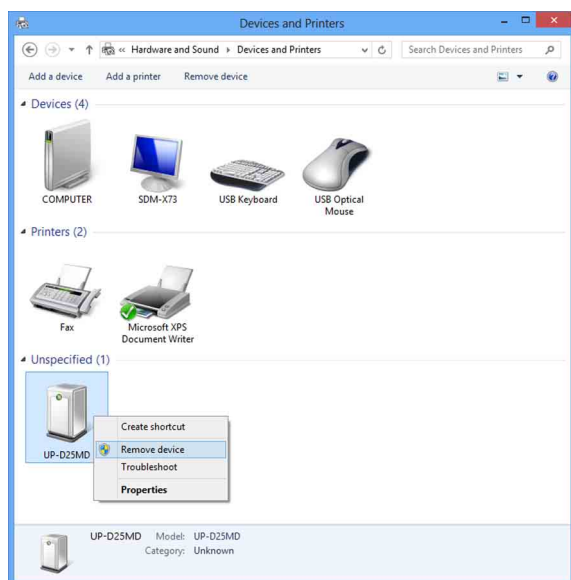

- 4 Gdy pojawi się poniższe okno dialogowe, kliknij polecenie [Yes].

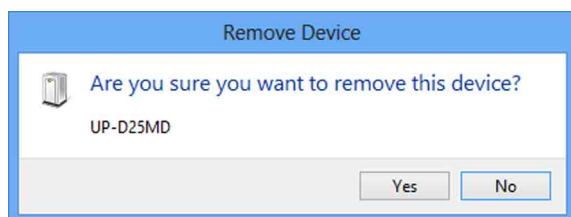

- 5 Drukarka znajdująca się w sekcji [Unspecified] elementu [View devices and printers] zostanie usunięta.

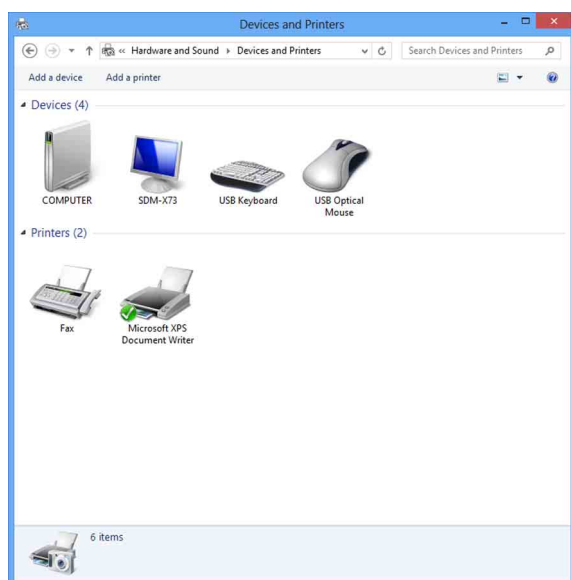

- 6 Odłącz kabel łączący drukarkę z komputerem.

- 7 Jeśli sterownik drukarki nie został zainstalowany, zainstaluj go, wykonując czynności opisane w sekcji „Instalacja w systemie Windows 8”.

- 8 Podłącz drukarkę do komputera.


Krok ten kończy procedurę aktualizacji sterownika drukarki.

Odinstalowywanie sterownika drukarki w systemie Windows 8

Uwaga


Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem dezinstalacji odłączyć drukarkę od komputera i wyłączyć komputer. Jeśli pojawi się okno dialogowe [Found New Hardware], odłącz kabel łączący drukarkę z komputerem, kliknij [Cancel] i zamknij okno dialogowe. Następnie rozpocznij ponownie procedurę odinstalowywania.

- 1 Wyłącz drukarkę i odłącz kabel łączący drukarkę z komputerem.
- 2 Włącz komputer i zaloguj się jako administrator systemu lub członek grupy Administratorzy.
- 3 Kliknij [Settings], wybierz [Control Panel], a następnie wybierz [Uninstall a program].

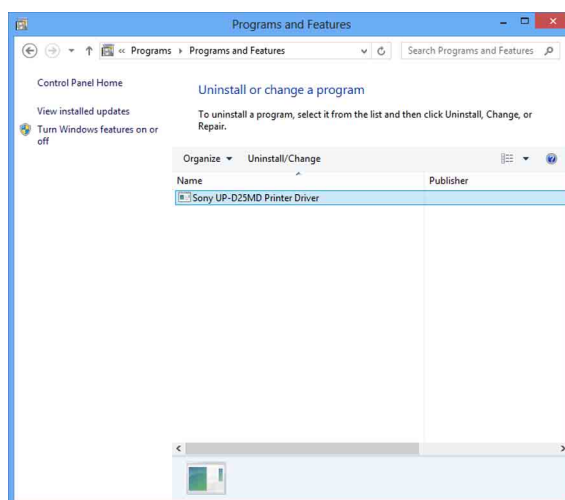

- 4 Wybierz sterownik drukarki z listy [Uninstall or change a program], a następnie kliknij [Uninstall/Change].


Pojawi się następujące okno dialogowe.

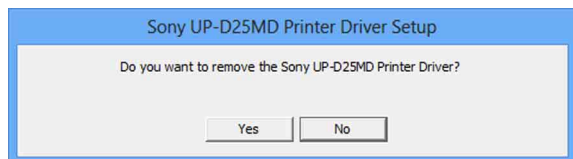

- 5 Kliknij [Yes].

Procedura odinstalowywania zostanie rozpoczęta.

Po zakończeniu procedury odinstalowywania zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe.

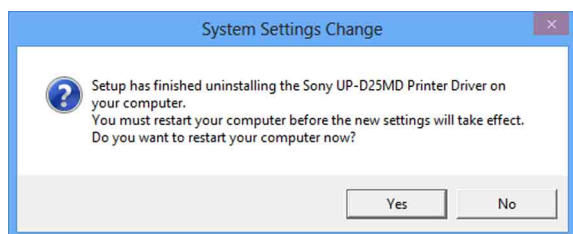

- 6 Kliknij [Yes].

Komputer zostanie ponownie uruchomiony.

Krok ten kończy procedurę odinstalowywania sterownika drukarki.

Instalacja sterownika drukarki w systemie Windows 7

Przed rozpoczęciem instalacji

Uwaga

Nie wolno podłączać drukarki do komputera przed zainstalowaniem sterownika drukarki. Jeśli drukarka zostanie wcześniej podłączona, może nie zostać rozpoznana przez komputer.


Informacja na temat aktualizacji do nowych wersji


Jeśli aktualizujesz sterownik drukarki, to usuń poprzedni sterownik drukarki przed rozpoczęciem instalacji.

Szczegółowa procedura usuwania sterownika drukarki została opisana w niniejszej instrukcji w sekcji „Odinstalowywanie sterownika drukarki w systemie Windows 7”.

Jeśli instalacja nie powiedzie się lub zostanie anulowana, uruchom ponownie komputer przed ponowną próbą instalacji.

Połączenie USB 2.0


Drukarka jest zgodna ze specyfikacją USB 2.0. Jednakże, jeśli komputer lub koncentrator USB nie jest zgodny z USB 2.0, to po podłączeniu drukarki wyświetli się poniższy komunikat. Kliknij , aby zamknąć ten komunikat.

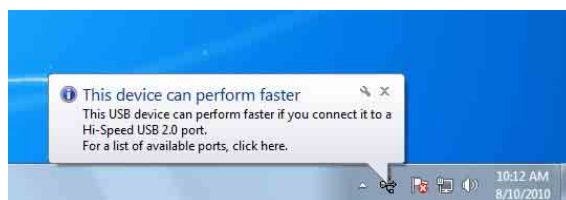

Instalacja w systemie Windows 7


- 1 Włącz komputer i zaloguj się jako administrator systemu lub członek grupy Administratorzy.
- 2 Uruchom plik „Setup.exe” znajdujący się w folderze „PrinterDriver\Win7” na dostarczonej płycie CD-ROM (lub pobrany ze strony internetowej Sony).

Zostanie wyświetlone okno dialogowe [User Account Control].

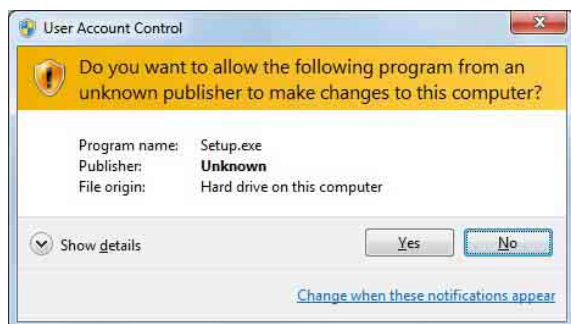


3 Kliknij [Yes].

Pojawi się następujące okno dialogowe.

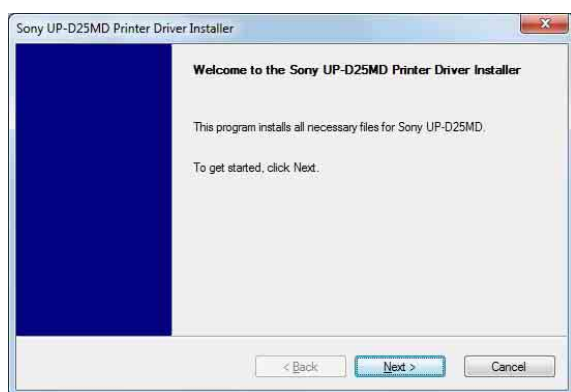


4 Kliknij [Next].

Zostanie wyświetlona umowa licencyjna użytkownika końcowego.

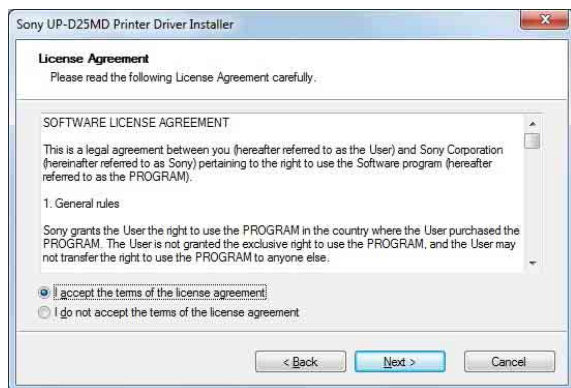

5 Wybierz opcję [I accept the terms of the license agreement], a następnie kliknij [Next].

Pojawi się następujące okno dialogowe.

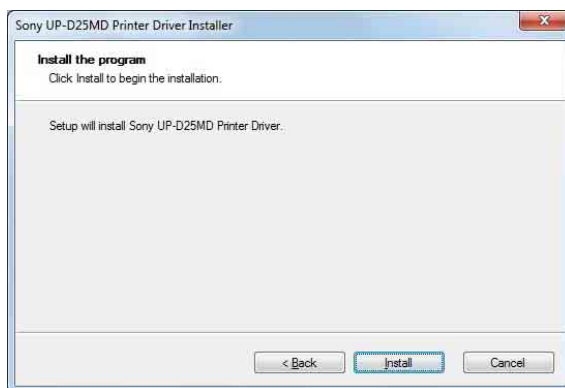

6 Kliknij [Install].


Instalacja zostanie rozpoczęta. W czasie trwania instalacji, w oknie dialogowym wyświetlany jest jej stan.



Jeśli następujące okno dialogowe zostanie wyświetlane w czasie trwania instalacji, kliknij przycisk [Install this driver software anyway].



Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe.

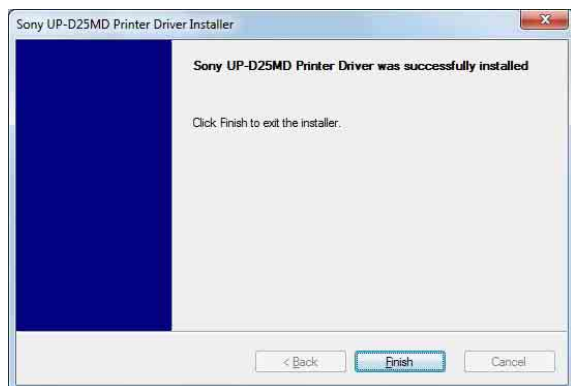


7 Kliknij [Finish].

8 Podłącz drukarkę do komputera.

Krok ten kończy procedurę instalacji sterownika drukarki.


Aby sprawdzić, czy drukarka została rozpoznana przez komputer, można kliknąć menu [Start], wybrać opcję [Control Panel], a następnie wybrać opcję [View devices and printers].

Jeśli drukarka zostanie rozpoznana przez komputer, w sekcji [Printers and Faxes] powinna zostać wyświetlona ikona drukarki, tak jak to pokazano.

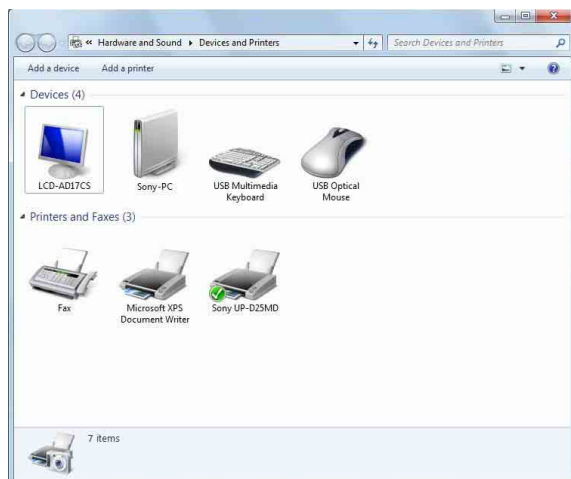

Jeśli komputer nie rozpoznaje drukarki


Jeśli drukarka została podłączona do komputera przed zainstalowaniem sterownika drukarki, drukarka może być wyświetlana w sekcji [Unspecified] zamiast w sekcji [Printers and Faxes]. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że drukarka nie została rozpoznana przez komputer i nie można jej używać.

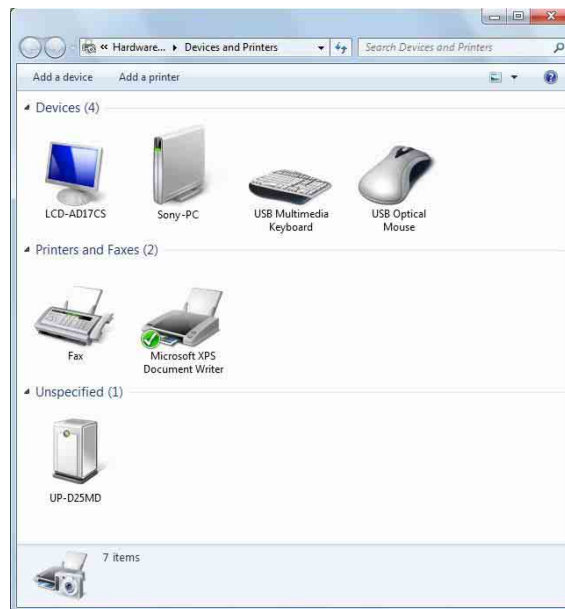

W takiej sytuacji należy zaktualizować sterownik drukarki w następujący sposób.

- 1** Odłącz kabel łączący drukarkę z komputerem.
- 2** Jeśli sterownik drukarki nie został zainstalowany, wykonaj kroki opisane w sekcji „Instalacja w systemie Windows 7”, aby zrobić to teraz.
- 3** Podłącz drukarkę do komputera.
- 4** Kliknij [Start], wybierz [Control Panel], a następnie wybierz [View devices and printers].
- 5** Kliknij prawym przyciskiem myszy w sekcji [Unspecified] i kliknij polecenie [Troubleshoot].

Pojawi się następujące okno dialogowe.

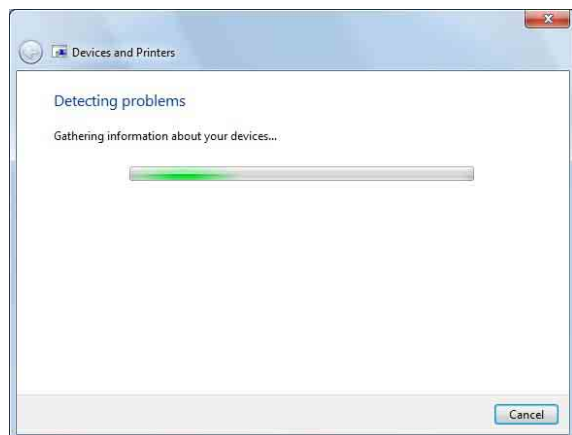


Po kilku chwilach ekran zostanie zmieniony na przedstawiony poniżej.




6 Kliknij [Apply this fix].

Pojawi się następujące okno dialogowe.

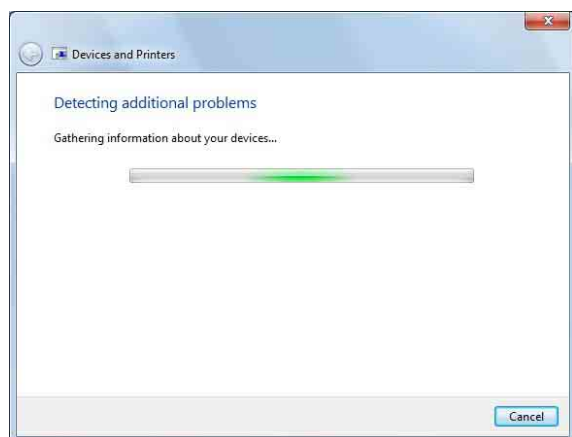

Po kilku chwilach ekran zostanie zmieniony na przedstawiony poniżej.

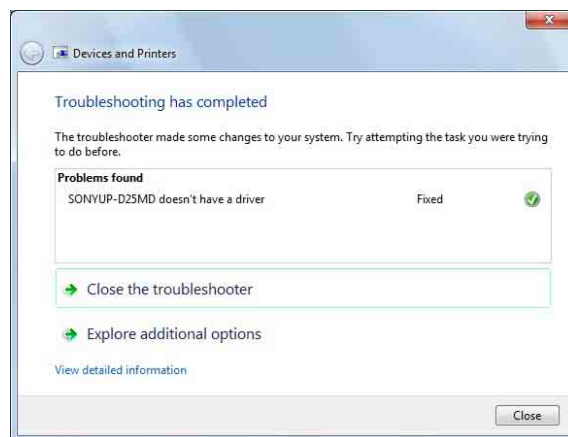

7 Kliknij [Close].

Krok ten kończy procedurę aktualizacji sterownika drukarki.


Odinstalowywanie sterownika drukarki w systemie Windows 7

Uwaga

Przed rozpoczęciem procedury odinstalowywania należy odłączyć drukarkę od komputera. Jeśli pojawi się okno dialogowe [Found New Hardware], odłącz kabel łączący drukarkę z komputerem, kliknij [Cancel] i zamknij okno dialogowe. Następnie rozpocznij ponownie procedurę odinstalowywania.


- 1 Wyłącz drukarkę i odłącz kabel łączący drukarkę z komputerem.
- 2 Włącz komputer i zaloguj się jako administrator systemu lub członek grupy Administratorzy.

- 3 Kliknij [Start], wybierz [Control Panel], a następnie wybierz [Uninstall a program].

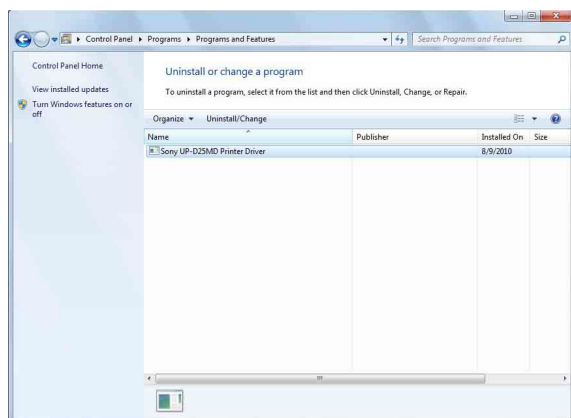

- 4 Wybierz sterownik drukarki z listy [Uninstall or change a program], a następnie kliknij [Uninstall/Change].

Pojawi się następujące okno dialogowe.

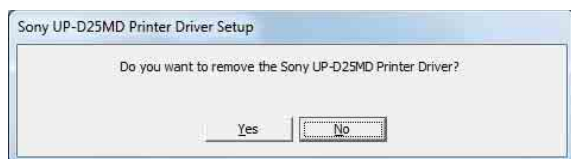

- 5 Kliknij [Yes].

Procedura odinstalowywania zostanie rozpoczęta.

Po zakończeniu procedury odinstalowywania zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe.



- 6 Kliknij [Yes].

Komputer zostanie ponownie uruchomiony.

Krok ten kończy procedurę odinstalowywania sterownika drukarki.

Instalacja sterownika drukarki w systemie Windows Vista

Przed rozpoczęciem instalacji


Informacja na temat aktualizacji do nowych wersji

Jeśli aktualizujesz sterownik drukarki, to usuń poprzedni sterownik drukarki przed rozpoczęciem instalacji.

Szczegółowa procedura usuwania sterownika drukarki została opisana w niniejszej instrukcji w sekcji „Odinstalowywanie sterownika drukarki w systemie Windows Vista”.

Jeśli instalacja nie powiedzie się lub zostanie anulowana, uruchom ponownie komputer przed ponowną próbą instalacji.

Połączenie USB 2.0

Drukarka jest zgodna ze specyfikacją USB 2.0. Jednakże, jeśli komputer lub koncentrator USB nie jest zgodny z USB 2.0, to po podłączeniu drukarki wyświetli się poniższy komunikat. Kliknij , aby zamknąć ten komunikat.



Instalacja w systemie Windows Vista

- 1 Podłącz drukarkę (tylko jedną), dla której chcesz zainstalować sterownik w komputerze.
- 2 Włącz podłączoną drukarkę.
- 3 Włącz komputer i zaloguj się jako administrator systemu lub członek grupy Administratorzy.

Wyświetli się okno dialogowe [Found New Hardware].



Jeśli pojawi się komunikat „Device driver software was not successfully installed” i nie wyświetli się okno dialogowe [Found New Hardware], spróbuj odłączyć kabel USB i ponownie go podłączyć. Jeśli okno dialogowe [Found New Hardware] nadal się nie pojawiło, wykonaj podane poniżej kroki, przy czym drukarka, dla której instalujesz sterownik, musi być włączona i podłączona do komputera. (Wszelkie inne drukarki USB lub wcześniej zainstalowane drukarki powinny być w tym czasie odłączone).


- 1 Kliknij [Start] i wybierz [Control Panel].
- 2 Kliknij dwukrotnie [System].
- 3 Kliknij [Device Manager].
Wyświetli się okno dialogowe [User Account Control].
- 4 Kliknij [Continue].
Okno [Device Manager] pojawi się ponownie.
- 5 Kliknij symbol [+] z lewej strony pozycji [Universal Serial Bus controllers].
- 6 Wybierz [USB Printing support], a następnie z menu [Action] wybierz polecenie [Uninstall].
- 7 Uruchom ponownie komputer.
Wyświetli się okno dialogowe [Found New Hardware].

- 4 Kliknij [Locate and install driver software (recommended)].


Pojawi się następujące okno dialogowe.



- 5 Kliknij [Continue].
- 6 Jeśli pojawi się poniższe okno dialogowe, kliknij [Don't search online].

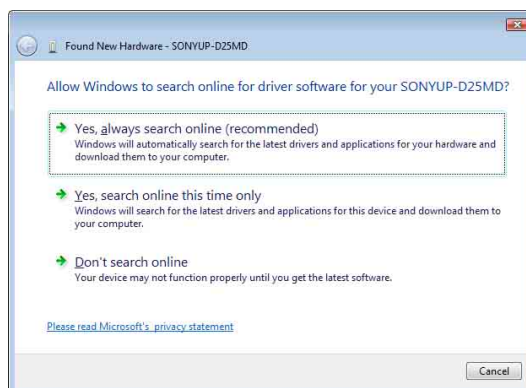

Ekran zmieni się w następujący sposób.

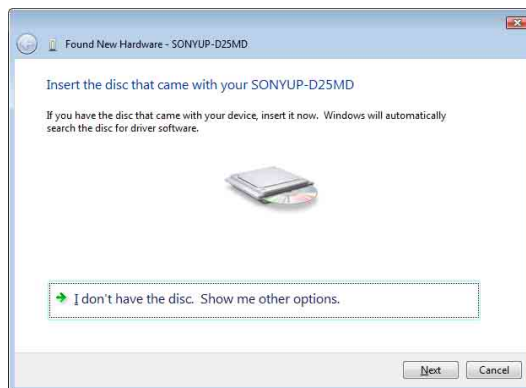


Od tego momentu, procedura postępowania jest różna w zależności od tego, czy korzystasz z dostarczonej płyty CD-ROM, czy też nie (w przypadku pobrania sterownika z sieci).

Procedura z wykorzystaniem dostarczonej płyty CD-ROM

- 7 Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.

Ekran zmieni się w następujący sposób.

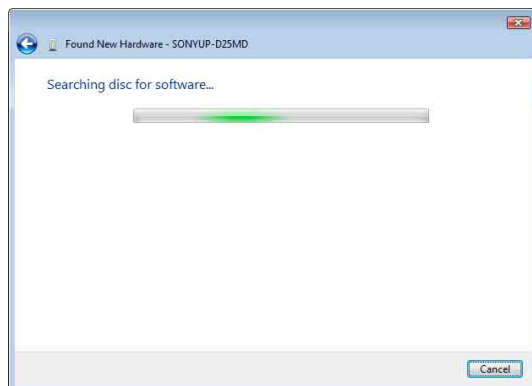


Gdy wyszukiwanie oprogramowania zostanie zakończone, pojawi się następujące okno dialogowe.




- 8 Kliknij [Install this driver software anyway].

Okno to zostanie zamknięte i ponownie wyświetli się okno dialogowe [Found New Hardware].

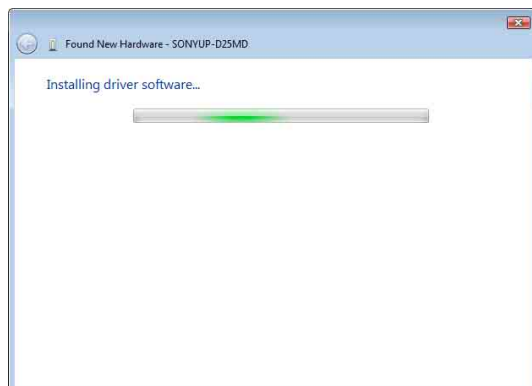

Po skopiowaniu plików, ekran zmieni się w następujący sposób.

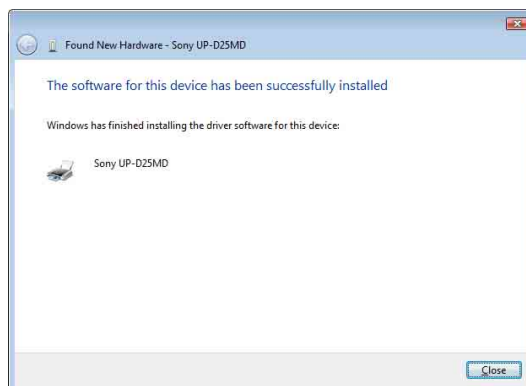


- 9 Kliknij [Close].

Krok ten kończy procedurę instalowania sterownika drukarki.

Procedura bez korzystania z dostarczonej płyty CD-ROM


- 7 Kliknij [I don't have the disc. Show me other options].

Ekran zmieni się w następujący sposób.

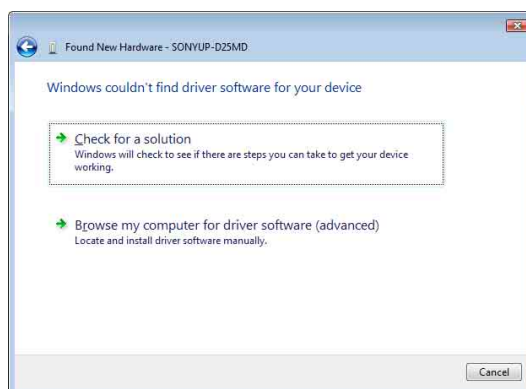

- 8 Kliknij [Browse my computer for driver software (advanced)].

Ekran zmieni się w następujący sposób.

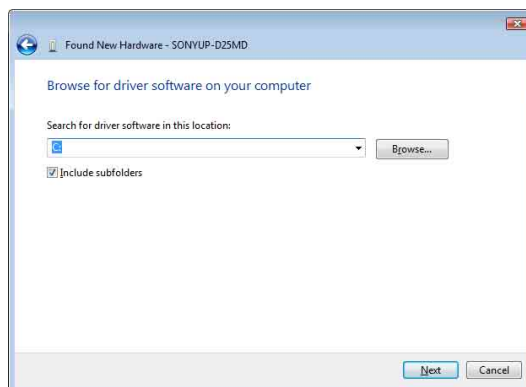

9 Kliknij [Browse], aby otworzyć okno dialogowe [Browse For Folder]. Określ folder, do którego został wyodrębniony pobrany plik instalacyjny, a następnie kliknij [OK], aby zamknąć okno dialogowe [Browse For Folder].


10 Kliknij [Next].

Pojawi się następujące okno dialogowe.




11 Kliknij [Install this driver software anyway].

Okno to zostanie zamknięte i ponownie wyświetli się okno dialogowe [Found New Hardware].

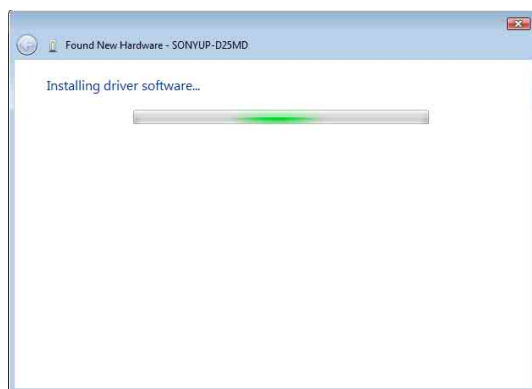

Po skopiowaniu plików, ekran zmieni się w następujący sposób.

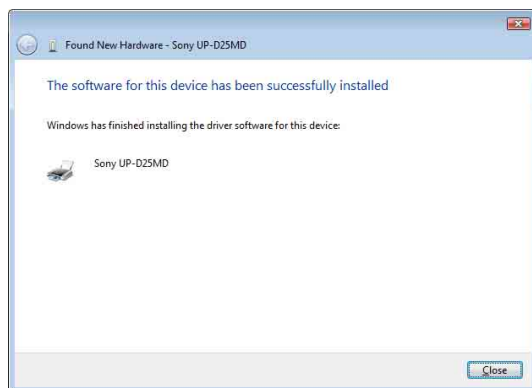

12 Kliknij [Close].

Krok ten kończy procedurę instalacji sterownika drukarki.


Odinstalowywanie sterownika drukarki w systemie Windows Vista

Niniejsza sekcja opisuje procedurę usuwania sterownika drukarki.

Uwaga

Przed rozpoczęciem procedury odinstalowywania należy odłączyć drukarkę od komputera. Jeśli pojawi się okno dialogowe [Found New Hardware], odłącz kabel łączący drukarkę z komputerem, kliknij [Cancel] na wszystkich ekranach w celu zamknięcia okna dialogowego, a następnie rozpocznij ponownie procedurę odinstalowywania.

- 1** Wyłącz drukarkę i odłącz kabel łączący drukarkę z komputerem.
- 2** Włącz komputer i zaloguj się jako administrator systemu lub członek grupy Administratorzy.
- 3** Kliknij [Start], wybierz [Control Panel], a następnie wybierz [Programs and Features].

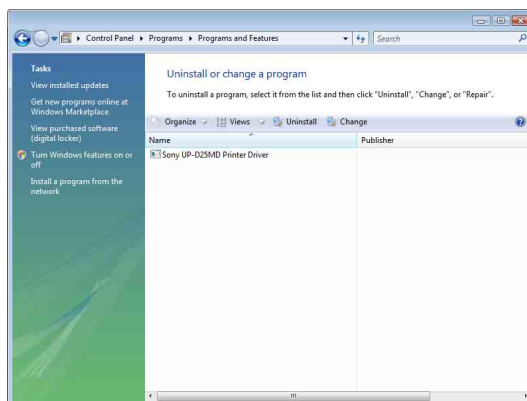

- 4** Wybierz sterownik drukarki z listy [Uninstall or change a program], a następnie kliknij [Uninstall/Change].



5 Kliknij [Continue].



6 Kliknij [Yes].

Gdy sterownik drukarki zostanie odinstalowany, pojawi się następujące okno dialogowe.



7 Kliknij [Yes].

Komputer zostanie ponownie uruchomiony.

Krok ten kończy procedurę odinstalowywania sterownika drukarki.

Instalacja sterownika drukarki w systemie Windows XP

Przed rozpoczęciem instalacji

Informacja na temat aktualizacji do nowych wersji

Jeśli aktualizujesz sterownik drukarki, to usuń poprzedni sterownik drukarki przed rozpoczęciem instalacji.


Szczegółowa procedura usuwania sterownika drukarki została opisana w niniejszej instrukcji w sekcji „Odinstalowywanie sterownika drukarki w systemie Windows XP”.

Jeśli instalacja nie powiedzie się lub zostanie anulowana, uruchom ponownie komputer przed ponowną próbą instalacji.

Uwaga

Pamiętaj, by ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu lub odinstalowaniu sterownika drukarki. Jeśli nie uruchomisz ponownie komputera, może on działać niestabilnie.

Połączenie USB 2.0


Drukarka jest zgodna z USB 2.0. Jednakże, jeśli komputer lub koncentrator USB nie jest zgodny z USB 2.0, to po podłączeniu drukarki wyświetli się poniższy komunikat. Kliknij , aby zamknąć ten komunikat.



Informacje o opcjach podpisywania sterownika

Obecny sterownik drukarki nie przeszedł testów zgodności z systemem umożliwiającym uzyskanie logo Windows, dlatego też podczas instalacji tego sterownika może wyświetlić się komunikat o błędzie, który uniemożliwia zainstalowanie sterownika.

W oknie dialogowym [Driver Signing Options] wybierz [Ignore] lub [Warn] w sekcji [What action do you want Windows to take?]. Jeśli wybierzesz [Block], to zainstalowanie sterownika drukarki nie będzie możliwe.

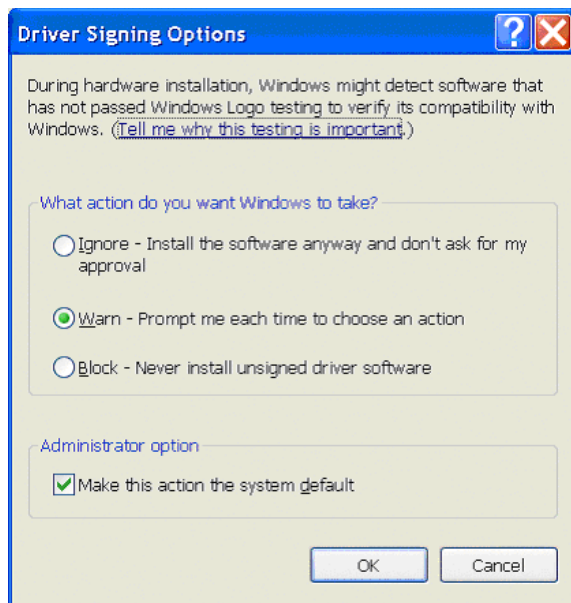

Otwórz okno dialogowe [Driver Signing Options] postępując w następujący sposób:

- ① W menu [Start] kliknij [Control Panel].
- ② Kliknij dwukrotnie [System].
Otworzy się okno dialogowe [System Properties].
- ③ Kliknij kartę [Hardware].
- ④ Kliknij przycisk [Driver Signing].

Wszystkie objaśnienia zawarte w niniejszej instrukcji zostały podane przy założeniu, że w oknie tym ustawiono opcję [Warn].

Instalacja w systemie Windows XP

- 1** Podłącz drukarkę (tylko jedną), dla której chcesz zainstalować sterownik w komputerze.
- 2** Włącz podłączoną drukarkę.
- 3** Włącz komputer, a następnie zaloguj się jako administrator systemu lub członek grupy Administratorzy.

Wyświetli się okno dialogowe [Found New Hardware Wizard].




- Jeśli pojawi się okno dialogowe [Found New Hardware Wizard] takie samo jak w kroku 3, przejdź do kroku 4.
 - Jeśli pojawi się okno dialogowe [Found New Hardware Wizard] inne niż w kroku 3, przejdź do kroku 5.
 - Jeśli okno dialogowe [Found New Hardware Wizard] nie pojawi się, wykonaj podane poniżej czynności, przy czym instalowana drukarka musi być nadal włączona i podłączona do komputera. (Wszelkie inne drukarki USB lub wcześniej zainstalowane drukarki powinny być w tym czasie odłączone).
- ① W menu [Start] kliknij [Control Panel].
 - ② Kliknij dwukrotnie [System].
Otworzy się okno dialogowe [System Properties].
 - ③ Kliknij kartę [Hardware].
 - ④ Kliknij przycisk [Device Manager].
Otworzy się okno [Device Manager].
 - ⑤ Kliknij symbol [+] z lewej strony pozycji [Universal Serial Bus controllers].
 - ⑥ Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [USB Printing support] i kliknij polecenie [Properties]. Sprawdź, czy przy pozycji [Location] wyświetlana jest nazwa modelu aktualnie podłączonej drukarki, a następnie z menu [Action] wybierz polecenie [Uninstall].
 - ⑦ Uruchom ponownie komputer.
Po uruchomieniu Windows XP wyświetli się okno dialogowe [Found New Hardware Wizard].

- 4 Kliknij [No, not this time], a następnie kliknij [Next].



- 5 Wybierz [Install from a list or specific location (Advanced)], a następnie kliknij przycisk [Next].

Wyświetli się następujący ekran.

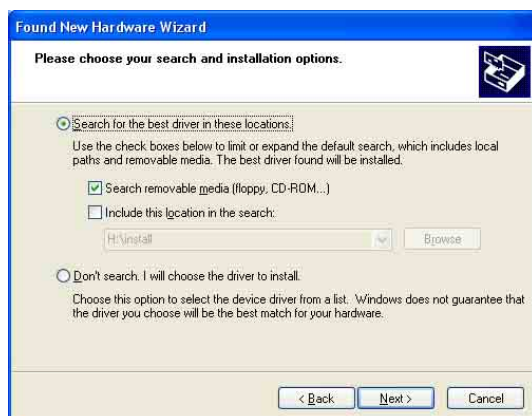

- 6 Określ położenie pliku instalacyjnego sterownika drukarki. Procedura postępowania jest różna w zależności od tego, czy korzystasz z dostarczonej płyty CD-ROM, czy też nie (w przypadku pobrania sterownika z sieci).

Procedura z wykorzystaniem dostarczonej płyty CD-ROM

Wybierz [Search for the best driver in these locations] oraz [Search removable media (floppy, CD-ROM...)], a następnie włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.

Procedura bez korzystania z dostarczonej płyty CD-ROM

Wybierz [Search for the best driver in these locations] oraz [Include this location in the search], a następnie kliknij [Browse], aby otworzyć okno dialogowe [Browse For Folder]. Określ folder, do którego został wydrebniony pobrany plik instalacyjny, a następnie kliknij [OK], aby zamknąć okno dialogowe [Browse For Folder].

- 7 Kliknij przycisk [Next].

Wyświetli się następujące okno dialogowe.



- 8 Kliknij przycisk [Continue Anyway].

Po skopiowaniu plików otworzy się następujący ekran.



- 9 Kliknij przycisk [Finish].

Krok ten kończy procedurę instalowania sterownika drukarki w systemie Windows XP.

- 10 Uruchom ponownie komputer.


Odinstalowywanie sterownika drukarki w systemie Windows XP

Niniejsza sekcja opisuje procedurę usuwania sterownika drukarki.

Uwaga


Przed rozpoczęciem procedury odinstalowywania należy odłączyć drukarkę od komputera. Jeśli pojawi się okno dialogowe [Found New Hardware Wizard], odłącz kabel łączący drukarkę z komputerem, kliknij [Cancel] na wszystkich ekranach w celu zamknięcia okna dialogowego, a następnie rozpocznij ponownie procedurę odinstalowywania.

- 1 Wyłącz drukarkę i odłącz kabel łączący drukarkę z komputerem.
- 2 Włącz komputer i zaloguj się jako administrator systemu lub członek grupy Administratorzy.
- 3 Kliknij [Start], wybierz [Control Panel], a następnie wybierz [Add or Remove Programs].

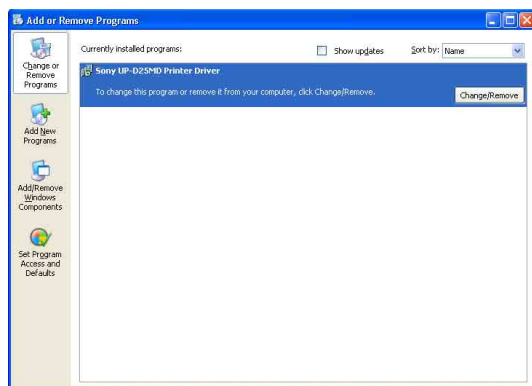

- 4 Wybierz sterownik drukarki z listy [Currently installed programs], a następnie kliknij [Change/Remove].

Wyświetli się następujący ekran.

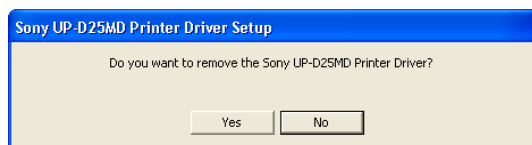

- 5 Kliknij [Yes].

Gdy sterownik drukarki zostanie odinstalowany, pojawi się następujące okno dialogowe.



- 6 Kliknij [Yes].

Komputer zostanie ponownie uruchomiony.

Krok ten kończy procedurę odinstalowywania sterownika drukarki.

Instalacja sterownika drukarki w systemie Windows 2000

Przed rozpoczęciem instalacji

Informacja na temat aktualizacji do nowych wersji

Jeśli aktualizujesz sterownik drukarki, to usuń poprzedni sterownik drukarki przed rozpoczęciem instalacji.

Szczegółowa procedura usuwania sterownika drukarki została opisana w niniejszej instrukcji w sekcji „Odinstalowywanie sterownika drukarki w systemie Windows 2000”.

Jeśli instalacja nie powiedzie się lub zostanie anulowana, uruchom ponownie komputer przed ponowną próbą instalacji.

Uwaga

Pamiętaj, by ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu lub odinstalowaniu sterownika drukarki. Jeśli nie uruchomisz ponownie komputera, może on działać niestabilnie.

Informacje o opcjach podpisywania sterownika

Ten sterownik drukarki nie przeszedł testów zgodności z systemem umożliwiającym uzyskanie logo Windows, dlatego też, jeśli podczas instalacji tego sterownika wyświetli się komunikat o błędzie, jego zainstalowanie może nie być możliwe. Sprawdź, czy w sekcji [File signature verification] w oknie dialogowym [Driver Signing Options] wybrano opcję [Ignore] lub [Warn]. Jeśli wybrano opcję [Block], to zainstalowanie sterownika drukarki nie będzie możliwe.

Otwórz okno dialogowe [Driver Signing Options] postępując w następujący sposób:

- 1 W menu [Start], wskaż pozycję [Settings] i kliknij [Control Panel].
- 2 Kliknij dwukrotnie przycisk [System]. Otworzy się okno dialogowe [System Properties].
- 3 Kliknij kartę [Hardware].
- 4 Kliknij przycisk [Driver Signing].



Wszystkie objaśnienia zawarte w niniejszej instrukcji zostały podane przy założeniu, że w oknie tym ustawiono opcję [Warn].

Instalacja w systemie Windows 2000

- 1 Podłącz drukarkę (tylko jedną), dla której chcesz zainstalować sterownik w komputerze.
- 2 Włącz podłączoną drukarkę.
- 3 Włącz komputer, a następnie zaloguj się jako administrator systemu lub członek grupy Administratorzy.

Po uruchomieniu Windows 2000 wyświetli się okno dialogowe [Found New Hardware Wizard].



Okno dialogowe [Found New Hardware Wizard] nie zostało wyświetlone

Wykonaj podane poniżej czynności, przy czym instalowana drukarka musi być nadal włączona i podłączona do komputera. (Wszelkie inne drukarki USB lub wcześniej zainstalowane drukarki powinny być w tym czasie odłączone).

- ① W menu [Start], wskaż pozycję [Settings] i kliknij [Control Panel].
- ② Kliknij dwukrotnie [System].
Otworzy się okno dialogowe [System Properties].
- ③ Kliknij kartę [Hardware].
- ④ Kliknij przycisk [Device Manager].
Otworzy się okno [Device Manager].
- ⑤ Kliknij symbol [+] z lewej strony pozycji [Universal Serial Bus controllers].
- ⑥ Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [USB Printing support] i kliknij polecenie [Properties]. Sprawdź, czy przy pozycji [Location] wyświetlana jest nazwa modelu aktualnie podłączonej drukarki, a następnie z menu [Action] wybierz polecenie [Uninstall].
- ⑦ Uruchom ponownie komputer.
Po uruchomieniu Windows 2000 wyświetli się okno dialogowe [Found New Hardware Wizard].

4 Kliknij przycisk [Next].

Wyświetli się następujący ekran.



- 5 Wybierz [Search for a suitable driver for my device (recommended)], a następnie kliknij przycisk [Next].

Wyświetli się następujący ekran.



Procedura z wykorzystaniem dostarczonej płyty CD-ROM

- 6 Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.

- 7 Zaznacz pole wyboru [CD-ROM drives], a następnie kliknij przycisk [Next].

Wyświetli się następujący ekran.



- 8 Kliknij przycisk [Next].



Jeśli otworzy się okno dialogowe [Digital Signature Not Found], kliknij przycisk [Yes].

Po skopiowaniu plików, ekran zmieni się w następujący sposób.



9 Kliknij przycisk [Finish].

Krok ten kończy procedurę instalowania sterownika drukarki w systemie Windows 2000.

10 Uruchom ponownie komputer.

Procedura bez korzystania z dostarczonej płyty CD-ROM

6 Wybierz [Specify a location], a następnie kliknij przycisk [Next].

Ekran zmieni się w następujący sposób.



7 Kliknij przycisk [Browse], aby otworzyć okno dialogowe [Locate File]. Określ folder, do którego został wyodrębniony pobrany plik instalacyjny, a następnie kliknij przycisk [Open], aby zamknąć okno dialogowe [Locate File].

8 Kliknij przycisk [OK].

Ekran zmieni się w następujący sposób.



9 Kliknij przycisk [Next].



Jeśli otworzy się okno dialogowe [Digital Signature Not Found], kliknij przycisk [Yes].

Po skopiowaniu plików, ekran zmieni się w następujący sposób.



10 Kliknij przycisk [Finish].

Krok ten kończy procedurę instalowania sterownika drukarki w systemie Windows 2000.

11 Uruchom ponownie komputer.

Uwaga

Jeśli wybrano przycisk [Cancel] w kroku **7** lub przycisk [No] w kroku **8**, to okno dialogowe [Found New Hardware Wizard] może nie zostać wyświetlone podczas następnej instalacji. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w sekcji „Okno dialogowe [Found New Hardware Wizard] nie zostało wyświetlone” w kroku **3**.

Odinstalowywanie sterownika drukarki w systemie Windows 2000

Niniejsza sekcja opisuje procedurę usuwania sterownika drukarki.

Uwaga

Przed rozpoczęciem procedury odinstalowywania należy odłączyć drukarkę od komputera. Jeśli pojawi się okno dialogowe [Found New Hardware Wizard], odłącz kabel łączący drukarkę z komputerem, kliknij [Cancel] na wszystkich ekranach w celu zamknięcia okna dialogowego, a następnie rozpocznij ponownie procedurę odinstalowywania.

- 1** Wyłącz drukarkę i odłącz kabel łączący drukarkę z komputerem.
- 2** Włącz komputer i zaloguj się jako administrator systemu lub członek grupy Administratorzy.
- 3** W menu [Start], wskaż pozycję [Settings] i kliknij [Control Panel]. Kliknij dwukrotnie [Add/Remove Programs].



- 4** Wybierz sterownik drukarki z listy [Currently installed programs], a następnie kliknij [Change/Remove].

Pojawi się następujące okno dialogowe.



- 5** Kliknij [Yes].

Gdy sterownik drukarki zostanie odinstalowany, pojawi się następujące okno dialogowe.



- 6** Kliknij [Yes].

Komputer zostanie ponownie uruchomiony.

Krok ten kończy procedurę odinstalowywania sterownika drukarki.