

Printer Driver

Guida per la configurazione

Questa guida descrive come impostare il driver della stampante per Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP.

Prima di usare il software

Prima di usare il driver della stampante, leggere il file "Readme".

UP-991AD

UP-971AD

Sommario

Configurazione della stampante	3
Impostazioni scheda [Main]	4
Impostazioni scheda [Density Adjust]	6
Impostazioni scheda [Settings]	7
Impostazioni scheda [Message]	8
Elenco messaggi	9
Avvertenze per l'uso	10

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Anche gli altri nomi di aziende e di prodotti citati in questa guida sono marchi e marchi registrati.

Le schermate usate in questa guida per descrivere l'impostazione presuppongono che la stampante UP-991AD/UP-971AD sia usata in ambiente Windows 7. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare, in unione a questo manuale, le istruzioni per l'utilizzo della stampante.

Configurazione della stampante

Prima di avviare la stampa dalle applicazioni, è possibile aprire la schermata delle impostazioni di UP-991AD/UP-971AD e configurare le varie opzioni.

In Windows 8, Windows 7, Windows Vista o Windows XP, configurare la stampante nell'ambiente seguente.

- Risoluzione dello schermo superiore a SVGA (800 × 600)
- La dimensione dei caratteri sullo schermo è quella predefinita.
Windows XP: Normal size (96 DPI)
Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more information
Windows 8, Windows 7: smaller - 100% (default)

È possibile aprire la schermata delle impostazioni usando uno dei metodi seguenti.

- Nel menu [Start], selezionare [Devices and Printers] ([Control Panel], quindi [Printer] in Windows 8; [Control Panel], quindi [Printer] in Windows Vista; [Printers and Faxes] in Windows XP). Selezionare l'icona della stampante Sony UP-991AD/971AD, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare [Printing preferences] (stessa operazione su Windows 8; [Select printing preferences] dalla barra di comando in Windows Vista; [Printing preferences] dal menu [File] in Windows XP). Le impostazioni configurate qui sono normalmente utilizzate come predefinite per la stampante UP-991AD/UP-971AD. Tuttavia, le impostazioni predefinite di alcune applicazioni possono essere prioritarie.
- Nella schermata delle impostazioni di stampa dell'applicazione, fare clic sul comando utilizzato per effettuare le impostazioni della stampante. Le impostazioni effettuate in questo modo restano valide solo fino alla chiusura dell'applicazione.

Questa guida descrive le schede visualizzate nella schermata delle impostazioni di UP-991AD/UP-971AD.

Scheda [Main]

Consente di regolare le impostazioni di base relative alla stampa, ad esempio, formato, numero di copie stampate e così via.

Scheda [Density Adjust]

Consente di regolare la densità delle immagini stampate.

Scheda [Settings]


Consente di stabilire se utilizzare l'impostazione della stampante o quella del driver della stampante.

Scheda [Message]

Consente di definire le impostazioni di visualizzazione relative alle finestre di dialogo dei messaggi.

Impostazioni scheda [Main]

Questa scheda è usata per effettuare impostazioni di stampa di base.

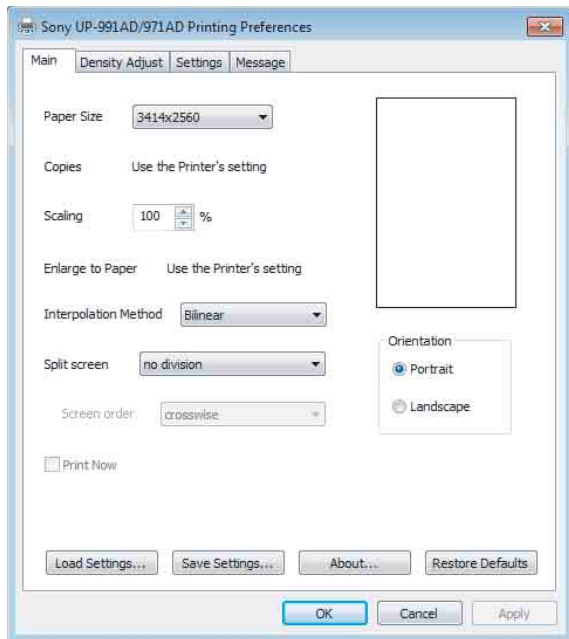

Paper Size

Consente di selezionare il formato della carta.

Dimensione (punti)	Dimensione (lunghezza)
1920 × 2560	150 × 200 mm
2560 × 2560	200 × 200 mm
3414 × 2560	267 × 200 mm
7680 × 2560	600 × 200 mm
3414 × 2560 (fix)	267 × 200 mm

Se si seleziona 3414 × 2560 (fix), il formato è fisso (l'area stampabile è fissa su 267 × 200 mm). Se l'immagine di stampa è inferiore all'area stampabile, vengono aggiunti margini in alto, in basso, a destra e a sinistra dell'immagine.

Se si seleziona un formato diverso da 3414 × 2560 (fix), la lunghezza del foglio varia in base alla dimensione dell'immagine stampata. Se l'immagine di stampa è inferiore all'area stampabile, vengono aggiunti margini solo a destra e sinistra dell'immagine. Il foglio viene tagliato secondo la lunghezza dei margini superiore e inferiore.

Nota

In base all'applicazione, il foglio potrebbe non venire tagliato.

Esempio dei risultati di stampa





Area stampabile



Area immagine



Area margine

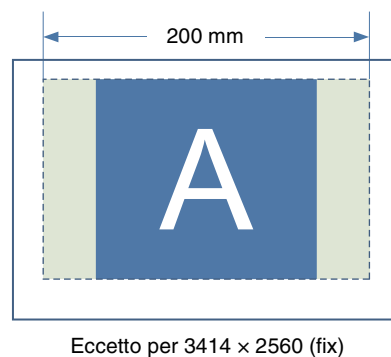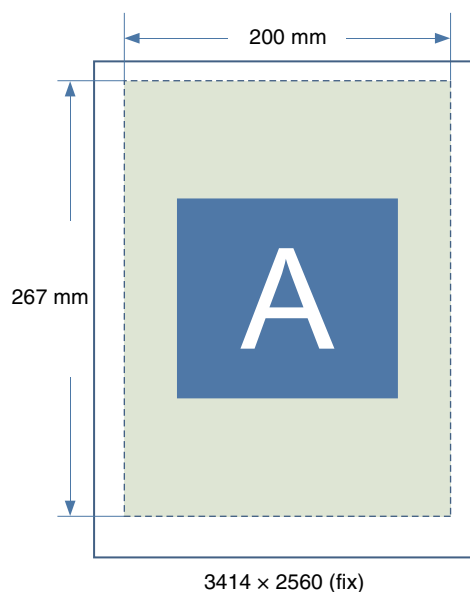

Eccetto per 3414 × 2560 (fix)

Copies

Consente di selezionare il numero di copie da stampare (da 1 a 10).

Nota

Quando è selezionata la casella di controllo [Copies] nella scheda [Settings], viene utilizzata l'impostazione della stampante. Per utilizzare l'impostazione del driver della stampante, deselezionare la casella di controllo

[Copies] nella scheda [Settings] ed effettuare qui l'impostazione.

Scaling

Consente di selezionare il fattore di ingrandimento o riduzione (da 25% a 400%).

Enlarge to Paper

Selezionare questa casella di controllo per ingrandire automaticamente una stampa in base alle dimensioni del foglio. È possibile specificare il metodo di interpolazione utilizzato per ingrandire la stampa per adattarla alle dimensioni del foglio con l'impostazione [Interpolation Method].

Nota

Quando è selezionata la casella di controllo [Enlarge to Paper] nella scheda [Settings], viene utilizzata l'impostazione della stampante. Per utilizzare l'impostazione del driver della stampante, deselezionare la casella di controllo [Enlarge to Paper] nella scheda [Settings] ed effettuare qui l'impostazione.

Interpolation Method

Consente di selezionare il metodo di interpolazione utilizzato per ridimensionare l'immagine. Il metodo di interpolazione specificato con questa impostazione viene applicato quando si ridimensionano immagini per la stampa Split screen o si ingrandiscono le immagini per adattarle alle dimensioni del foglio. Le impostazioni disponibili sono [Bilinear] e [Nearest Neighbor].

Split screen

Utilizzare questa opzione per specificare il numero di immagini da stampare su un singolo foglio.

Le impostazioni disponibili sono [no division], [2 division], [2 division with frame], [4 division] e [4 division with frame].

Le impostazioni di Split screen e il layout dell'immagine di stampa corrente possono essere verificati sullo schermo. Per ciascuna immagine Split screen, le aree delle singole immagini che sono già state posizionate appaiono in verde chiaro, mentre il simbolo ▼ indica la posizione dell'immagine successiva. Una freccia inoltre indica l'ordine in cui verranno posizionate le immagini divise. Durante la stampa con Split screen, le immagini vengono stampate in base all'impostazione [Interpolation Method] selezionata.

Screen order

Utilizzare questa opzione per specificare l'ordine in cui vengono posizionate le immagini durante una stampa con Split screen suddivisa in 4.


Quando [Split screen] è impostata su [4 division] o [4 division with frame], è possibile selezionare [crosswise] o [lengthwise] per questa impostazione.

Gli esempi che seguono mostrano come appare l'immagine a destra delle impostazioni quando si apportano modifiche alle impostazioni [Orientation] e [Split screen] nella scheda [Main] e al numero di immagini posizionate nell'immagine Split screen. In base all'applicazione usata, i risultati di stampa possono variare anche se le impostazioni della stampante UP-991AD/UP-971AD sono uguali. Stampare l'immagine per verificare i risultati effettivi.


Es. 1: Orientation: Landscape, Split screen: no division




Es. 2: Orientation: Landscape, Split screen: 2 division, positioned images: 0

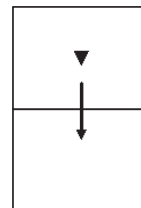


Es. 3: Orientation: Landscape, Split screen: 4 division, positioned images: 1

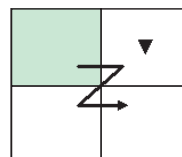


Es. 4: Orientation: Portrait, Split screen: 2 division, positioned images: 0

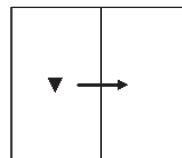

Es. 5: Orientation: Portrait, Split screen: 4 division with frame, positioned images: 0

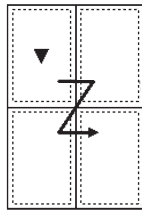

Es. 6: Orientation: Portrait, Split screen: 4 division with frame, positioned images: 2

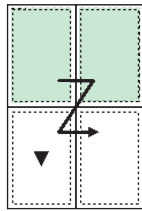

Print Now

Se si seleziona questa casella di controllo mentre si utilizza la funzione Split screen per stampare più immagini su un singolo foglio, la stampa si avvia immediatamente dopo aver eseguito un comando di stampa.

Se questa casella di controllo non è selezionata, la stampa non avviene finché non si esegue un comando di stampa per ciascuna posizione Split screen specificata con l'impostazione [Split screen].

Quando [Split screen] è impostata su [no division], questa casella di controllo è disabilitata e non è possibile modificarne la relativa impostazione.

Orientation

Selezionare [Portrait] o [Landscape] per l'orientamento di stampa.

Load Settings

Consente di caricare le configurazioni di impostazione memorizzate da un file.

Save Settings

Consente di salvare su file tutte le configurazioni delle impostazioni di stampa.

About

Visualizza le informazioni sulla versione di questo driver stampante.

Restore Defaults


Consente di ripristinare tutte le impostazioni nella scheda [Main] alla condizione predefinita.

Impostazioni scheda [Density Adjust]

Consente di regolare la densità dell'immagine. La regolazione è riportata nel grafico della densità e nella barra della gradazione in alto a destra della schermata di impostazione. Tuttavia, l'effetto del valore preimpostato di [Gamma] e [Sharpness] non è riportato.

L'asse verticale del grafico della densità indica la densità dell'immagine effettivamente stampata, dove il limite superiore è correlato alla densità del bianco e il limite inferiore a quella del nero.

L'asse orizzontale indica i dati immagine, dove il limite superiore è correlato ai dati del bianco e il limite inferiore a quelli del nero. La barra della gradazione indica la densità effettiva anziché il valore dell'asse verticale del grafico della densità.

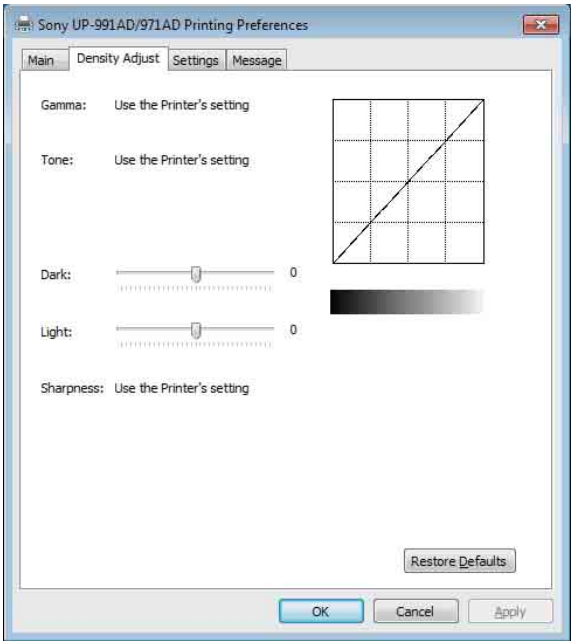

GAMMA

Consente di selezionare l'intensità della gradazione dei mezzitoni.

Se un'immagine contiene molte parti bianche o nere, regolando l'impostazione è possibile ottenere dettagli più nitidi in tali aree.

Elemento	Spiegazione
TONE1	Standard
TONE2	Quando si stampa un'immagine con molte aree bianche (tonalità morbida)
TONE3	Quando si stampa un'immagine con molte aree nere (tonalità forte)

Nota

Quando è selezionata la casella di controllo [Gamma] nella scheda [Settings], viene utilizzata l'impostazione della stampante.

Per utilizzare l'impostazione del driver della stampante, deselezionare la casella di controllo [Gamma] nella scheda [Settings] ed effettuare qui l'impostazione.

Tone

Trascinare il cursore per selezionare un livello di sfumatura. Più grande è il valore selezionato, più scura sarà la gradazione. È possibile regolare la gradazione tra 65 diversi valori. Il valore standard è 0. L'intervallo di regolazione è compreso tra -32 e +32.

Nota

Quando è selezionata la casella di controllo [Tone] nella scheda [Settings], viene utilizzata l'impostazione della stampante.

Per utilizzare l'impostazione del driver della stampante, deselezionare la casella di controllo [Tone] nella scheda [Settings] ed effettuare qui l'impostazione.

Dark

Trascinare il cursore per regolare le parti scure dell'immagine. Maggiore è il valore selezionato, più scure risulteranno le parti scure dell'immagine. È possibile regolare la gradazione tra 129 diversi valori. Il valore standard è 0. L'intervallo di regolazione è compreso tra -64 e +64.

Light

Trascinare il cursore per regolare le parti chiare dell'immagine. Maggiore è il valore selezionato, più luminose risulteranno le parti chiare dell'immagine. È possibile regolare la gradazione tra 129 diversi valori. Il valore standard è 0. L'intervallo di regolazione è compreso tra -64 e +64.

Sharpness

Trascinare il cursore per regolare il contorno dell'immagine. Maggiore è il valore selezionato, più nitidi risulteranno i bordi dell'immagine. È possibile regolare la gradazione tra 15 diversi valori. Il valore standard è 0. L'intervallo di regolazione è compreso tra 0 e 14.

Nota

Quando è selezionata la casella di controllo [Sharpness] nella scheda [Settings], viene utilizzata l'impostazione della stampante.


Per utilizzare l'impostazione del driver della stampante, deselezionare la casella di controllo [Sharpness] nella scheda [Settings] ed effettuare qui l'impostazione.

Restore Defaults

Premendo la scheda [Density Adjust] è possibile ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

Impostazioni scheda [Settings]

Consente di stabilire se utilizzare l'impostazione della stampante o quella del driver della stampante per ciascuna voce.

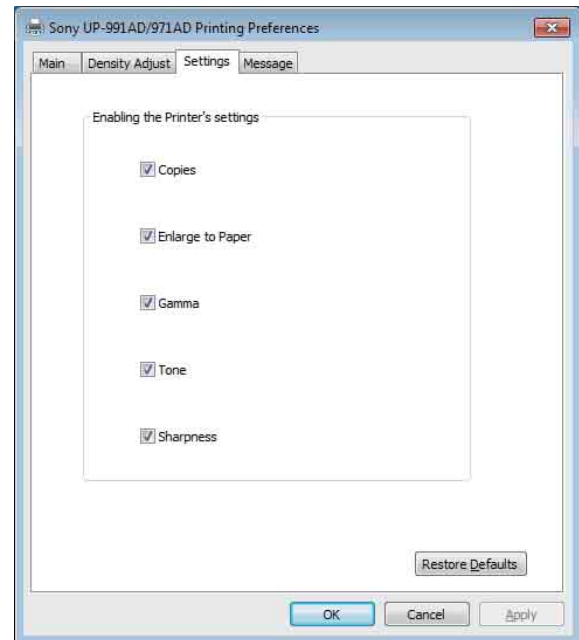

Copies

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare l'impostazione della stampante. In questo modo si disabilita l'impostazione [Copies] nella scheda [Main]. Deselezionare questa casella di controllo per utilizzare l'impostazione [Copies] nella scheda [Main].

Enlarge to Paper

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare l'impostazione della stampante. In questo modo si disabilita l'impostazione [Enlarge to Paper] nella scheda [Main]. Deselezionare questa casella di controllo per utilizzare l'impostazione [Enlarge to Paper] nella scheda [Main].

Gamma

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare l'impostazione della stampante. In questo modo si disabilita l'impostazione [GAMMA] nella scheda [Density Adjust].

Deselezionare questa casella di controllo per utilizzare l'impostazione [GAMMA] nella scheda [Density Adjust].

Tone

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare l'impostazione della stampante. In questo modo si disabilita l'impostazione [Tone] nella scheda [Density Adjust].

Deselezionare questa casella di controllo per utilizzare l'impostazione [Tone] nella scheda [Density Adjust].

Sharpness

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare l'impostazione della stampante. In questo modo si disabilita l'impostazione [Sharpness] nella scheda [Density Adjust].

Deselezionare questa casella di controllo per utilizzare l'impostazione [Sharpness] nella scheda [Density Adjust].

Restore Defaults

Consente di ripristinare tutte le impostazioni nella scheda [Settings] alla condizione predefinita.


Impostazioni scheda [Message]

Consente di definire le impostazioni di visualizzazione relative alle finestre di dialogo dei messaggi.

Le finestre di dialogo dei messaggi vengono visualizzate quando si verifica, ad esempio, l'errore UP-991AD/UP-971AD.

Sono disponibili due dimensioni delle finestre di dialogo; dimensioni standard e dimensioni ridotte. La finestra di dialogo standard per i messaggi visualizza lo stato di errore della stampante, nonché istruzioni per correggerlo. La finestra di dialogo ridotta per i messaggi visualizza semplici istruzioni (una frase) per correggere l'errore.

Per i dettagli di ciascun messaggio, vedere "Elenco messaggi" (pagina 9).

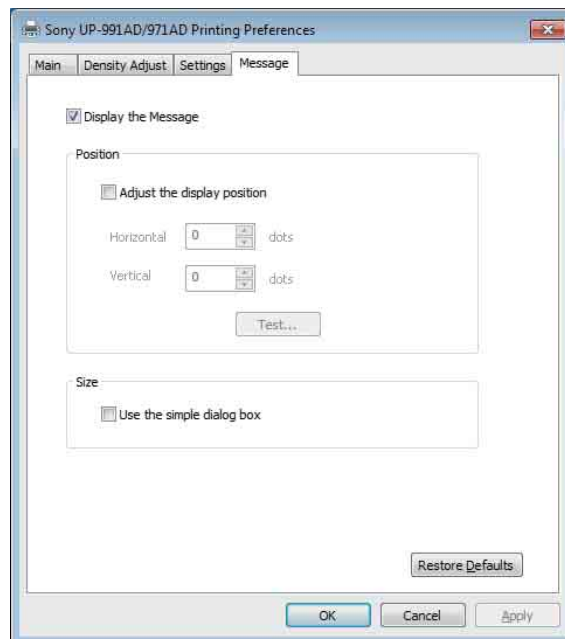

Display the Message

Impostare ON/OFF per mostrare la finestra di dialogo dei messaggi.

Se la casella di controllo è OFF, non sarà possibile definire le altre impostazioni nella scheda [Message].

Adjust the Display Position

Selezionare questa casella di controllo per regolare la posizione di visualizzazione delle finestre di dialogo dei messaggi. La finestra di dialogo dei messaggi viene visualizzata nella posizione definita dai valori specificati nelle impostazioni [Horizontal] e [Vertical]. Impostazione predefinita: non è presente un segno di spunta in [Adjust the Display Position]. (La finestra di dialogo standard per i messaggi viene visualizzata al centro del display e quella ridotta viene visualizzata in alto a sinistra).

Horizontal, Vertical

Queste impostazioni sono attivate quando la casella di controllo [Adjust the Display Position] è selezionata. Immettere le coordinate per la posizione di visualizzazione (posizione dell'angolo superiore sinistro della finestra di dialogo dei messaggi). La finestra di dialogo dei messaggi viene visualizzata nella posizione definita dai valori qui specificati.

Test

Consente di verificare la posizione nella quale le finestre di dialogo dei messaggi vengono visualizzate sul display o sullo schermo. Una finestra di dialogo di prova per i messaggi viene visualizzata nella posizione definita dalle impostazioni [Horizontal] e [Vertical].

Use the Simple Dialog Box

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare finestre di dialogo dei messaggi di dimensioni ridotte.

Restore Defaults

Consente di ripristinare tutte le impostazioni nella scheda [Message] alla condizione predefinita.

Elenco messaggi

I messaggi disponibili sono i seguenti. Risolvere eventuali problemi utilizzando i seguenti messaggi. Per ulteriori informazioni su come risolvere i problemi, consultare le istruzioni di funzionamento per UP-991AD/UP-971AD in combinazione con questo manuale.

Finestra di dialogo standard per i messaggi	Finestra di dialogo ridotta per i messaggi
No thermal paper. Please set the thermal paper. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Set thermal paper.
Now, Feeding. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Door is open. Please close the door. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Close door.
Now printing the video image. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Now regulating the head temperature of the printer. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Paper jam. Please remove the jammed paper. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Remove jammed paper.
Paper jam. Printing is aborted. Please remove the jammed paper and print again.	Remove jammed paper.
Incorrect paper type. Please set the correct paper type. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Incorrect paper type.
Mechanical error. Printing has been aborted. Please turn off the printer, then turn it back on and print again.	Restart printer.

Finestra di dialogo standard per i messaggi	Finestra di dialogo ridotta per i messaggi
Printer is not ready. Make sure the printer is plugged in to a power source and the printer cable is correctly connected. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Check printer.

Avvertenze per l'uso

Di seguito vengono descritte le avvertenze per l'uso. Leggere inoltre il file "Readme" in cui sono descritte ulteriori avvertenze.

- Se si collega la stampante tramite hub USB, la stampa non è garantita.
- In base ai dispositivi USB utilizzati contemporaneamente, l'unità potrebbe non funzionare correttamente.
- Non spegnere l'unità né rimuovere il cavo di alimentazione entro 2-3 secondi dal termine della stampa. Il successivo lavoro di stampa potrebbe non venire eseguito normalmente.
- Quando si esegue [test] nelle proprietà della stampante, potrebbero venire stampati caratteri sovrapposti. Si tratta di un risultato normale e non è indice di malfunzionamento.
- Non è possibile interrompere un processo di stampa in corso.
- È possibile impostare un numero di copie maggiore della capacità della stampante tramite le applicazioni. Non impostare tuttavia numeri di copie superiori a 10.
- Il funzionamento della stampante non è garantito se il computer entra in sospensione o standby mentre la stampante è collegata e accesa.
- Quando si regola la posizione del messaggio, selezionare l'impostazione classica di Windows nell'impostazione dello schermo del computer. In caso contrario, la posizione del messaggio potrebbe spostarsi.